




# ISTRUZIONI PER L'USO PAZIENTI

 IFU Version v1

INNOVATION SPRINT SRL  
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 1.30.30  
1200 Brussels, Belgium

REF	Healthentia – Mobile-app
SN	v4





## Document History

Document Version	Nature of change	Date
1	Launch in Italy - Translated in Italian	01.06.2025





## Informazioni

L'app Healthentia consiste in una raccolta di moduli. Diversi moduli sono software medico coperti dal marchio CE secondo il Regolamento Europeo 2017/745:

- Virtual Coaching: Consente all'utente (soggetto/paziente) di interagire con un coach conversazionale virtuale per scopi informativi e motivazionali.
- eDiary: L'e-Diary consente la presentazione di qualsiasi esito riportato dal paziente, sotto forma di elenco, raggruppato per giorno o per esito (sintomo). In questo modo, i pazienti possono avere accesso in qualsiasi momento al loro Diario elettronico e vedere i progressi dei risultati riportati.
- Vital: I segni vitali sono sia raccolti che visualizzati dagli utenti dell'app mobile tramite widget.
- Questionnaires: Permette all'utente di comunicare esiti e punteggi degli esiti in modo strutturato.
- Liquid consumption: Il widget per il consumo di liquidi offre una panoramica dei liquidi consumati.
- Nutrition: Il widget nutrizione consente di vedere e modificare il consumo delle diverse categorie alimentari di interesse.
- Weight: Il widget peso offre la possibilità di aggiungere manualmente e tramite una bilancia digitale, misurare e visualizzare il peso.

Per ulteriori informazioni, visitare: <https://healthentia.com>

Per qualsiasi domanda o richiesta relativa alla privacy, è possibile contattare: [dpo@healthentia.com](mailto:dpo@healthentia.com)

Per domande generali, è possibile contattare: [info@healthentia.com](mailto:info@healthentia.com)

## Segnalazione di incidenti gravi

Per qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione all'App Dispositivo Medico Healthentia, è possibile contattare il produttore (Innovation Sprint Srl) a: [support@healthentia.com](mailto:support@healthentia.com) e l'autorità competente nella vostra località.

## Supporto tecnico

Il servizio di supporto Healthentia è offerto a livello di best-effort. Per qualsiasi richiesta di supporto tecnico, è possibile contattare: [support@healthentia.com](mailto:support@healthentia.com)

Il nostro team di supporto risponderà entro 1 giorno lavorativo.

## Versione cartacea delle IFU

Se desiderate una versione cartacea delle istruzioni per l'uso, contattate il produttore al seguente indirizzo e-mail: [info@healthentia.com](mailto:info@healthentia.com). Sarà consegnata entro 7 giorni di calendario dopo aver ricevuto la richiesta.





### SCOPO PREVISTO

Healthentia è un software destinato a: a) la raccolta e trasmissione di dati fisiologici, inclusi frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno e peso, direttamente ai fornitori di assistenza attraverso mezzi elettronici automatizzati in combinazione con dispositivi IoT convalidati; b) la visualizzazione (dashboard basate sui soggetti) e il trattamento matematico dei dati (analisi delle tendenze, avvisi) relativi ai parametri fisiologici del soggetto con malattia cronica monitorata; c) la trasmissione degli esiti del paziente e dei punteggi degli esiti relativi allo stato di salute del paziente, ai fattori che influenzano la salute, alla qualità della vita correlata alla salute, alla conoscenza della malattia e all'aderenza al trattamento attraverso questionari convalidati; d) l'interazione dell'utente (soggetto/paziente) con un coach virtuale conversazionale per scopi informativi e motivazionali, al fine di supportare il telemonitoraggio del soggetto, il processo decisionale e il coaching virtuale.

### BENEFICI CLINICI

L'uso di Healthentia permette di:

- Fornire input oggettivi per i professionisti sanitari a supporto della diagnosi.
- Evidenziare l'evoluzione dei parametri fisiologici attraverso l'analisi delle tendenze degli input del paziente.
- Consentire ai professionisti sanitari di fornire la stessa qualità di cura e sicurezza dello standard di cura.

### INDICAZIONI CLINICHE

Telemonitoraggio di pazienti con malattie croniche (come insufficienza cardiaca, cancro, BPCO, ecc.)

### CONTROINDICAZIONI

- Healthentia non è destinato al monitoraggio di pazienti in situazioni critiche (sala operatoria, emergenza, terapia intensiva).
- Qualsiasi condizione fisica o cognitiva che, a giudizio clinico, impedirebbe al paziente di utilizzare Healthentia, ad esempio demenza.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato durante la gravidanza.
- Healthentia non è stato testato con la popolazione pediatrica. Pertanto, Healthentia è destinato solo all'uso da parte di adulti (>18 anni) e non copre l'uso da parte dei bambini.

### GRUPPO TARGET DI PAZIENTI

Pazienti con malattie croniche che partecipano a un'indagine clinica o a un trattamento medico.

### UTENTI PREVISTI

Pazienti telemonitorati e i loro professionisti sanitari.

### AMBIENTE D'USO E DURATA

Healthentia può essere utilizzato come soluzione di Monitoraggio Remoto del Paziente per pazienti che vengono dimessi dall'ospedale e devono seguire un determinato trattamento. La durata dipende dallo studio o dall'intervento o dalla volontà del paziente.

### AVVERTENZE

- Healthentia non è monitorata in tempo reale dal personale sanitario; è destinata esclusivamente a comunicazioni non di emergenza. In caso di emergenza, contattare la propria unità di cura o il numero di emergenza telefonicamente.
- In alcuni casi particolari, i consigli e le istruzioni per l'autogestione forniti da Healthentia potrebbero non essere applicabili alla propria situazione.





- Se hai domande sulla tua cura, sui sintomi o sulla gestione, contatta il tuo team sanitario.
- Il dispositivo non è destinato a sostituire l'assistenza di un professionista sanitario, inclusa la prescrizione, la diagnosi o il trattamento.
- Il telemonitoraggio non sostituisce i controlli regolari dal medico. Consulta il medico in caso di sintomi gravi o persistenti.
- In combinazione con Healthentia, utilizza solo dispositivi di misurazione le cui prestazioni tecniche (accuratezza, precisione) siano state verificate dal tuo operatore sanitario, poiché ciò può influire sull'esito del monitoraggio.
- Verifica la coerenza dei tuoi dati clinici e il corretto trasferimento degli stessi al tuo operatore sanitario, poiché la qualità della diagnosi e del trattamento si basa anche su queste informazioni.

### DISCLAIMER

Il tuo operatore sanitario è responsabile della valutazione finale della tua diagnosi e del tuo trattamento.

Healthentia fornisce informazioni a supporto delle decisioni diagnostiche e terapeutiche, ma il contesto clinico generale deve essere sempre preso in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione.

### Requisiti di accuratezza

I requisiti di accuratezza per i dispositivi IoT collegati a Healthentia sono elencati di seguito.

misurazione	minimo precisione
Pressione sanguigna	$\leq 10$ mmHg (almeno l'85% di probabilità)
SpO2	$A_{rms} \pm 2-3\%$ dei valori dell'emogasanalisi arteriosa
Cuore (frequenza cardiaca a riposo, massima, ...)	$\pm 10\%$ della frequenza di input o $\pm 5$ bpm
Peso	$\pm 0.5-1.0$ kg
Attività fisica (passi, ...)	n/a
Sonno	n/a

### Integrazione con altri dispositivi

L'app Healthentia è compatibile con altri dispositivi per la raccolta di informazioni sullo stile di vita e sui parametri vitali. I dispositivi supportati da utilizzare insieme a Healthentia sono:

- Tracker e orologi Garmin tramite API Garmin (Android e iOS)\*\*: Fenix 5 pro, Fenix 6 pro, Forerunner 945, Vivoactive 4, Vivosmart 4, Venu 2S,
- Tracker e orologi Fitbit tramite API Fitbit (Android e iOS)\*\*: Versa, Inspire 2
- Dispositivi iHealth tramite Bluetooth (Android e iOS): Misuratore di pressione sanguigna connesso iHealth Track (KN-550BT)\*, Bilancia intelligente per la composizione corporea iHealth Fit (HS2S)\*\*\*, Pulsossimetro intelligente - iHealth Air (POM3)\*
- Cintura Polar tramite API Polar (Android e iOS): H9\*\*

\* Il dispositivo ha una precisione accettabile per lo scopo previsto da Healthentia

\*\* Il dispositivo non possiede un'accuratezza accettabile per lo scopo previsto di Healthentia e può essere utilizzato solo per misurazioni che non richiedono precisione (es. contapassi, sonno).





**In combinazione con Healthentia, utilizzare solo dispositivi di misurazione prescritti dal proprio operatore sanitario, poiché ciò può influire sull'esito del monitoraggio.**

Questi dispositivi costituiscono una combinazione sicura e attualmente non ci sono informazioni specifiche su restrizioni note relative alle combinazioni di dispositivi.

Healthentia visualizza i valori secondo le unità di misura internazionali (m, kg, s) indipendentemente dalla preferenza dell'utente nel proprio dispositivo IoT.

#### **REQUISITI MINIMI**

##### **Hardware supportato**

Qualsiasi smartphone che utilizzi il sistema operativo supportato (vedi sotto) è un dispositivo hardware compatibile.

##### **Sistemi operativi mobili supportati**

L'app Healthentia supporta i seguenti sistemi operativi sulle piattaforme Android e iOS:

- Android: 7.0 e versioni successive
- iOS: 15.1 e versioni successive

##### **Formazione**

Non è necessaria alcuna formazione per utilizzare il dispositivo in sicurezza.





## SICUREZZA E PRESTAZIONI

### Sicurezza

Innovation Sprint si impegna a proteggere la sicurezza delle informazioni degli interessati e adotta misure ragionevoli per garantirla, inclusa la protezione contro accessi non autorizzati, necessaria per il corretto funzionamento del software. In questo contesto, Innovation Sprint valuta e rivede regolarmente le tecnologie, le strutture, le procedure e i potenziali rischi per mantenere la sicurezza e la riservatezza dei dati degli utenti, prestando particolare attenzione agli accessi basati su ruoli e alla registrazione degli accessi ai dati sanitari. Inoltre, eventuali modifiche alle applicazioni software, ai servizi forniti e/o ai sistemi hardware sono adeguatamente giustificate, valutate e registrate secondo le migliori pratiche e norme internazionali.

- Evitare di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche per connettersi a Healthentia quando si stanno per aggiungere e/o gestire dati sanitari e/o dettagli del profilo.
- Non utilizzare dispositivi con jailbreak.
- Le password devono essere composte da almeno otto (8) caratteri e contenere caratteri di almeno tre dei seguenti quattro gruppi: lettere minuscole, lettere maiuscole, numeri (0-9), caratteri speciali.
- Non memorizzare mai le password sui dispositivi.
- Cambiare le password almeno ogni sei mesi.
- Installare un programma anti-malware sui propri dispositivi e aggiornarlo regolarmente.
- Assicurarci che ogni indirizzo e-mail registrato in Healthentia corrisponda a voi.
- Ignorare ed eliminare messaggi di origine dubbia e non seguire i link in essi contenuti.
- Non rivelare, tramite telefono, e-mail, moduli Internet o social media, informazioni riservate come nome utente o password.
- Utilizzare sempre le versioni più aggiornate del sistema operativo del proprio dispositivo e dell'app Healthentia.
- Si consiglia all'utente di mantenere l'impostazione Bluetooth su "non rilevabile" (trasmissione disabilitata) e di passare alla modalità "rilevabile" solo quando desidera utilizzarla.
- L'utente dovrebbe evitare di memorizzare informazioni critiche (come le credenziali dell'account) sui dispositivi abilitati al Bluetooth.
- Se l'utente deve connettersi a un dispositivo tramite Bluetooth, si raccomanda vivamente di attivare questa connessione in un luogo sicuro.

### Prestazioni

Fornire input oggettivi agli operatori sanitari per supportare la diagnosi e la gestione del paziente;

Evidenziare l'evoluzione dei parametri fisiologici tramite analisi delle tendenze degli input del paziente;

Aumentare l'aderenza del paziente al trattamento.




# 1 SCARICA L'APPLICAZIONE



Scarica l'app Healthentia dall'App Store di iOS o da Google Play Store.




## 2 BENVENUTI / REGISTRATI

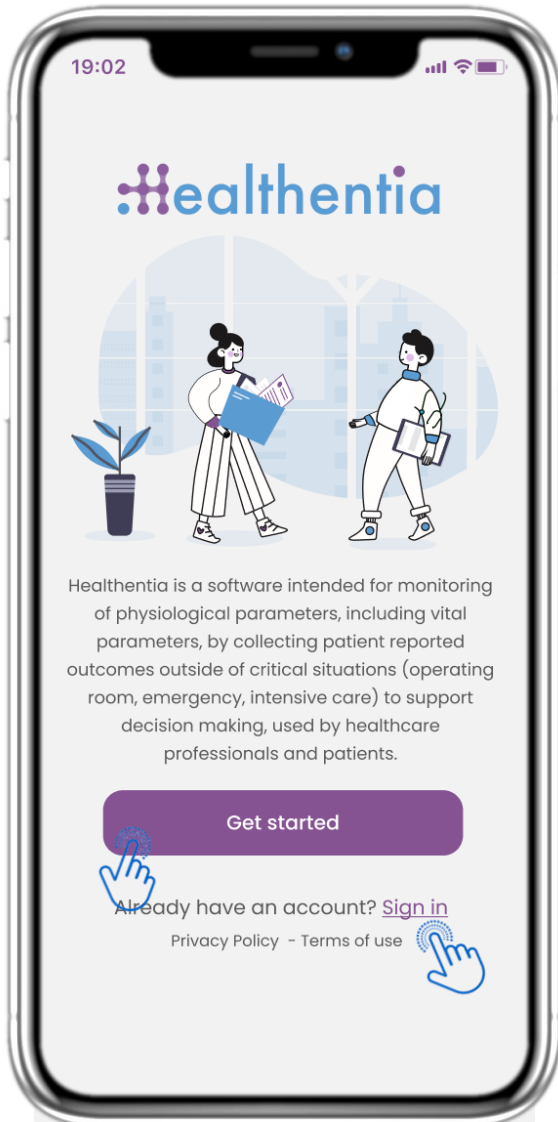

### 2.1 PAGINA DI BENVENUTO

Pagina iniziale di Healthentia con l'indicazione dell'uso previsto del dispositivo medico. È possibile registrarsi premendo "Inizia" o "Accedi".

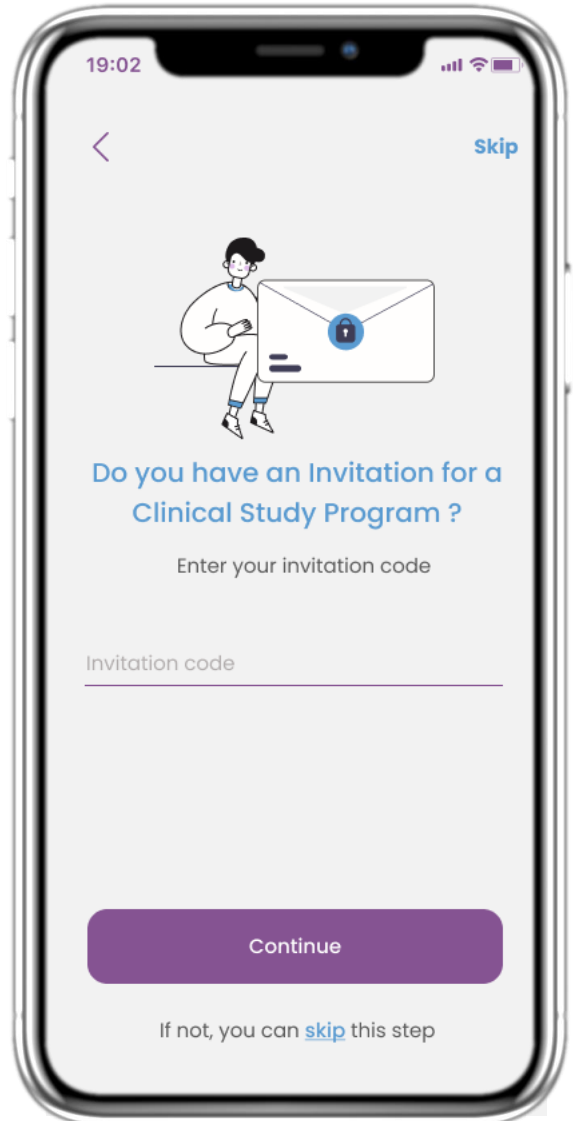

### 2.2 CODICE DI INVITO

Se hai ricevuto un codice di invito puoi inserirlo qui oppure saltare.



## 2 QUESTIONARIO DI ONBOARDING

19:02

STEP 1/4

Create a new account

E-mail Address

Password

Confirm password

Continue

### 2.3 REGISTRO

Registra un nuovo account con un indirizzo email e una password complessa.

19:02

STEP 2/4 skip

Enter your weight and height

Weight 63.5 KG

Height 1.75 CM

Continue

\*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

1 2 3  
ABC DEF

4 5 6  
GHI JKL MNO

7 8 9  
PQRS TUV WXYZ


• 0

### 2.4 INSERISCI PESO-ALTEZZA

Inserisci il tuo peso e la tua altezza per il tuo profilo.




## 2 QUESTIONARIO DI ONBOARDING

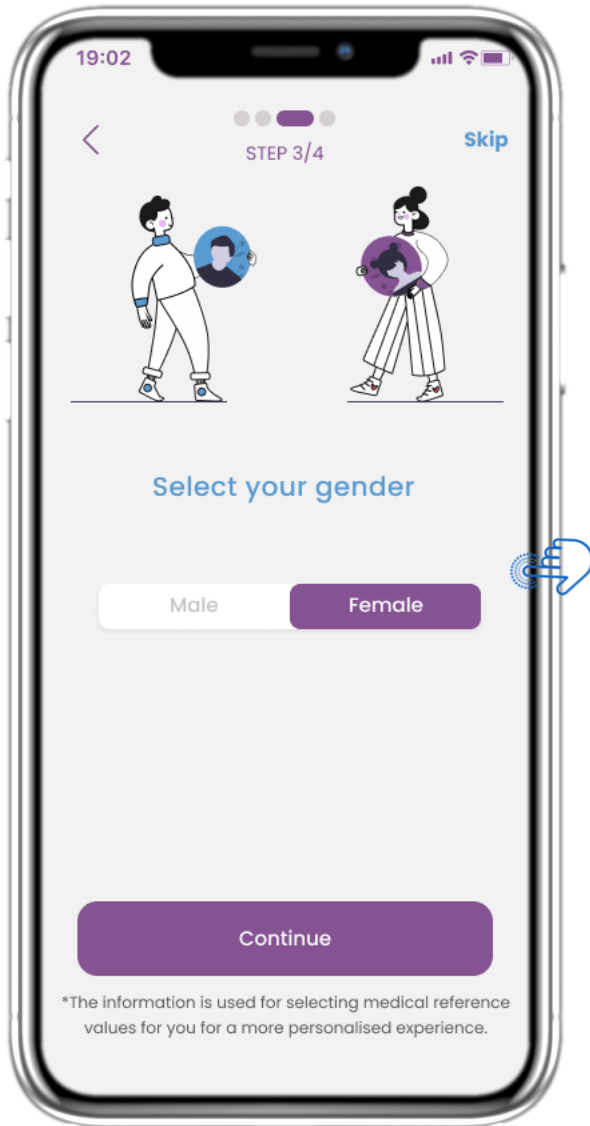

### 2.5 SELEZIONA GENERE

Scegli il tuo genere per il tuo profilo

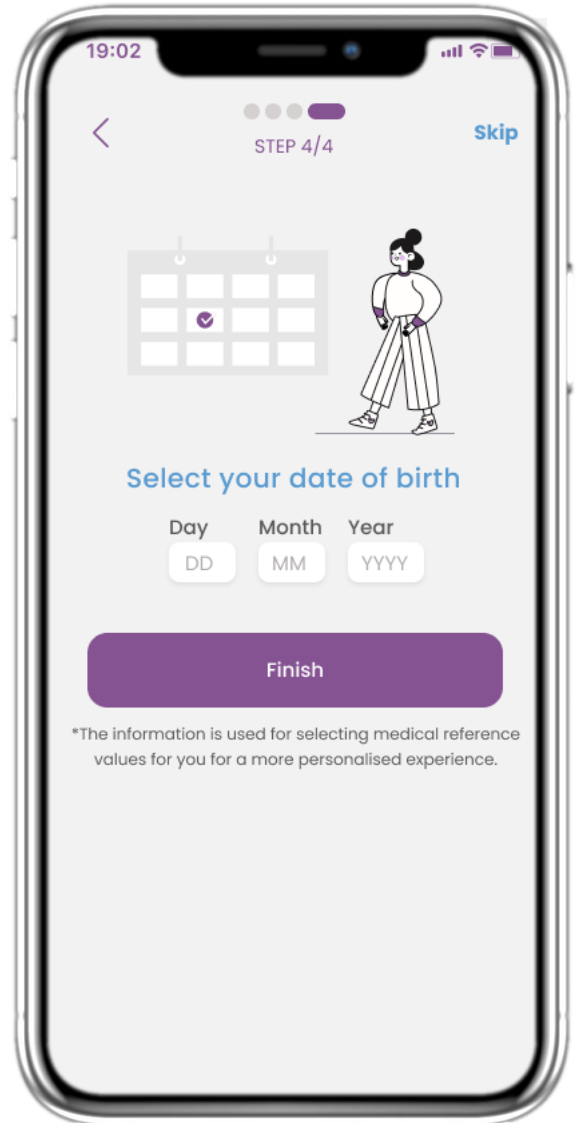


### 2.6 SELEZIONA DATA DI NASCITA

Seleziona la tua data di nascita per il tuo profilo.




## 2 CONSENSI / AUTORIZZAZIONI

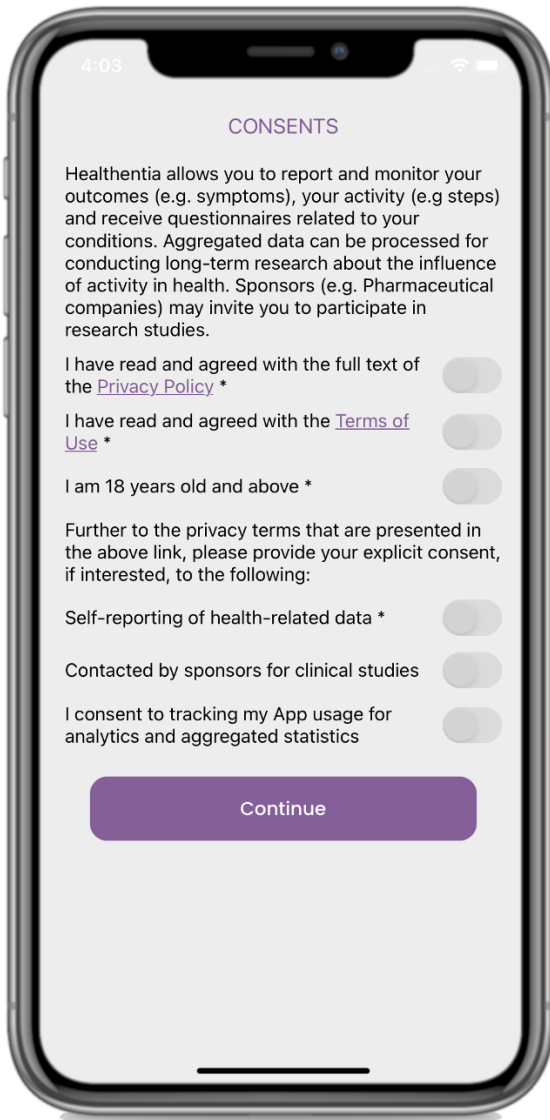

### 2.7 PAGINA DEI CONSENSI

Seleziona se acconsenti a condividere i tuoi dati in forma anonima per scopi di ricerca. Leggi e accetta i Termini e l'Informativa sulla privacy di Healthentia e indica le tue preferenze in merito ai consensi espliciti.

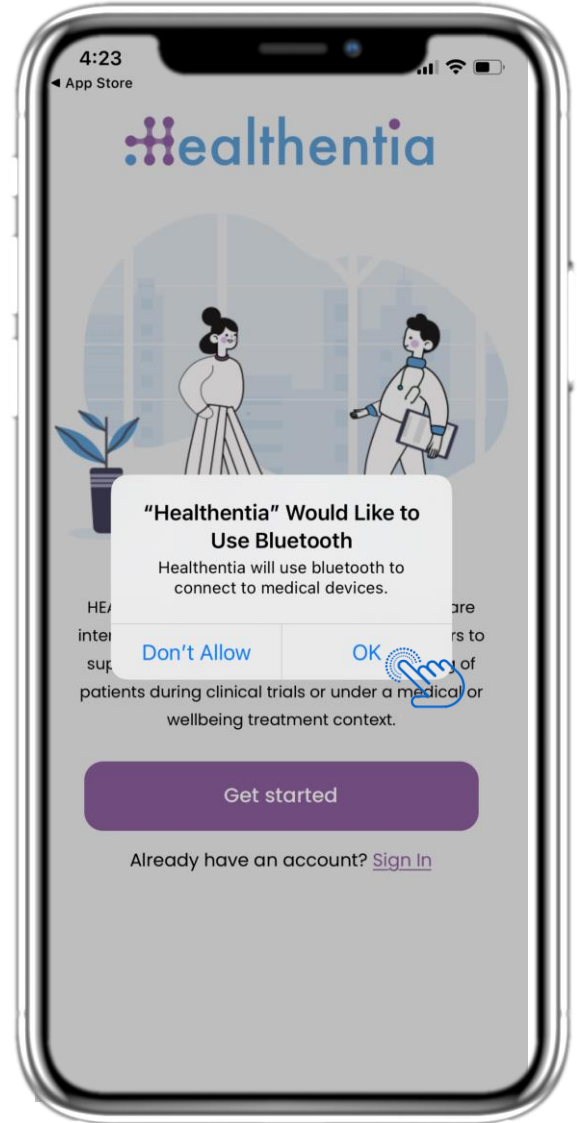


### 2.8 NOTIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI

Autorizza l'app Healthentia a inviarti notifiche, a utilizzare il Bluetooth e a connettersi ad altri dispositivi.




## 3 NOTIFICHE HOME E PUSH

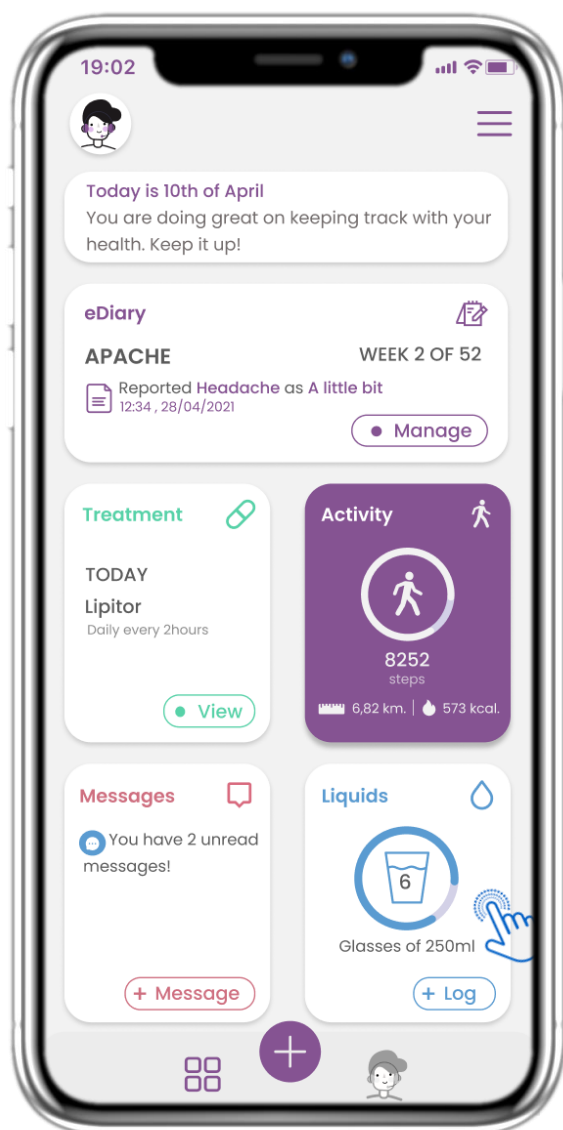

### 3.1 HOME

Nella pagina HOME, si viene accolti dal chatbot che annuncia i questionari in sospeso. Nella parte inferiore della pagina HOME sono presenti i diversi widget configurati per lo studio specifico.

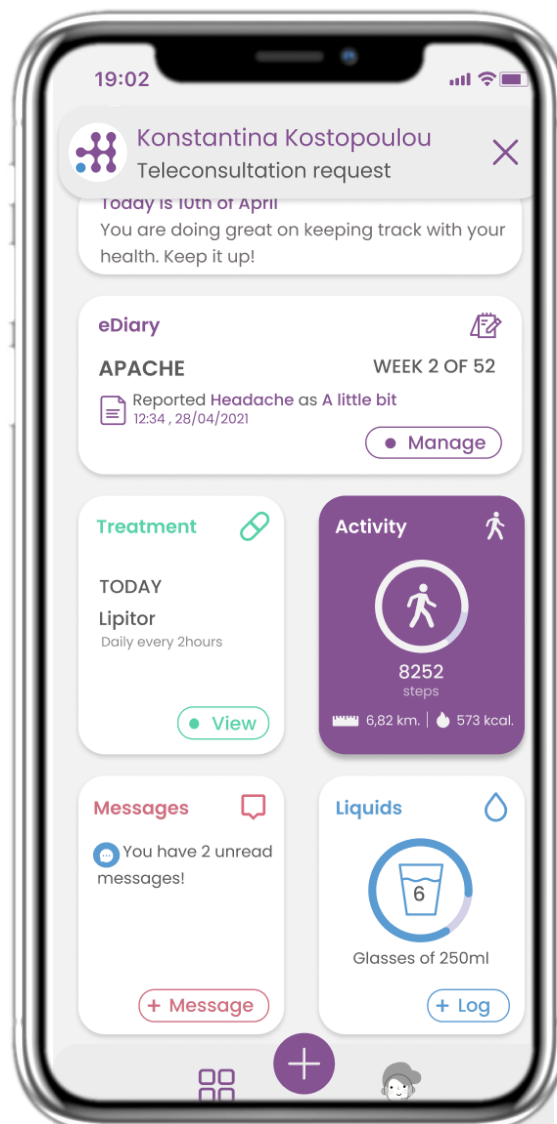


### 3.2 NOTIFICHE PUSH

Healthentia ti chiede di autorizzare le notifiche dalle tue impostazioni per poter ricevere promemoria sui questionari e sui trattamenti.




## 3 NOTIFICHE HOME E PUSH

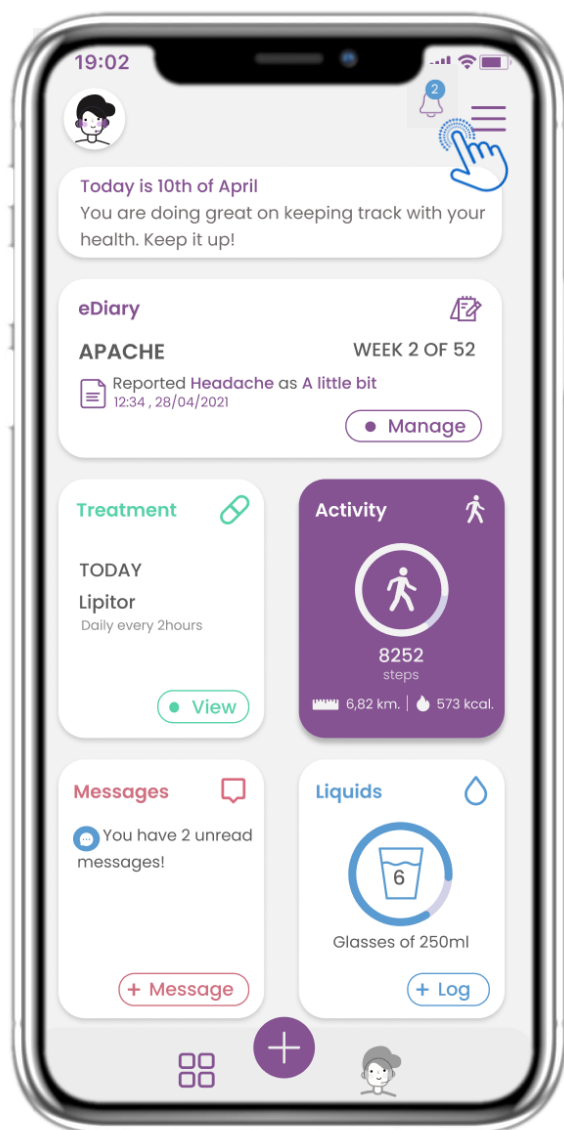

### 3.3 NOTIFICHE

Nella HOME page puoi vedere i questionari in sospeso sotto forma di notifiche nell'angolo in alto a destra con l'icona della campanella.

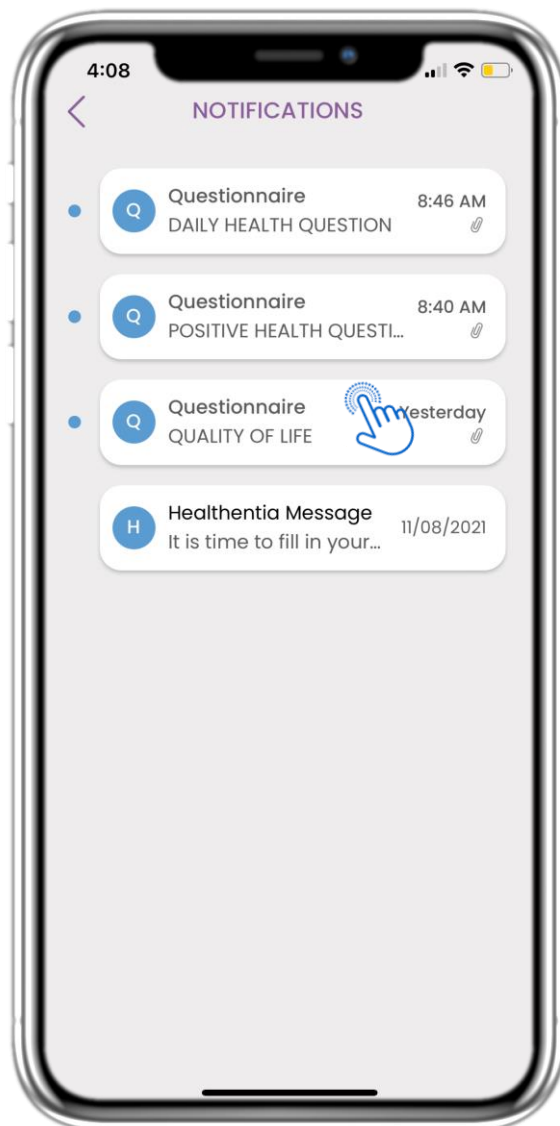

### 3.4 NOTIFICHE

Nella pagina Notifiche puoi trovare un elenco dei questionari in sospeso a cui devi rispondere.



## 3 NOTIFICHE HOME E PUSH




### 3.5 AGGIORNAMENTO FORZATO

Quando è disponibile una nuova versione dell'app che deve essere obbligatoriamente aggiornata, i pazienti vedono le informazioni di cui sopra e non possono utilizzare l'app, a meno che non clicchino per aggiornarla.




## 4 WIDGET HOME

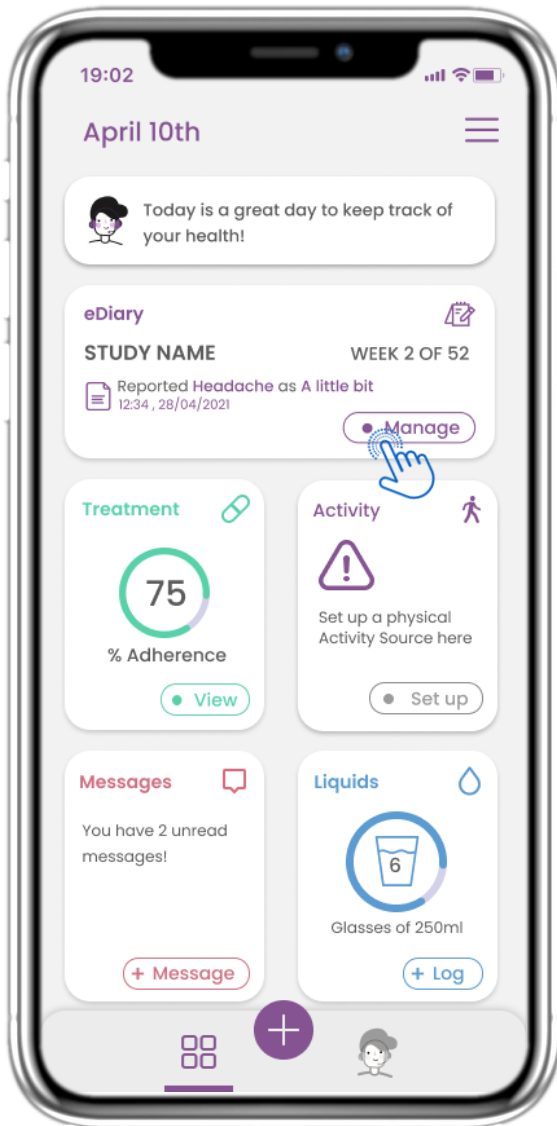

### 4.1 WIDGET DIARIO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget eDiary che viene utilizzato come diario del tuo studio o del monitoraggio della terapia.


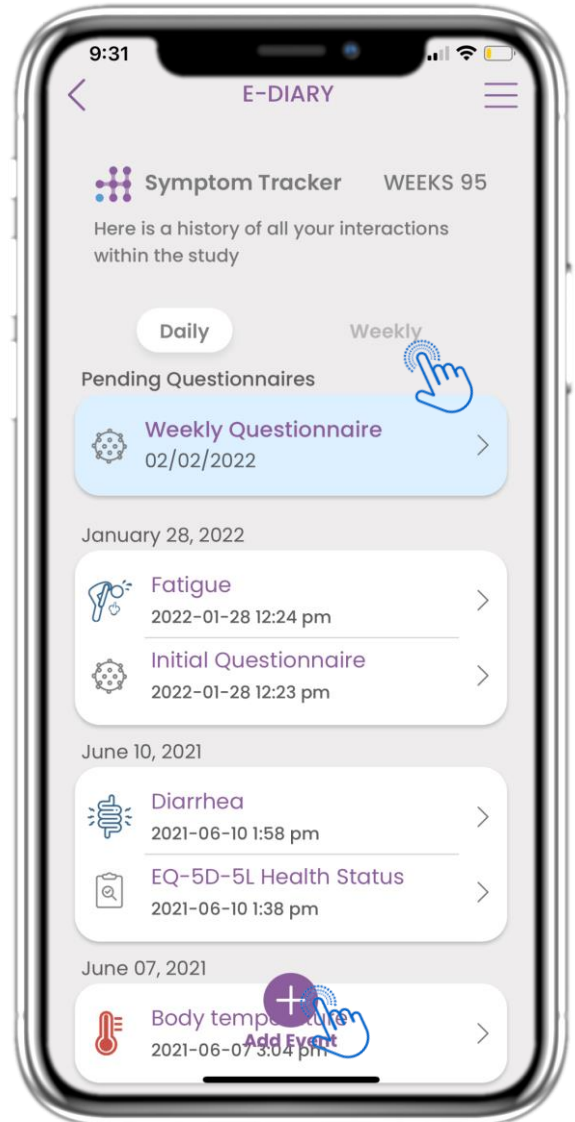


### 4.2 PAGINA DELL'eDIARIO

Nella pagina eDiary puoi trovare un aggiornamento giornaliero e settimanale dei tuoi report e dei questionari inviati. Puoi anche usare il pulsante (+) per aggiungere un nuovo evento.



## 4 WIDGET HOME

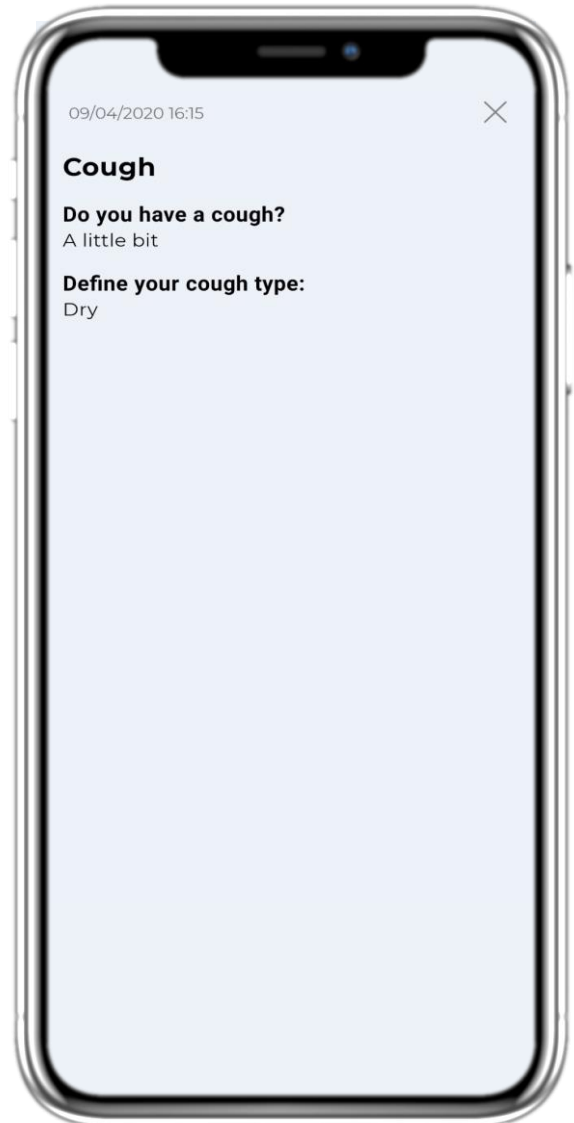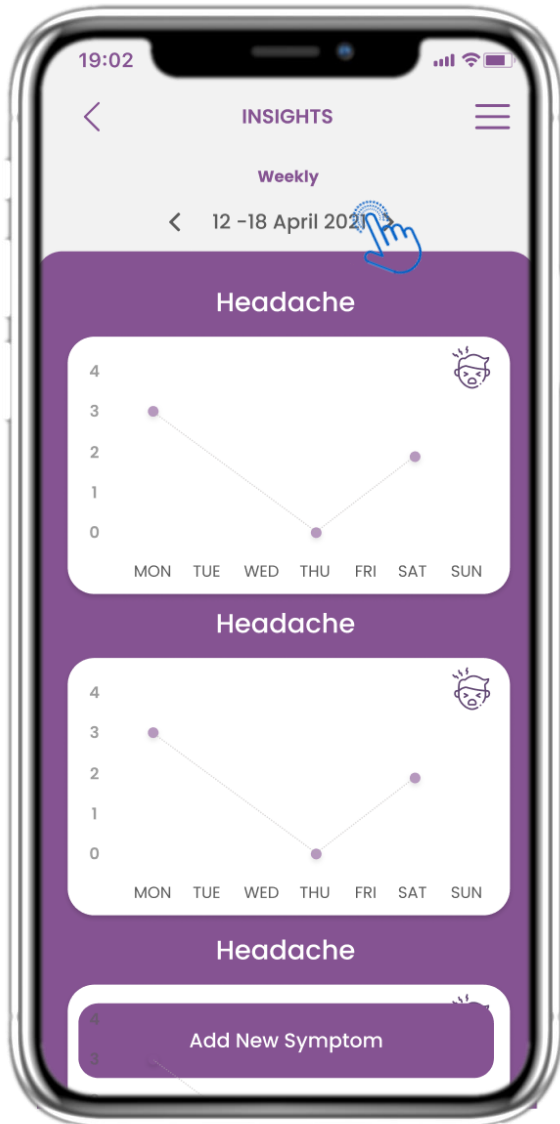

### 4.3 APPROFONDIMENTI EDIALISTICI


Se lo studio consente di mostrare grafici dei sintomi all'utente, sarà presente un pulsante per aprire questa pagina. Con il calendario è possibile scorrere avanti e indietro le settimane.

### 4.4 VISUALIZZA LE RISPOSTE SEGNALATE

È possibile visualizzare i questionari inviati con le relative risposte.




## 4 WIDGET HOME

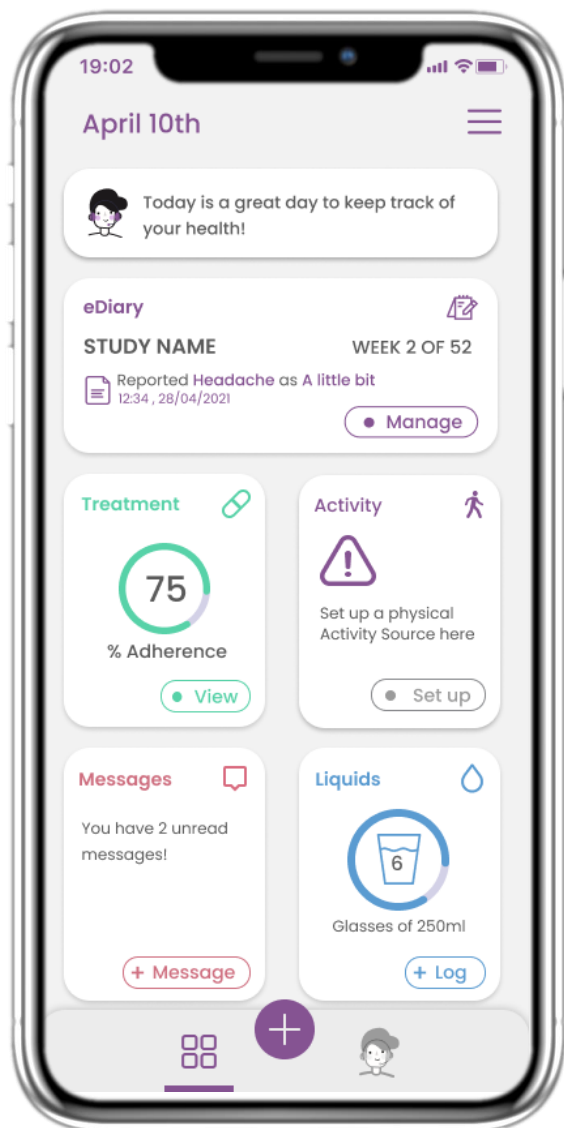

### 4.5 WIDGET MEDICINALI

Nella pagina HOME puoi trovare il widget dei farmaci che serve per impostare il tuo piano terapeutico.

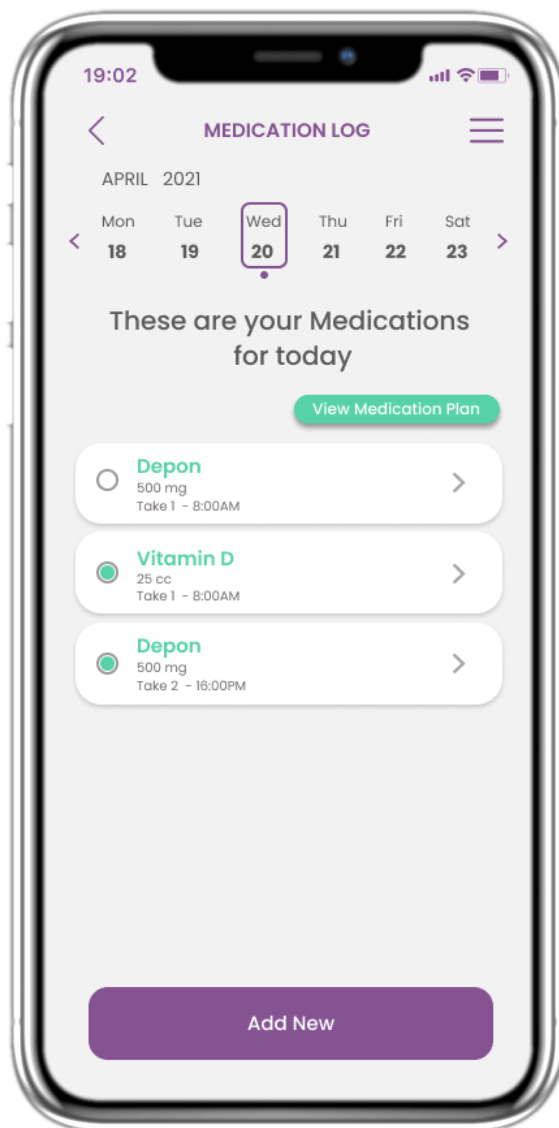


### 4.6 REGISTRO DEI FARMACI

Nella pagina Registro Farmaci puoi trovare un programma giornaliero dei tuoi farmaci. Puoi accedervi e modificarli, oppure aggiungerne di nuovi.




## 4 WIDGET HOME

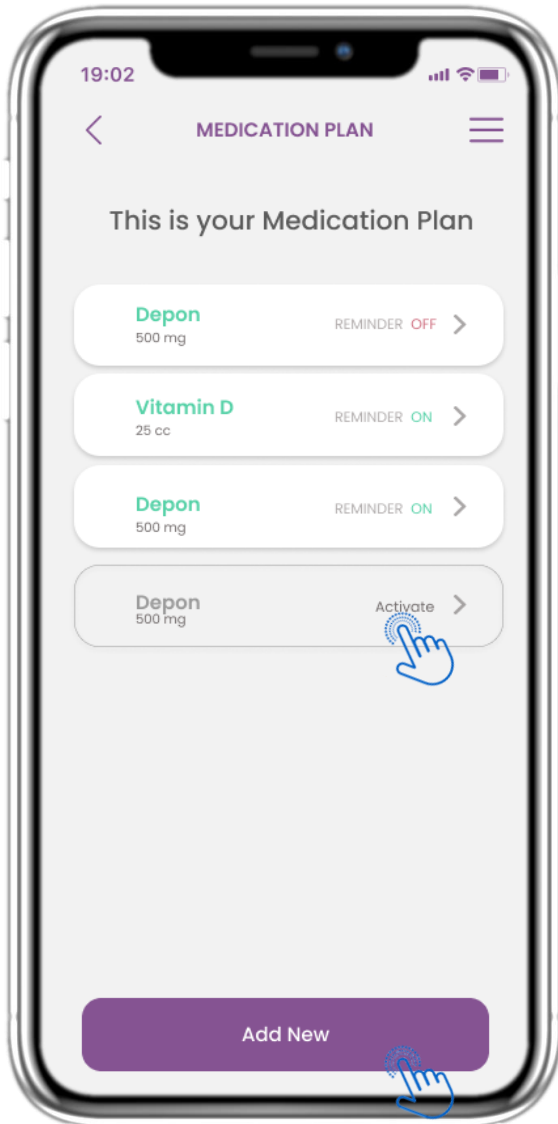

### 4.7 VEDI TUTTI I MEDICINALI

Nella pagina dei trattamenti puoi accedere e configurare tutti i trattamenti

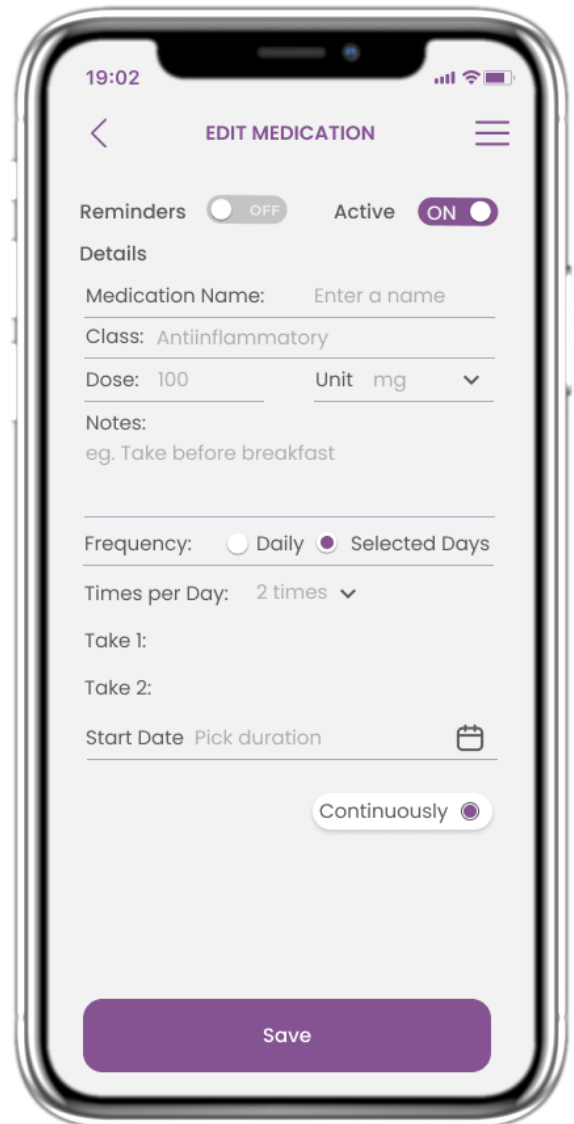


### 4.8 AGGIUNGI/MODIFICA NUOVO MEDICINALE

Nella pagina Nuovo farmaco puoi configurare un nome, una frequenza, una durata per i tuoi farmaci e aggiungere un promemoria.




## 4 WIDGET HOME

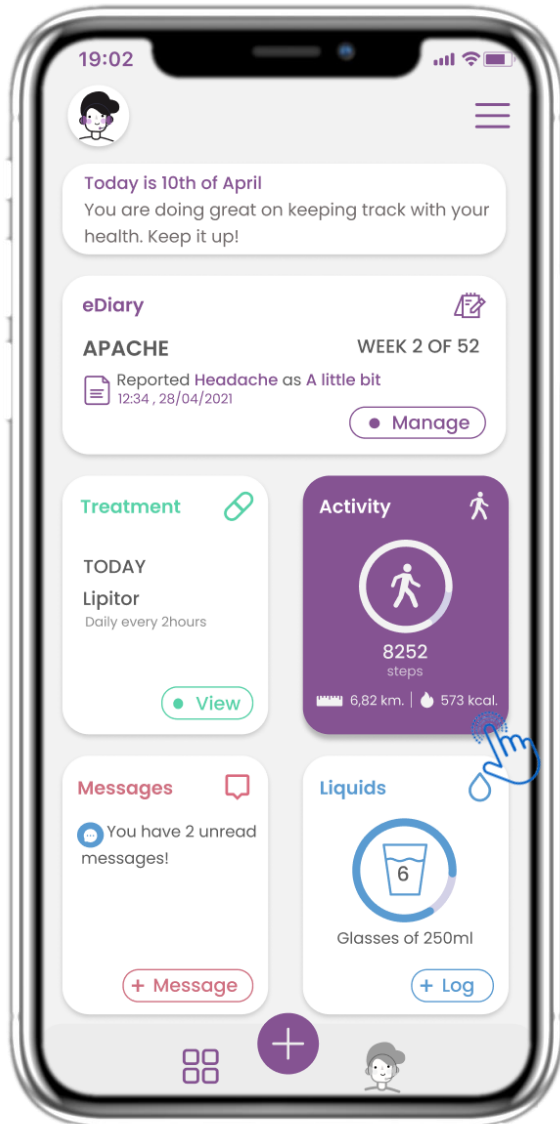

### 4.9 ATTIVITÀ

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Attività che serve per configurare il tuo tracker.

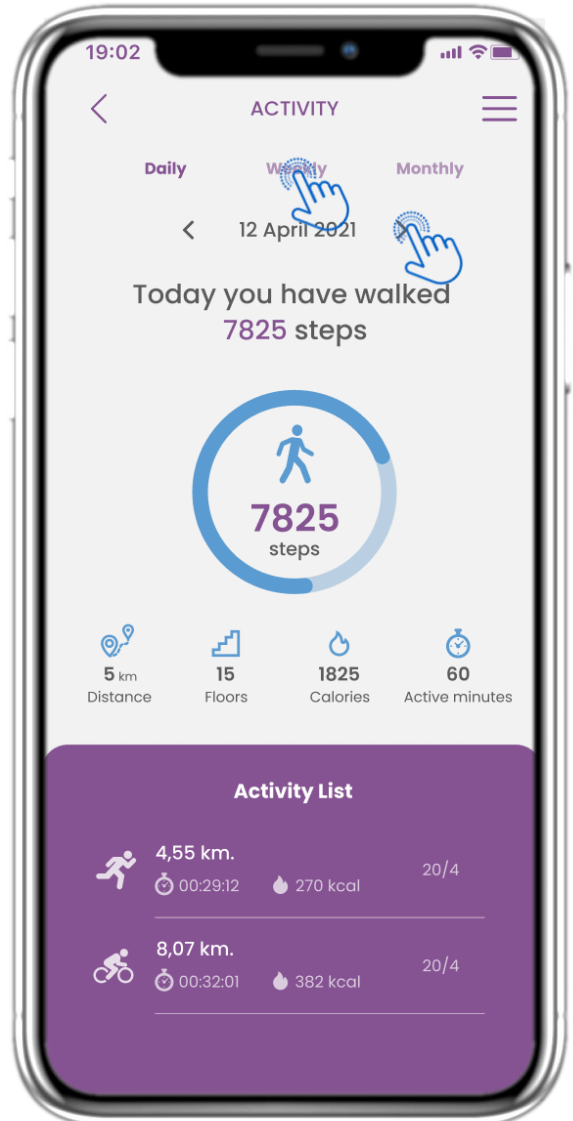


### 4.10 PAGINA ATTIVITÀ

Nella pagina Attività puoi monitorare i passi giornalieri, la distanza, i piani, le calorie e i minuti attivi. Con il calendario ti sposti tra i giorni e premendo settimanalmente vai ai grafici.




## 4 WIDGET HOME

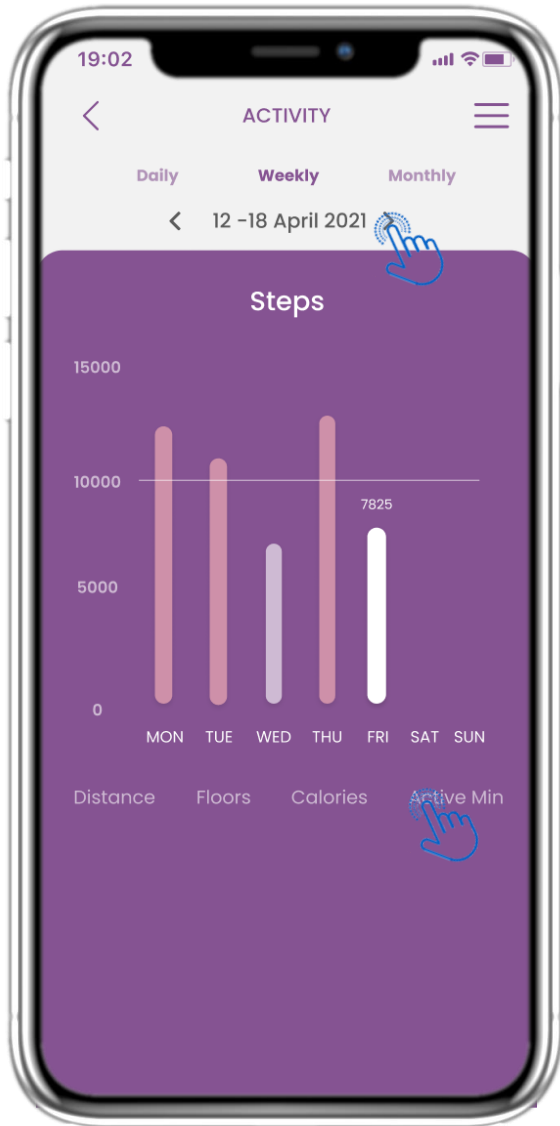

### 4.11 GRAFICI DI ATTIVITÀ

Nella pagina dei grafici ATTIVITÀ settimanali puoi trovare i passi, la distanza, i piani, le calorie e i minuti attivi settimanali.

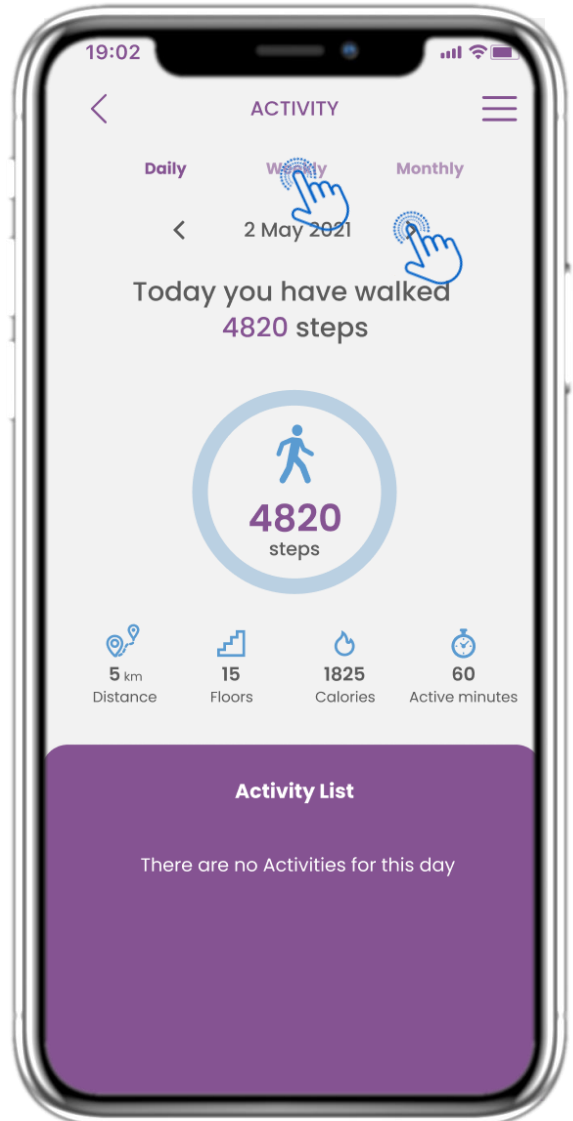


### 4.12 PAGINA ATTIVITÀ

Nessuna attività sportiva è stata raccolta dal dispositivo indossabile.




## 4 WIDGET HOME

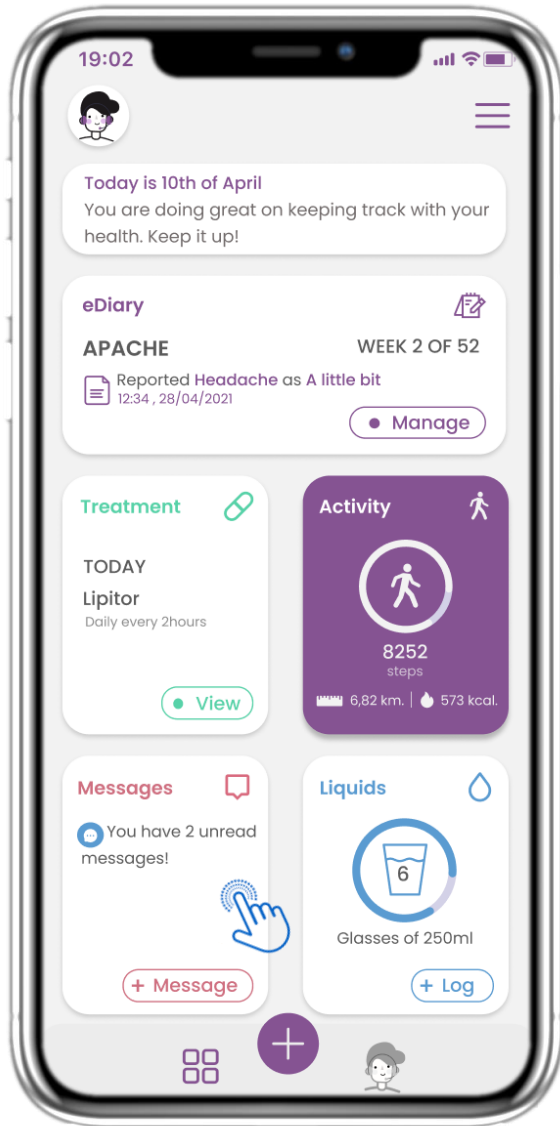

### 4.13 MESSAGGI

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Messaggi che ti permette di contattare il tuo Medico o l'Ospedale e di effettuare anche una teleconsulenza.

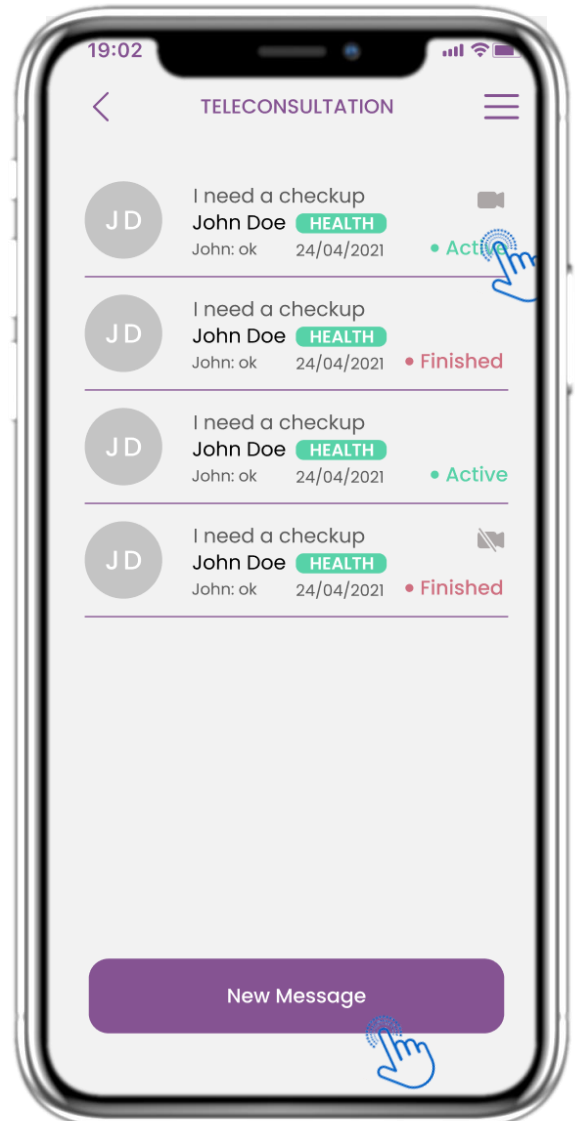


### 4.14 PAGINA POSTA IN ARRIVO MESSAGGI

Nella pagina Messaggi puoi visualizzare la comunicazione con il professionista sanitario. Crea un nuovo messaggio o accedi alla sala di teleconsulto.




## 4 WIDGET HOME

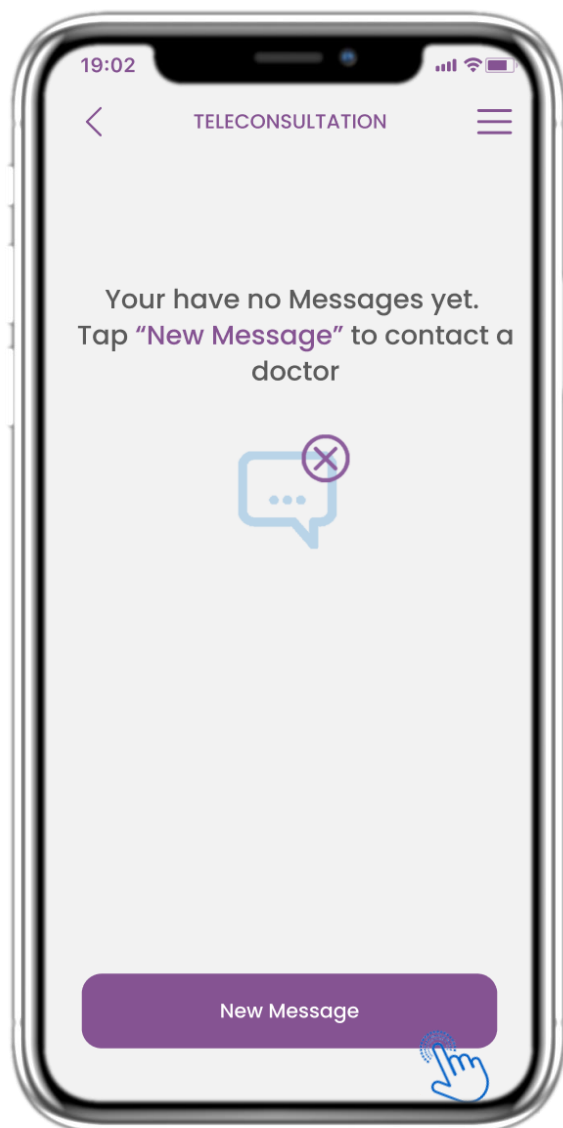

### 4.15 NESSUN MESSAGGIO

Se non ci sono messaggi la pagina appare così.

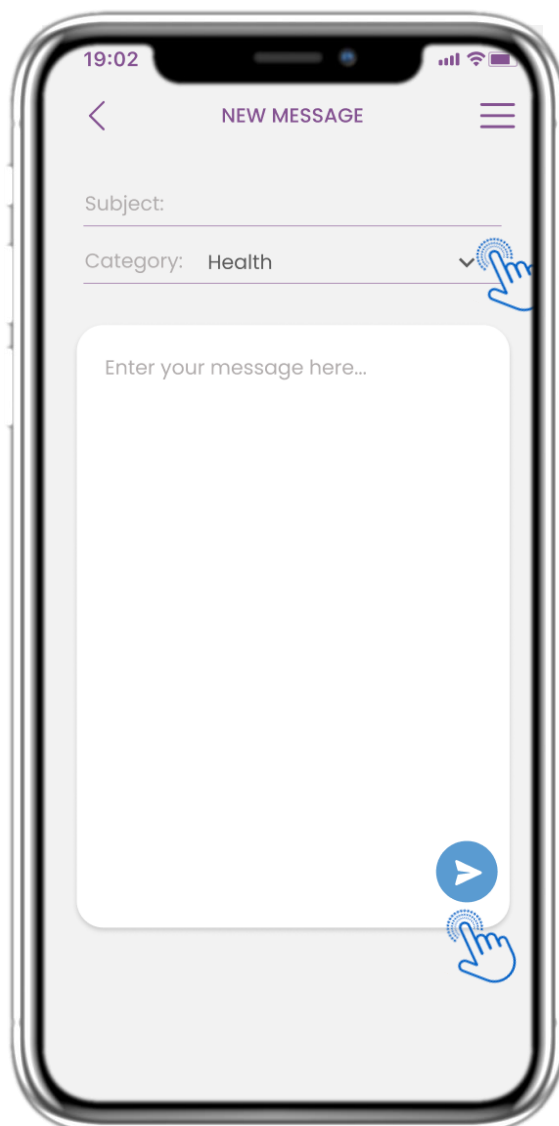


### 4.16 CREA NUOVO MESSAGGIO

Nella casella Messaggio puoi selezionare un Oggetto e una categoria definiti dall'operatore sanitario e inserire il tuo messaggio.



## 4 WIDGET HOME

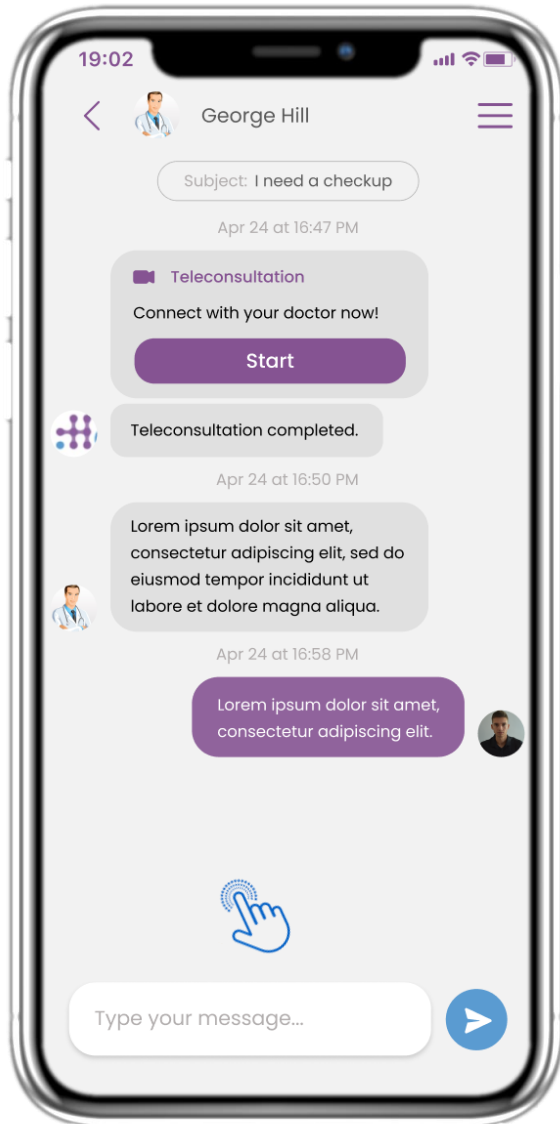

### 4.17 APRIRE IL MESSAGGIO

Tutte le risposte e le comunicazioni vengono conservate in un'unica conversazione. L'operatore sanitario chiude la conversazione.




### 4.18 TELECONSULTAZIONE

Nella conversazione Messaggio, il professionista sanitario può avviare una teleconsulenza che consentirà all'utente di entrare in una finestra temporale di 15 minuti.




## 4 WIDGET HOME

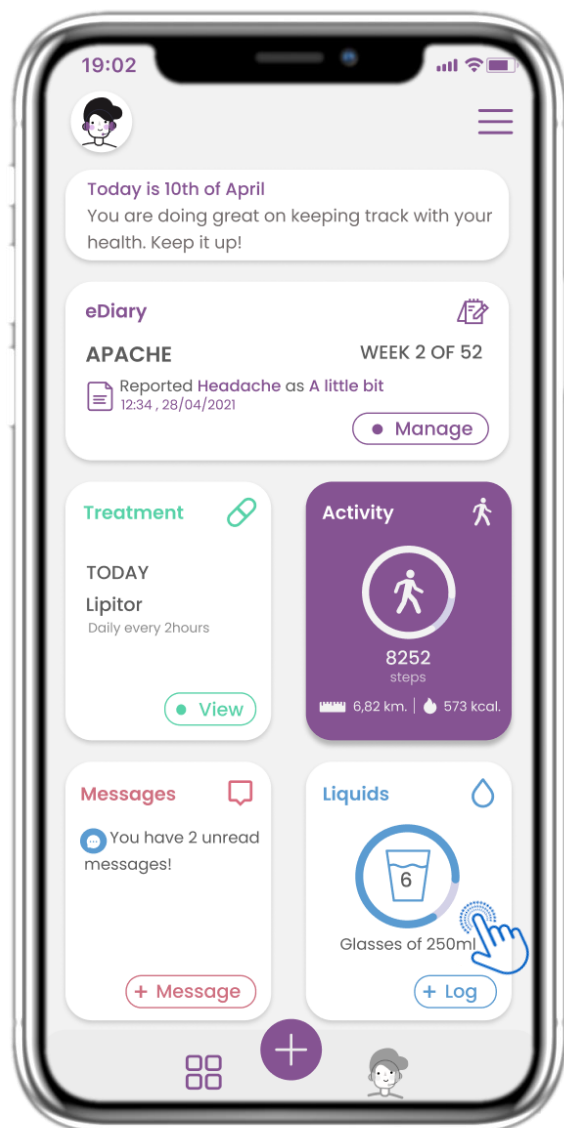

### 4.19 WIDGET LIQUIDO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Liquid che viene utilizzato per registrare l'assunzione giornaliera di acqua e altri liquidi.

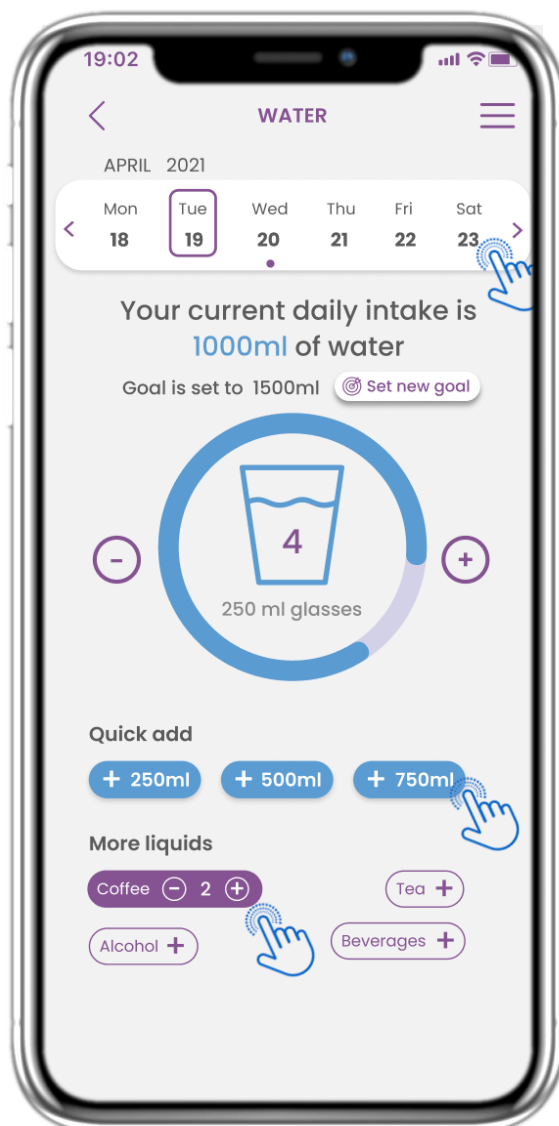


### 4.20 PAGINA LIQUIDA

Nella pagina Liquidi puoi aggiungere bicchieri d'acqua con i pulsanti rapidi da 250-500-750 ml e aggiungere altri liquidi come caffè o bevande.




## 4 WIDGET HOME

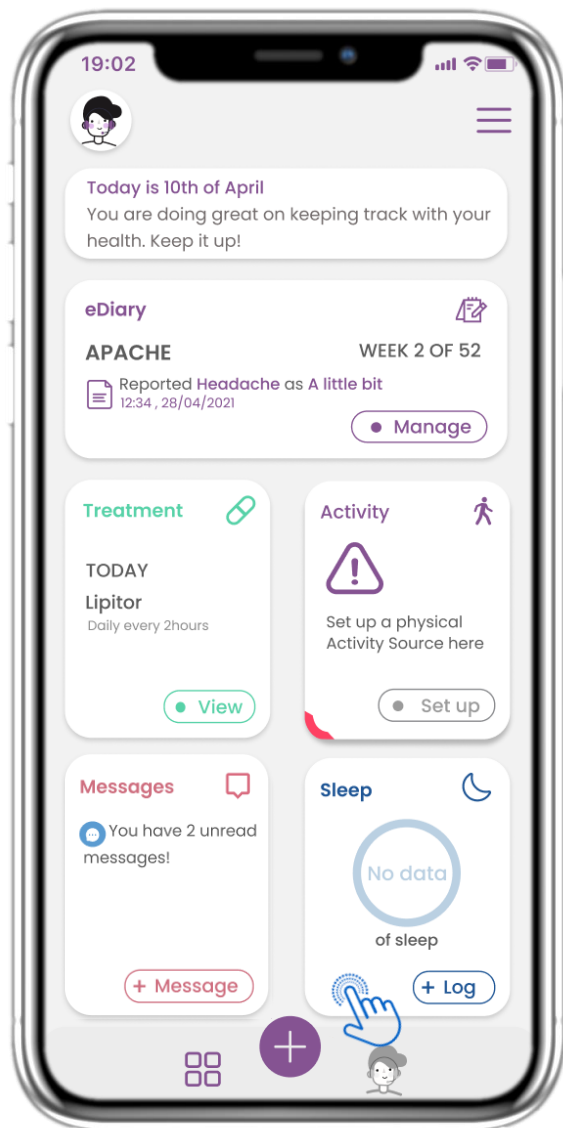

### 4.21 WIDGET SONNO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Sonno che serve per registrare manualmente i dati del tuo sonno o tramite un dispositivo indossabile.


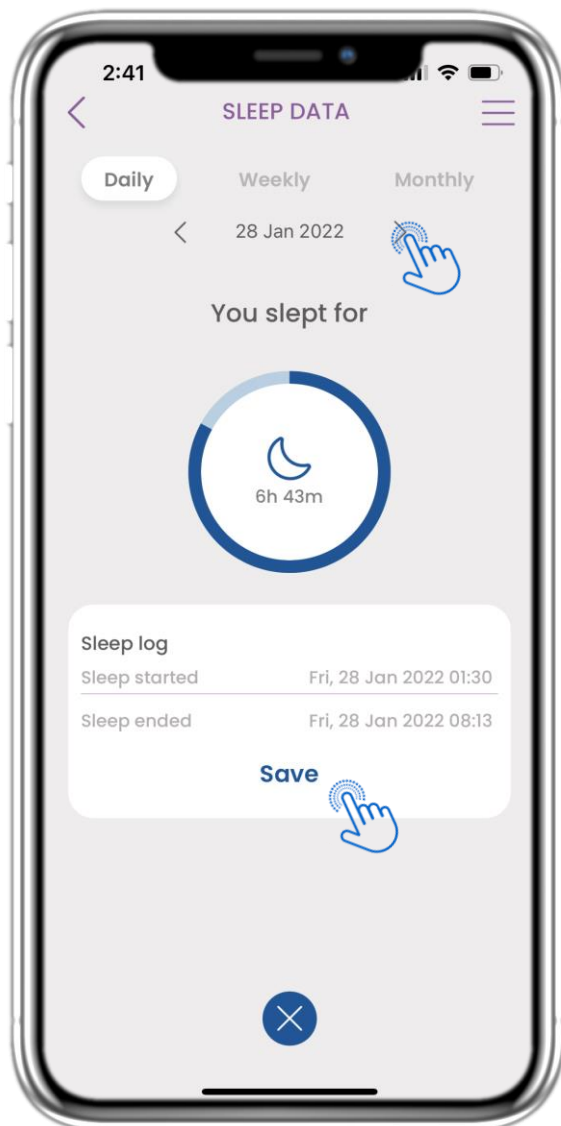


### 4.22 REGISTRO PAGINA SONNO

Nella pagina Sonno puoi aggiungere manualmente i dati sul sonno e spostarti tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri sul sonno e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.



## 4 WIDGET HOME

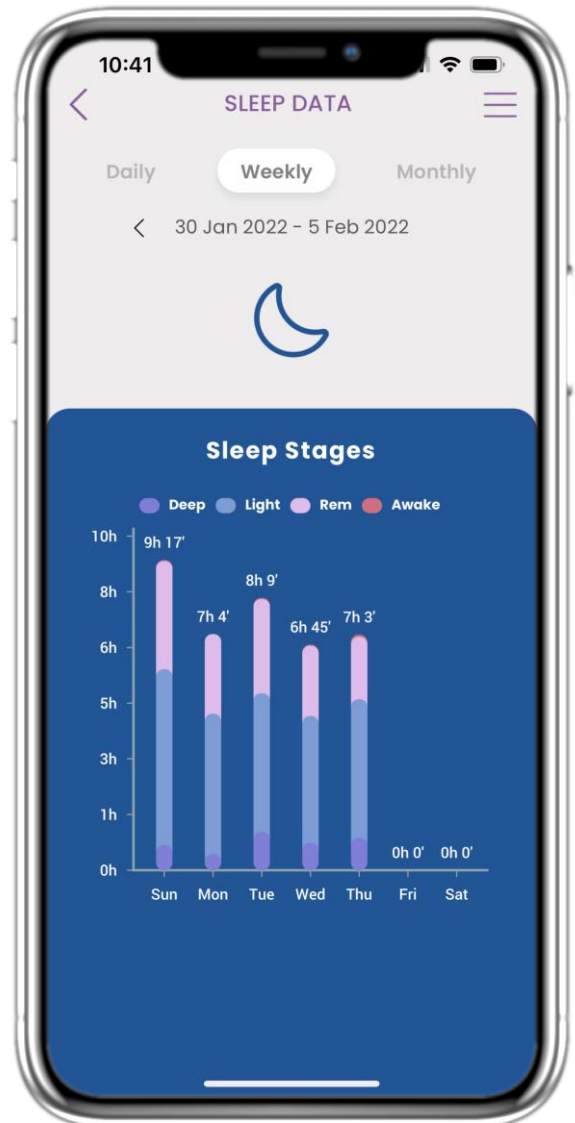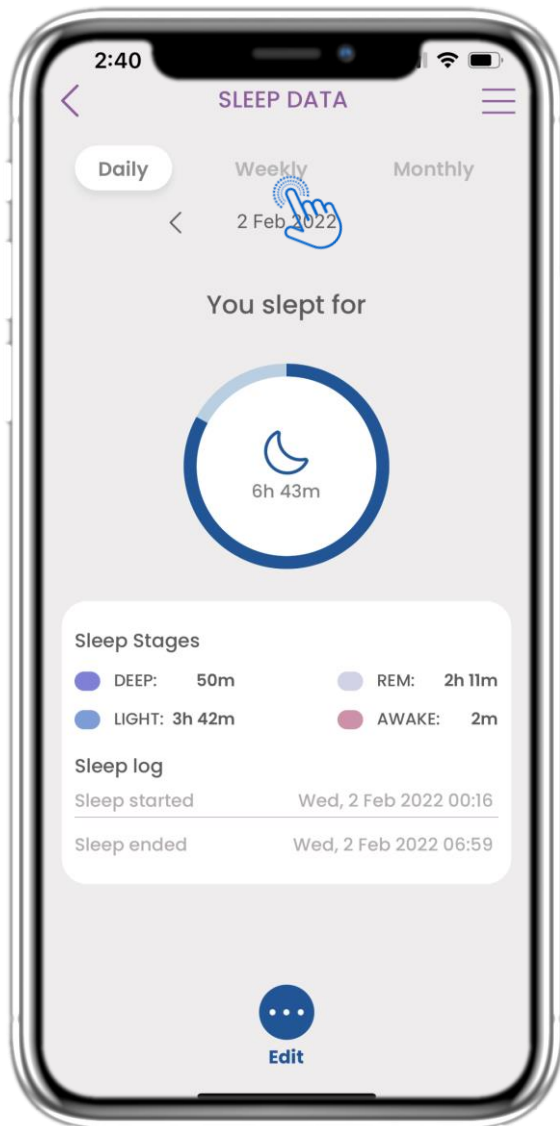

### 4.23 PAGINA DEL SONNO DA INDOSSABILE



Nella pagina HOME puoi trovare il widget Sonno che serve per registrare manualmente i dati del tuo sonno o tramite un dispositivo indossabile.

### 4.24 PAGINA DEL SONNO

Nella pagina Sonno puoi aggiungere manualmente i dati sul sonno e spostarti tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri sul sonno e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.



## 4 WIDGET HOME

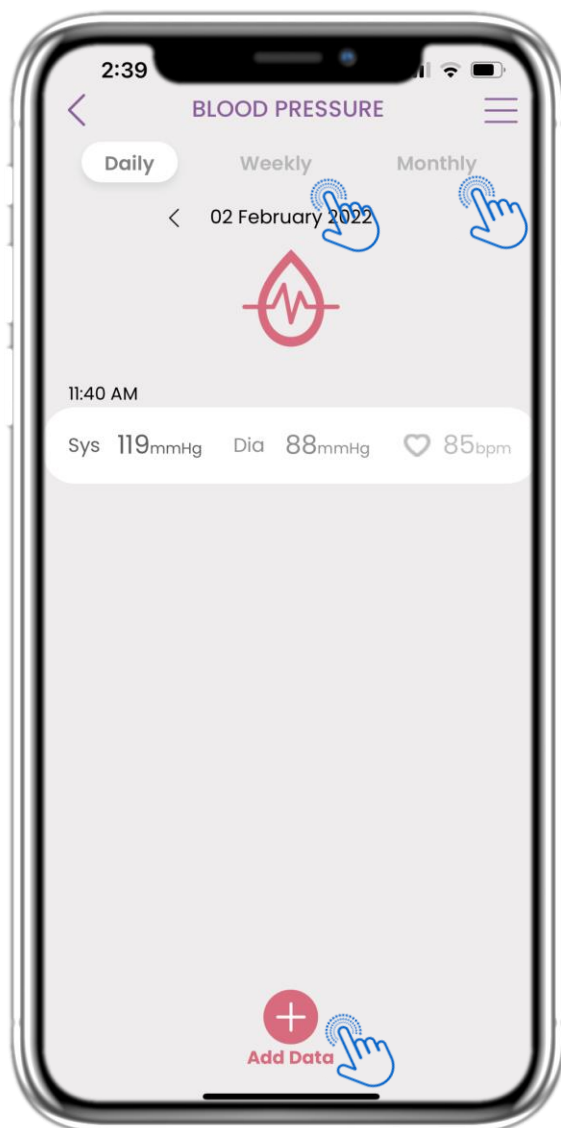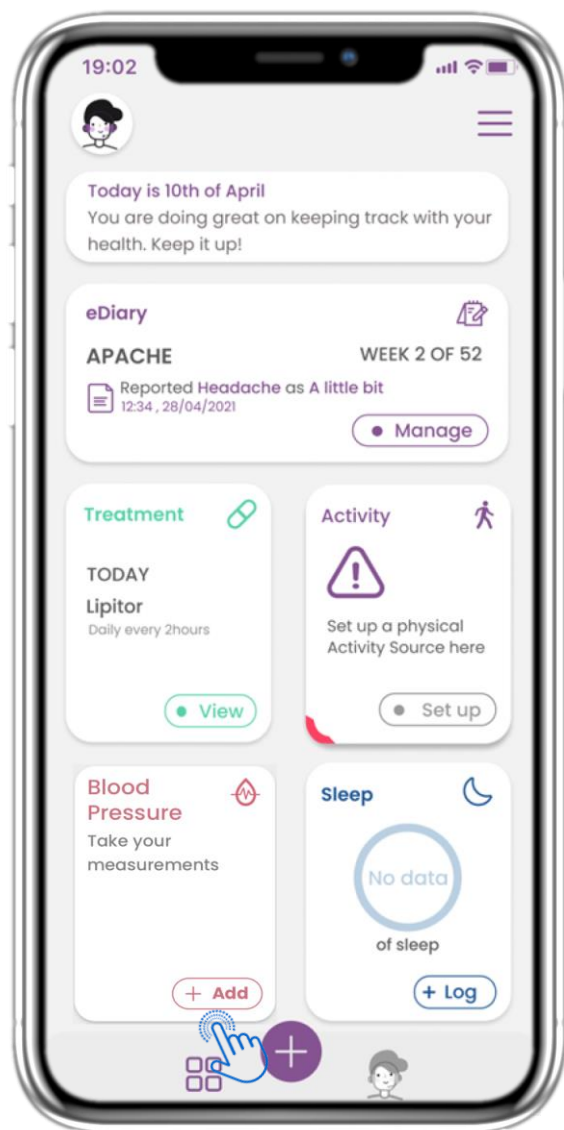

### 4.25 WIDGET PRESSIONE SANGUIGNA

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Pressione sanguigna che viene utilizzato per raccogliere le misurazioni tramite un dispositivo per la pressione sanguigna sincronizzato.

### 4.26 REGISTRO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Nella pagina Pressione sanguigna puoi aggiungere le tue misurazioni manualmente o sincronizzando un dispositivo e navigare tra i giorni nel calendario o visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche grafici settimanali e mensili.




## 4 WIDGET HOME



### 4.27 PAGINA PRESSIONE SANGUIGNA DAL DISPOSITIVO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Pressione sanguigna che viene utilizzato per registrare le misurazioni della pressione sanguigna manualmente o tramite un dispositivo.

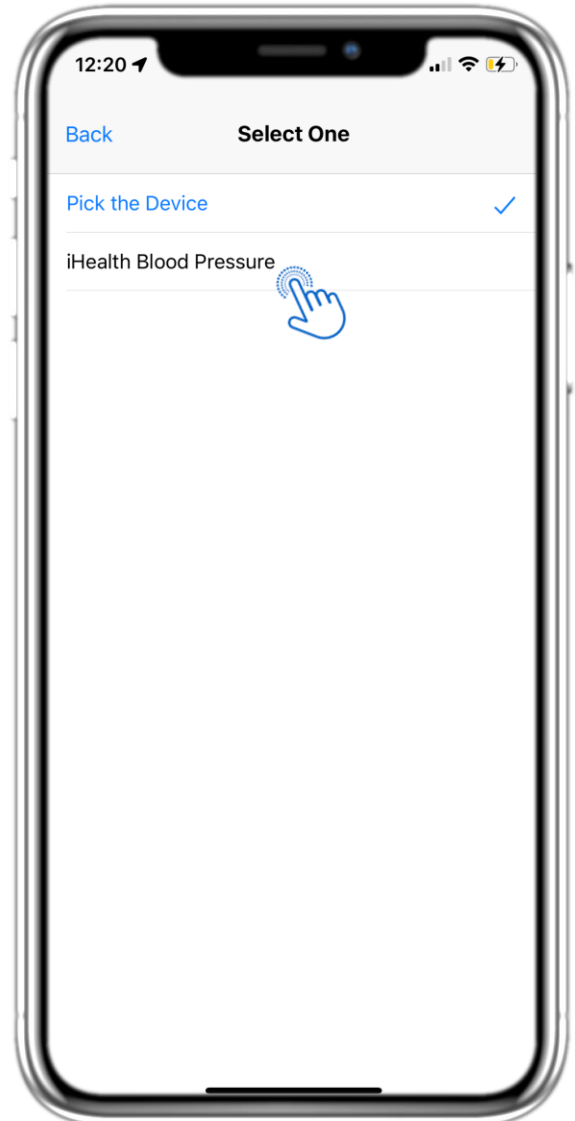

### 4.28 PAGINA PRESSIONE SANGUIGNA DAL DISPOSITIVO

Nella pagina Pressione sanguigna è possibile sincronizzare un dispositivo per la pressione sanguigna e raccogliere misurazioni automatiche direttamente dal dispositivo.




## 4 WIDGET HOME



### 4.29 PAGINA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MANUALMENTE

Il widget della pressione sanguigna che viene utilizzato per registrare le misurazioni della pressione sanguigna manualmente o raccolte da un dispositivo. Nella pagina HOME puoi trovare

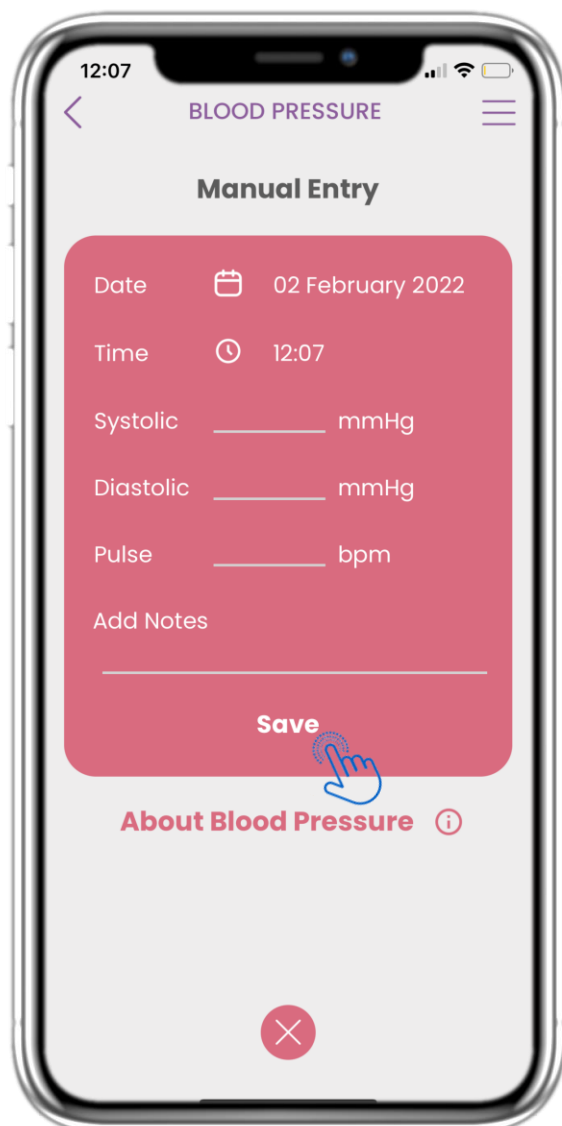


### 4.30 PAGINA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MANUALMENTE

Nella pagina Pressione sanguigna puoi aggiungere manualmente i tuoi dati e visualizzare un elenco con i risultati.




## 4 WIDGET HOME

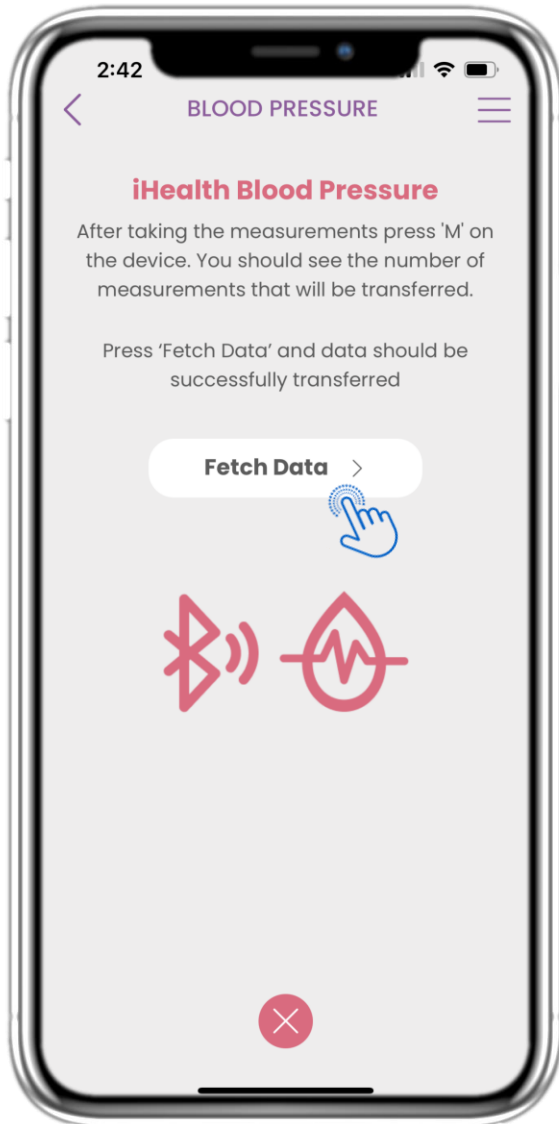

### 4.31 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PRESSIONE ARTERIOSA

Nella pagina iHealth Blood Pressure puoi trovare il pulsante per sincronizzare e raccogliere le misurazioni dal dispositivo per la pressione sanguigna.

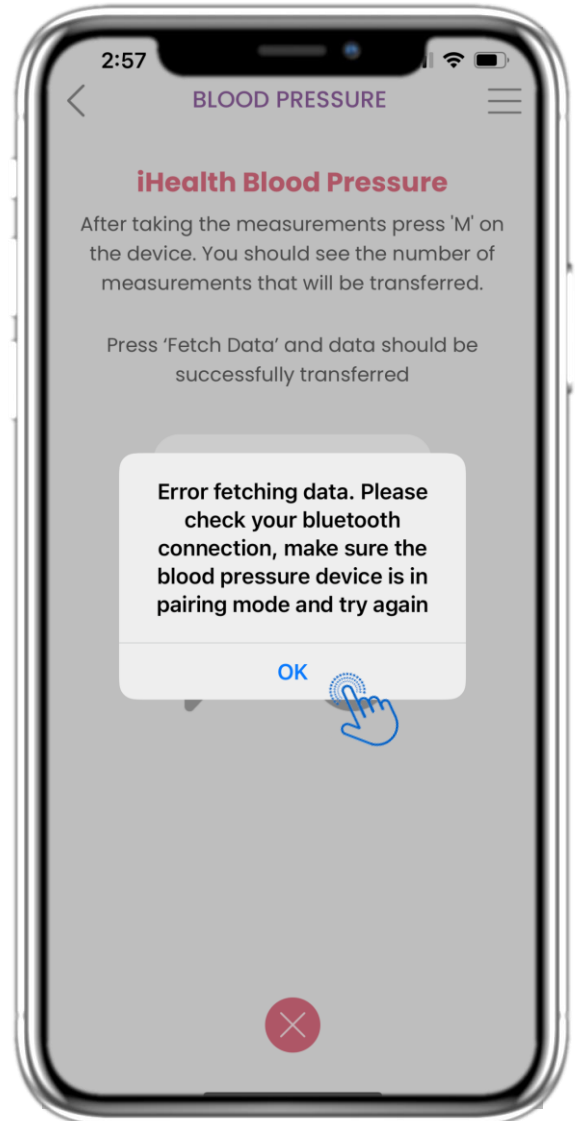


### 4.32 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PRESSIONE ARTERIOSA

Se ricevi questa notifica, controlla le impostazioni del tuo cellulare per verificare di aver attivato il Bluetooth e assicurati che il dispositivo per la pressione sanguigna sia pronto per l'associazione.




## 4 WIDGET HOME

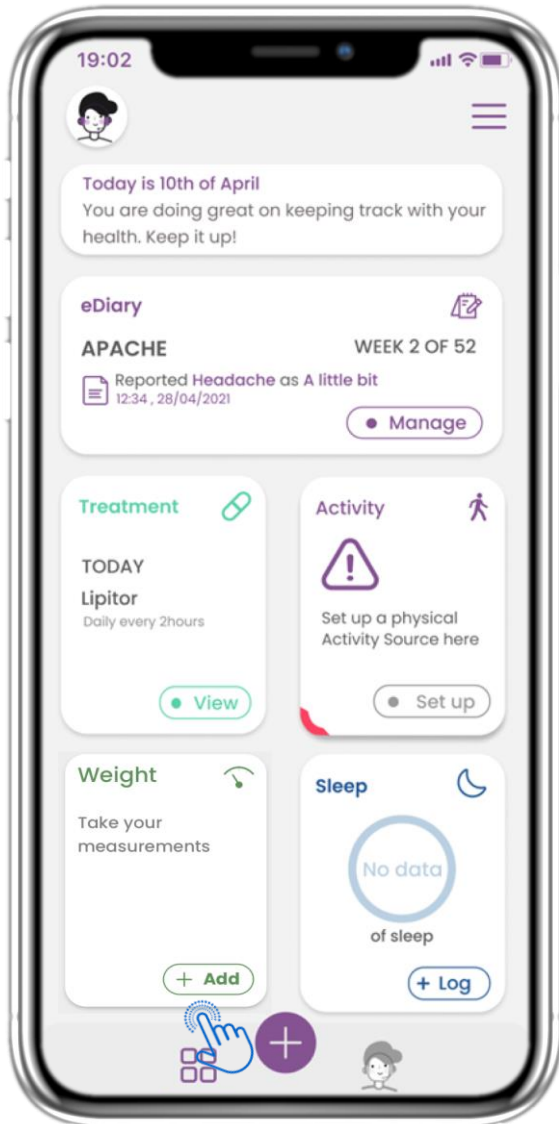

### 4.33 WIDGET PESO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Peso che viene utilizzato per raccogliere le misurazioni tramite un dispositivo di pesatura sincronizzato.

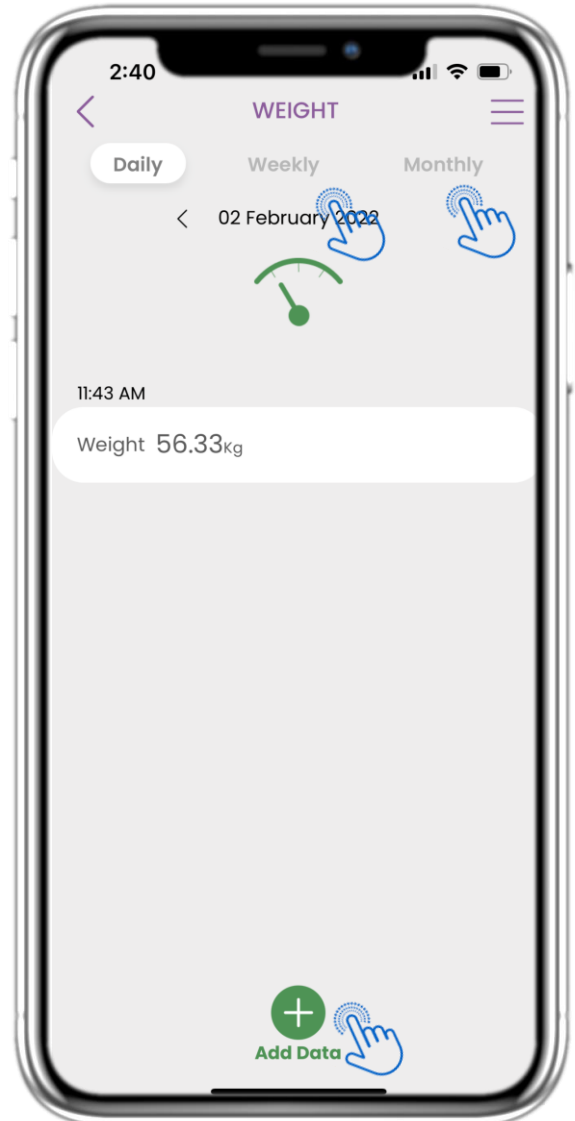


### 4.34 REGISTRO PESO

Nella pagina Peso puoi aggiungere le tue misurazioni manualmente o sincronizzando un dispositivo e navigare tra i giorni nel calendario o visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche grafici settimanali e mensili.



## 4 WIDGET HOME

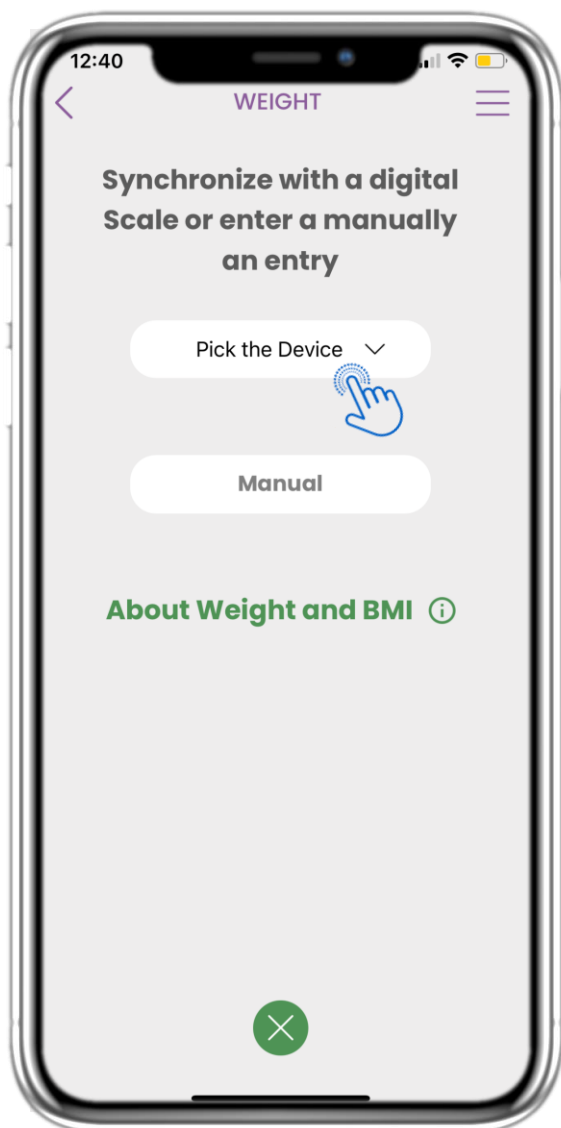

### 4.35 PAGINA PESO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Peso che serve per registrare le misurazioni del tuo peso manualmente o tramite un dispositivo.




### 4.36 PAGINA PESO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina Peso è possibile sincronizzare una bilancia e raccogliere misurazioni automatiche direttamente dal dispositivo.




## 4 WIDGET HOME

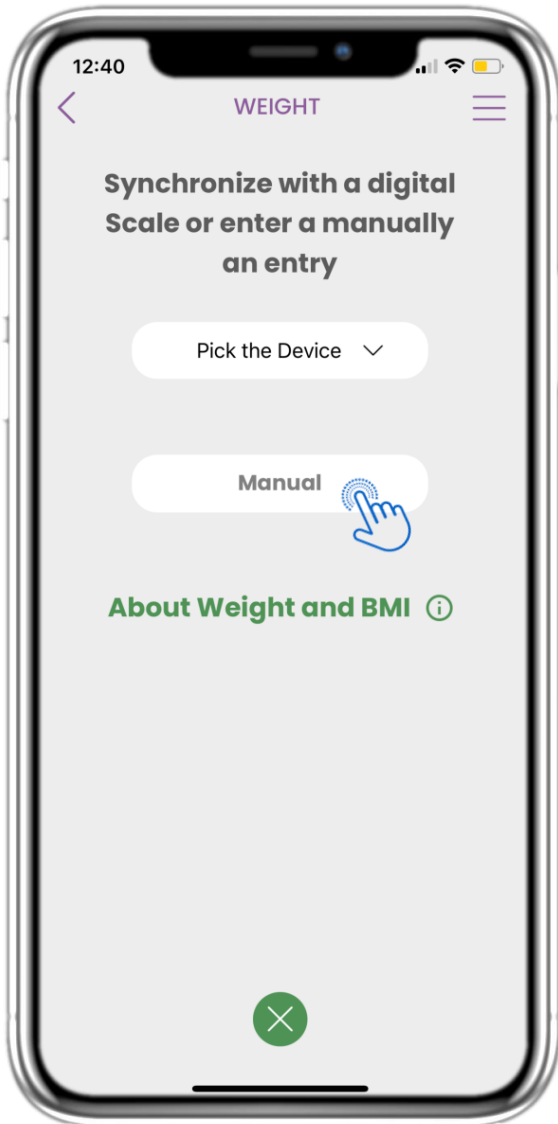

### 4.37 PAGINA DEL PESO MANUALMENTE

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Peso che serve per registrare le misurazioni del tuo peso manualmente o tramite una bilancia.

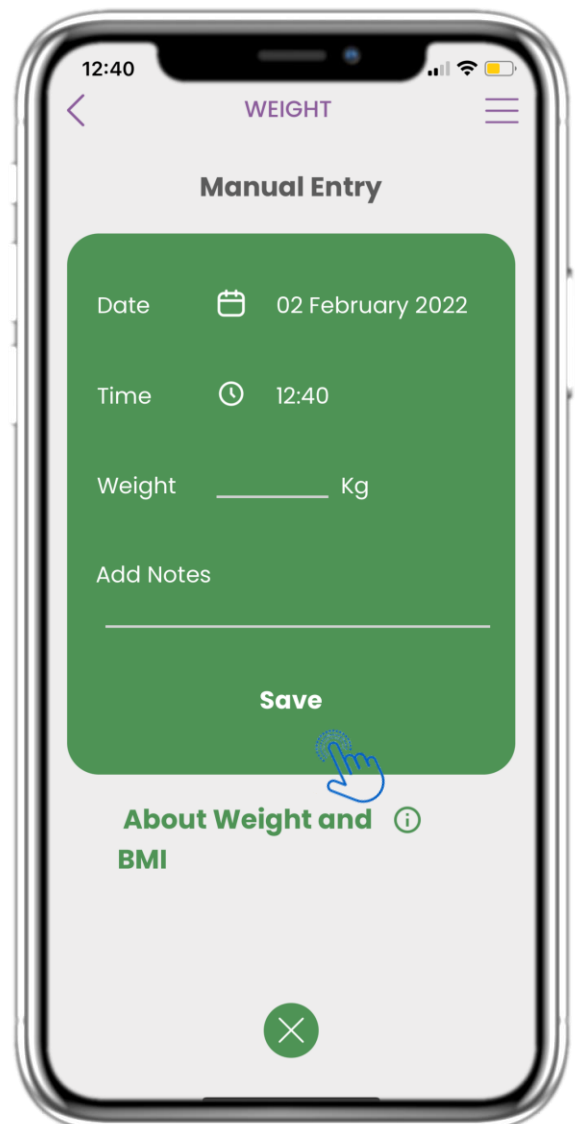


### 4.38 PAGINA DEL PESO MANUALMENTE

Nella pagina Peso puoi aggiungere manualmente i tuoi dati e visualizzare un elenco con i risultati.




## 4 WIDGET HOME

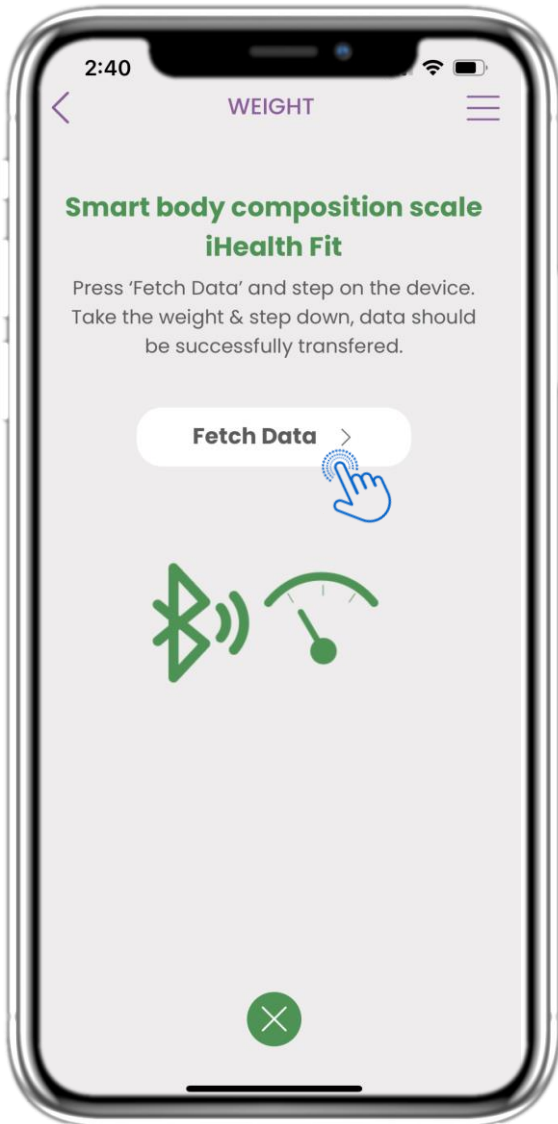

### 4.39 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Nella pagina iHealth Fit Weight puoi trovare il pulsante per sincronizzare e raccogliere le misurazioni dalla bilancia.

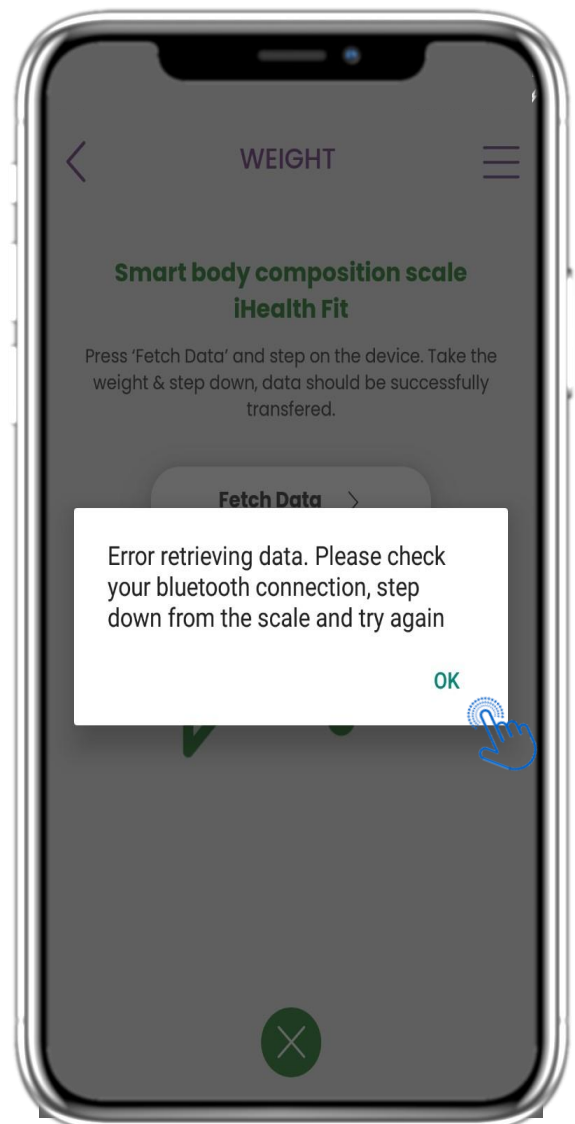


### 4.40 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Se ricevi questa notifica, controlla le impostazioni del tuo cellulare e verifica di aver attivato il Bluetooth. Ripeti la procedura di pesatura dall'inizio.



## 4 WIDGET HOME

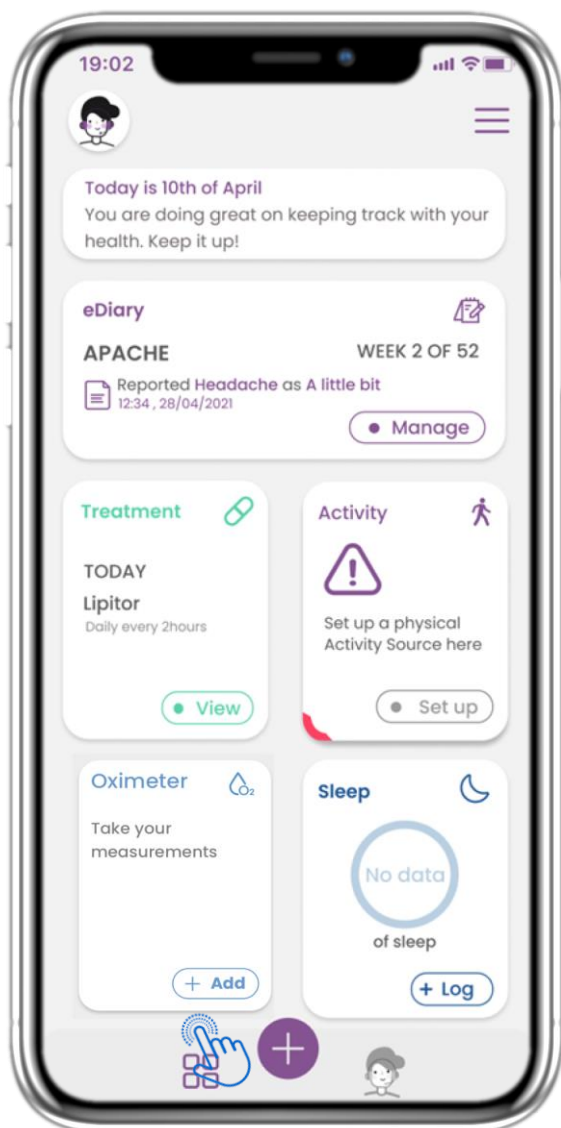

### 4.41 WIDGET OSSIMETRO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Ossimetro che viene utilizzato per registrare manualmente i dati relativi all'ossigeno o raccolti tramite un dispositivo ossimetro.




### 4.42 REGISTRO DELL'OSSIMETRO

Nella pagina Ossimetro puoi aggiungere manualmente l'ossigeno e navigare tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.




## 4 HOME WIDGETS

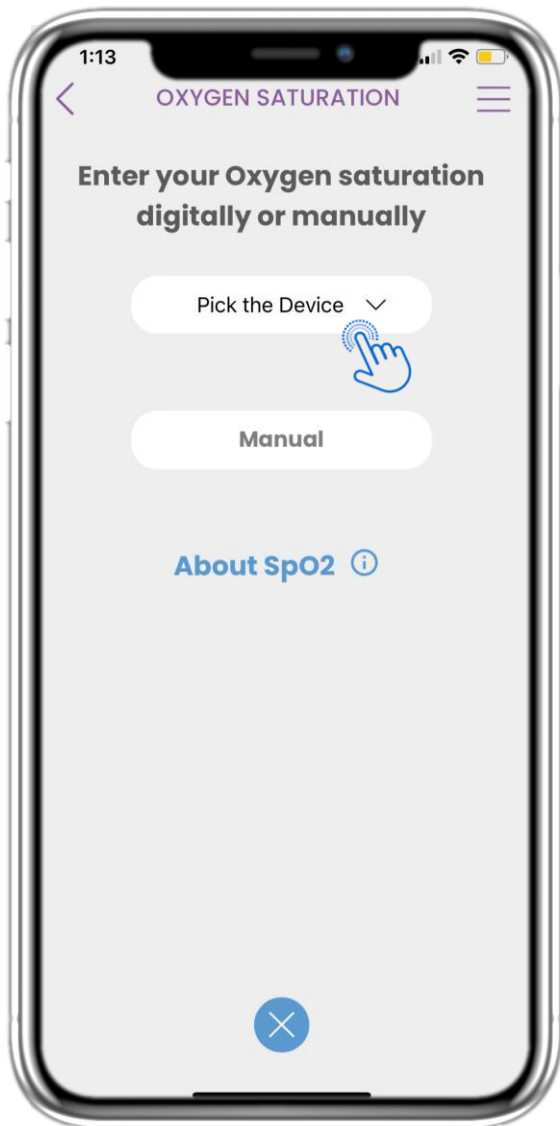

### 4.43 PAGINA DELL'OSSIMETRO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Ossimetro che serve per registrare le misurazioni dell'ossigeno manualmente o tramite un dispositivo ossimetro.

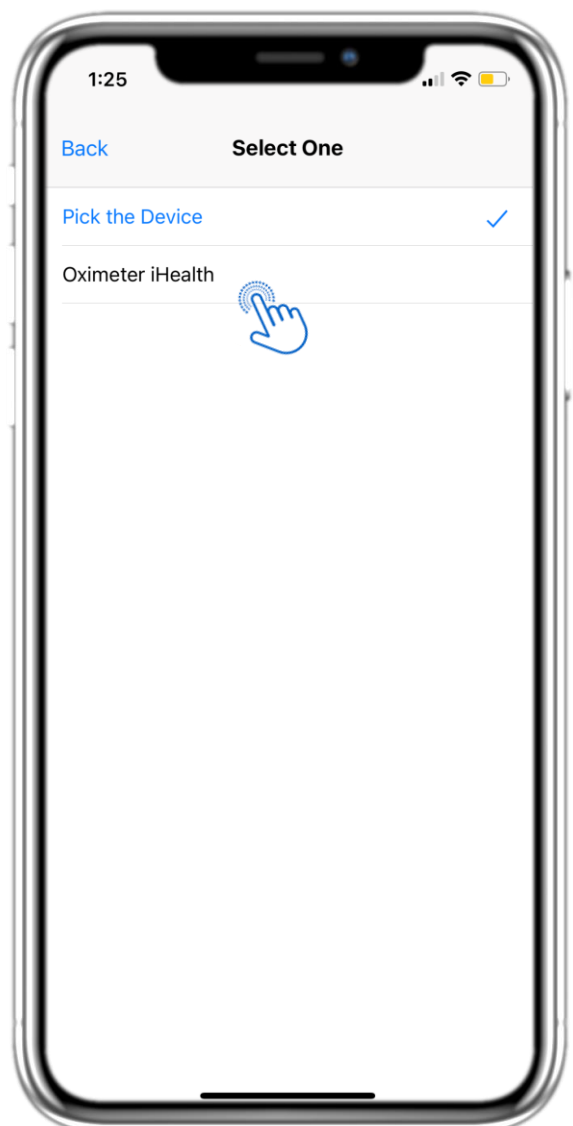


### 4.44 PAGINA DELL'OSSIMETRO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina Ossimetro puoi aggiungere manualmente l'ossigeno e navigare tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.




## 4 HOME WIDGETS

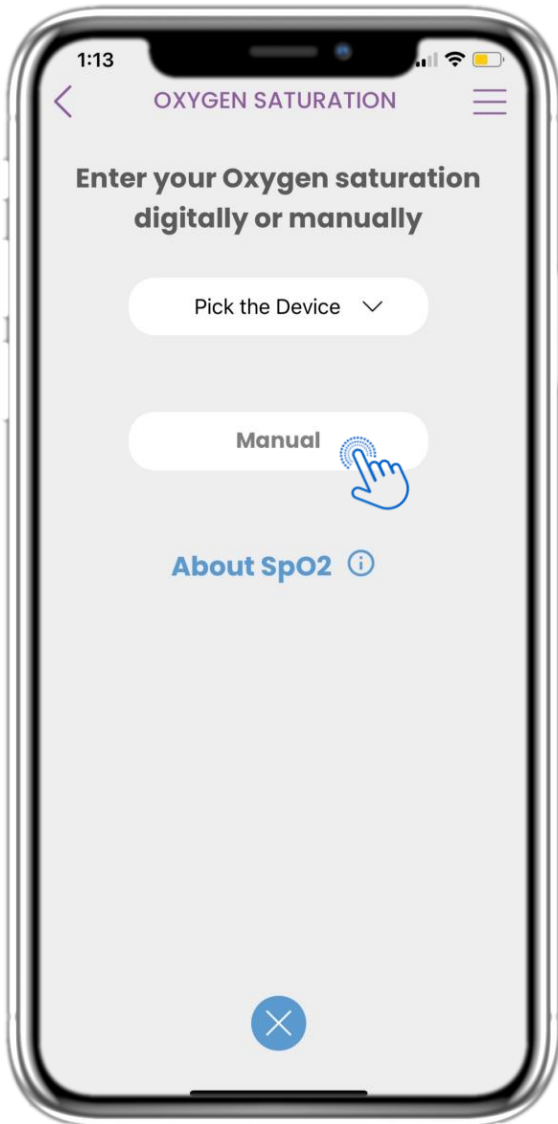

### 4.45 PAGINA DELL'OSSIMETRO MANUALMENTE

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Ossimetro che serve per registrare le misurazioni dell'ossigeno manualmente o tramite un dispositivo ossimetro.

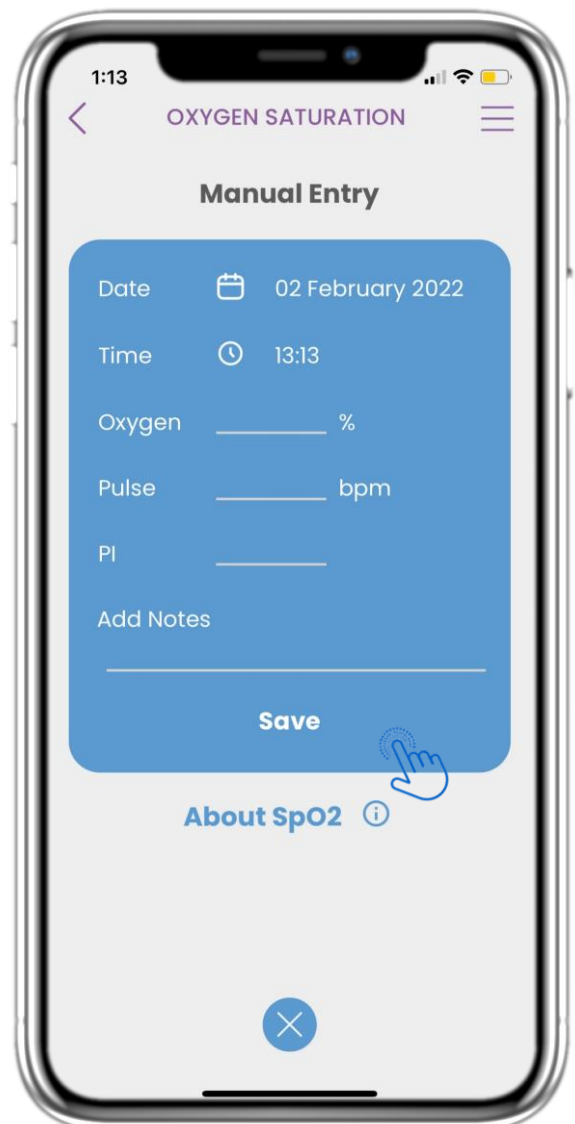


### 4.46 PAGINA DELL'OSSIMETRO MANUALMENTE

Nella pagina Ossimetro puoi aggiungere manualmente i tuoi dati e visualizzare un elenco con i risultati.




## 4 HOME WIDGETS

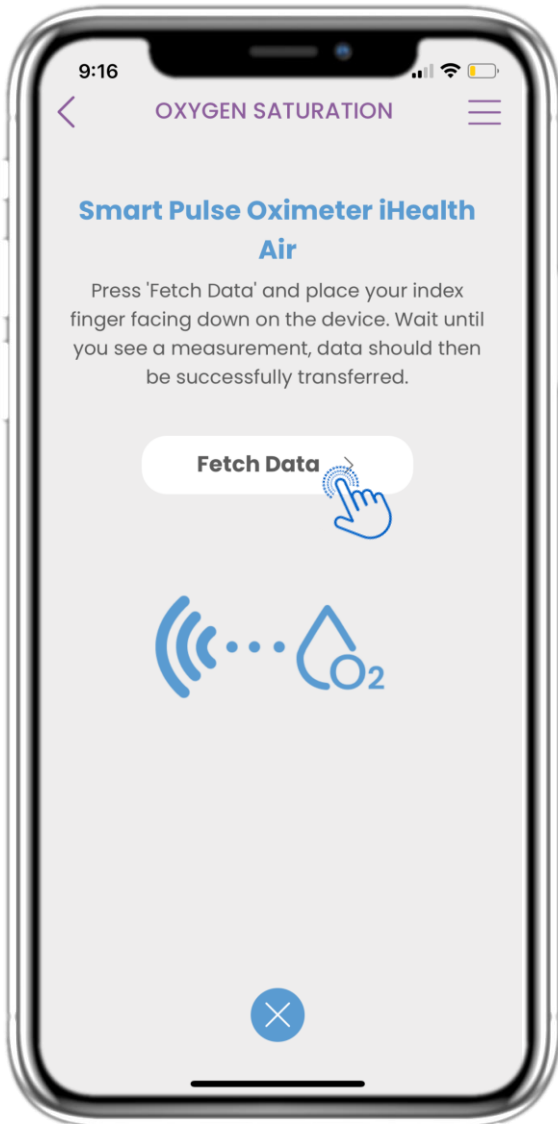

### 4.47 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Nella pagina relativa alla saturazione dell'ossigeno puoi trovare il pulsante per sincronizzare e raccogliere i dati dal dispositivo pulsossimetro intelligente.


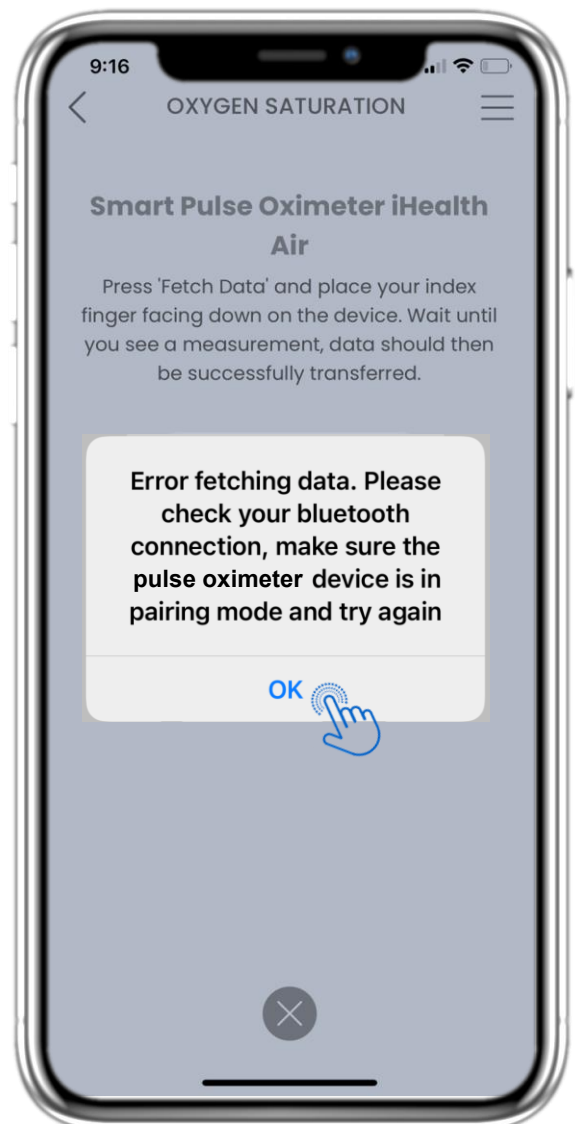


### 4.48 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Se ricevi questa notifica, controlla le impostazioni del tuo cellulare per verificare di aver attivato il Bluetooth e assicurati che il dispositivo pulsossimetro intelligente sia pronto per l'associazione.



## 5 AGGIUNGI REPORT/RISPONDI AI QUESTIONARI

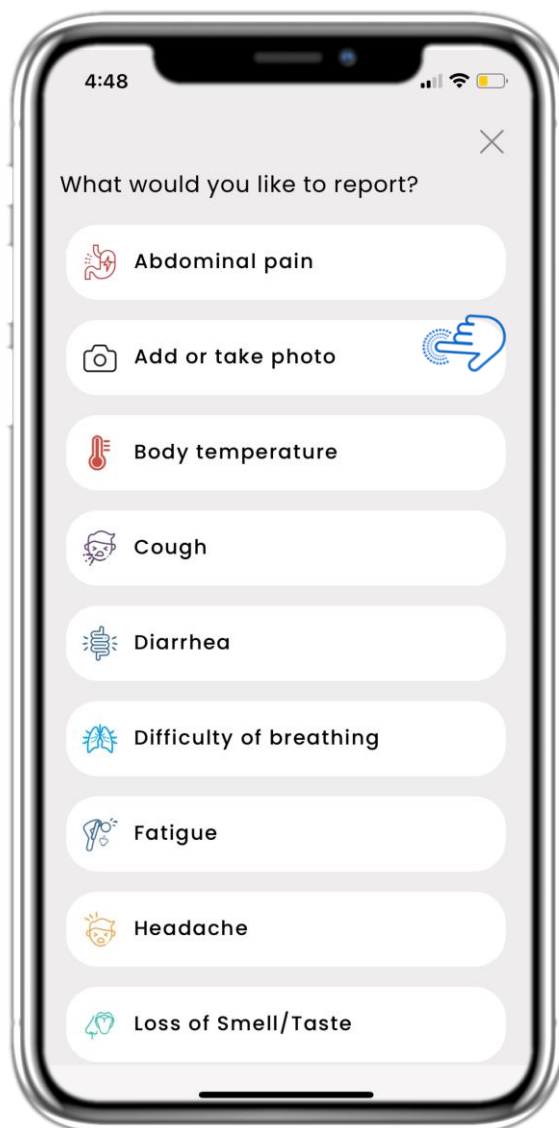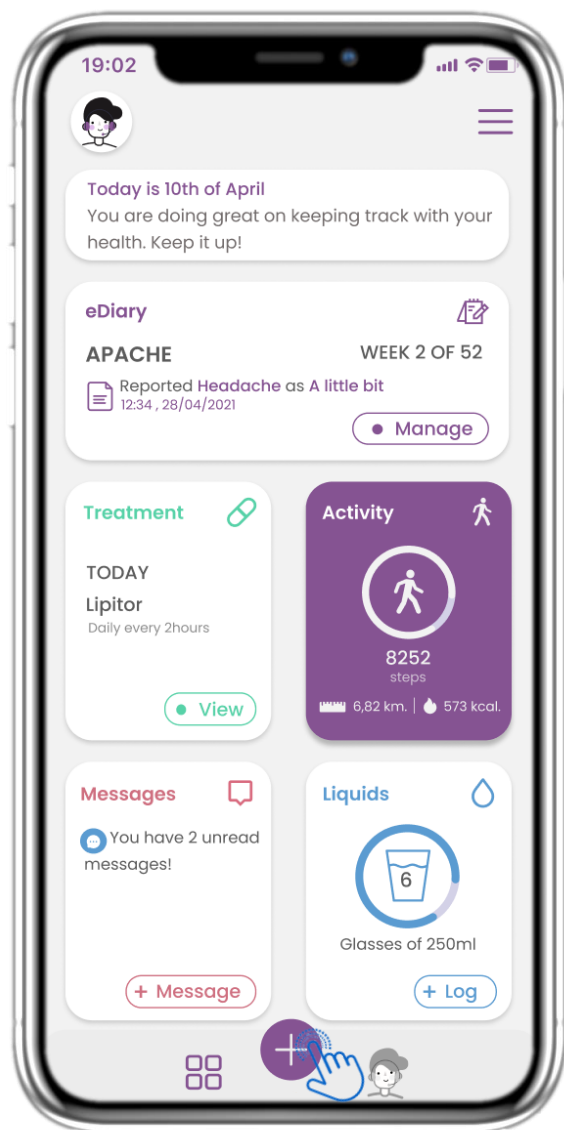

### 5.1 AGGIUNGI SEGNALAZIONI / SINTOMI

Dalla barra inferiore puoi selezionare di aggiungere report.

### 5.2 AGGIUNGI SEGNALAZIONI / SINTOMI

Apri un elenco di questionari disponibili per AGGIUNGERE un report o un sintomo dal menu centrale (+).



## 5. REPORT DI RISPOSTE E QUESTIONARI




### 5.3 REPORT DI RISPOSTE E QUESTIONARI

Rispondi al questionario relativo al sintomo selezionato. Fai clic su AVANTI per continuare il questionario. Fai clic su OK per inviare o su ANNULLA per uscire.




## 6 CHATBOT

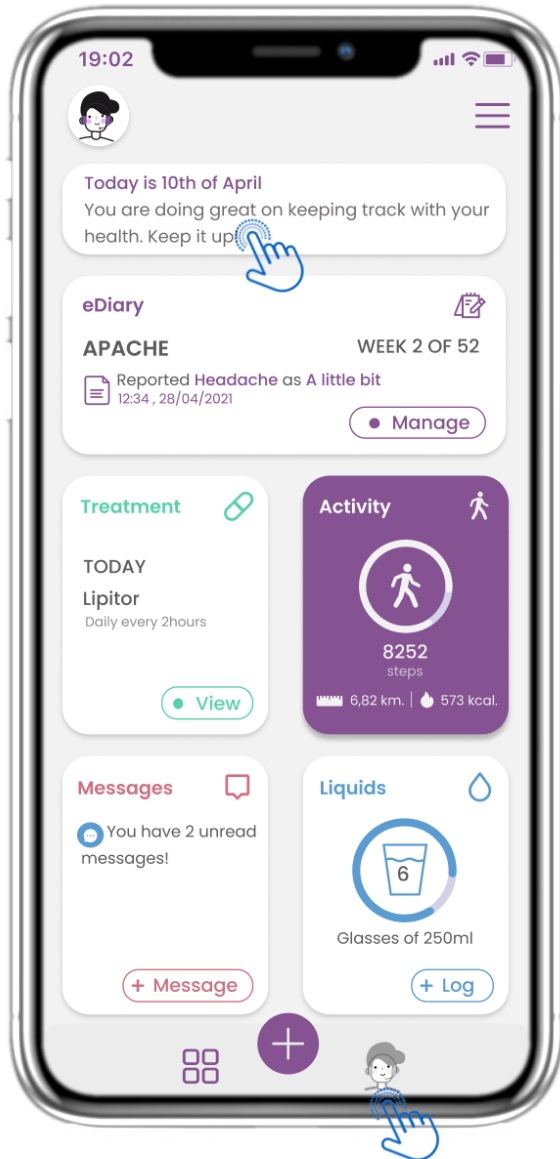

### 6.1 CHATBOT

Dalla barra in basso puoi scegliere se passare al chatbot o al messaggio in alto.


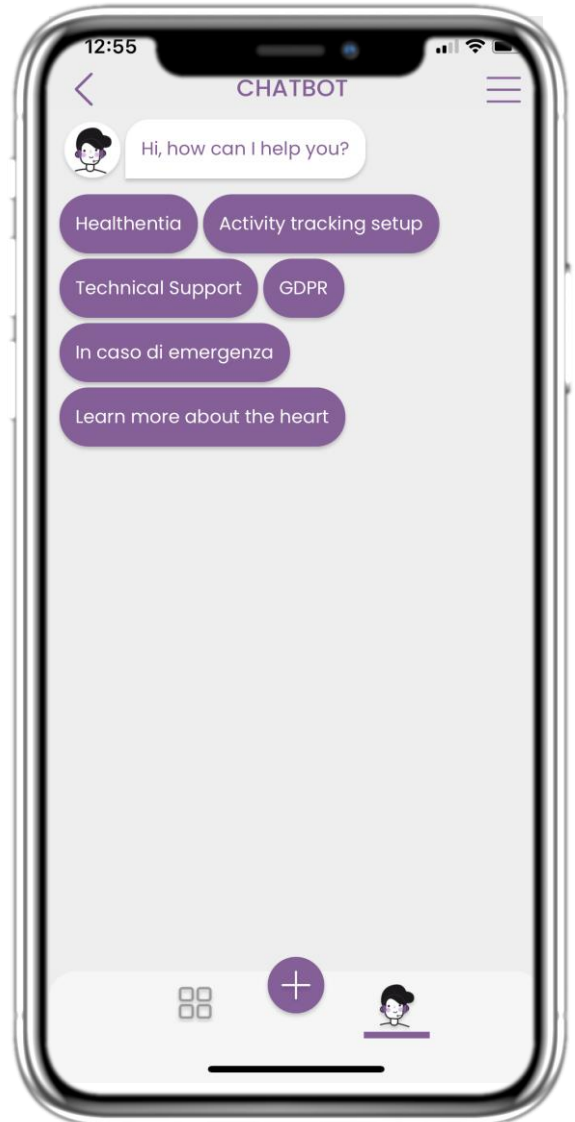


### 6.2 CONVERSAZIONE CHATBOT

Il chatbot ti accoglie e ti mostra i questionari in sospeso. Il chatbot ti offre diverse opzioni di domande e risposte.



## 7 BARRA LATERALE DEL MENU

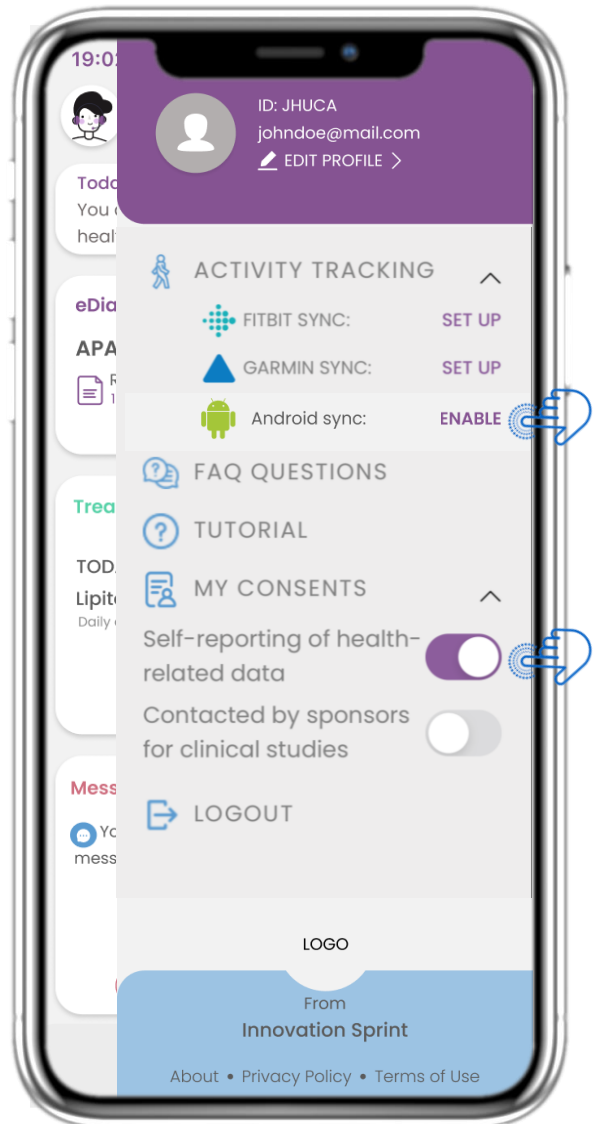
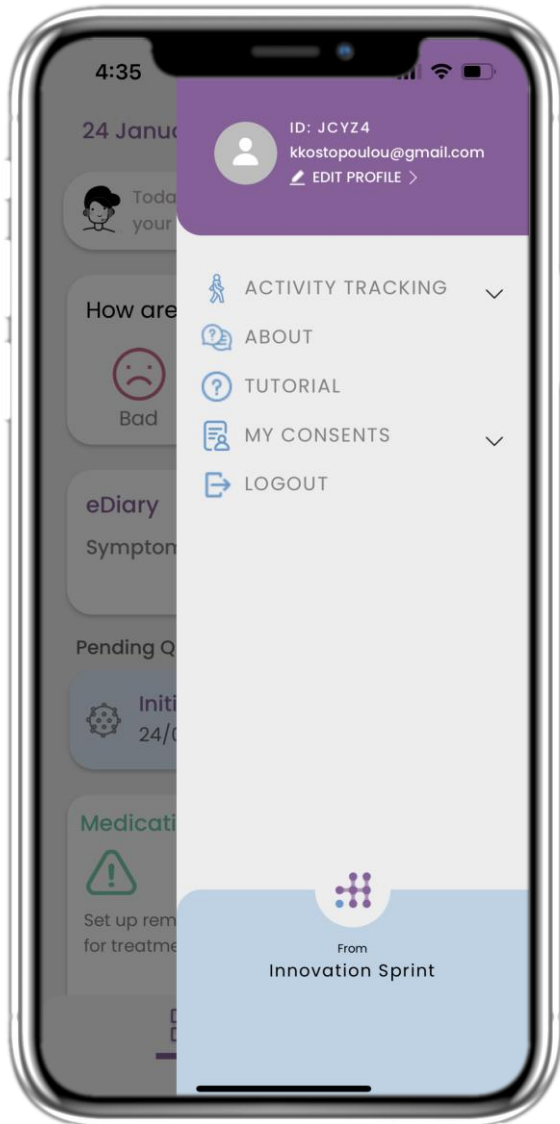


### 7.1 OPZIONI DELLA BARRA LATERALE

Dalla barra dei menu puoi modificare il tuo profilo, impostare il tuo activity tracker e abilitare o disabilitare il consenso esplicito fornito in fase di registrazione. Puoi anche accedere ad alcune pagine di contenuti, come le FAQ.



## 7 MENU – IL MIO PROFILO

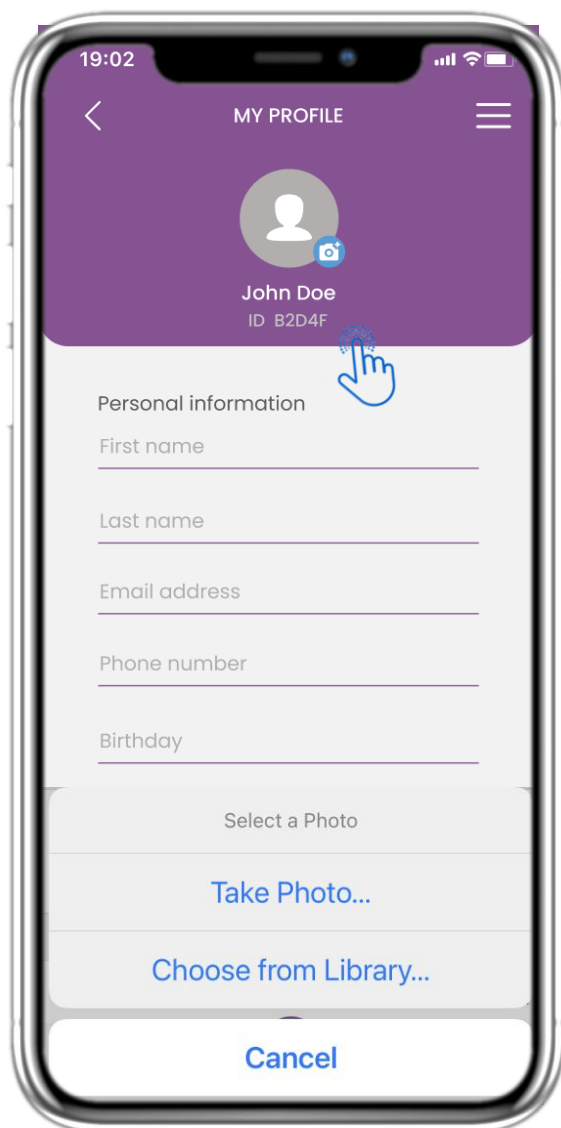
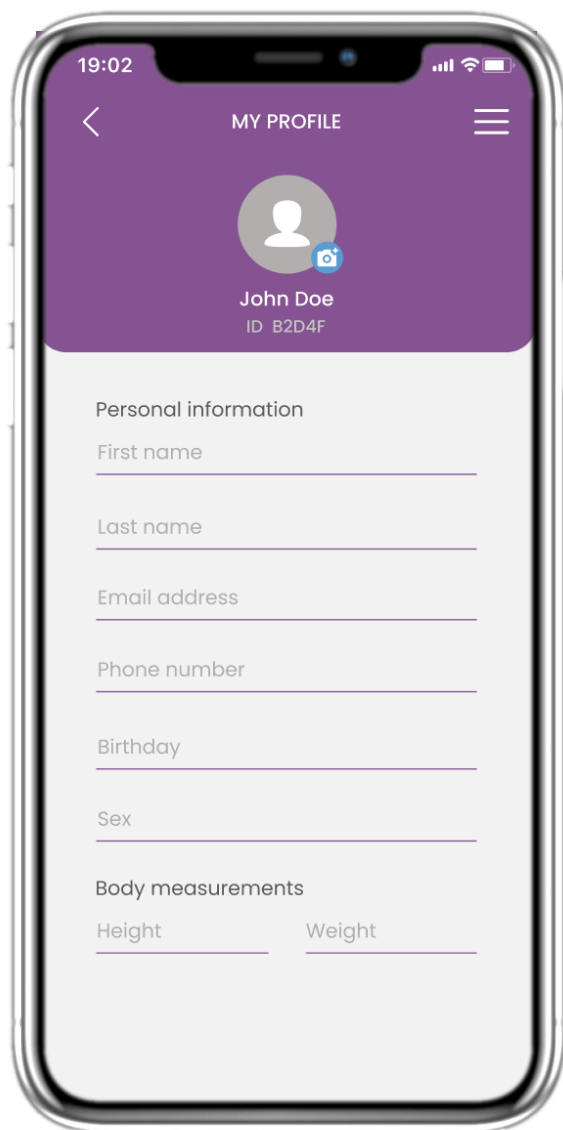


### 7.2 MODIFICA PROFILO

Puoi modificare il tuo profilo e scegliere anche una foto. Il tuo ID è il numero identificativo che verrà utilizzato per comunicare con il medico.



## 7 MENU – CAMBIO LINGUA

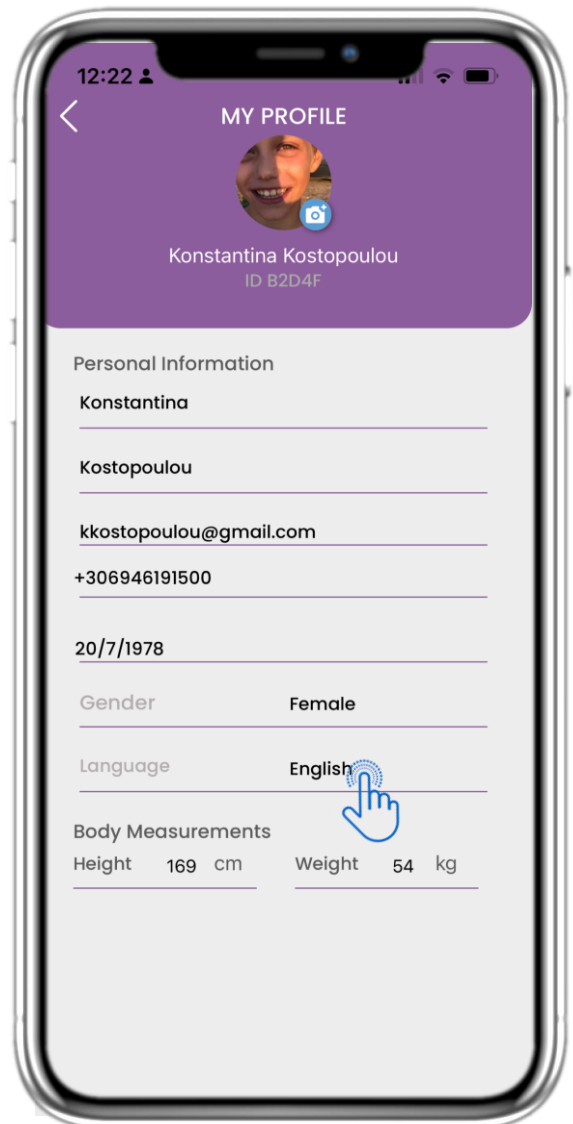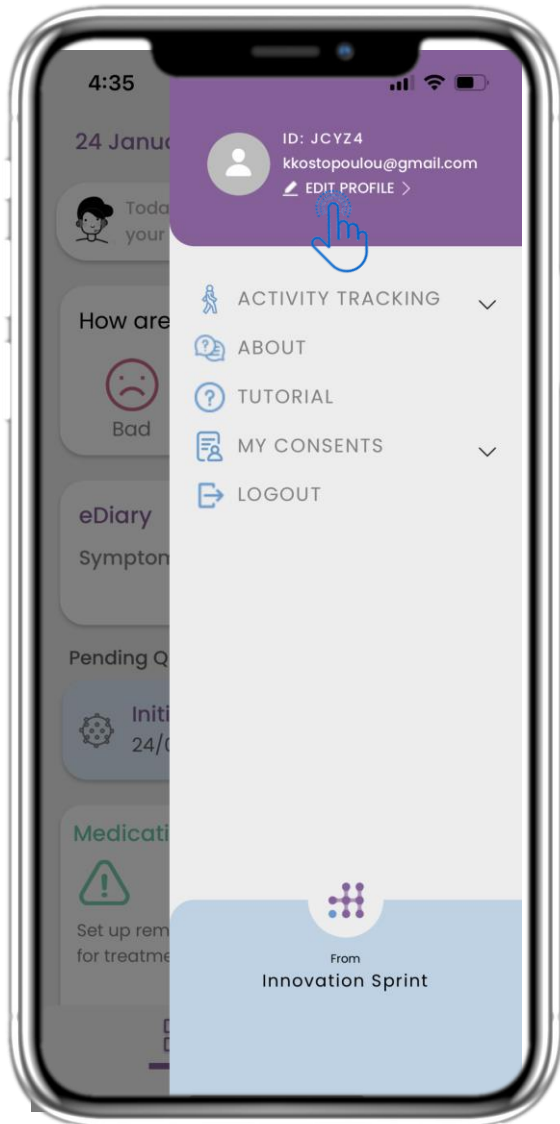

### 7.3 GESTISCI PROFILO


Dal menu Impostazioni vai a Gestisci il tuo Profilo dove puoi modificare i tuoi dettagli

### 7.4 CAMBIO LINGUA

Nella pagina Profilo puoi cambiare la lingua.




## 7 MENU – CAMBIO LINGUA (ESEMPIO)

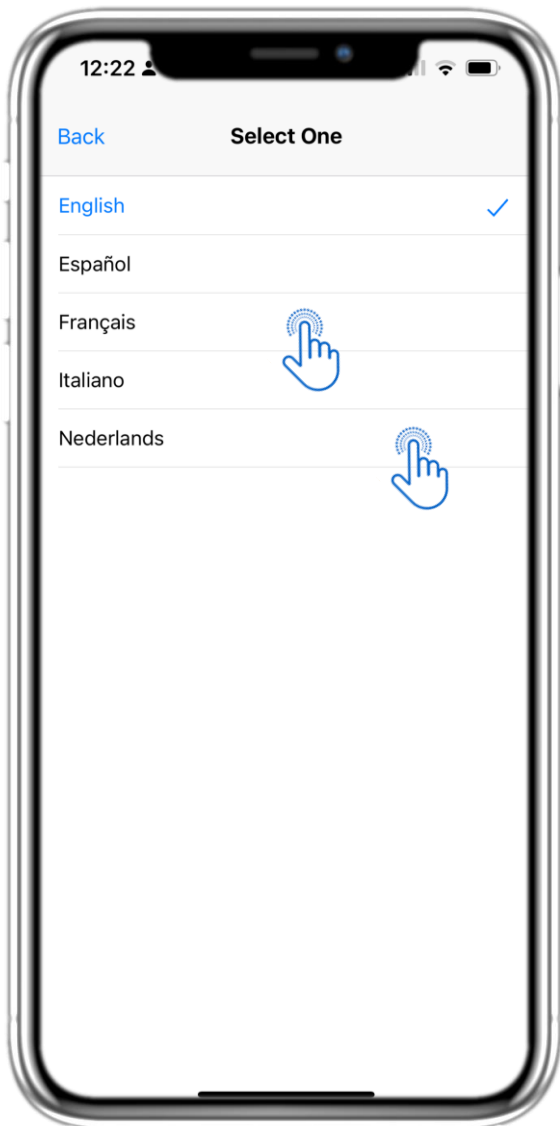

### 7.5 SCEGLI LA LINGUA

Dal menu Impostazioni vai a Gestisci il tuo Profilo dove puoi modificare i tuoi dettagli

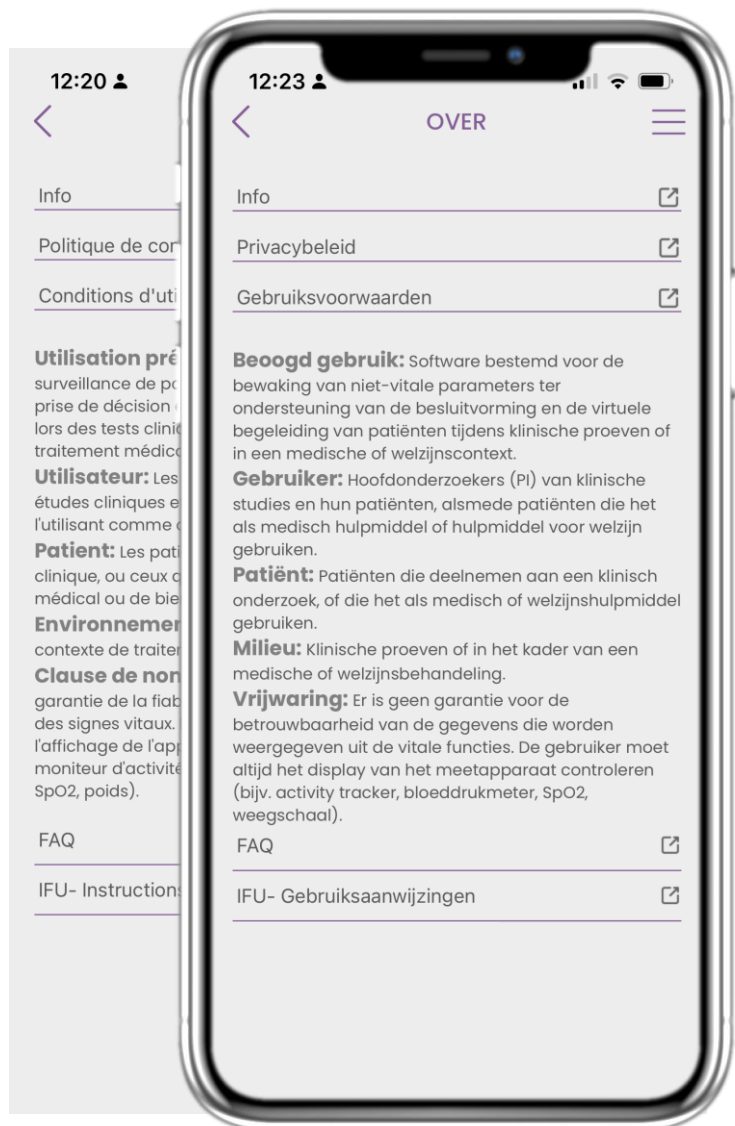


### 7.6 INFORMAZIONI SULLA PAGINA IN FR E NL

Testo tradotto della pagina Informazioni




## 7 MENU – ESCI

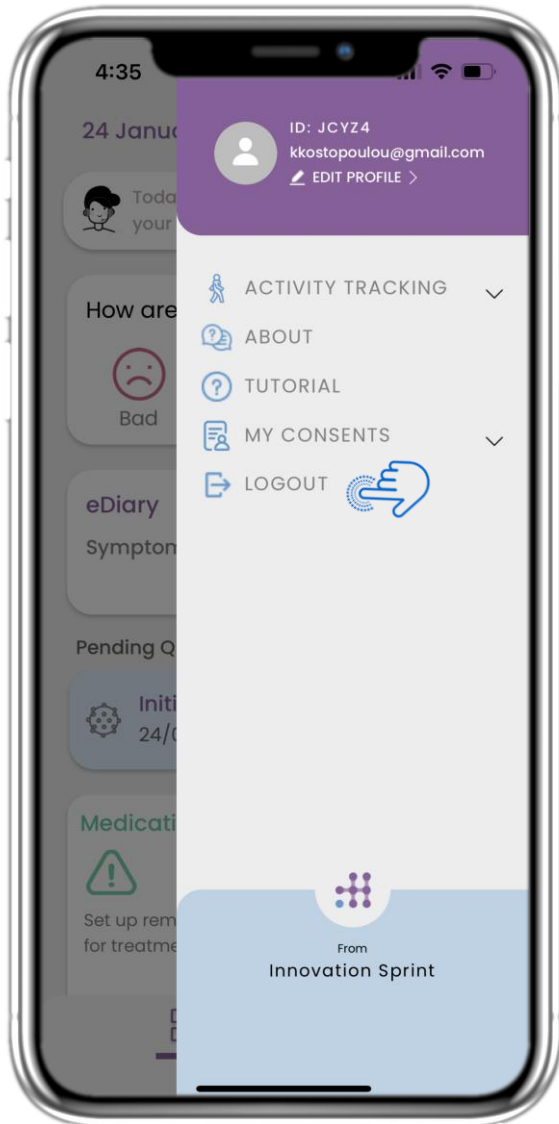

### 7.7 DISCONNETTERSI

Seleziona per DISCONNETTERTI. Ricorda che Healthentia non può tracciare i dati quando sei disconnesso.

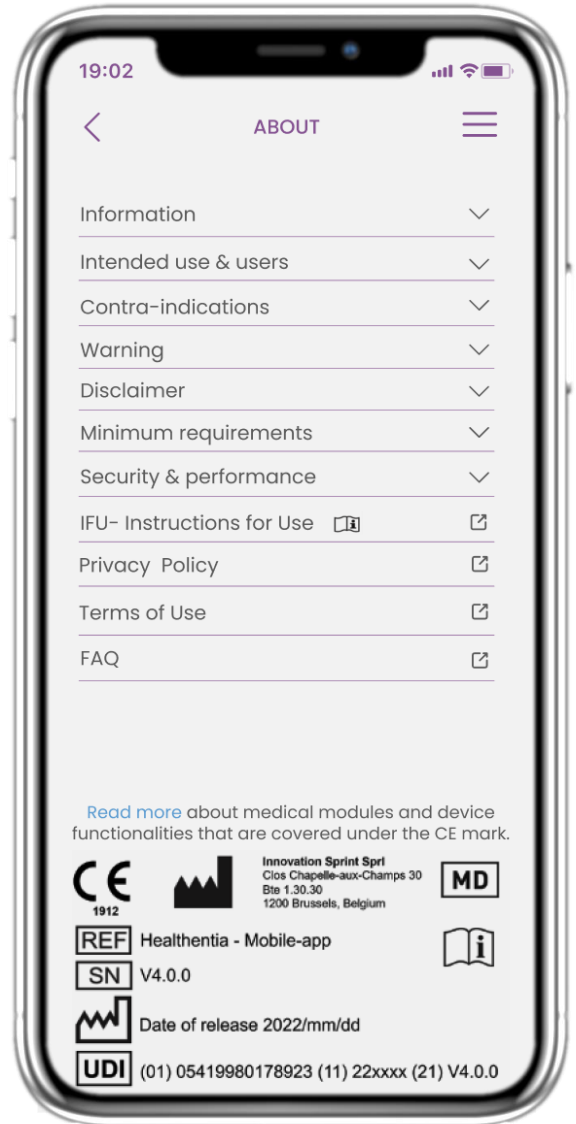

### 7.8 INFORMAZIONI – IFU

Nella pagina INFORMAZIONI puoi trovare tutte le informazioni relative all'utilizzo dell'app Healthentia.

