



Petit Guide de démarrage

PATIENTS



IFU Version v4

INNOVATION SPRINT SRL
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 1.30.30
1200 Brussels, Belgium

REF

Healthentia – Mobile-app

SN

V4.0





Document History

Document Version	Nature of change	Date
2	Updated Supported mobile OS (Minimum Requirements)	01.06.2025
3	Updated part integration with other devices (Withings is added)	22.04.2026
4	Updated part integration with other devices (Fitbit API is replaced by Google Health API)	28.09.2026





INFORMATIONS

L'application Healthentia comprend une collection de modules. Plusieurs modules sont des logiciels médicaux couverts par le marquage CE selon le Règlement Européen 2017/745 :

- **Coaching Virtuel** Permet à l'utilisateur (sujet/patient) d'interagir avec un coach conversationnel incarné à des fins informatives et motivationnelles.
- **Journal électronique**: Le journal électronique permet la présentation de tous les résultats rapportés par le patient, sous forme de liste, regroupés par jour ou par résultat (symptôme). Ainsi, les patients peuvent avoir accès à tout moment à leur journal électronique et voir l'évolution de leurs résultats rapportés.
- **Signes vitaux** : Les signes vitaux sont collectés et consultés par les utilisateurs de l'application mobile à l'aide de widgets.
- **Questionnaires** : Permet à l'utilisateur de communiquer des résultats et des scores de résultats de manière structurée.
- **Consommation de liquides** : Le widget de consommation de liquides donne un aperçu de l'eau consommée.
- **Nutrition** : Le widget nutrition offre la possibilité de voir et de modifier la consommation de différentes catégories d'aliments d'intérêt.
- **Poids** : Le widget poids offre la possibilité d'ajouter manuellement et via une balance numérique, de mesurer et de visualiser le poids.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: <https://healthentia.com>

Pour toute question relative à la confidentialité ou demande, vous pouvez contacter: dpo@healthentia.com

Pour des questions générales, vous pouvez contacter: info@healthentia.com

Signalement d'incident grave

Pour tout incident grave survenu en relation avec l'application médicale Healthentia, vous pouvez contacter le fabricant (Innovation Sprint Srl) à: support@healthentia.com ainsi que l'autorité compétente de votre localité.

Support technique

Le service d'assistance Healthentia est proposé au meilleur niveau d'effort possible. Pour toute demande de support technique, vous pouvez contacter: support@healthentia.com Notre équipe de support vous répondra dans un délai d'un jour ouvrable.

Version papier du mode d'emploi

Si vous souhaitez une version papier du mode d'emploi, veuillez contacter le fabricant à l'adresse e-mail suivante: info@healthentia.com. Elle sera livrée dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.



REF Healthentia – Mobile-app



V4.0





USAGE PRÉVU

L'application Healthentia fait partie de la solution Healthentia, un logiciel destiné à : a) la collecte et la transmission de données physiologiques incluant la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation en oxygène et le poids directement aux prestataires de soins par des moyens électroniques automatisés en combinaison avec des appareils IoT validés ; b) la visualisation (tableaux de bord par sujet) et le traitement mathématique des données (analyse des tendances, alertes) liées aux paramètres physiologiques des sujets atteints de maladies chroniques ; c) la transmission des résultats et scores du patient liés à son état de santé, aux facteurs affectant sa santé, à sa qualité de vie liée à la santé, à sa connaissance de la maladie et à son adhésion au traitement via des questionnaires validés ; d) l'interaction de l'utilisateur (sujet/patient) avec un coach virtuel conversationnel à des fins informatives et motivationnelles, afin de soutenir le télésuivi du sujet, la prise de décision et le coaching virtuel.

Bénéfices cliniques

L'utilisation de Healthentia permet de:

- Fournir des données objectives aux professionnels de santé pour aide au diagnostic.
- Mettre en évidence l'évolution des paramètres physiologiques par l'analyse des tendances des données du patient
- Permettre aux professionnels de santé de fournir la même qualité de soins et de sécurité que le standard de soins.

Indications cliniques

Télésuivi des maladies chroniques (comme l'insuffisance cardiaque, le cancer, la BPCO, etc.)

CONTRE-INDICATIONS

- Healthentia n'est pas destiné au suivi des patients en situations critiques (bloc opératoire, urgences, soins intensifs).
- Toute condition physique ou cognitive qui, selon le jugement clinique, empêcherait le patient d'utiliser Healthentia, par exemple la démence.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.
- L'application Healthentia n'a pas été testée sur la population pédiatrique. Par conséquent, l'application Healthentia est destinée uniquement aux adultes (>18 ans) et ne couvre pas l'utilisation par les enfants sans surveillance.

Groupe cible de patients

Patients atteints de maladies chroniques participant à une investigation clinique ou à un traitement médical

Utilisateurs prévus

Patients télésuivis et leurs professionnels de santé

ENVIRONNEMENT ET DURÉE D'UTILISATION

L'application Healthentia peut être utilisée comme solution de télésurveillance des patients qui sortent de l'hôpital et doivent suivre un certain traitement. La durée dépend de l'étude ou de l'intervention ou de la volonté du patient.

AVERTISSEMENTS

- Healthentia n'est pas surveillé en temps réel par le personnel de santé ; il est destiné uniquement à la communication non urgente. En cas d'urgence, contactez votre unité de soins ou le numéro d'urgence par téléphone.
- Dans certains cas particuliers, les conseils d'auto-soins et les instructions fournis par Healthentia peuvent ne pas être applicables à votre situation.



Healthentia – Mobile-app

V4.0





- Si vous avez des questions concernant vos soins, vos symptômes et leur gestion, contactez votre équipe soignante.
- L'appareil n'est pas destiné à remplacer les soins d'un professionnel de santé, y compris la prescription, le diagnostic ou le traitement.
- La télésurveillance ne remplace pas les contrôles réguliers chez votre médecin. Consultez votre médecin en cas de symptômes graves et persistants.
- En combinaison avec Healthentia, utilisez uniquement des appareils de mesure dont les performances techniques (exactitude, précision) ont été vérifiées par votre prestataire de soins car cela peut affecter le résultat de votre suivi.
- Vérifiez la cohérence de vos données cliniques et leur bon transfert à votre prestataire de soins car la qualité du diagnostic et du traitement repose en partie sur ces informations.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Votre prestataire de soins est responsable de l'évaluation finale de votre diagnostic et de votre traitement. Healthentia fournit des informations pour soutenir la décision diagnostique et thérapeutique, mais le contexte clinique global doit être pris en compte avant toute prise de décision.

Exigences de précision

Les exigences de précision pour les appareils IoT connectés à Healthentia sont listées ci-dessous.

MESURES	Précision minimale
Tension artérielle	<10mmHg (probabilité d'au moins 85%)
SpO2	Arms $\pm 2-3\%$ des valeurs des gaz du sang artériel
Fréquence cardiaque (FCR, max, ...)	$\pm 10\%$ de la fréquence d'entrée ou ± 5 bpm
Poids	$\pm 0.5-1.0$ kg
Activité physique (pas, ...)	n/a
Sommeil	n/a

Intégration avec d'autres appareils

L'application Healthentia est compatible avec d'autres appareils pour collecter des informations sur le mode de vie et les signes vitaux. Les appareils pris en charge destinés *à être utilisés avec Healthentia sont :

- Trackers et montres Garmin via l'API Garmin (Android & iOS)** : Fenix 5 pro, Fenix 6 pro, Forerunner 945, Vivoactive 4, Vivosmart 4, Venu 2S,
- Trackers et montres Fitbit via l'API Google Health (Android & iOS)** : Versa, Inspire 2
- Appareils iHealth via Bluetooth (Android & iOS) : Tensiomètre connecté iHealth Track (KN-550BT), *Balance de composition corporelle intelligente iHealth Fit (HS2S)***, *Oxymètre de pouls intelligent - iHealth Air (POM3)*
- Ceinture Polar via l'API Polar (Android & iOS) : H9**
- Appareils Withings via connectivité cellulaire (Android et iOS) : Tensiomètre intelligent - Withings BPM PRO 2*, BPM PRO*, Balance intelligente de composition corporelle - Withings Body Pro*

*L'appareil a une précision acceptable pour l'usage prévu de Healthentia

** L'appareil n'a pas une précision acceptable pour l'usage prévu de Healthentia et ne peut être utilisé que pour des mesures ne nécessitant pas de précision (par exemple, podomètre, sommeil).

REF

Healthentia – Mobile-app

SN

V4.0





En combinaison avec Healthentia, utilisez uniquement les appareils de mesure prescrits par votre prestataire de soins car cela peut affecter le résultat de votre suivi.

Ces appareils constituent une combinaison sûre et il n'existe actuellement aucune information spécifique sur des restrictions connues concernant les combinaisons.

Healthentia affiche les valeurs en unités métriques internationales (m, kg, s) indépendamment des préférences de l'utilisateur dans son appareil IoT.

EXIGENCES MINIMALES

Matériel pris en charge

Tout smartphone utilisant le système d'exploitation (OS) pris en charge - voir ci-dessous - est un appareil matériel pris en charge.

Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge

L'application Healthentia prend en charge les systèmes d'exploitation suivants sur les plateformes Android et iOS :

- Android : 7.0 et versions ultérieures
- iOS : 15.1 et versions ultérieures

Formation

Aucune formation n'est requise pour utiliser l'appareil en toute sécurité.



Healthentia – Mobile-app

V4.0





SÉCURITÉ & PERFORMANCE

Sécurité

Innovation Sprint s'engage à protéger la sécurité des informations des personnes concernées et prend des précautions raisonnables pour les protéger, notamment contre les accès non autorisés, nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Dans ce contexte, Innovation Sprint évalue et examine régulièrement les technologies, les installations, les procédures et les risques potentiels pour maintenir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs, en accordant une attention particulière à l'accès basé sur les rôles et à la journalisation des accès aux données de santé. De plus, tout changement potentiel des applications logicielles, des services fournis et/ou des systèmes matériels est dûment justifié, évalué et enregistré selon les meilleures pratiques et normes internationales.

- Évitez d'utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour vous connecter à Healthentia lorsque vous êtes sur le point d'ajouter et/ou de gérer des données de santé et/ou vos détails de profil.
- N'utilisez pas d'appareils jailbreakés.
- Les mots de passe doivent comporter au moins huit (8) caractères et contenir des caractères de trois des quatre groupes suivants : Lettres minuscules, Lettres majuscules, Chiffres (0-9), Caractères spéciaux.
- Ne stockez jamais vos mots de passe sur vos appareils.
- Changez vos mots de passe au moins tous les six mois.
- Installez un programme anti-malware sur vos appareils et mettez-le à jour régulièrement.
- Assurez-vous que chaque e-mail que vous enregistrez dans Healthentia vous correspond.
- Ignorez et supprimez les messages d'origine douteuse et ne suivez pas les liens qui incluent et renvoient vers des sites web.
- Ne révélez pas par téléphone, e-mail, formulaire Internet ou médias sociaux des informations confidentielles telles que votre nom d'utilisateur, mot de passe.
- Utilisez toujours les versions les plus récentes du système d'exploitation de votre appareil et de l'application Healthentia.
- Il est suggéré à l'utilisateur de maintenir le paramètre Bluetooth en mode "non découvrable" (transmission désactivée) et de passer en mode "découvrable" uniquement lorsqu'il souhaite l'utiliser.
- L'utilisateur devrait éviter de stocker des informations critiques (identifiants de compte) sur ses appareils Bluetooth.
- Si l'utilisateur va se connecter à un appareil via Bluetooth, il est fortement suggéré d'activer cette connexion dans un endroit sûr.

Performance

Fournir des données objectives aux professionnels de santé pour soutenir le diagnostic et la prise en charge du patient;

Mettre en évidence l'évolution des paramètres physiologiques par l'analyse des tendances des données du patient;

Augmenter l'adhésion du patient au traitement.




Healthentia – Mobile-app

V4.0



1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

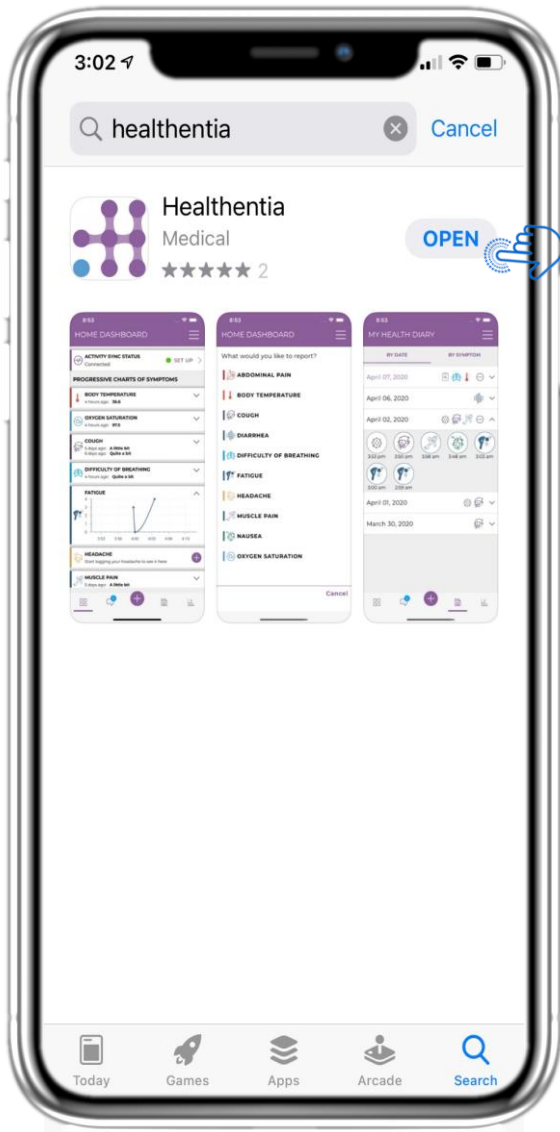

Téléchargez l'application Healthentia à partir de l'AppStore iOS ou du Play Store Google.




2 BIENVENUE / S' INSCRIRE



2.1 PAGE D'ACCUEIL

Page d'accueil de Healthentia avec l'utilisation prévue du dispositif médical. Options pour Démarrer ou Se connecter.

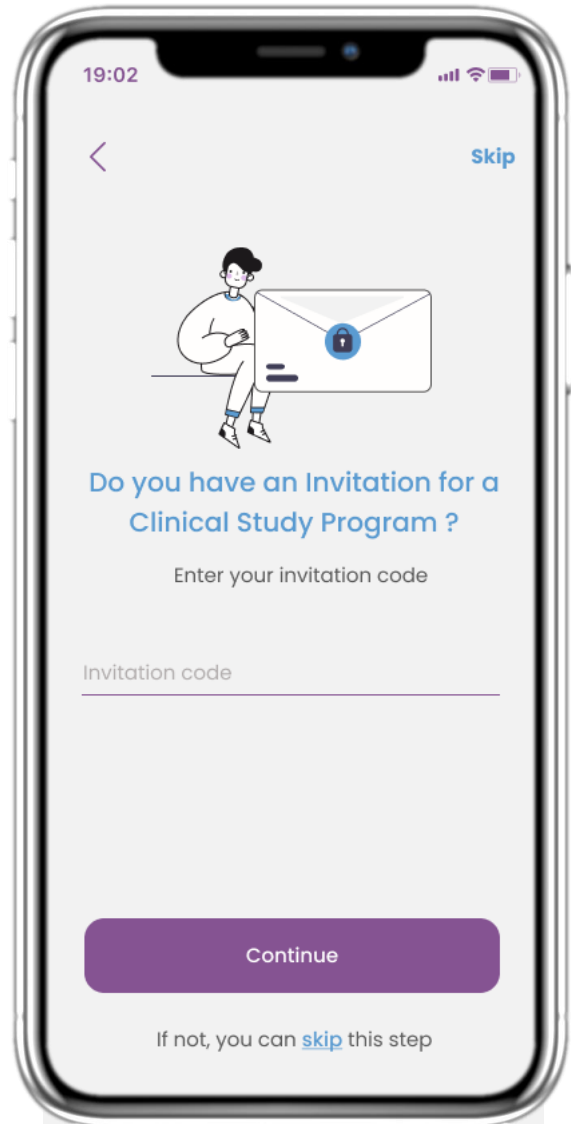

2.2 CODE D'INVITATION

Si vous avez reçu un code d'invitation, vous pouvez l'entrer ici ou bien passer cette étape.



2 QUESTIONNAIRE D'INTÉGRATION

19:02

STEP 1/4

Create a new account

E-mail Address

Password

Confirm password

Continue

2.3 S'INSCRIRE

Enregistrer un nouveau compte avec une adresse électronique et un mot de passe fort.

19:02

STEP 2/4

Skip

Enter your weight and height

Weight 63.5 KG

Height 1.75 CM

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

• 0 X

2.4 ENTER WEIGHT-HEIGHT

Ajoutez votre poids et votre taille à votre profil.



2 QUESTIONNAIRE D'INTÉGRATION

19:02

STEP 3/4

Skip

Select your gender

Male Female

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

2.5 SÉLECTIONNEZ LE SEXE

Choisissez votre sexe pour votre profil.

19:02

STEP 4/4

Skip

Select your date of birth

Day Month Year

DD MM YYYY

Finish


*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

2.6 CHOISIR LA DATE DE NAISSANCE

Choisissez votre date de naissance pour votre profil.




2 CONSENTEMENT / AUTORISATIONS

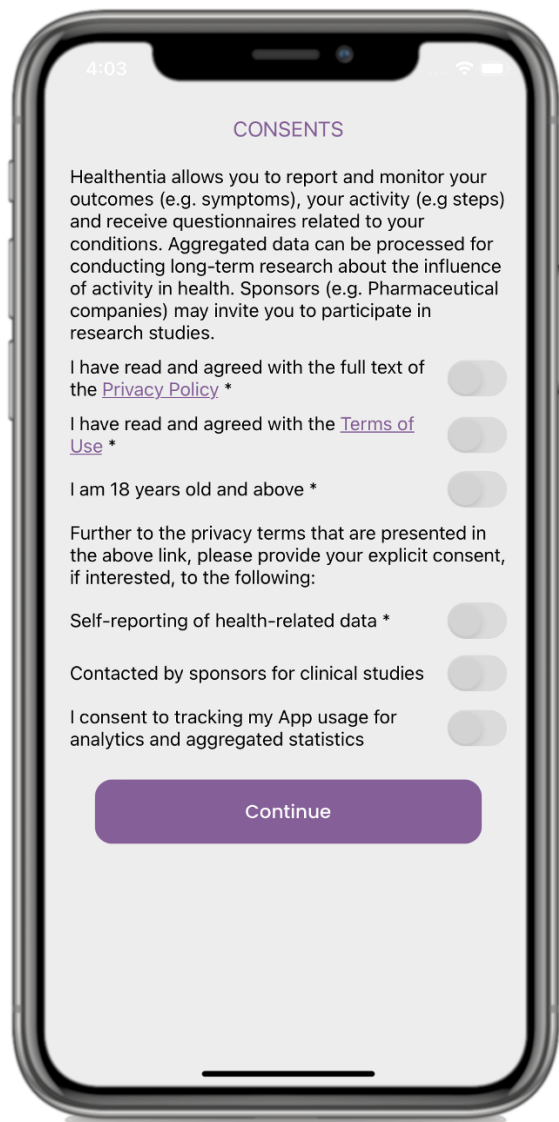

2.7 PAGE DE CONSENTEMENT


Sélectionnez si vous acceptez de partager vos données de manière anonyme à des fins de recherche. Lisez et acceptez les conditions et la politique de confidentialité de Healthentia et indiquez vos préférences concernant les consentements explicites.

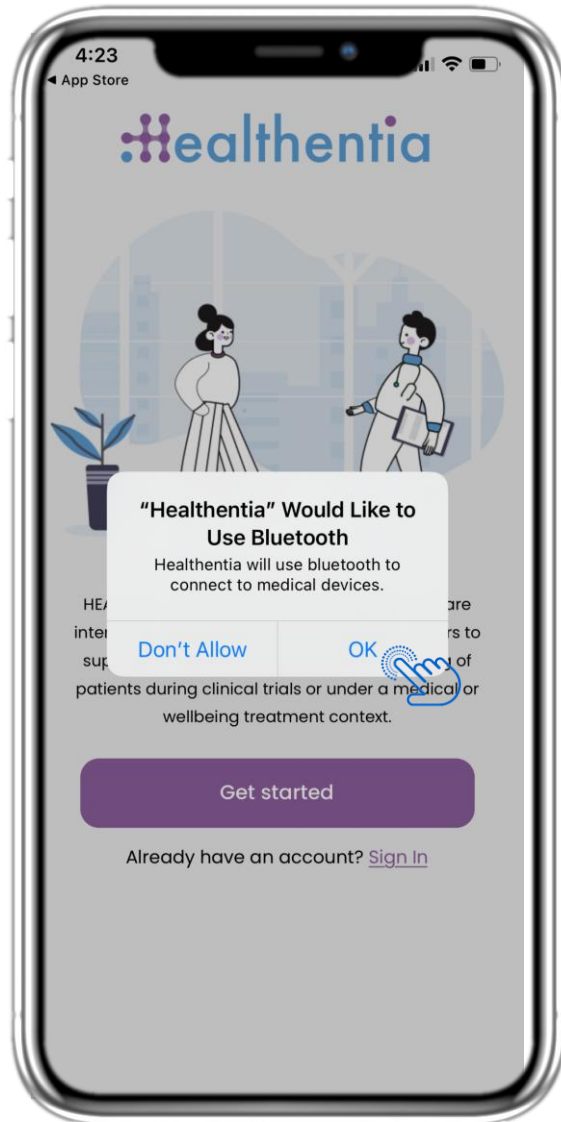

2.8 NOTIFICATION D'AUTORISATIONS


Autorisez l'application Healthentia à vous envoyer des notifications, à utiliser Bluetooth et à vous connecter à d'autres appareils.

3 NOTIFICATIONS PUSH & ACCUEIL

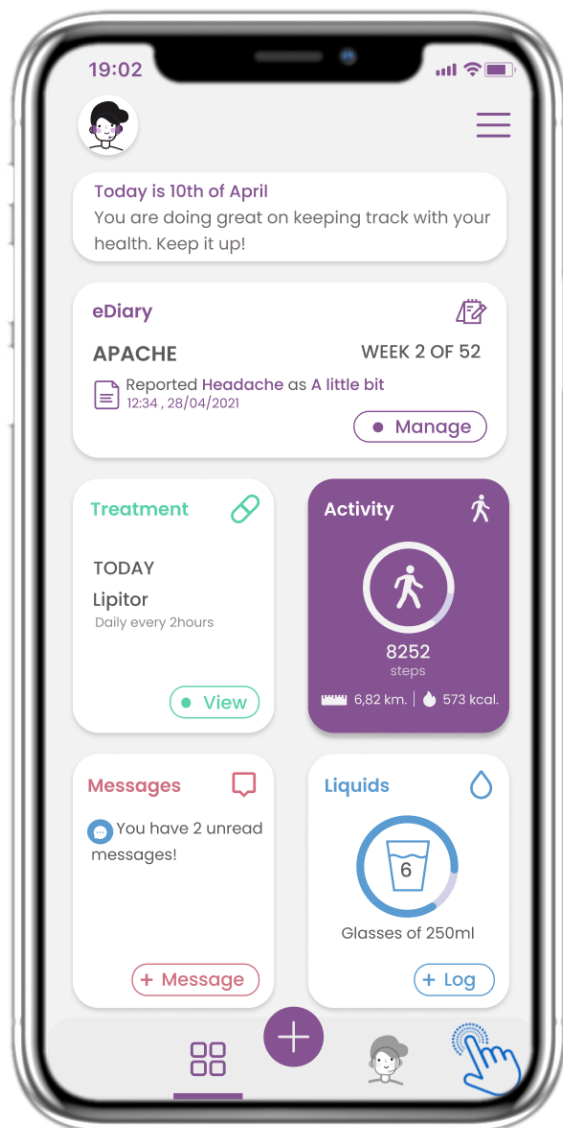

3.1 ACCUEIL

Dans la page d'accueil, vous êtes accueilli par le chatbot qui annonce les questionnaires. Ci-dessus vous trouverez les différents widgets configurés pour l'étude spécifique.

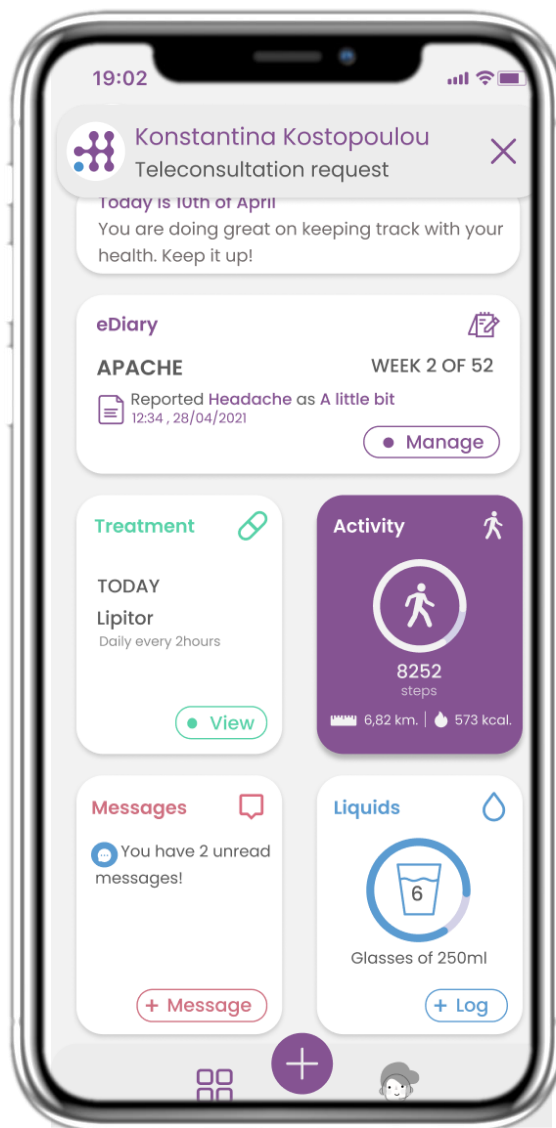


3.2 NOTIFICATIONS PUSH

Healthentia vous demande d'autoriser les notifications à travers vos paramètres et pouvoir ainsi de recevoir des rappels de questionnaire et de traitement.




3 NOTIFICATIONS PUSH & ACCUEIL

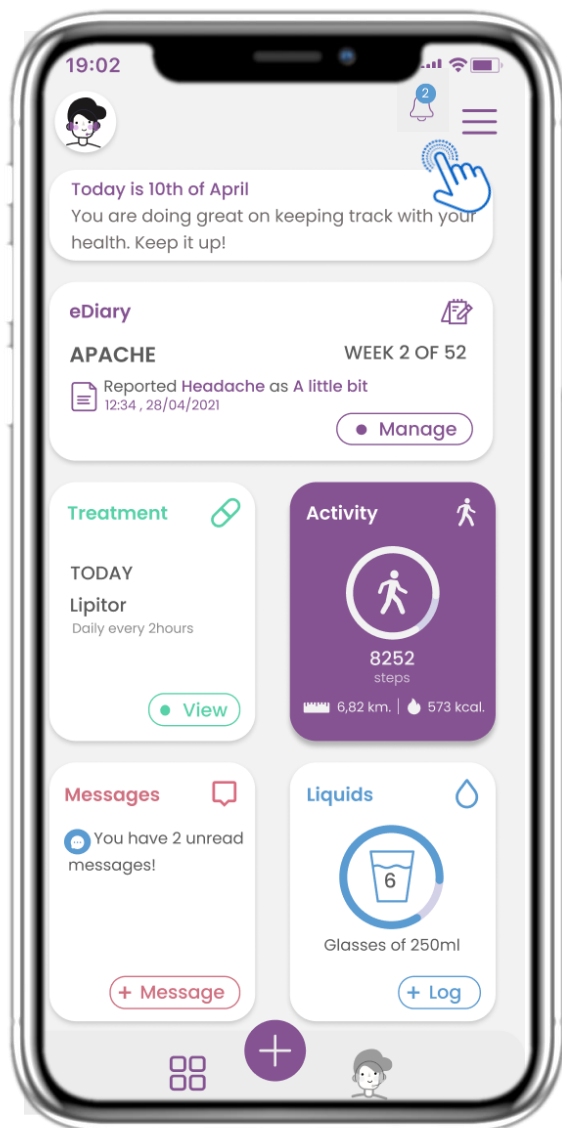

3.3 ACCUEIL

Sur la page d'accueil, vous pouvez voir les questionnaires en attente sous forme de notifications dans le coin supérieur droit avec une icône en forme de cloche.

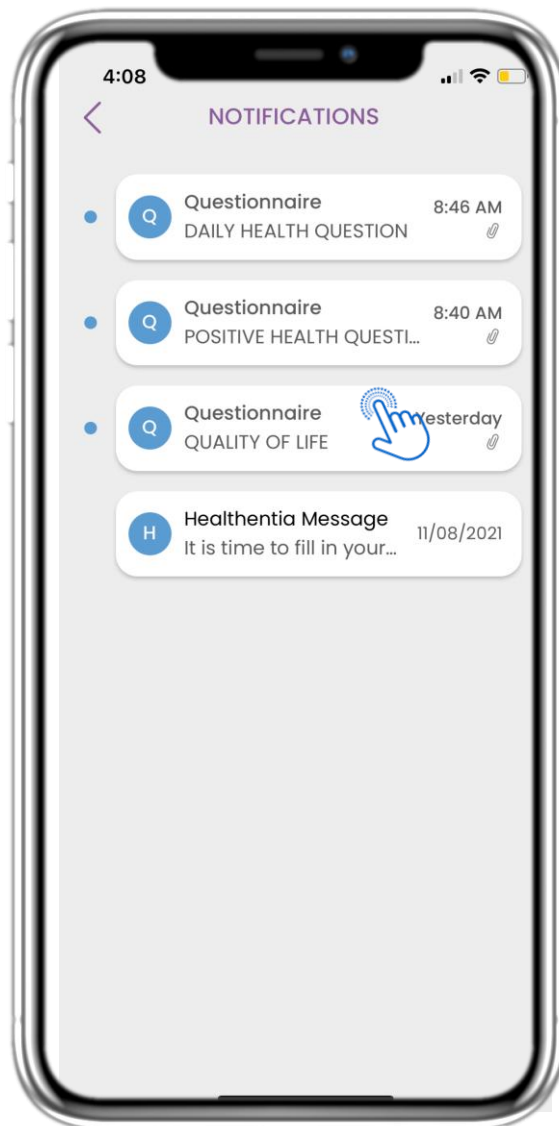

3.4 NOTIFICATIONS PUSH

Sur la page des notifications, vous trouverez une liste des questionnaires en attente que vous devez remplir.



3 NOTIFICATIONS PUSH & ACCUEIL




3.5 FORCED UPDATE

Lorsqu'une nouvelle version de l'application nécessitant une mise à jour obligatoire est disponible, les patients voient les informations ci-dessus et ne peuvent pas utiliser l'application, sauf s'ils cliquent pour la mettre à jour.




4 WIDGETS ACCUEIL

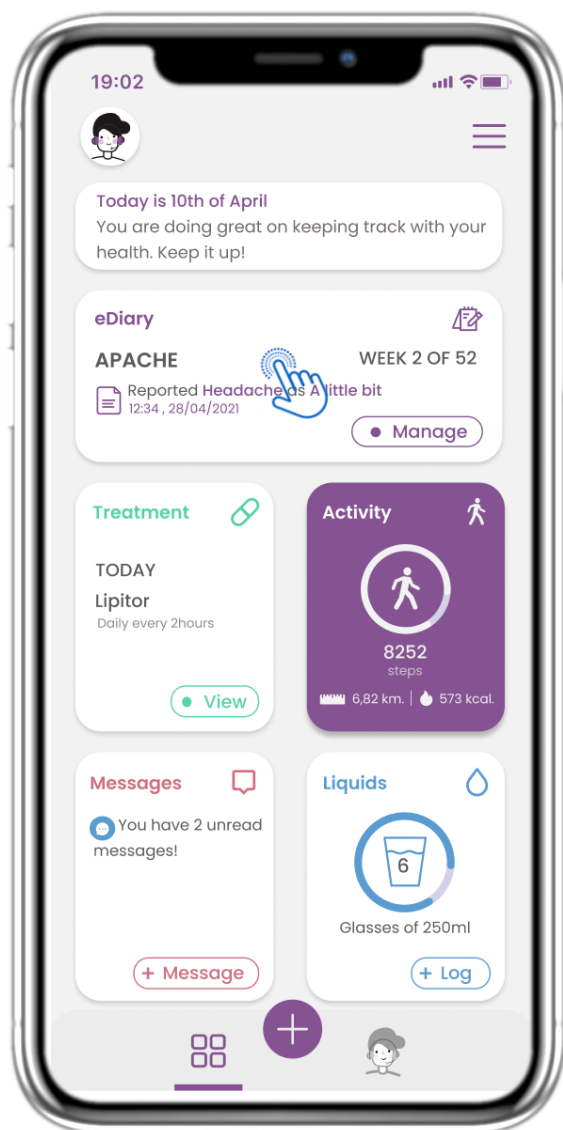

4.1 WIDGET DE eDIARY

Dans la page ACCUEIL, vous pouvez trouver le widget eDiary qui peut être utilisé comme journal de votre étude ou suivi de votre thérapie.

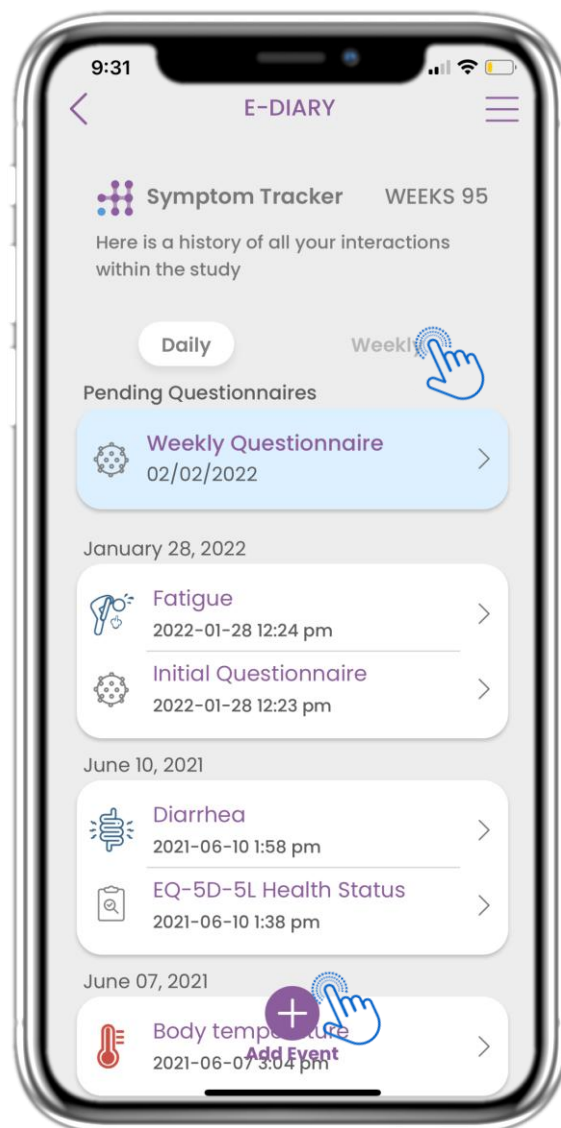

4.2 PAGE DE eDIARY

Sur la page eDiary, vous pouvez consulter une mise à jour quotidienne et hebdomadaire de vos rapports et des questionnaires soumis. Vous pouvez également utiliser le bouton (+) pour ajouter un nouvel événement.



4 WIDGETS ACCUEIL



4.3 eDIARY CONNAISSANCES

Si l'étude permet de montrer des graphiques de symptômes à l'utilisateur, il y aura un bouton pour ouvrir cette page. Avec le calendrier, vous pouvez reculer et remonter les semaines.


The screenshot shows the 'Cough' screen of the Healthentia app. At the top, the date and time are '09/04/2020 16:15'. Below this, the title 'Cough' is displayed. The screen contains a questionnaire with the following text: 'Do you have a cough?' followed by the answer 'A little bit'. Below this, it says 'Define your cough type:' followed by the answer 'Dry'. There is a close button (X) in the top right corner.

4.4 VOIR LES RÉPONSES SOUMISES

Vous pouvez consulter les questionnaires soumis avec les réponses.




4 WIDGETS ACCUEIL

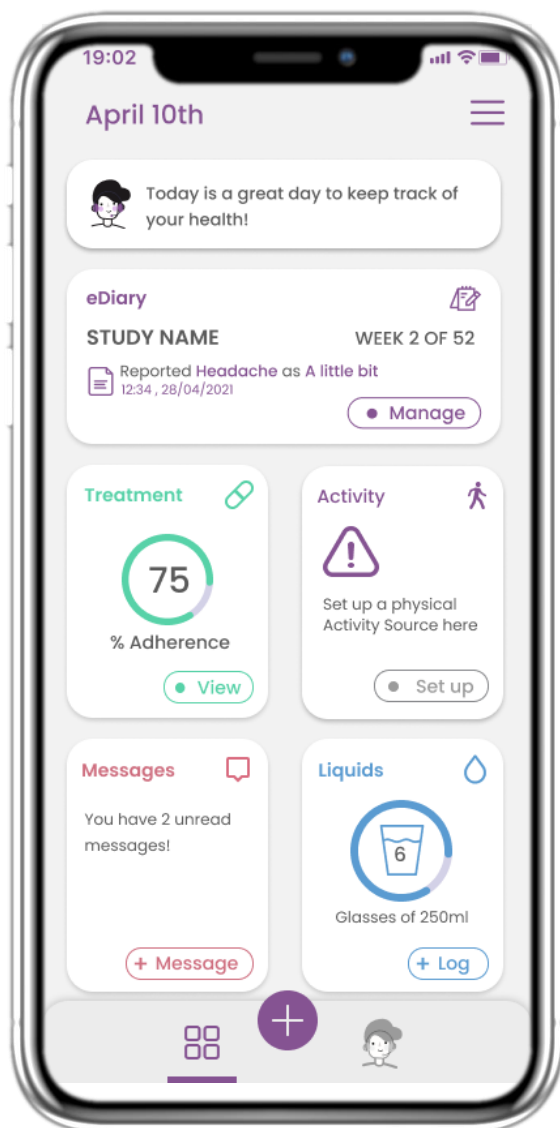

4.5 WIDGET MÉDICAMENT

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget des médicaments, qui vous permet de configurer votre plan de traitement.

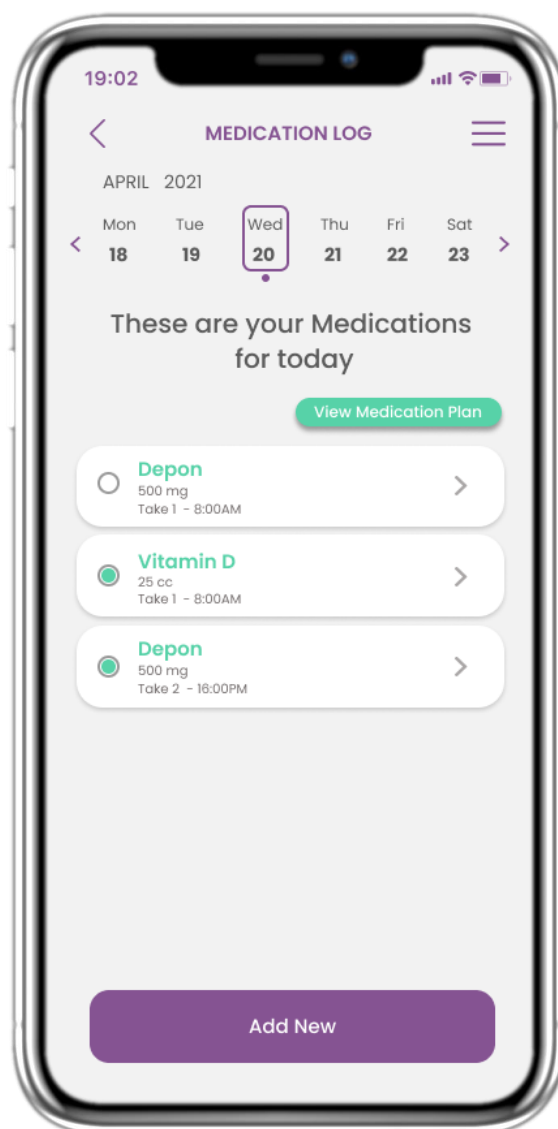


4.6 JOURNAL DES MÉDICAMENTS

Sur la page du journal des médicaments, vous pouvez consulter un planning quotidien de vos prises de médicaments. Vous pouvez les modifier ou en ajouter de nouvelles.




4 WIDGETS ACCUEIL

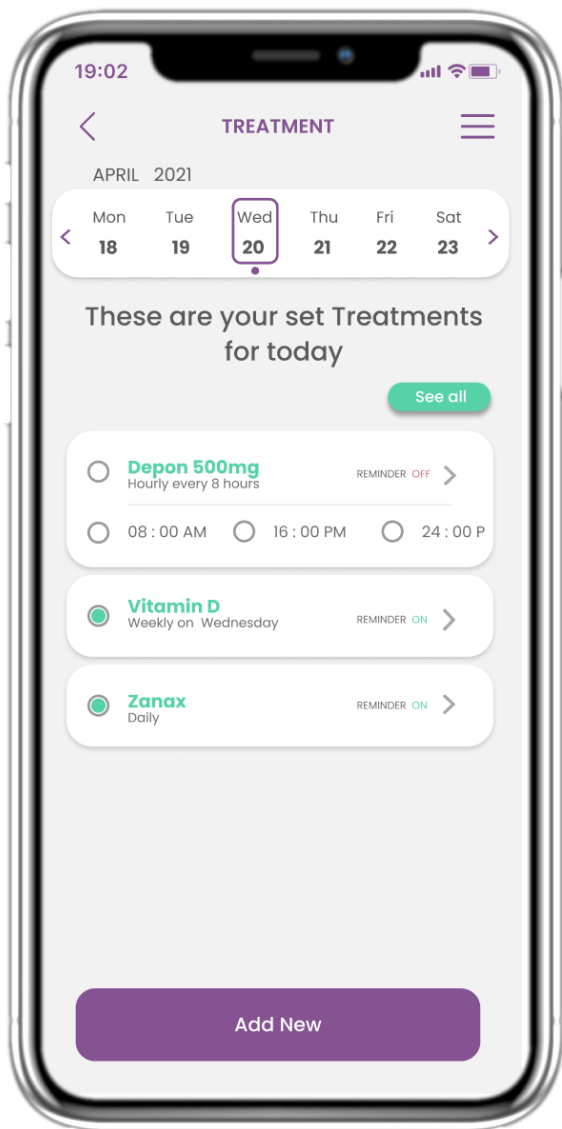

4.7 VOIR TOUS LES MÉDICAMENTS

Dans la page des traitements, vous pouvez accéder tous vos traitements et les configurer.

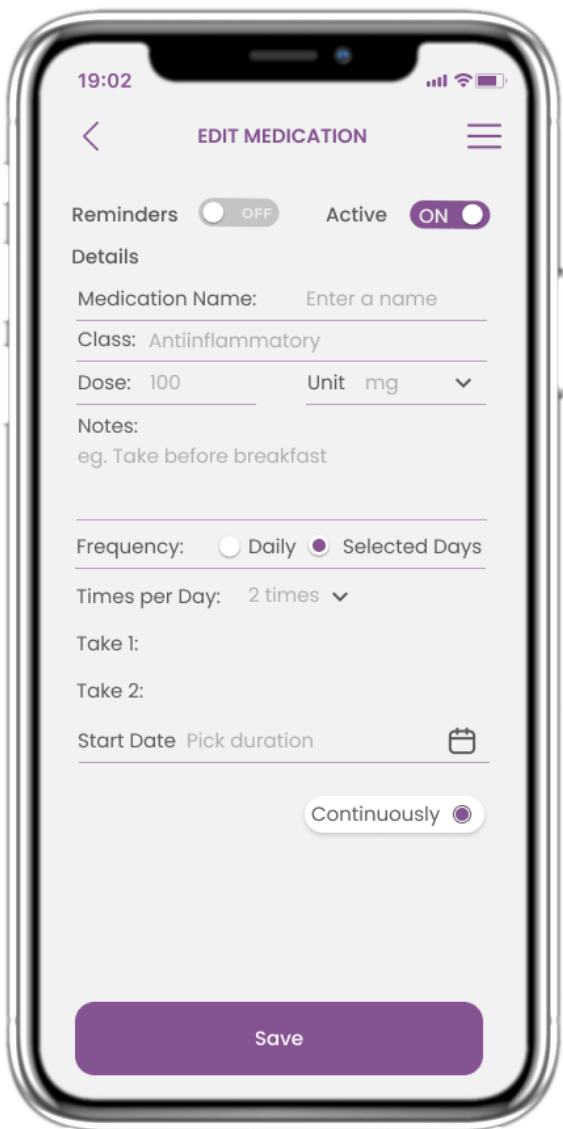

4.8 AJOUTER/MODIFIER UN NOUVEAU MÉDICAMENT

Sur la page Nouveau Médicament, vous pouvez configurer un nom, une fréquence, une durée pour vos médicaments et ajouter un rappel.




4 WIDGETS ACCUEIL



4.9 ACTIVITÉ

Dans la page ACCUEIL, vous pouvez trouver le widget d'Activité qui peut être utilisé pour configurer votre tracker.

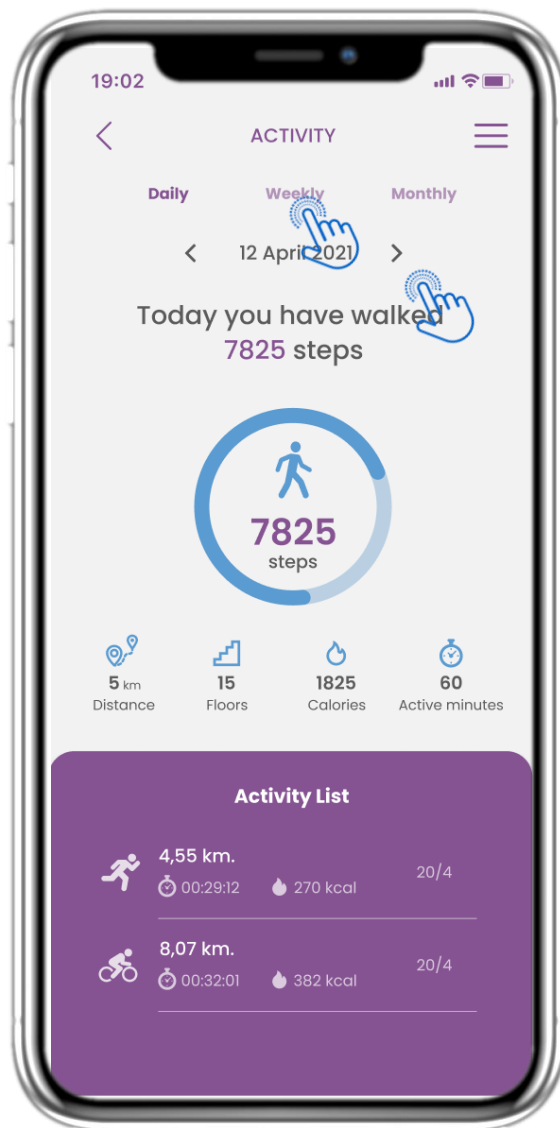


4.10 PAGE D'ACTIVITÉ

Dans la page Activité, vous pouvez surveiller les pas quotidiens, la distance, les étages, les calories et les minutes actives. Avec le calendrier, vous vous déplacez entre les jours et en appuyant sur chaque semaine, vous accédez aux graphiques.




4 WIDGETS ACCUEIL

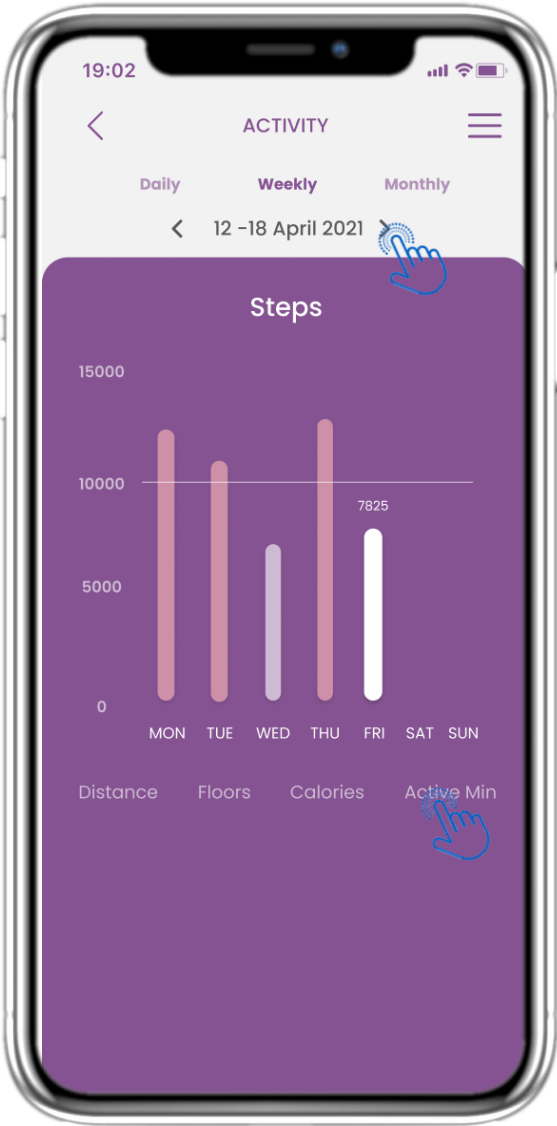

4.11 GRAPHIQUES D'ACTIVITÉ

Dans la page des graphiques d'activité hebdomadaire, vous pouvez trouver les étapes hebdomadaires, la distance, les étages, les calories et les minutes actives.

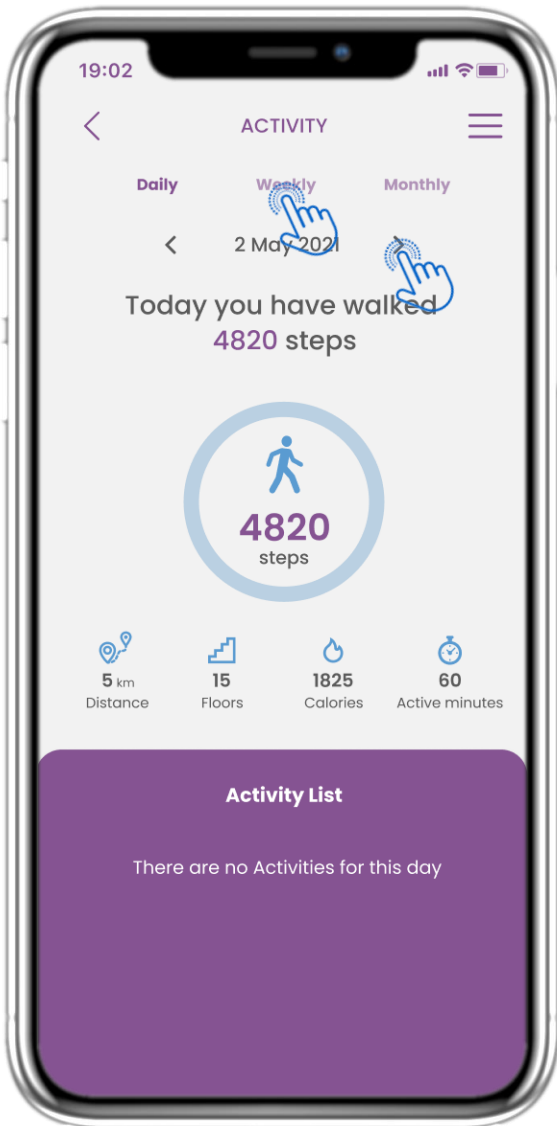


4.12 PAGE D'ACTIVITÉ

Aucune activité collectée sur le portable.




4 WIDGETS ACCUEIL

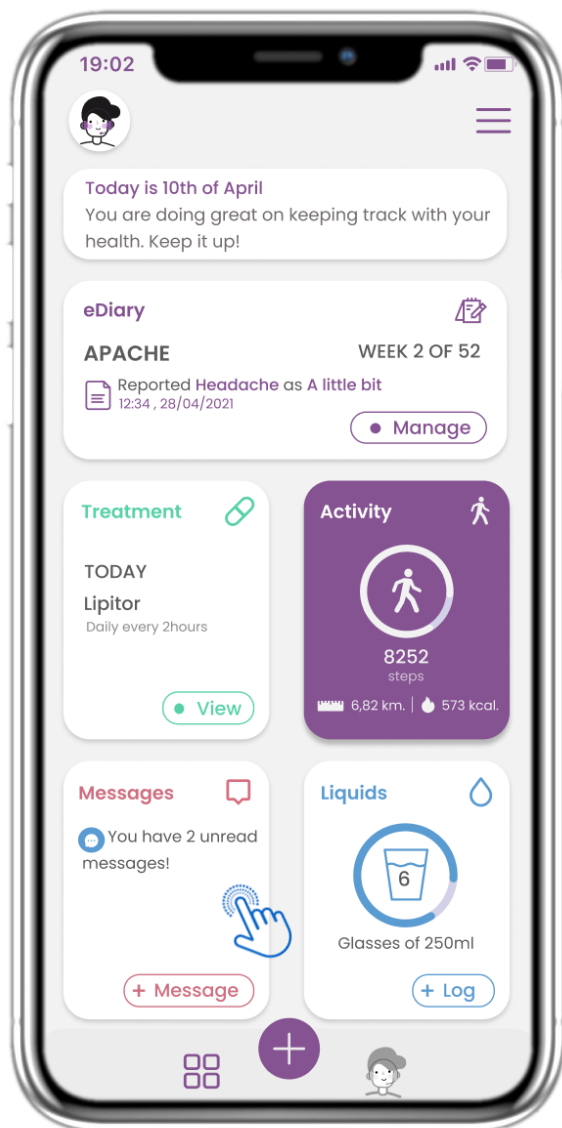

4.13 MESSAGES

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Messages, qui permet de contacter votre médecin ou hôpital et d'accéder à une téléconsultation.

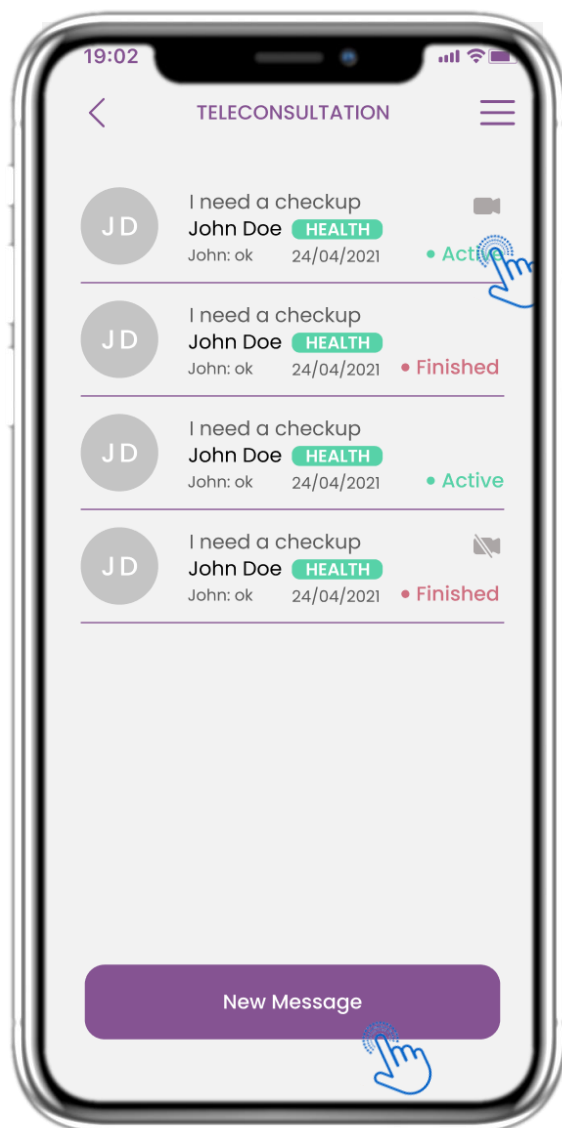


4.14 PAGE DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION DES MESSAGES

Sur la page Messages, vous pouvez voir votre communication avec le professionnel de santé, créer un nouveau message ou accéder à la salle de téléconsultation.




4 WIDGETS ACCUEIL

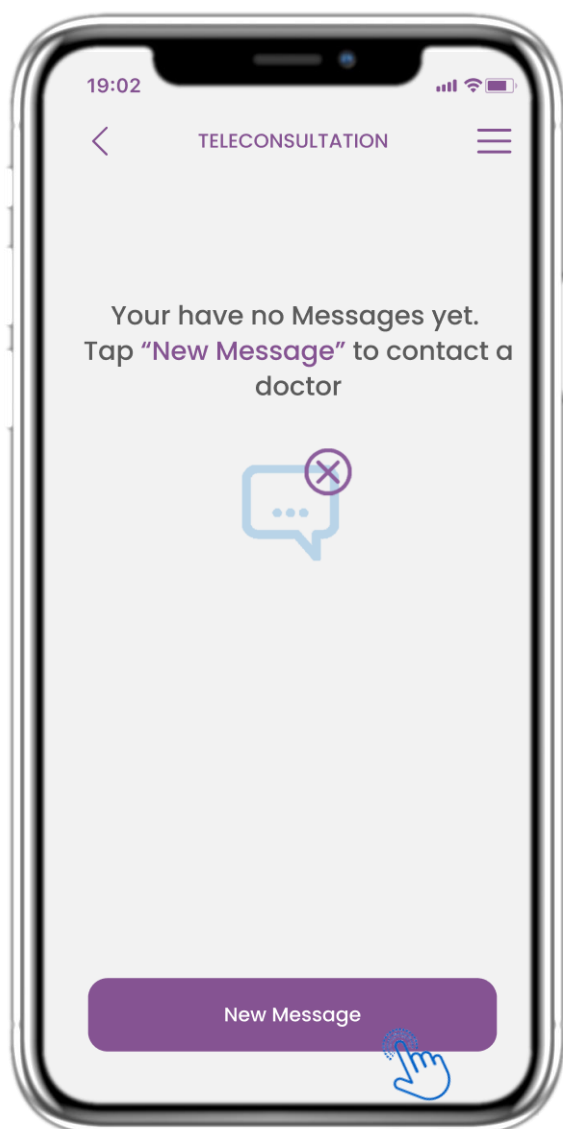

4.15 PAS DE MESSAGES

S'il n'y a pas de messages, voici à quoi ressemble la page.

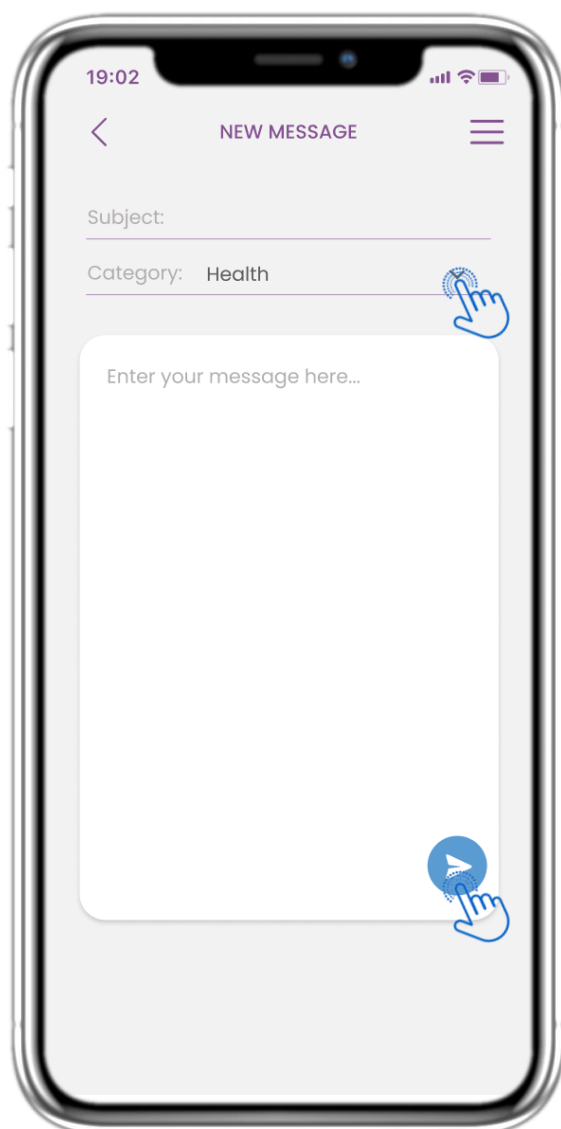


4.16 CRÉER UN NOUVEAU MESSAGE

Dans la boîte de message, vous pouvez définir un sujet et sélectionner une catégorie définies par le professionnel de la santé et saisir votre message.




4 WIDGETS ACCUEIL

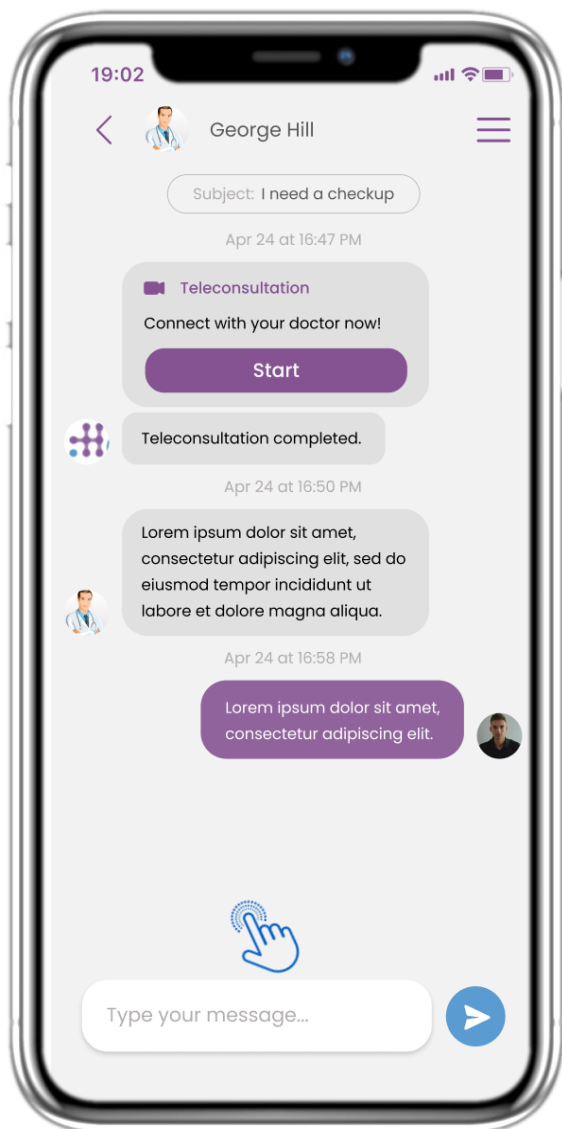

4.17 MESSAGE OUVERT

Toutes les réponses et communications sont conservées dans une seule conversation. Seul le professionnel de la santé peut mettre fin la communication.

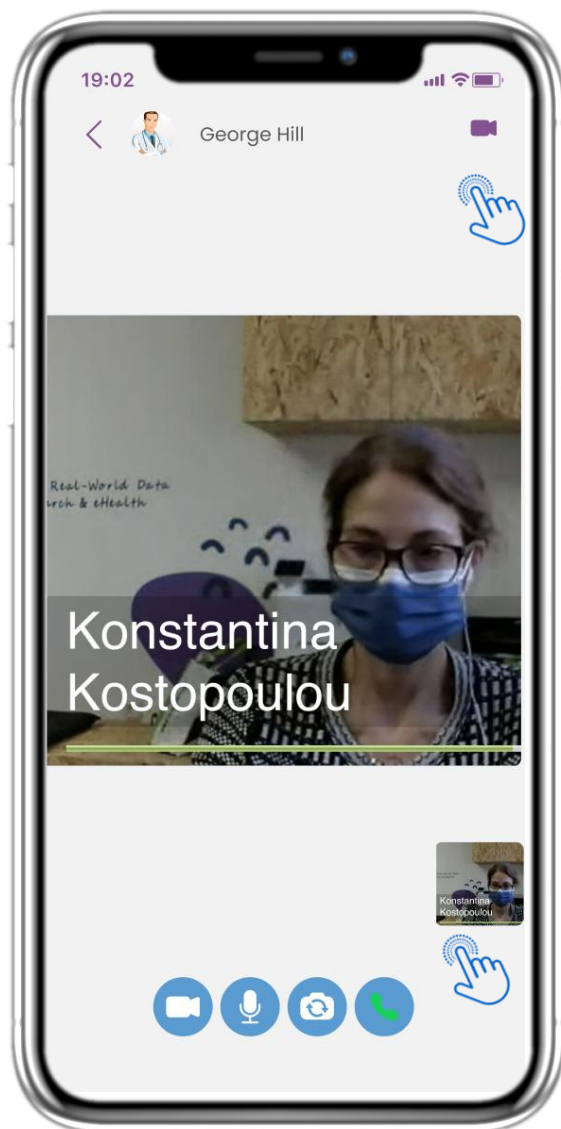


4.18 TÉLÉCONSULTATION

Au cours de la conversation, le professionnel de santé peut lancer une téléconsultation qui permettra à l'utilisateur d'y entrer dans 15 minutes.




4 WIDGETS ACCUEIL

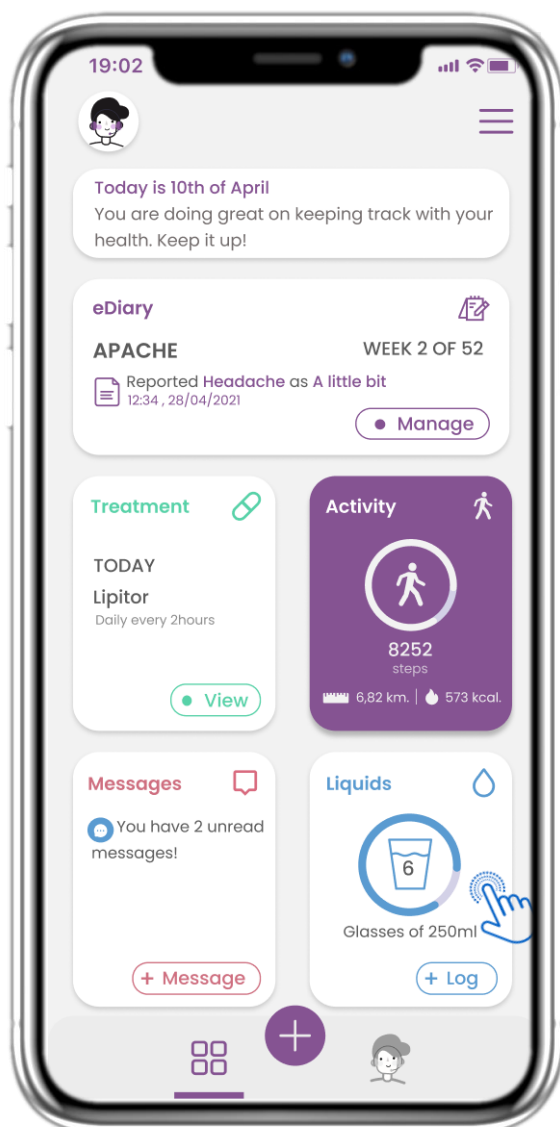

4.19 WIDGET LIQUIDE

Dans la page d'accueil, vous pouvez trouver le widget Liquide qui peut être utilisé pour enregistrer consommation d'eau et d'autres liquides.

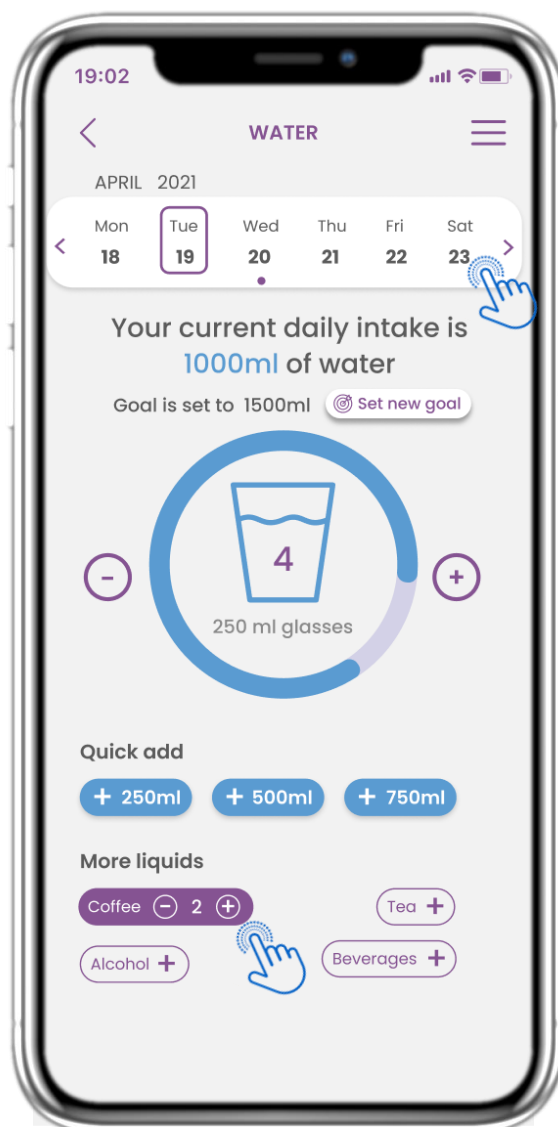


4.20 PAGE LIQUIDE

Dans la page Liquide, vous pouvez ajouter des verres d'eau avec des boutons rapides de 250-500-750 ml et ajouter d'autres liquides comme du café ou des boissons.




4 WIDGETS ACCUEIL

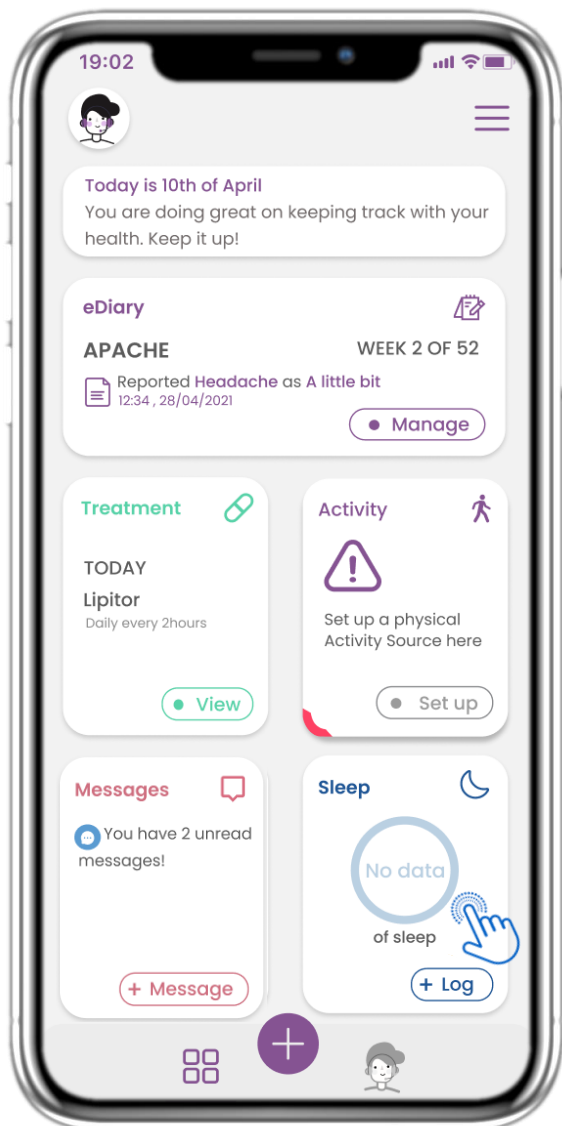

4.21 WIDGET DE SOMMEIL

Dans la page HOME, vous pouvez trouver le widget Sommeil qui peut être utilisé pour enregistrer votre sommeil manuellement ou collecté par un tracker.

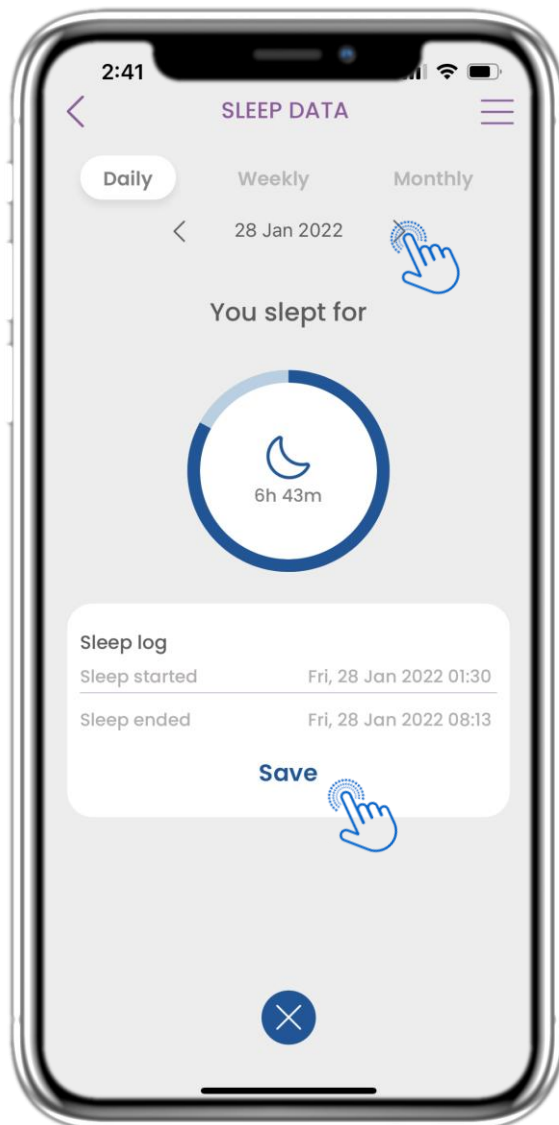


4.22 JOURNAL DE PAGE DE VEILLE

Dans la page Sommeil, vous pouvez ajouter manuellement votre sommeil et naviguer entre les jours dans le calendrier ou afficher les données de sommeil quotidiennes et choisir d'afficher également des graphiques hebdomadaires.




4 WIDGETS ACCUEIL

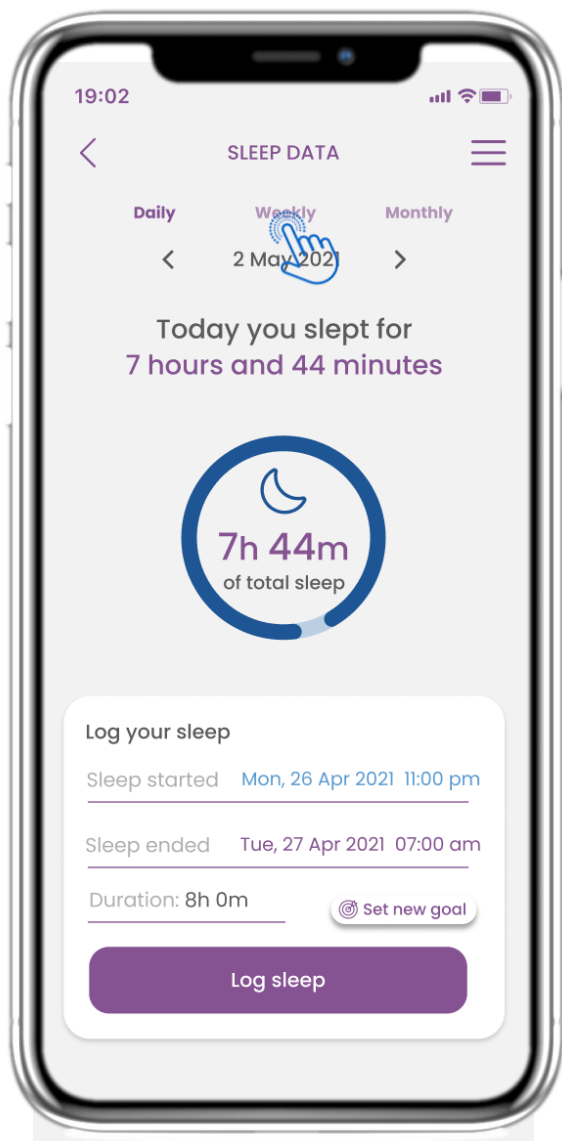

4.23 PAGE DE SOMMEIL DE WEARABLE

Dans la page ACCUEIL, vous pouvez trouver le widget Sommeil qui peut être utilisé pour enregistrer votre sommeil manuellement ou collecté par un portable.

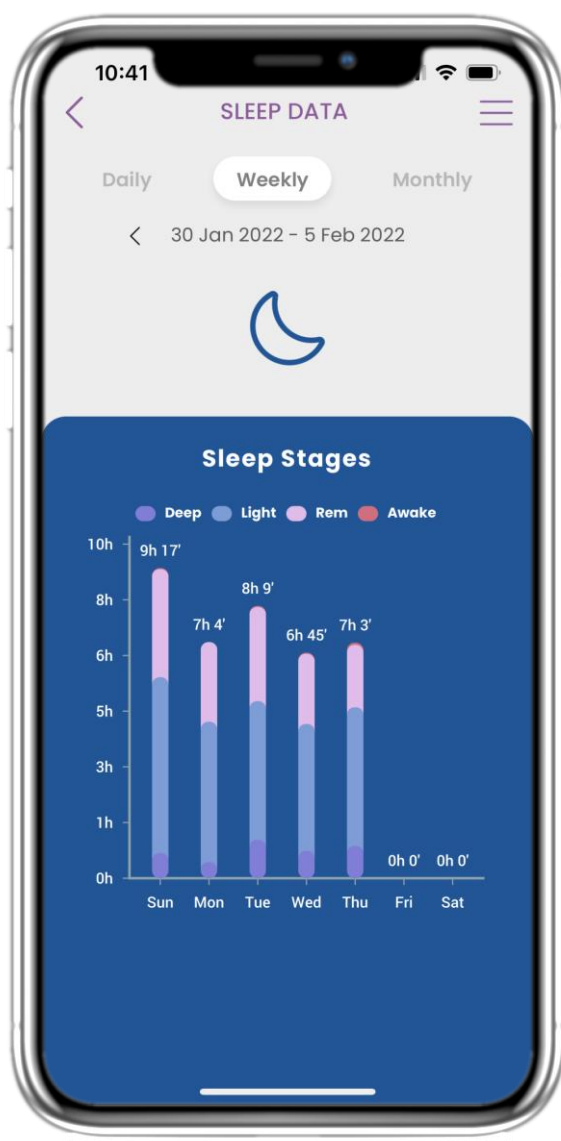


4.24 PAGE DE SORTIE

Dans la page Sommeil, vous pouvez ajouter manuellement votre sommeil et naviguer entre les jours dans le calendrier ou afficher les données de sommeil quotidiennes et choisir d'afficher également des graphiques hebdomadaires.




4 WIDGETS ACCUEIL

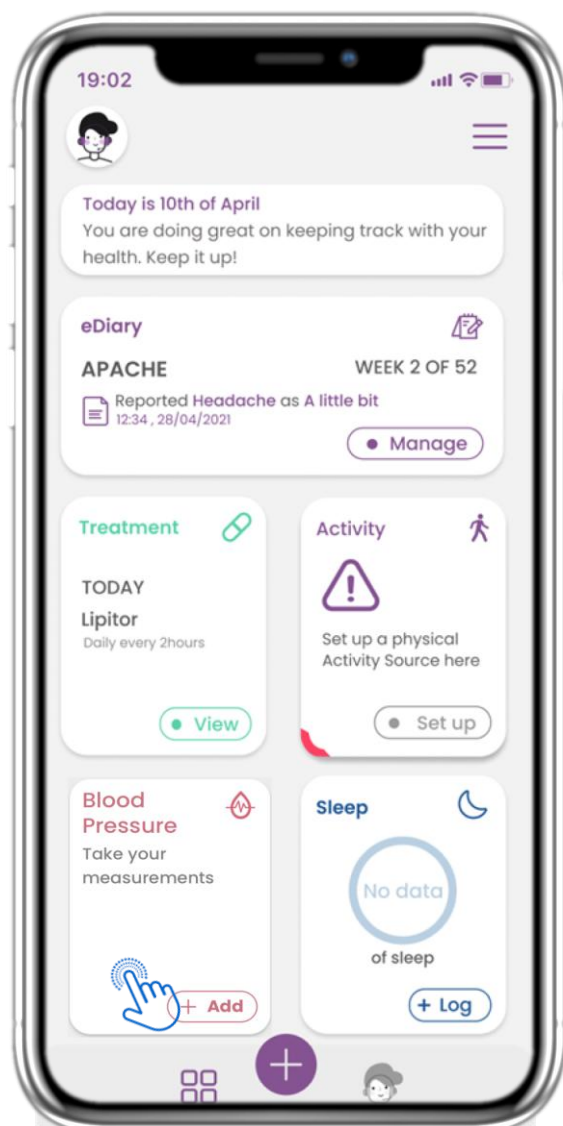

4.25 WIDGET TENSION ARTÉRIELLE

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget de Tension Artérielle, qui est utilisé pour collecter des mesures à l'aide d'un tensiomètre synchronisé.

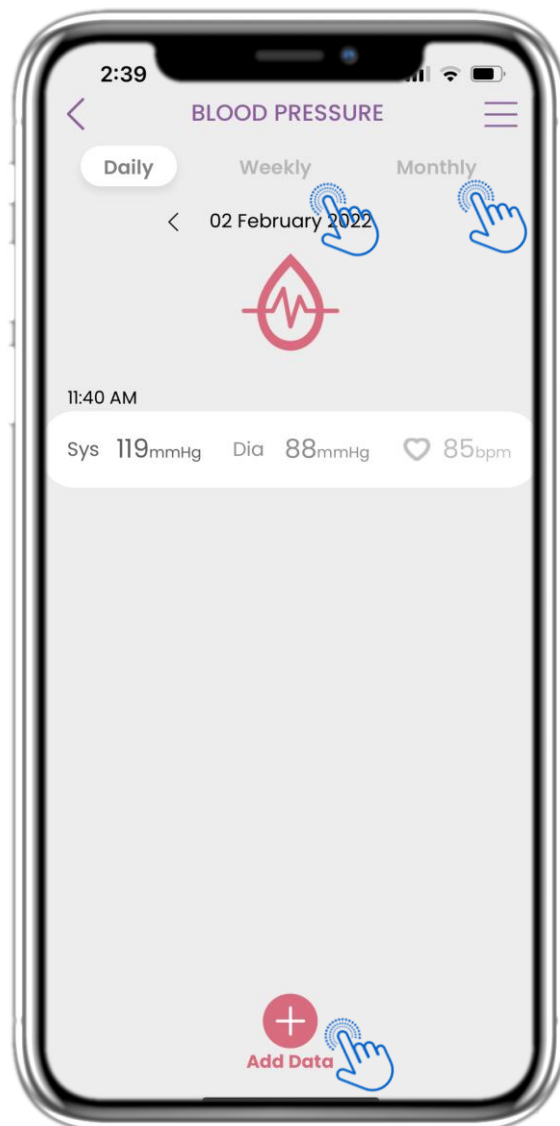

4.26 JOURNAL DE TENSION ARTÉRIELLE

Sur la page Tension Artérielle, vous pouvez ajouter vos mesures manuellement ou en synchronisant un appareil, naviguer entre les jours dans le calendrier, consulter les données quotidiennes et choisir d'afficher des graphiques hebdomadaires et mensuels.




4 WIDGETS ACCUEIL



4.27 PAGE DE TENSION ARTÉRIELLE DE L'APPAREIL

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget de Tension Artérielle, qui est utilisé pour enregistrer vos mesures de tension artérielle, soit manuellement, soit via un appareil.

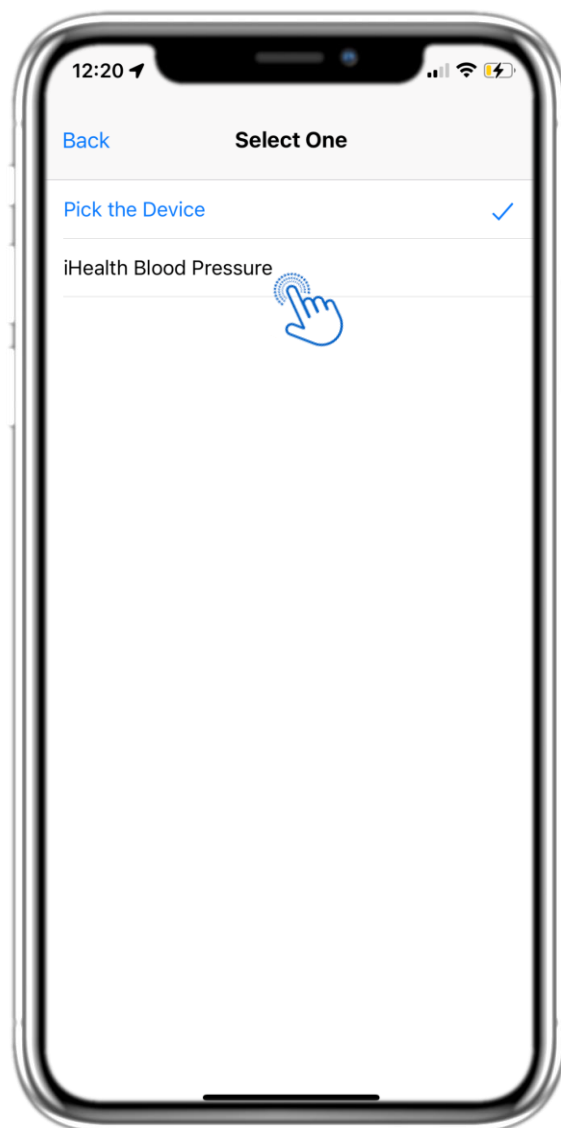


4.28 PAGE DE TENSION ARTÉRIELLE DE L'APPAREIL

Sur la page Tension Artérielle, vous pouvez synchroniser un tensiomètre et collecter automatiquement les mesures directement depuis l'appareil.




4 WIDGETS ACCUEIL

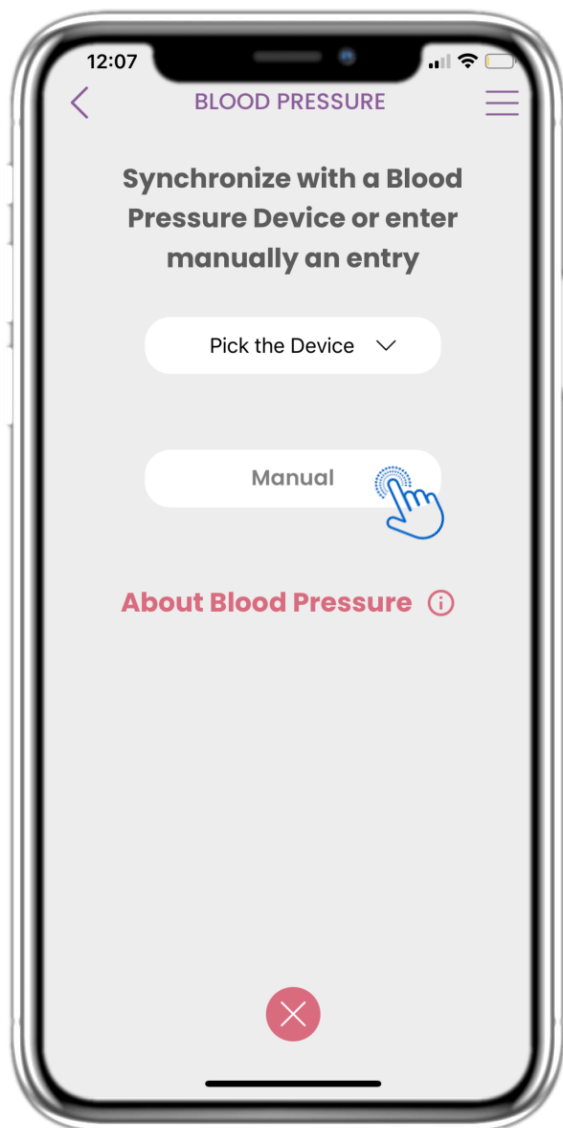

4.29 PAGE DE TENSION ARTÉRIELLE MANUELLEMENT


Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget de Tension Artérielle, qui est utilisé pour enregistrer vos mesures de tension artérielle, soit manuellement, soit via un appareil.

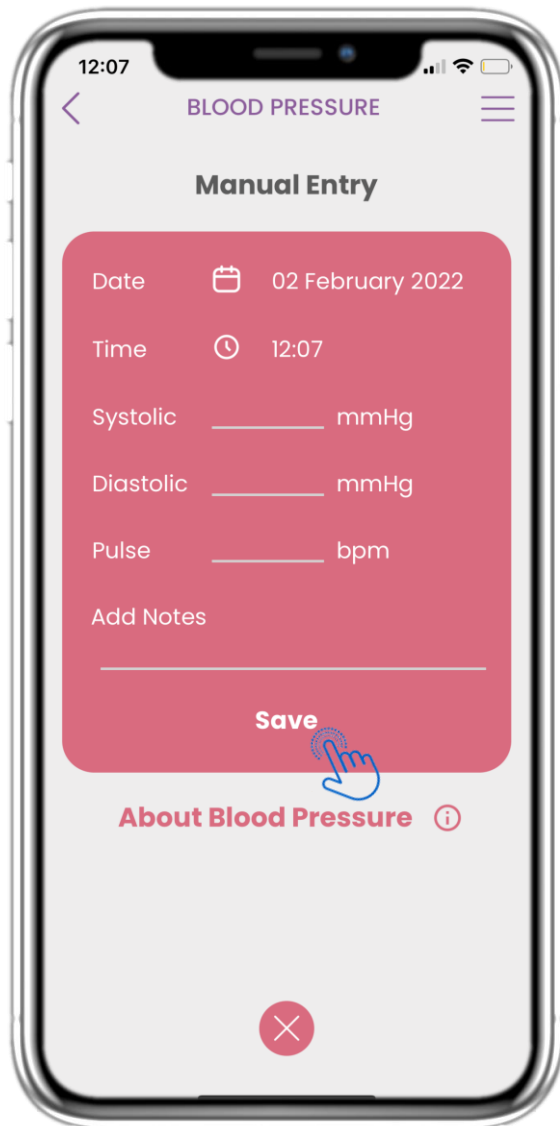

4.30 PAGE DE TENSION ARTÉRIELLE MANUELLEMENT


Sur la page Tension Artérielle, vous pouvez ajouter vos données manuellement et consulter une liste des résultats.

4 WIDGETS ACCUEIL

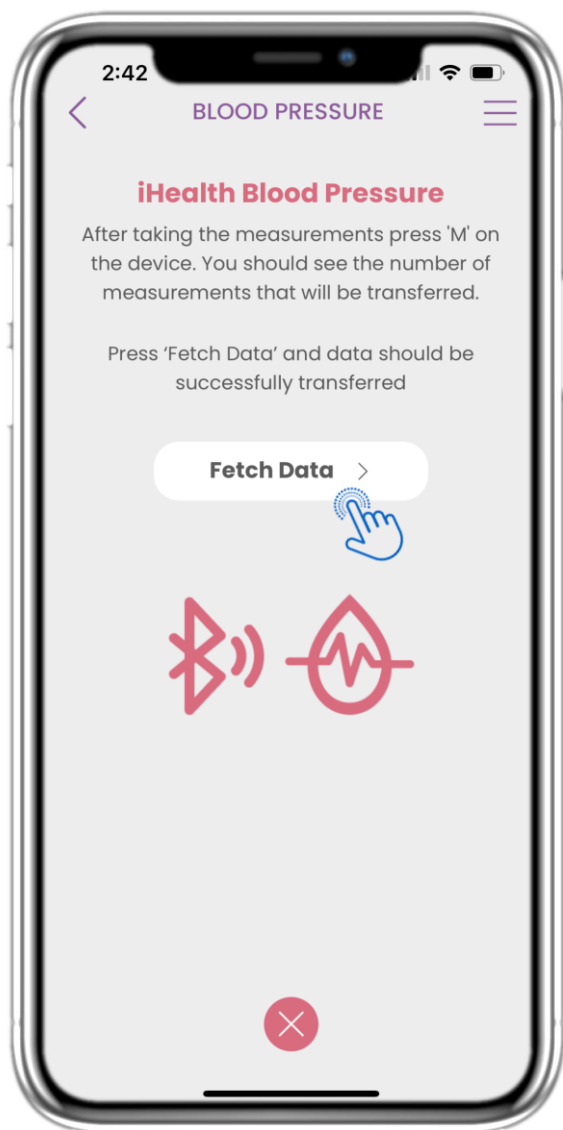

4.31 SYNCHRONISATION DE L'APPAREIL DE TENSION ARTÉRIELLE

Sur la page Tension Artérielle iHealth, vous trouverez le bouton permettant de synchroniser et de collecter les mesures depuis l'appareil de tension artérielle.

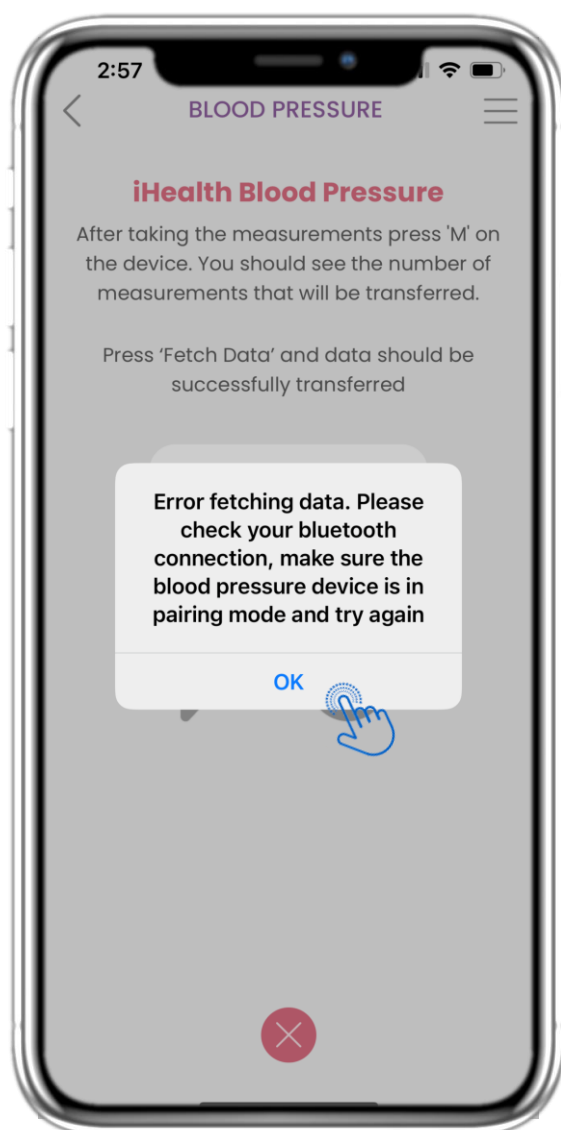


4.32 SYNCHRONISATION DE L'APPAREIL DE TENSION ARTÉRIELLE

Si vous recevez cette notification, veuillez vérifier les paramètres de votre mobile pour vous assurer que le Bluetooth est activé et que l'appareil de tension artérielle est prêt à être appairé.




4 WIDGETS ACCUEIL

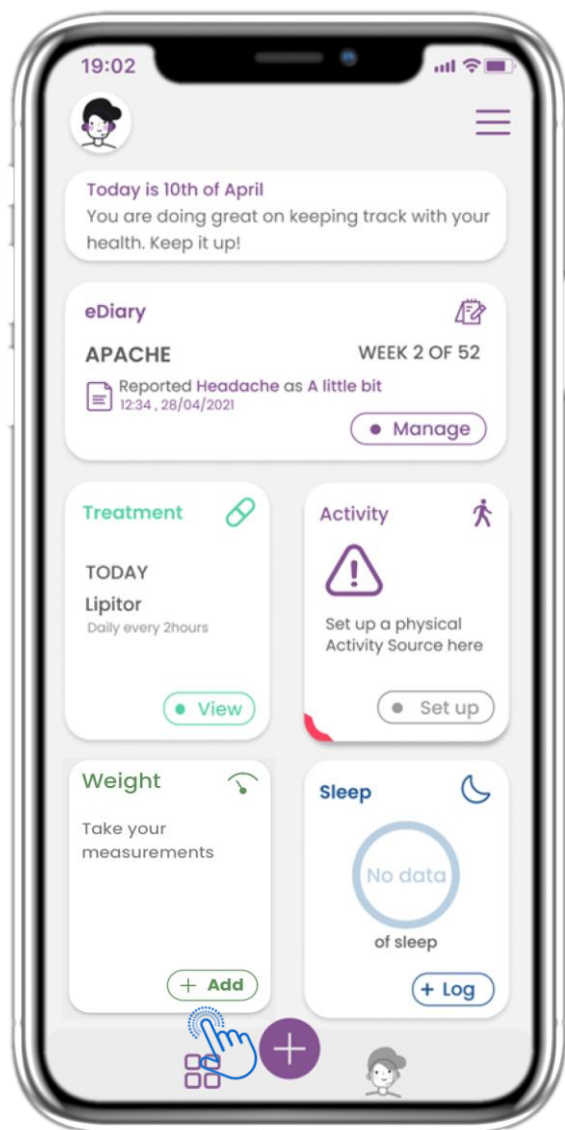

4.33 WIDGET DE POIDS

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Poids, qui permet de collecter des mesures à l'aide d'un appareil de pesée synchronisé.

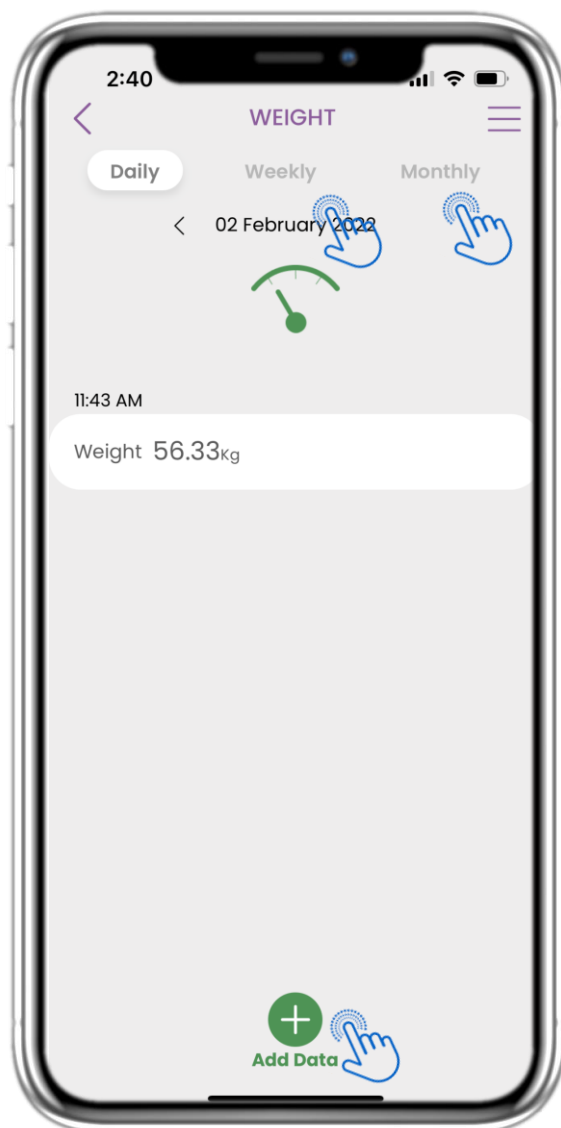


4.34 JOURNAL DE POIDS

Dans la page Poids, vous pouvez ajouter vos mesures manuellement ou en synchronisant un appareil, naviguer entre les jours dans le calendrier, voir les données quotidiennes et choisir d'afficher des graphiques hebdomadaires et mensuels.



4 WIDGETS ACCUEIL

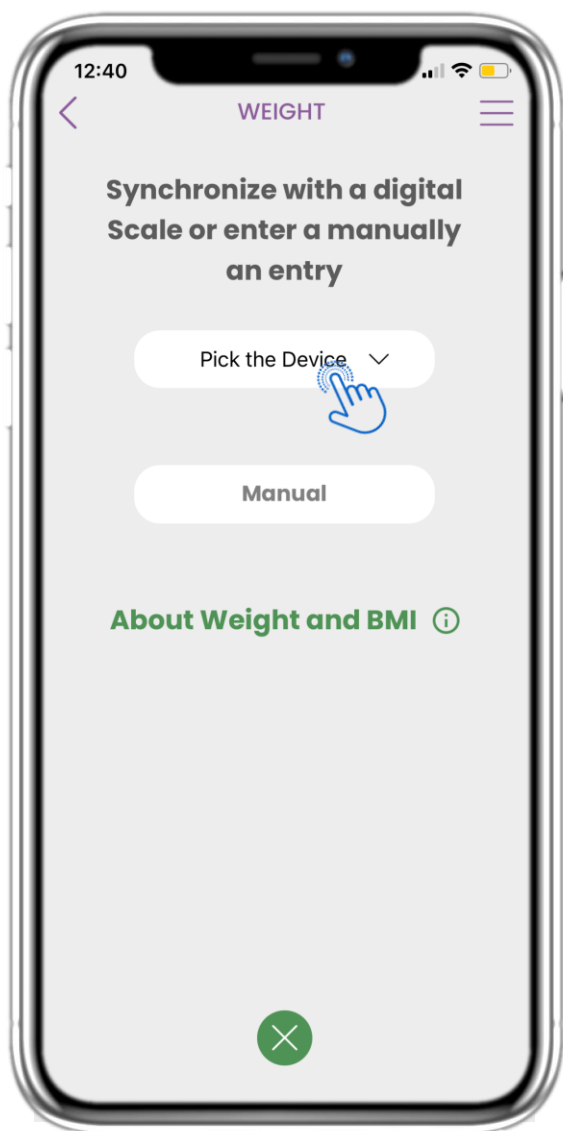

4.35 PAGE DE POIDS DE L'APPAREIL


Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Poids, qui permet d'enregistrer vos mesures de poids, soit manuellement, soit via un appareil de pesée.



4.36 PAGE DE POIDS DE L'APPAREIL


Dans la page Poids, vous pouvez synchroniser une balance et collecter automatiquement les mesures directement depuis l'appareil.

4 WIDGETS ACCUEIL

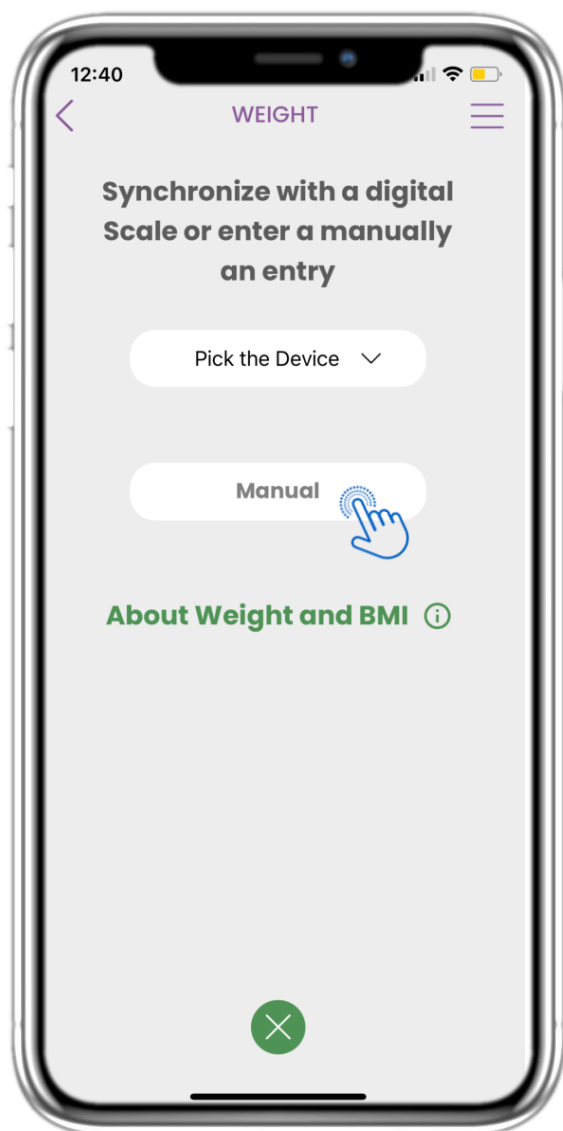

4.37 PAGE DE POIDS MANUELLEMENT

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Poids, qui permet d'enregistrer vos mesures de poids, soit manuellement, soit via une balance.

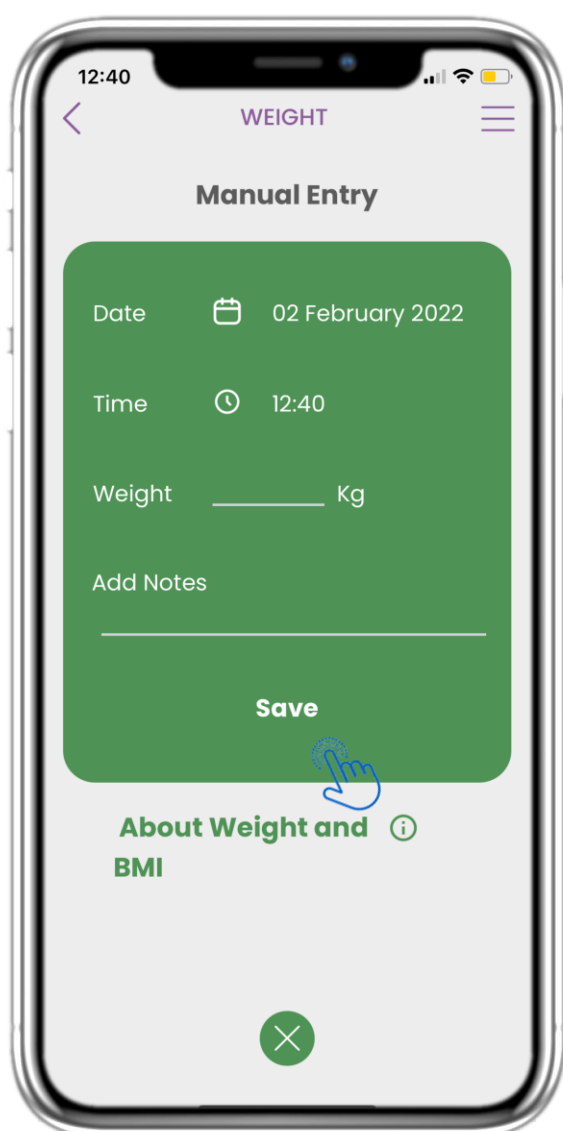


4.38 PAGE DE POIDS MANUELLEMENT

Dans la page Poids, vous pouvez ajouter manuellement vos données et consulter une liste des résultats.




4 WIDGETS ACCUEIL

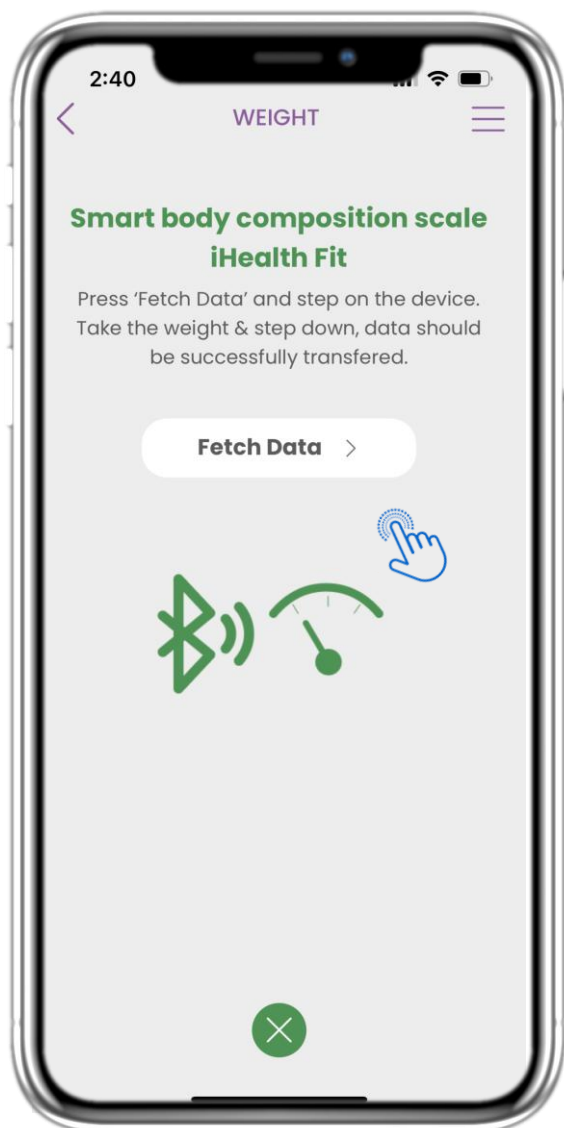

4.39 SYNCHRONISATION DES APPAREILS DE POIDS

Sur la page Poids iHealth Fit, vous trouverez le bouton pour synchroniser et collecter les mesures depuis la balance.

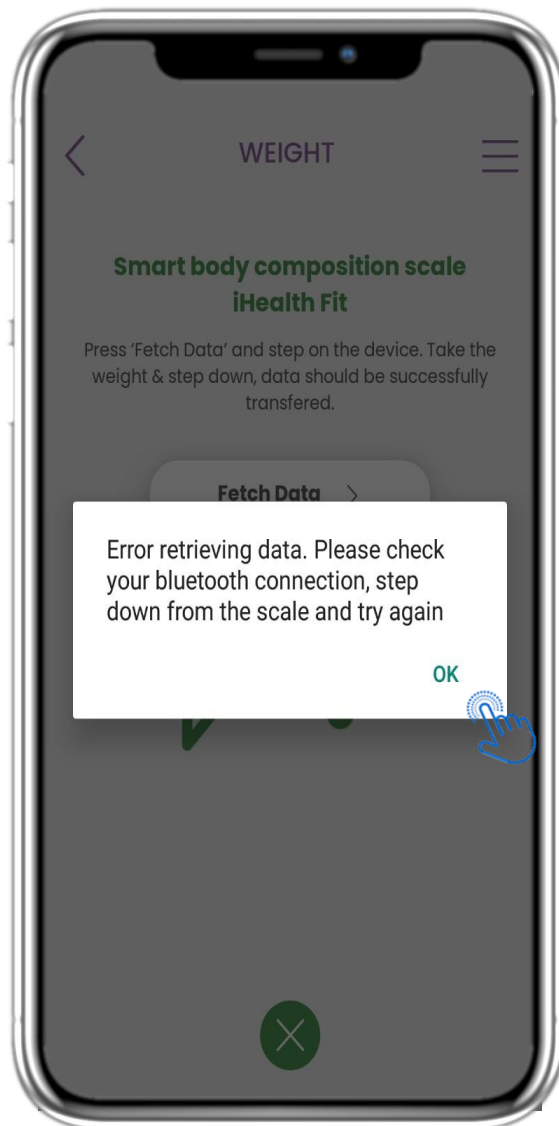


4.40 SYNCHRONISATION DES APPAREILS DE POIDS

Si vous recevez cette notification, veuillez vérifier les paramètres de votre mobile pour vous assurer que le Bluetooth est activé. Veuillez recommencer le processus de pesée depuis le début.



4 WIDGETS ACCUEIL

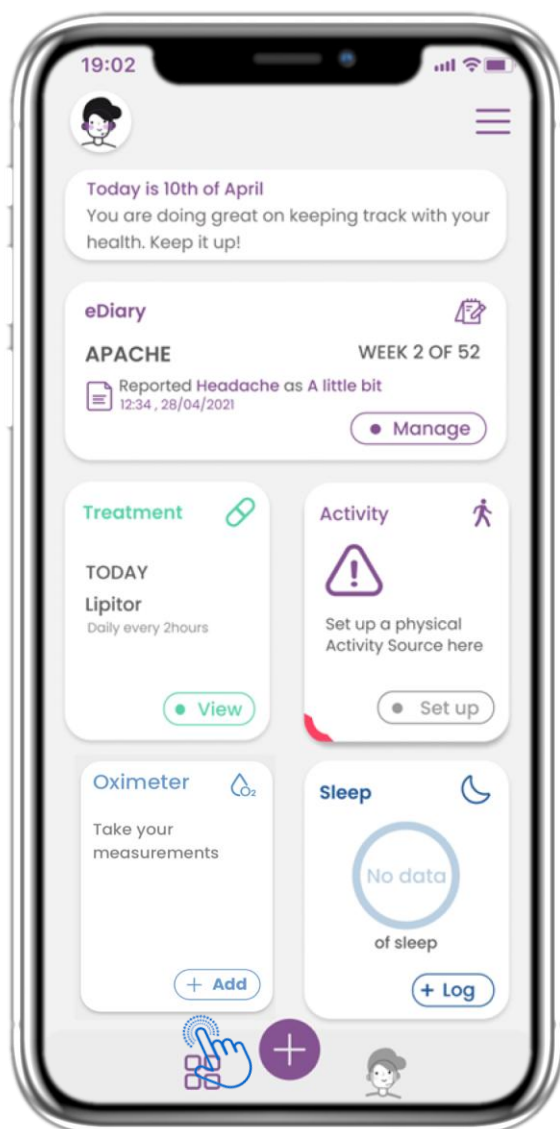

4.41 WIDGET D'OXYMÈTRE

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Oxymètre, qui est utilisé pour enregistrer vos données d'oxygène, soit manuellement, soit via un oxymètre connecté.




4.42 JOURNAL DE L'OXYMÈTRE

Sur la page Oxymètre, vous pouvez ajouter manuellement vos données d'oxygène, naviguer entre les jours dans le calendrier, consulter les données quotidiennes et choisir d'afficher également des graphiques hebdomadaires.




4 WIDGETS ACCUEIL

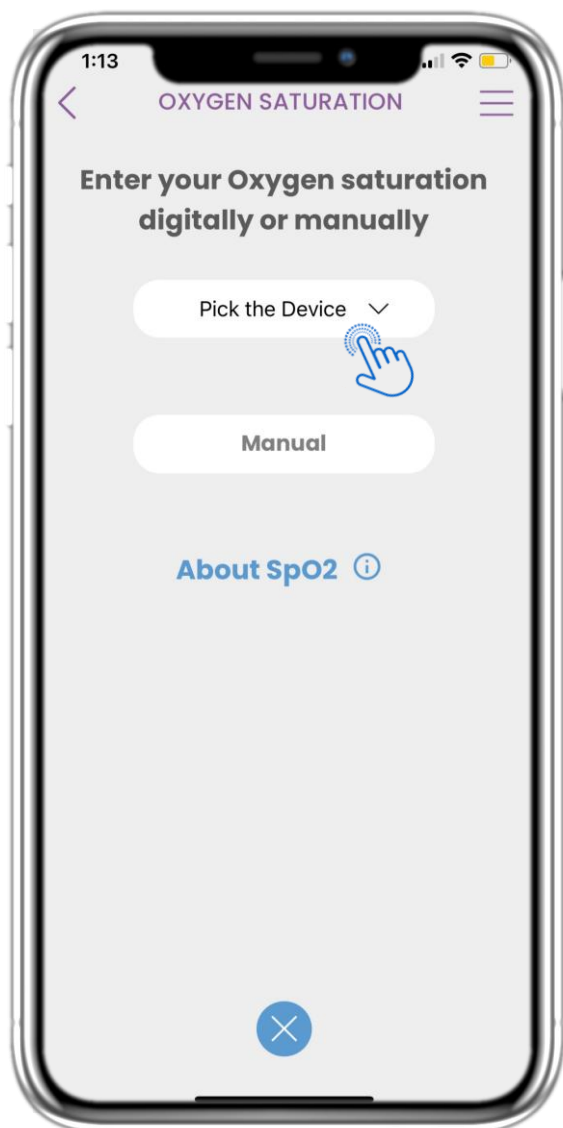

4.43 PAGE D'OXYMÈTRE DE L'APPAREIL

Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Oxymètre, qui est utilisé pour enregistrer vos mesures d'oxygène, soit manuellement, soit via un oxymètre connecté.


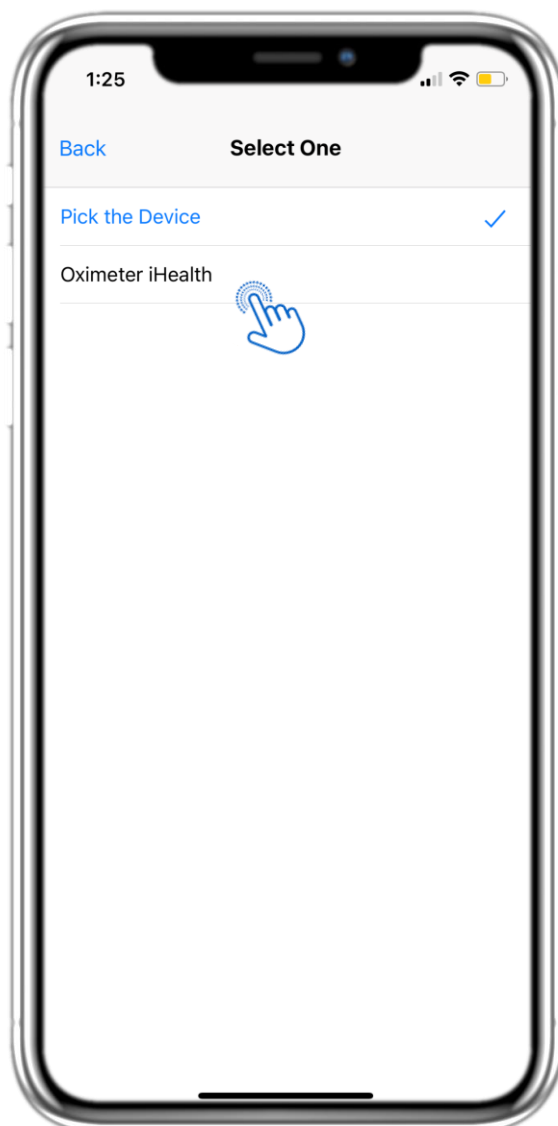


4.44 PAGE D'OXYMÈTRE DE L'APPAREIL

Sur la page Oxymètre, vous pouvez ajouter manuellement vos mesures d'oxygène, naviguer entre les jours dans le calendrier, consulter les données quotidiennes et choisir d'afficher également des graphiques hebdomadaires.



4 WIDGETS ACCUEIL

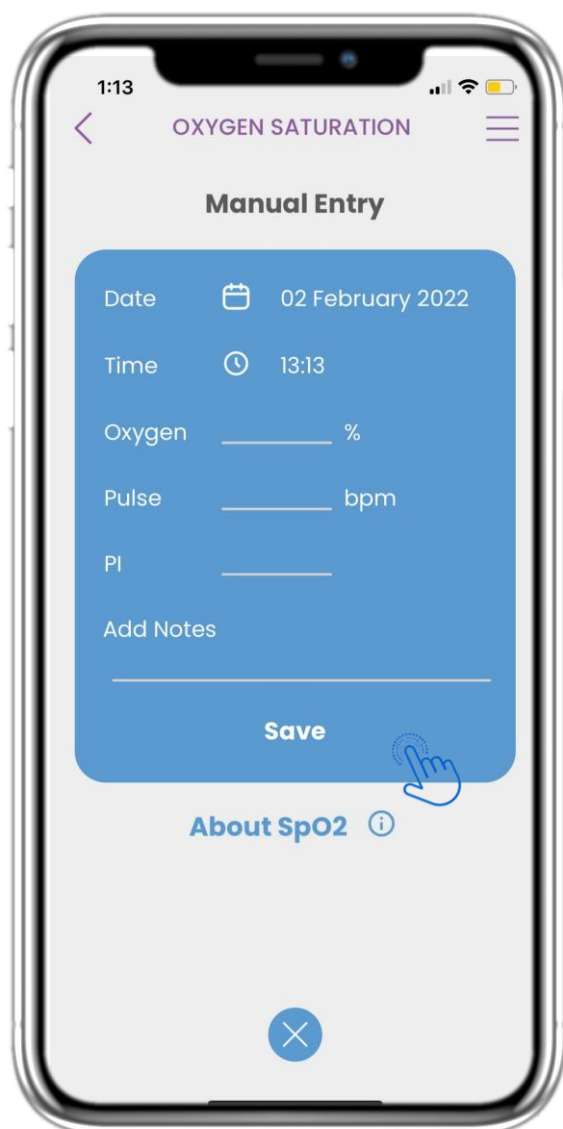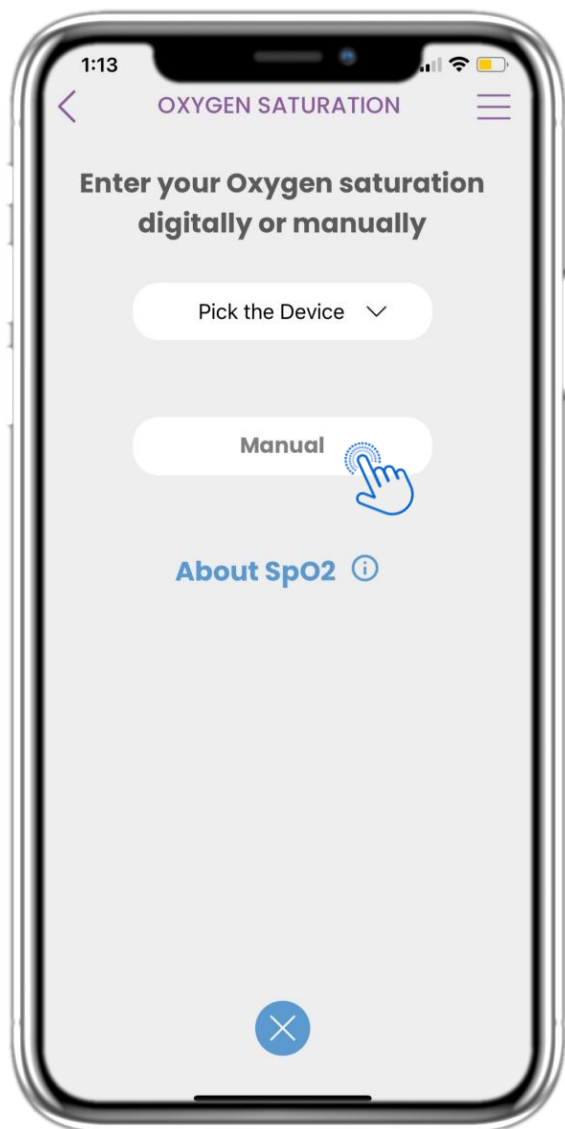

4.45 PAGE D'OXYMÈTRE MANUELLEMENT


Sur la page d'accueil, vous trouverez le widget Oxymètre, qui est utilisé pour enregistrer vos mesures d'oxygène, soit manuellement, soit via un oxymètre connecté.

4.46 PAGE D'OXYMÈTRE MANUELLEMENT

Sur la page Oxymètre, vous pouvez ajouter manuellement vos données et consulter une liste des résultats.




4 WIDGETS ACCUEIL

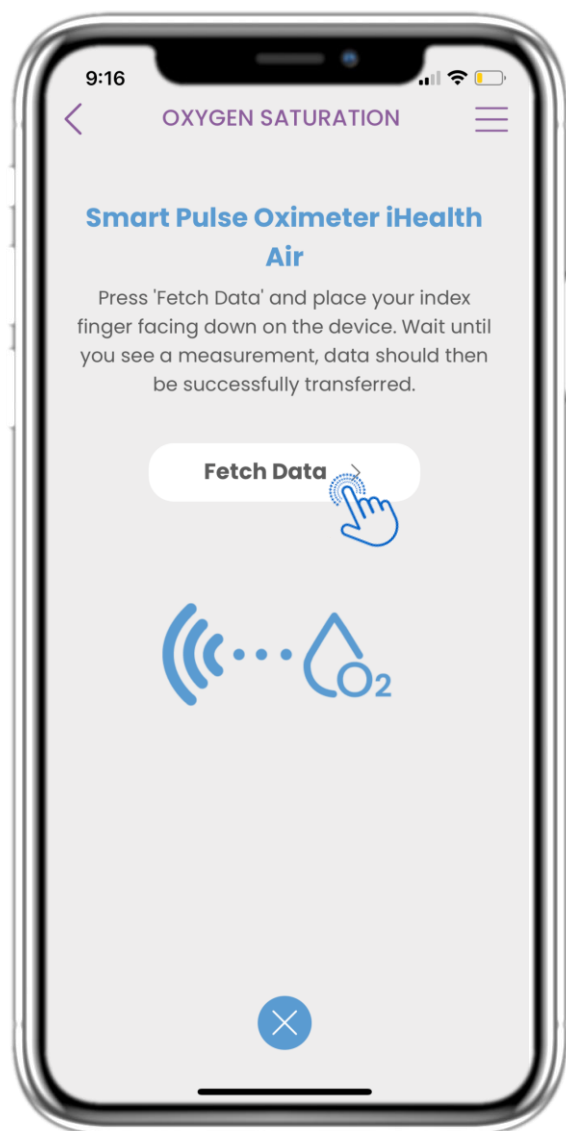

4.47 SYNCHRONISATION DES APPAREILS DE POIDS

Sur la page de saturation en oxygène, vous trouverez le bouton pour synchroniser et collecter les données depuis l'oxymètre de pouls intelligent.

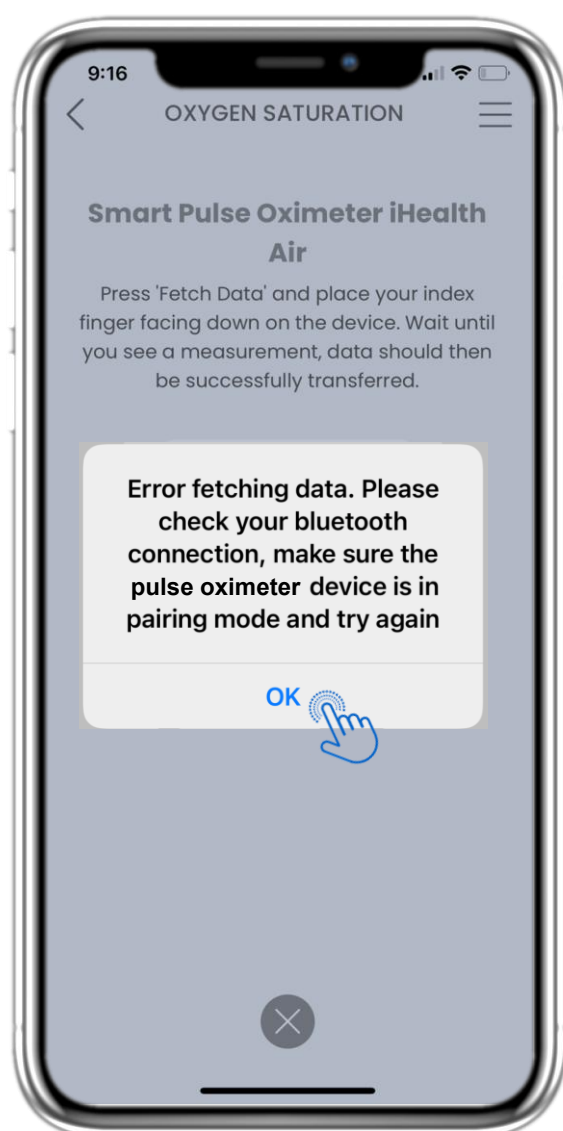


4.48 SYNCHRONISATION DES APPAREILS DE POIDS

Si vous recevez cette notification, veuillez vérifier les paramètres de votre mobile afin de vous assurer que le Bluetooth est activé et que l'oxymètre de pouls intelligent est prêt à être appairé.




5 AJOUTER DES RAPPORTS/RÉPONDRE À DES QUESTIONNAIRES

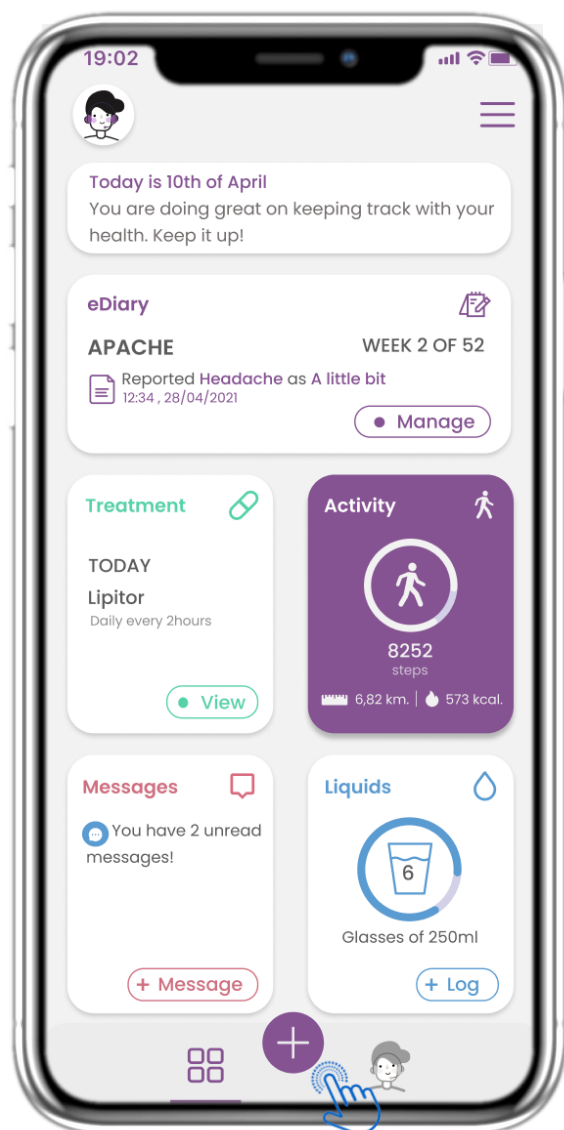

5.1 AJOUTER DES RAPPORTS / SYMPTÔMES

Dans la barre inférieure, vous pouvez choisir d'ajouter des rapports.

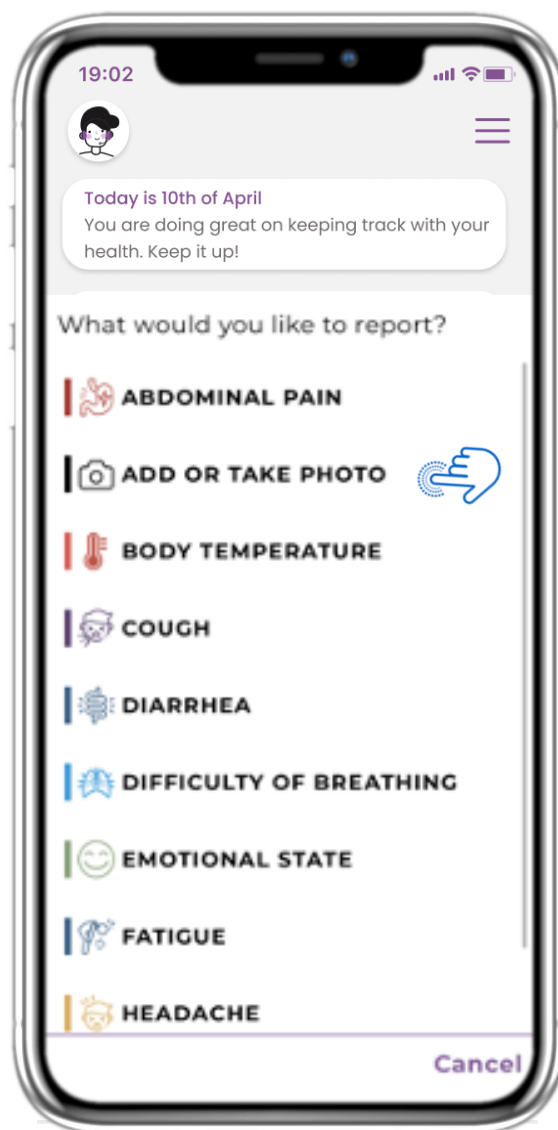

5.2 AJOUTER DES RAPPORTS / SYMPTÔMES

Du centre (+) vous pouvez ouvrir une liste des questionnaires disponibles pour ajouter un rapport ou un symptôme .



5 AJOUTER DES RAPPORTS/RÉPONDRE À DES QUESTIONNAIRES

Do you have a cough?

☐ Not at all

☐ A little bit

☐ Somewhat

☐ Quite a bit

☐ Very much

Next >

Define your cough type:

☒ Dry

☐ Productive

Would you like to submit Questionnaire?


Cancel **OK**

5.3 RAPPORTS DE RÉPONSES / QUESTIONNAIRES

Répondez au questionnaire lié au symptôme que vous avez sélectionné. Cliquez sur SUIVANT pour continuer le questionnaire. Cliquez sur OK pour soumettre ou sur ANNULER pour quitter.




6 CHATBOT

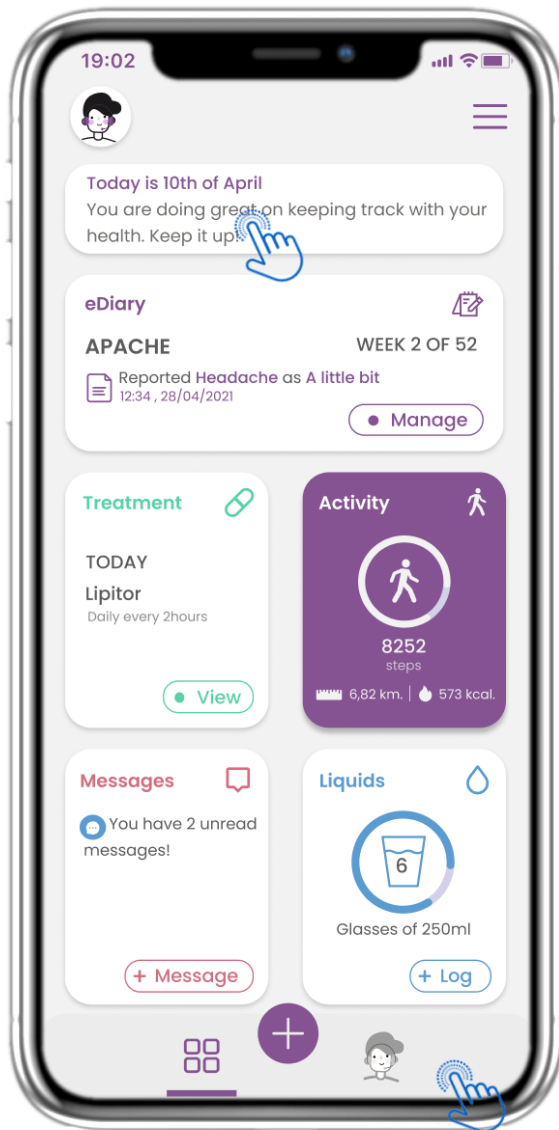

6.1 CHATBOT

Dans la barre inférieure, vous pouvez choisir de passer au chatbot ou à partir du message en haut.


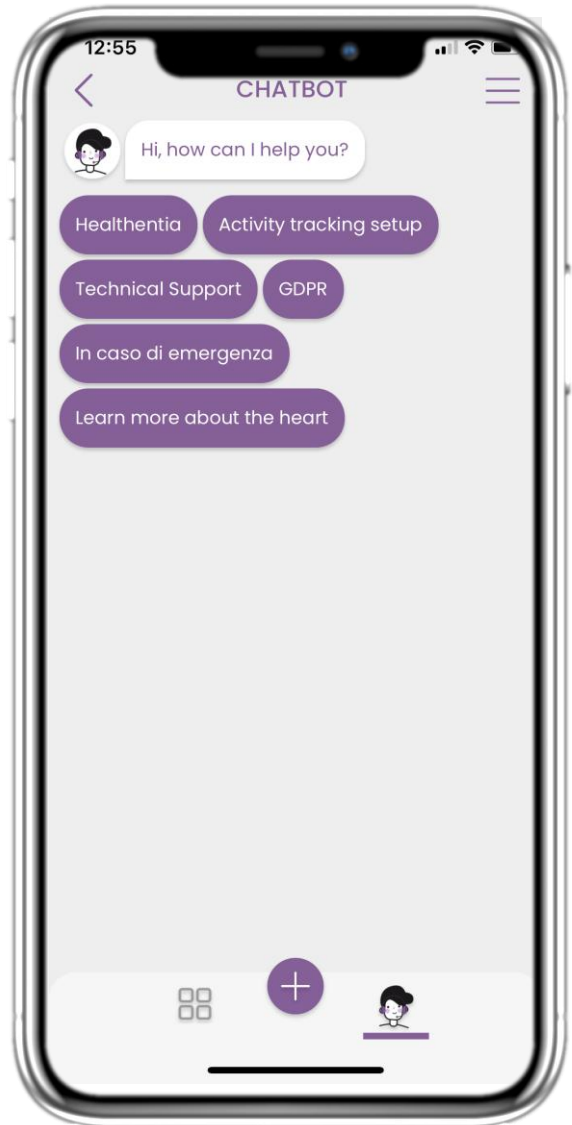


6.2 CHATBOT CONVERSATION

Dans le Chatbot, vous êtes accueilli et on vous montre les questionnaires en attente. Le Chatbot vous donne des options de questions et de réponses disponibles.



7 BARRE LATÉRALE DU MENU

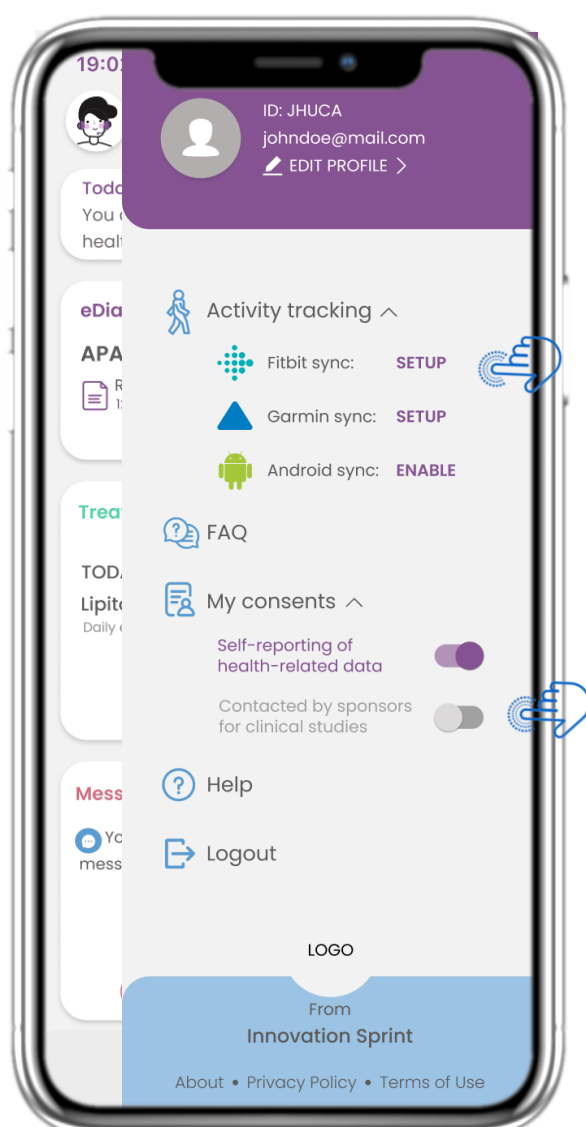
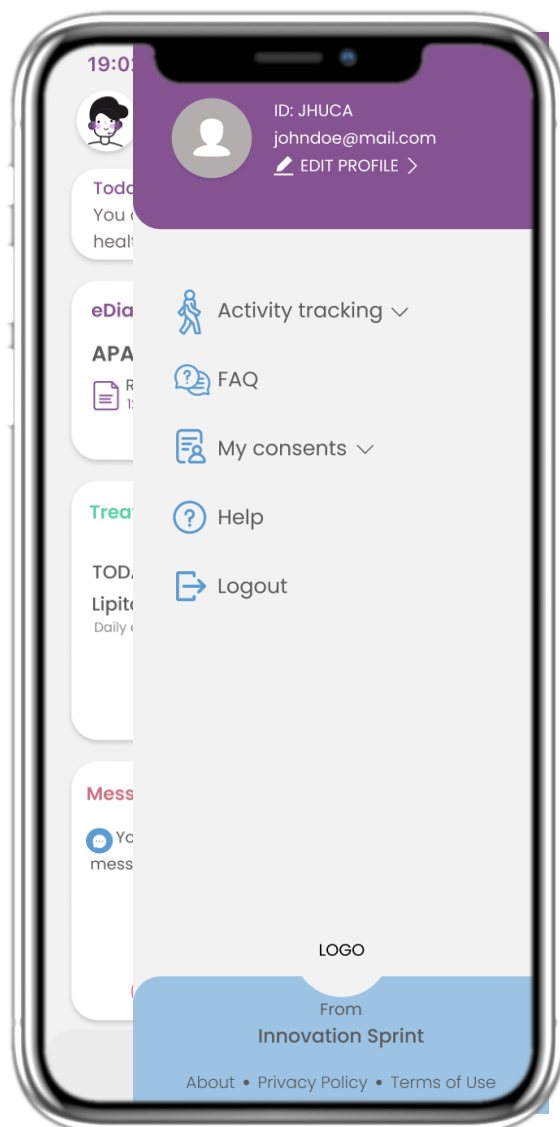


7.1 OPTIONS DE BARRE LATÉRALE

De menu laterale, vous pouvez accéder votre profil, configurer votre tracker ou désactiver le consentement explicite que vous avez donné lors de votre inscription. Vous pouvez également avoir accès à certaines pages de contenu comme la FAQ.



7 MENU – MON PROFIL

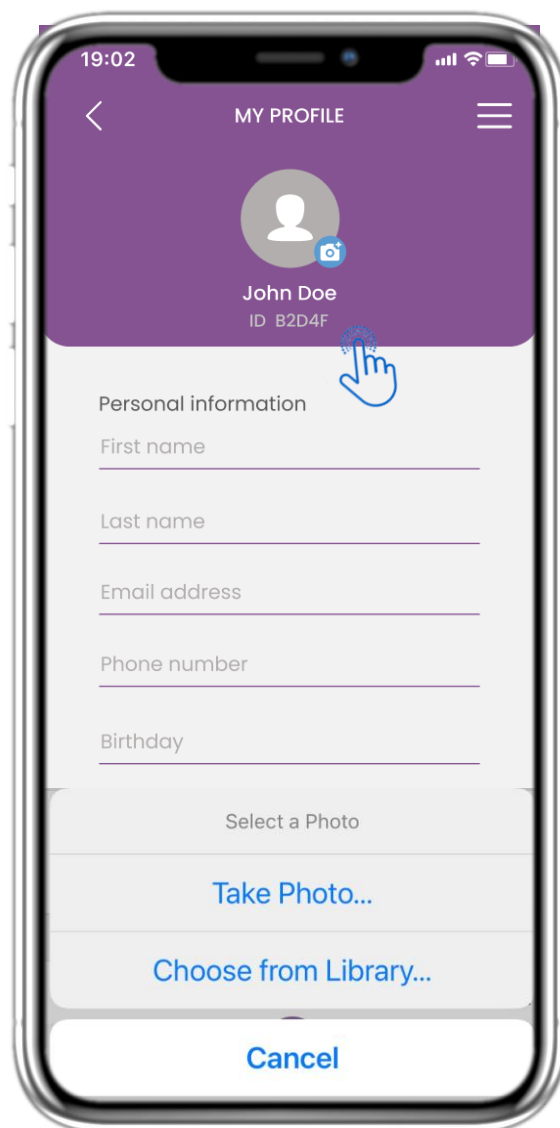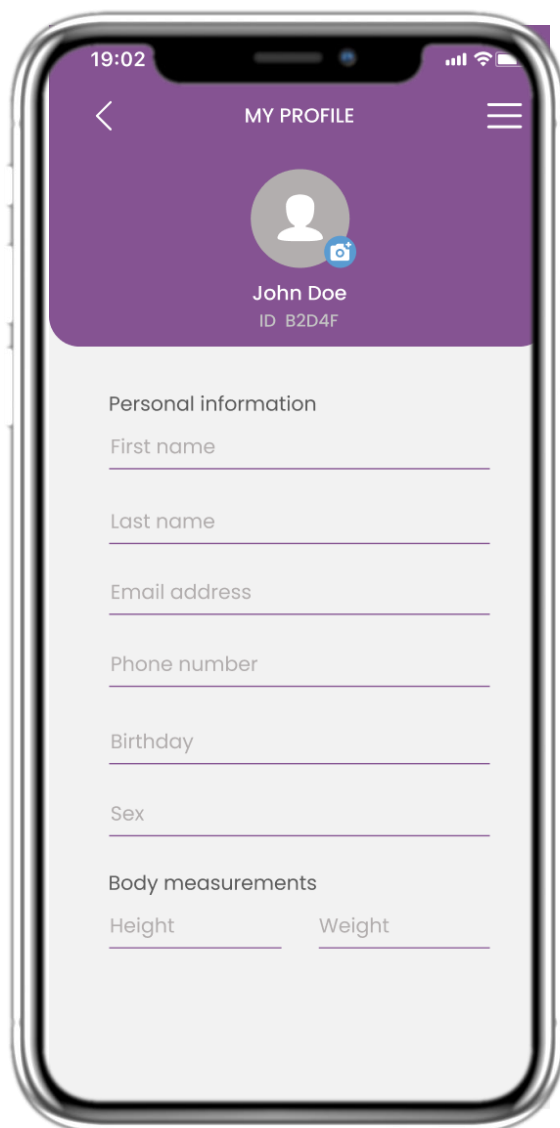


7.2 MODIFIER LE PROFIL

Vous pouvez modifier votre profil et choisir une image également. L'ID est le numéro d'identification qui sera utilisé pour la communication avec le médecin.




7 MENU – CHANGER DE LANGUES

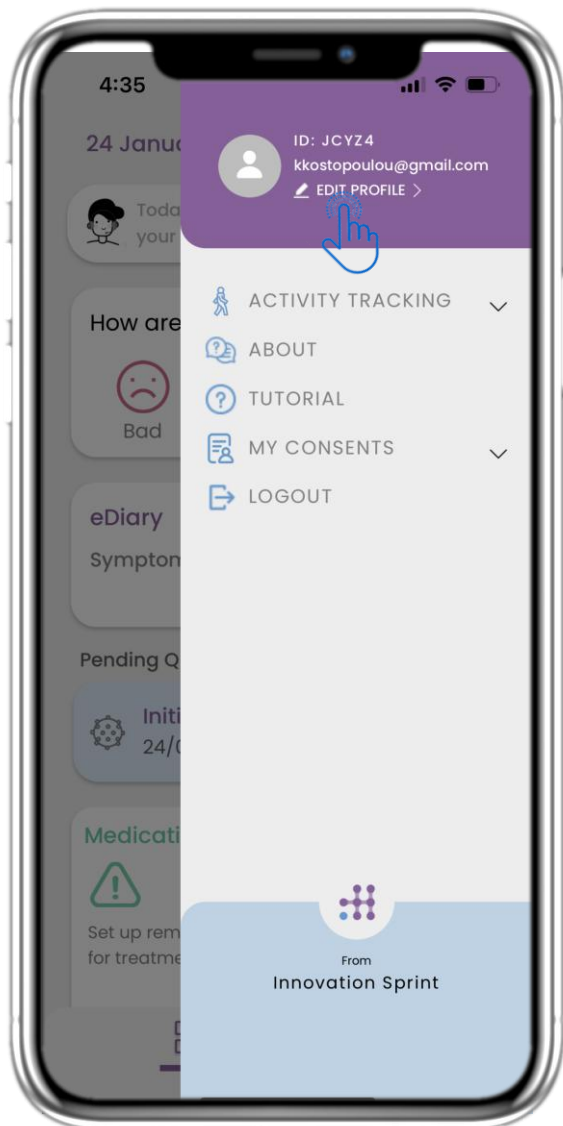

7.3 GÉRER LE PROFIL

Dans le menu Paramètres, allez gérer votre Profil où vous pouvez modifier vos informations.

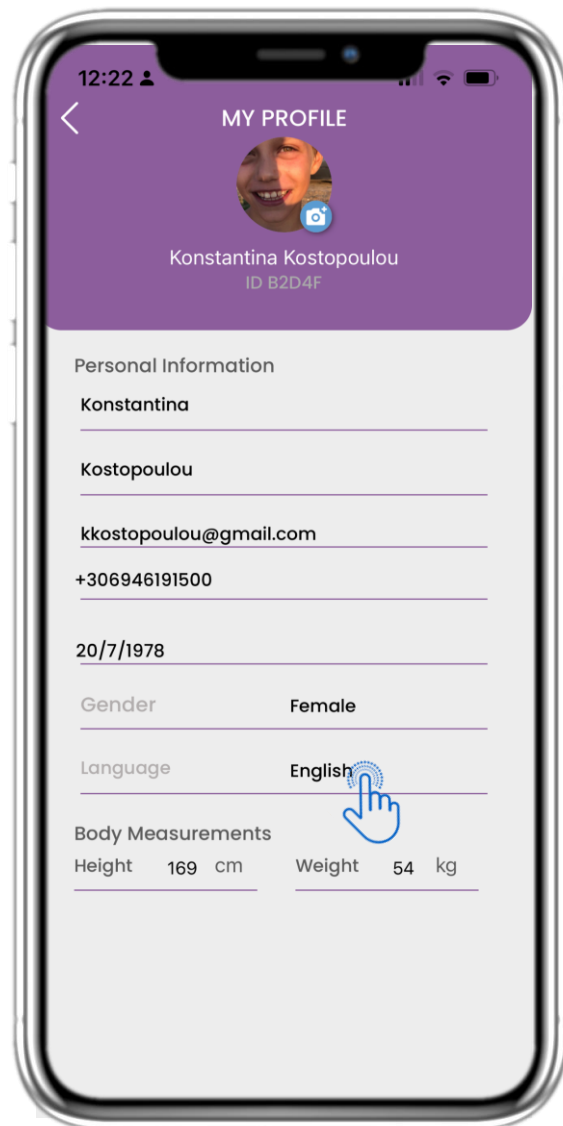


7.4 CHANGEMENT DE LANGUE

Sur la page Profil, vous pouvez changer la langue.




7 MENU – CHANGER DE LANGUES (EXEMPLE)

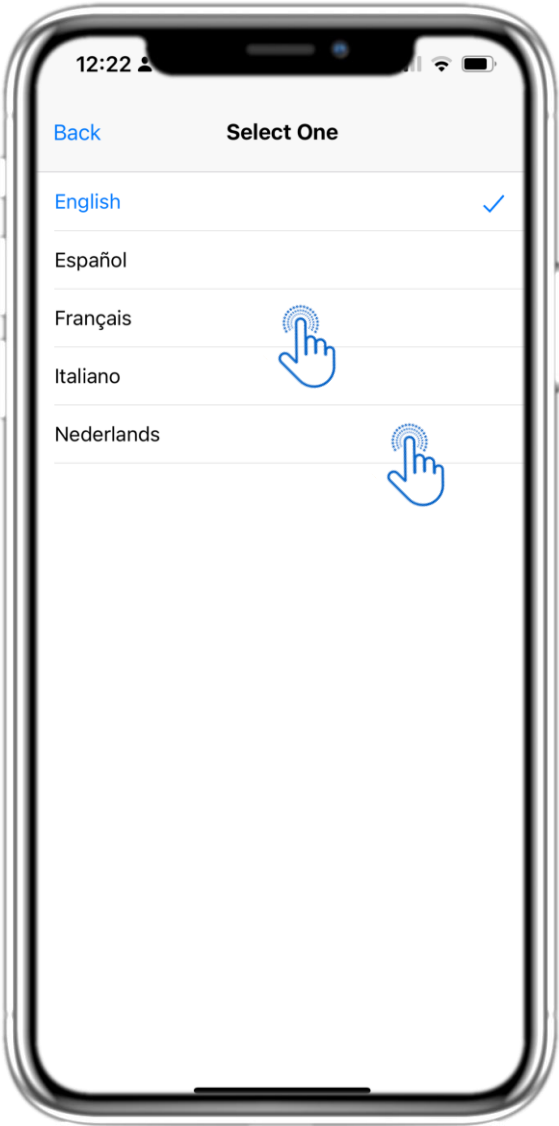

7.5 CHOISIR LA LANGUE

Dans le menu Paramètres, allez gérer votre Profil où vous pouvez modifier vos informations.

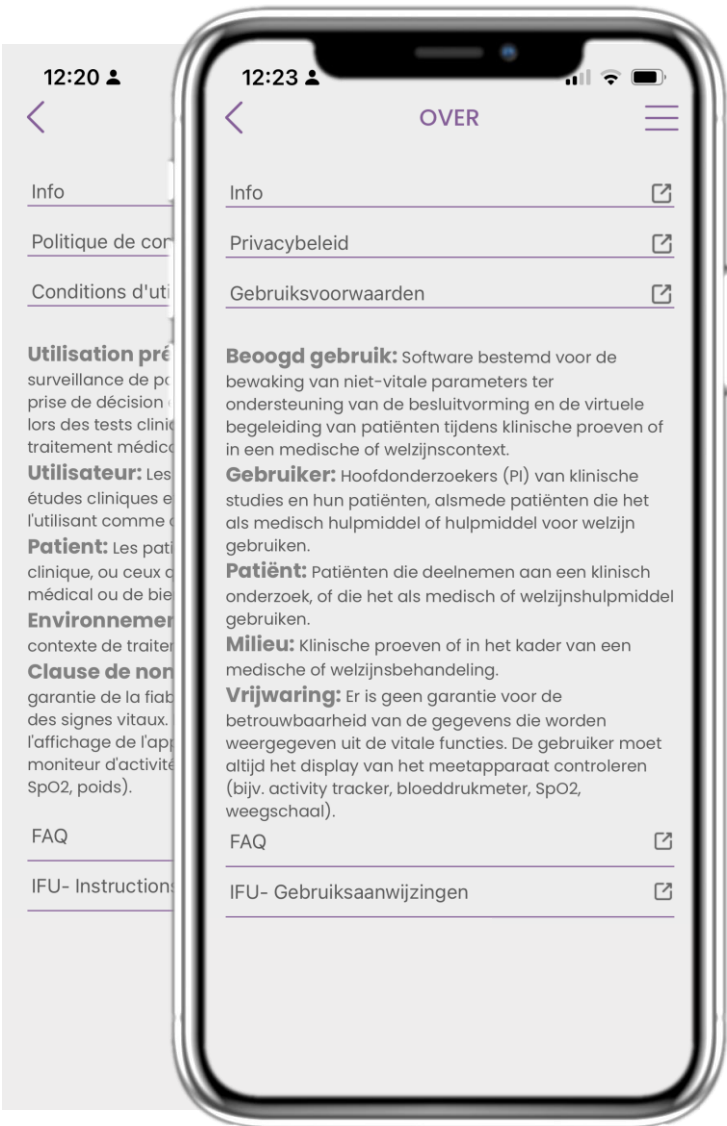


7.6 À PROPOS DE LA PAGE EN FR & NL

Texte traduit de la page À propos.




7 MENU - DÉCONNEXION

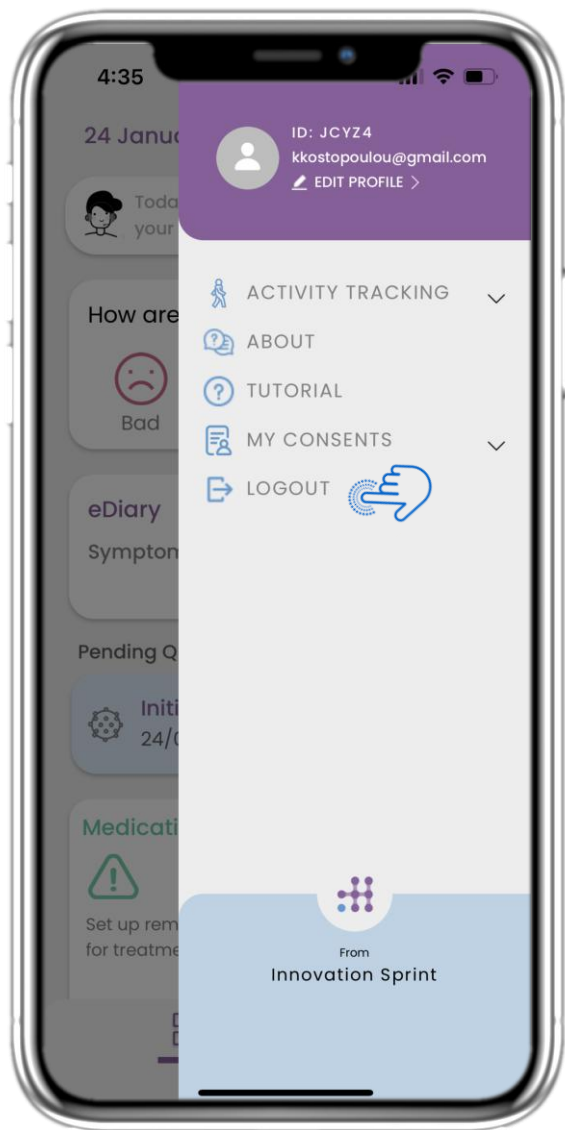

7.7 DÉCONNEXION

Sélectionnez Déconnexion.
N'oubliez pas que Healthentia ne peut pas suivre les données une fois déconnecté.

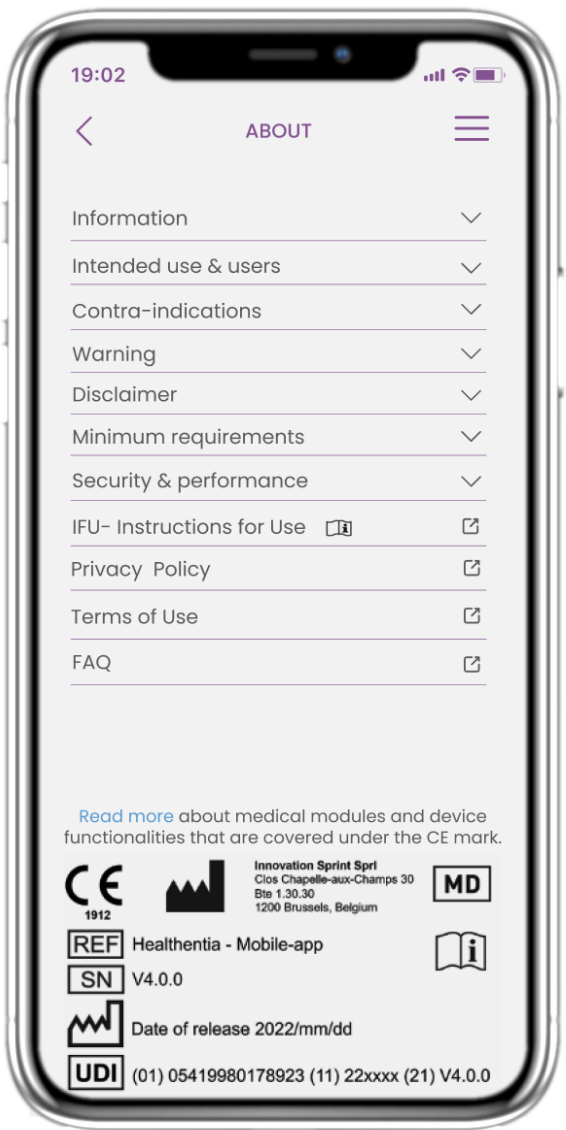

7.8 À PROPOS - IFU

Dans la page À PROPOS, vous trouverez toutes les informations relatives à l'utilisation de l'application Healthentia.

