



ISTRUZIONI PER L'USO PAZIENTI



IFU Version v3

INNOVATION SPRINT SRL
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 1.30.30
1200 Brussels, Belgium



Healthentia – Mobile-app

v4





Document History

Document Version	Nature of change	Date
1	Launch in Italy - Translated in Italian	01.06.2025
2	Updated part integration with other devices (Withings is added)	22.04.2026
3	Updated part integration with other devices (Fitbit API is replaced by Google Health API)	28.09.2026





Informazioni

L'app Healthentia consiste in una raccolta di moduli. Diversi moduli sono software medico coperti dal marchio CE secondo il Regolamento Europeo 2017/745:

- Virtual Coaching: Consente all'utente (soggetto/paziente) di interagire con un coach conversazionale virtuale per scopi informativi e motivazionali.
- eDiary: L'e-Diary consente la presentazione di qualsiasi esito riportato dal paziente, sotto forma di elenco, raggruppato per giorno o per esito (sintomo). In questo modo, i pazienti possono avere accesso in qualsiasi momento al loro Diario elettronico e vedere i progressi dei risultati riportati.
- Vital: I segni vitali sono sia raccolti che visualizzati dagli utenti dell'app mobile tramite widget.
- Questionnaires: Permette all'utente di comunicare esiti e punteggi degli esiti in modo strutturato.
- Liquid consumption: Il widget per il consumo di liquidi offre una panoramica dei liquidi consumati.
- Nutrition: Il widget nutrizione consente di vedere e modificare il consumo delle diverse categorie alimentari di interesse.
- Weight: Il widget peso offre la possibilità di aggiungere manualmente e tramite una bilancia digitale, misurare e visualizzare il peso.

Per ulteriori informazioni, visitare: <https://healthentia.com>

Per qualsiasi domanda o richiesta relativa alla privacy, è possibile contattare: dpo@healthentia.com

Per domande generali, è possibile contattare: info@healthentia.com

Segnalazione di incidenti gravi

Per qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione all'App Dispositivo Medico Healthentia, è possibile contattare il produttore (Innovation Sprint Srl) a: support@healthentia.com e l'autorità competente nella vostra località.

Supporto tecnico

Il servizio di supporto Healthentia è offerto a livello di best-effort. Per qualsiasi richiesta di supporto tecnico, è possibile contattare: support@healthentia.com

Il nostro team di supporto risponderà entro 1 giorno lavorativo.

Versione cartacea delle IFU

Se desiderate una versione cartacea delle istruzioni per l'uso, contattate il produttore al seguente indirizzo e-mail: info@healthentia.com. Sarà consegnata entro 7 giorni di calendario dopo aver ricevuto la richiesta.



REF Healthentia – Mobile-app



v4





SCOPO PREVISTO

Healthentia è un software destinato a: a) la raccolta e trasmissione di dati fisiologici, inclusi frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno e peso, direttamente ai fornitori di assistenza attraverso mezzi elettronici automatizzati in combinazione con dispositivi IoT convalidati; b) la visualizzazione (dashboard basate sui soggetti) e il trattamento matematico dei dati (analisi delle tendenze, avvisi) relativi ai parametri fisiologici del soggetto con malattia cronica monitorata; c) la trasmissione degli esiti del paziente e dei punteggi degli esiti relativi allo stato di salute del paziente, ai fattori che influenzano la salute, alla qualità della vita correlata alla salute, alla conoscenza della malattia e all'aderenza al trattamento attraverso questionari convalidati; d) l'interazione dell'utente (soggetto/paziente) con un coach virtuale conversazionale per scopi informativi e motivazionali, al fine di supportare il telemonitoraggio del soggetto, il processo decisionale e il coaching virtuale.

BENEFICI CLINICI

L'uso di Healthentia permette di:

- Fornire input oggettivi per i professionisti sanitari a supporto della diagnosi.
- Evidenziare l'evoluzione dei parametri fisiologici attraverso l'analisi delle tendenze degli input del paziente.
- Consentire ai professionisti sanitari di fornire la stessa qualità di cura e sicurezza dello standard di cura.

INDICAZIONI CLINICHE

Telemonitoraggio di pazienti con malattie croniche (come insufficienza cardiaca, cancro, BPCO, ecc.)

CONTROINDICAZIONI

- Healthentia non è destinato al monitoraggio di pazienti in situazioni critiche (sala operatoria, emergenza, terapia intensiva).
- Qualsiasi condizione fisica o cognitiva che, a giudizio clinico, impedirebbe al paziente di utilizzare Healthentia, ad esempio demenza.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato durante la gravidanza.
- Healthentia non è stato testato con la popolazione pediatrica. Pertanto, Healthentia è destinato solo all'uso da parte di adulti (>18 anni) e non copre l'uso da parte dei bambini.

GRUPPO TARGET DI PAZIENTI

Pazienti con malattie croniche che partecipano a un'indagine clinica o a un trattamento medico.

UTENTI PREVISTI

Pazienti telemonitorati e i loro professionisti sanitari.

AMBIENTE D'USO E DURATA

Healthentia può essere utilizzato come soluzione di Monitoraggio Remoto del Paziente per pazienti che vengono dimessi dall'ospedale e devono seguire un determinato trattamento. La durata dipende dallo studio o dall'intervento o dalla volontà del paziente.

AVVERTENZE

- Healthentia non è monitorata in tempo reale dal personale sanitario; è destinata esclusivamente a comunicazioni non di emergenza. In caso di emergenza, contattare la propria unità di cura o il numero di emergenza telefonicamente.
- In alcuni casi particolari, i consigli e le istruzioni per l'autogestione forniti da Healthentia potrebbero non essere applicabili alla propria situazione.



Healthentia – Mobile-app

v4





- Se hai domande sulla tua cura, sui sintomi o sulla gestione, contatta il tuo team sanitario.
- Il dispositivo non è destinato a sostituire l'assistenza di un professionista sanitario, inclusa la prescrizione, la diagnosi o il trattamento.
- Il telemonitoraggio non sostituisce i controlli regolari dal medico. Consulta il medico in caso di sintomi gravi o persistenti.
- In combinazione con Healthentia, utilizza solo dispositivi di misurazione le cui prestazioni tecniche (accuratezza, precisione) siano state verificate dal tuo operatore sanitario, poiché ciò può influire sull'esito del monitoraggio.
- Verifica la coerenza dei tuoi dati clinici e il corretto trasferimento degli stessi al tuo operatore sanitario, poiché la qualità della diagnosi e del trattamento si basa anche su queste informazioni.

DISCLAIMER

Il tuo operatore sanitario è responsabile della valutazione finale della tua diagnosi e del tuo trattamento.

Healthentia fornisce informazioni a supporto delle decisioni diagnostiche e terapeutiche, ma il contesto clinico generale deve essere sempre preso in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione.

Requisiti di accuratezza

I requisiti di accuratezza per i dispositivi IoT collegati a Healthentia sono elencati di seguito.

misurazione	minimo precisione
Pressione sanguigna	$\leq 10 \text{ mmHg}$ (almeno l'85% di probabilità)
SpO2	$A_{\text{rms}} \pm 2\text{-}3\%$ dei valori dell'emogasanalisi arteriosa
Cuore (frequenza cardiaca a riposo, massima, ...)	$\pm 10\%$ della frequenza di input o $\pm 5 \text{ bpm}$
Peso	$\pm 0.5\text{-}1.0 \text{ kg}$
Attività fisica (passi, ...)	n/a
Sonno	n/a

Integrazione con altri dispositivi

L'app Healthentia è compatibile con altri dispositivi per la raccolta di informazioni sullo stile di vita e sui parametri vitali. I dispositivi supportati da utilizzare insieme a Healthentia sono:

- Tracker e orologi Garmin tramite API Garmin (Android e iOS)**: Fenix 5 pro, Fenix 6 pro, Forerunner 945, Vivoactive 4, Vivosmart 4, Venu 2S,
- Tracker e orologi Fitbit tramite API Google Health (Android e iOS)**: Versa, Inspire 2
- Dispositivi iHealth tramite Bluetooth (Android e iOS): Misuratore di pressione sanguigna connesso iHealth Track (KN-550BT)*, Bilancia intelligente per la composizione corporea iHealth Fit (HS2S)***, Pulsossimetro intelligente - iHealth Air (POM3)*
- Cintura Polar tramite API Polar (Android e iOS): H9**
- Dispositivi Withings tramite connettività cellulare (Android e iOS): Misuratore di pressione intelligente - Withings BPM PRO 2*, BPM PRO*, Bilancia intelligente per la composizione corporea - Withings Body Pro*

* Il dispositivo ha una precisione accettabile per lo scopo previsto da Healthentia

** Il dispositivo non possiede un'accuratezza accettabile per lo scopo previsto di Healthentia e può essere utilizzato solo per misurazioni che non richiedono precisione (es. contapassi, sonno).



Healthentia – Mobile-app

v4





In combinazione con Healthentia, utilizzare solo dispositivi di misurazione prescritti dal proprio operatore sanitario, poiché ciò può influire sull'esito del monitoraggio.

Questi dispositivi costituiscono una combinazione sicura e attualmente non ci sono informazioni specifiche su restrizioni note relative alle combinazioni di dispositivi.

Healthentia visualizza i valori secondo le unità di misura internazionali (m, kg, s) indipendentemente dalla preferenza dell'utente nel proprio dispositivo IoT.

REQUISITI MINIMI

Hardware supportato

Qualsiasi smartphone che utilizzi il sistema operativo supportato (vedi sotto) è un dispositivo hardware compatibile.

Sistemi operativi mobili supportati

L'app Healthentia supporta i seguenti sistemi operativi sulle piattaforme Android e iOS:

- Android: 7.0 e versioni successive
- iOS: 15.1 e versioni successive

Formazione

Non è necessaria alcuna formazione per utilizzare il dispositivo in sicurezza.





SICUREZZA E PRESTAZIONI

Sicurezza

Innovation Sprint si impegna a proteggere la sicurezza delle informazioni degli interessati e adotta misure ragionevoli per garantirla, inclusa la protezione contro accessi non autorizzati, necessaria per il corretto funzionamento del software. In questo contesto, Innovation Sprint valuta e rivede regolarmente le tecnologie, le strutture, le procedure e i potenziali rischi per mantenere la sicurezza e la riservatezza dei dati degli utenti, prestando particolare attenzione agli accessi basati su ruoli e alla registrazione degli accessi ai dati sanitari. Inoltre, eventuali modifiche alle applicazioni software, ai servizi forniti e/o ai sistemi hardware sono adeguatamente giustificate, valutate e registrate secondo le migliori pratiche e norme internazionali.

- Evitare di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche per connettersi a Healthentia quando si stanno per aggiungere e/o gestire dati sanitari e/o dettagli del profilo.
- Non utilizzare dispositivi con jailbreak.
- Le password devono essere composte da almeno otto (8) caratteri e contenere caratteri di almeno tre dei seguenti quattro gruppi: lettere minuscole, lettere maiuscole, numeri (0-9), caratteri speciali.
- Non memorizzare mai le password sui dispositivi.
- Cambiare le password almeno ogni sei mesi.
- Installare un programma anti-malware sui propri dispositivi e aggiornarlo regolarmente.
- Assicurarsi che ogni indirizzo e-mail registrato in Healthentia corrisponda a voi.
- Ignorare ed eliminare messaggi di origine dubbia e non seguire i link in essi contenuti.
- Non rivelare, tramite telefono, e-mail, moduli Internet o social media, informazioni riservate come nome utente o password.
- Utilizzare sempre le versioni più aggiornate del sistema operativo del proprio dispositivo e dell'app Healthentia.
- Si consiglia all'utente di mantenere l'impostazione Bluetooth su "non rilevabile" (trasmissione disabilitata) e di passare alla modalità "rilevabile" solo quando desidera utilizzarla.
- L'utente dovrebbe evitare di memorizzare informazioni critiche (come le credenziali dell'account) sui dispositivi abilitati al Bluetooth.
- Se l'utente deve connettersi a un dispositivo tramite Bluetooth, si raccomanda vivamente di attivare questa connessione in un luogo sicuro.

Prestazioni


Fornire input oggettivi agli operatori sanitari per supportare la diagnosi e la gestione del paziente;

Evidenziare l'evoluzione dei parametri fisiologici tramite analisi delle tendenze degli input del paziente;

Aumentare l'aderenza del paziente al trattamento.




1 SCARICA L'APPLICAZIONE

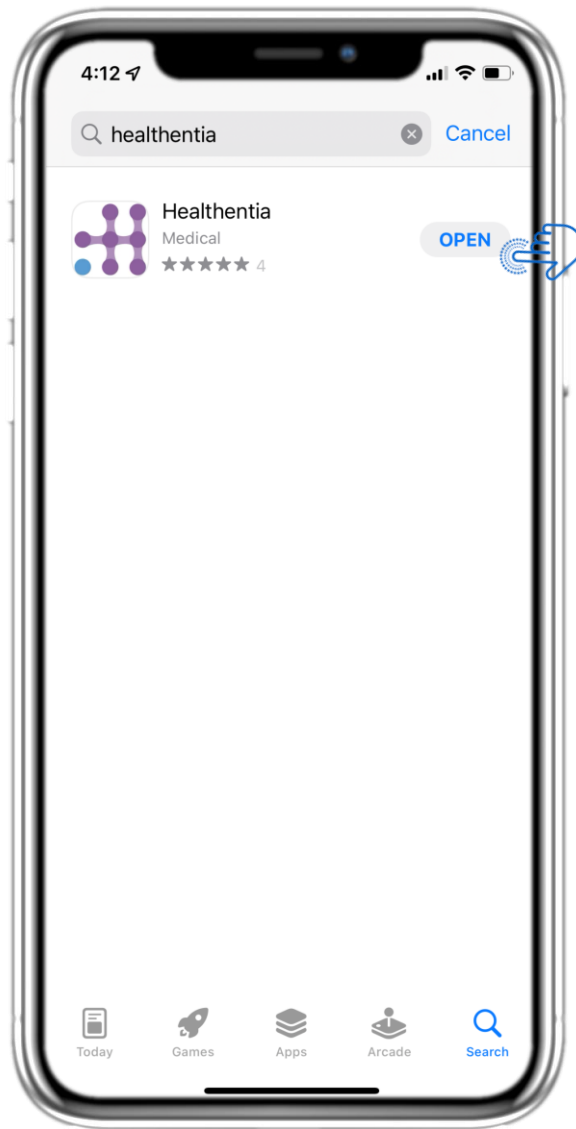

Scarica l'app Healthentia dall'App Store di iOS o da Google Play Store.




2 BENVENUTI / REGISTRATI

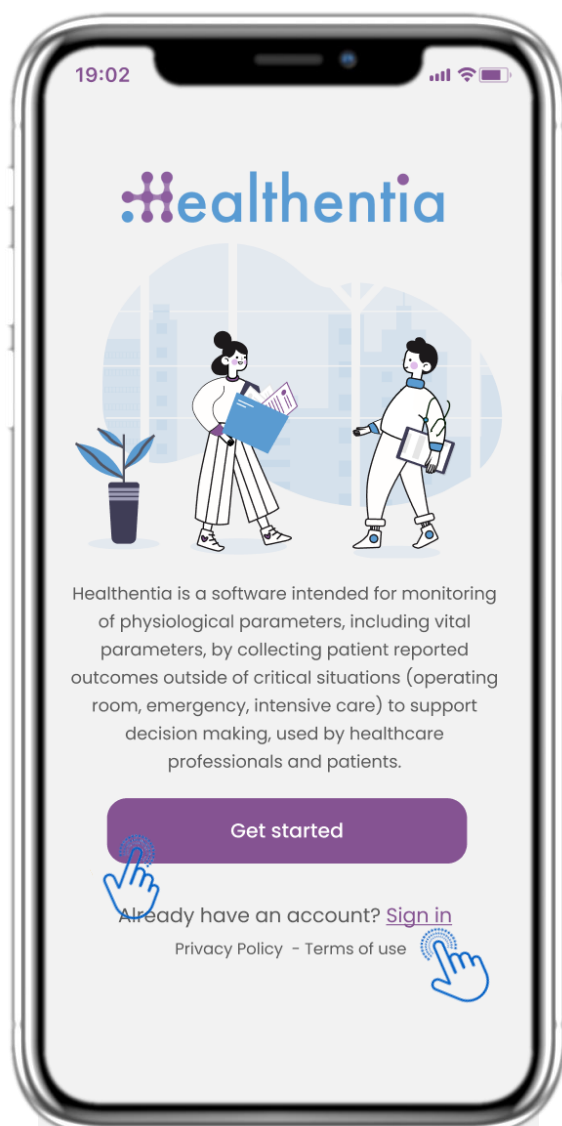

2.1 PAGINA DI BENVENUTO

Pagina iniziale di Healthentia con l'indicazione dell'uso previsto del dispositivo medico. È possibile registrarsi premendo "Inizia" o "Accedi".

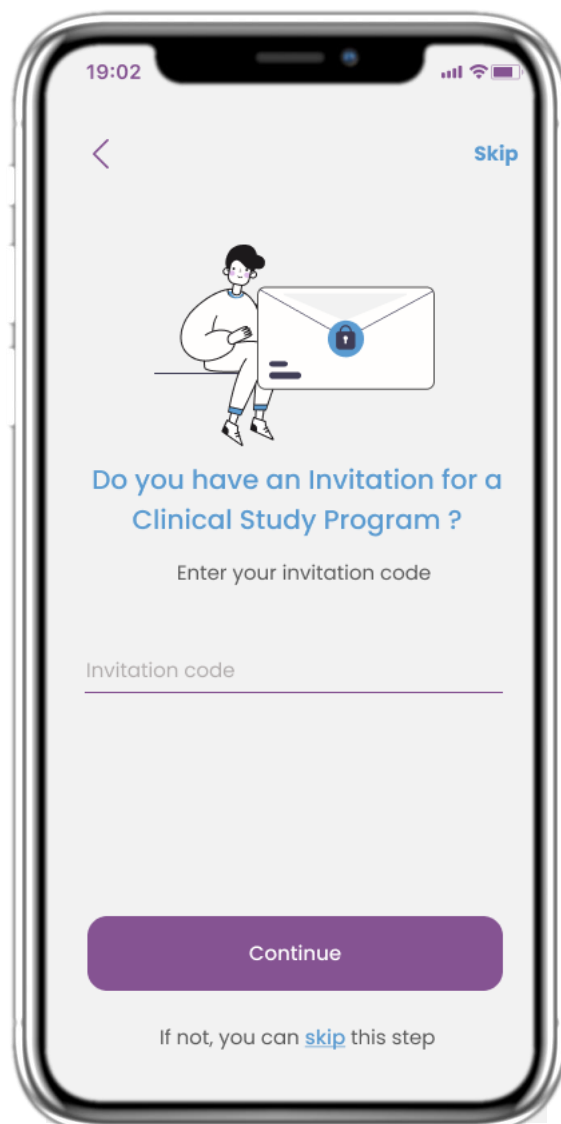

2.2 CODICE DI INVITO

Se hai ricevuto un codice di invito puoi inserirlo qui oppure saltare.



2 QUESTIONARIO DI ONBOARDING

19:02

STEP 1/4

Create a new account

E-mail Address

Password

Confirm password

Continue

2.3 REGISTRO

Registra un nuovo account con un indirizzo email e una password complessa.

19:02

STEP 2/4

skip

Enter your weight and height

Weight 63.5 KG

Height 1.75 CM

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ


• 0

2.4 INSERISCI PESO-ALTEZZA

Inserisci il tuo peso e la tua altezza per il tuo profilo.




2 QUESTIONARIO DI ONBOARDING

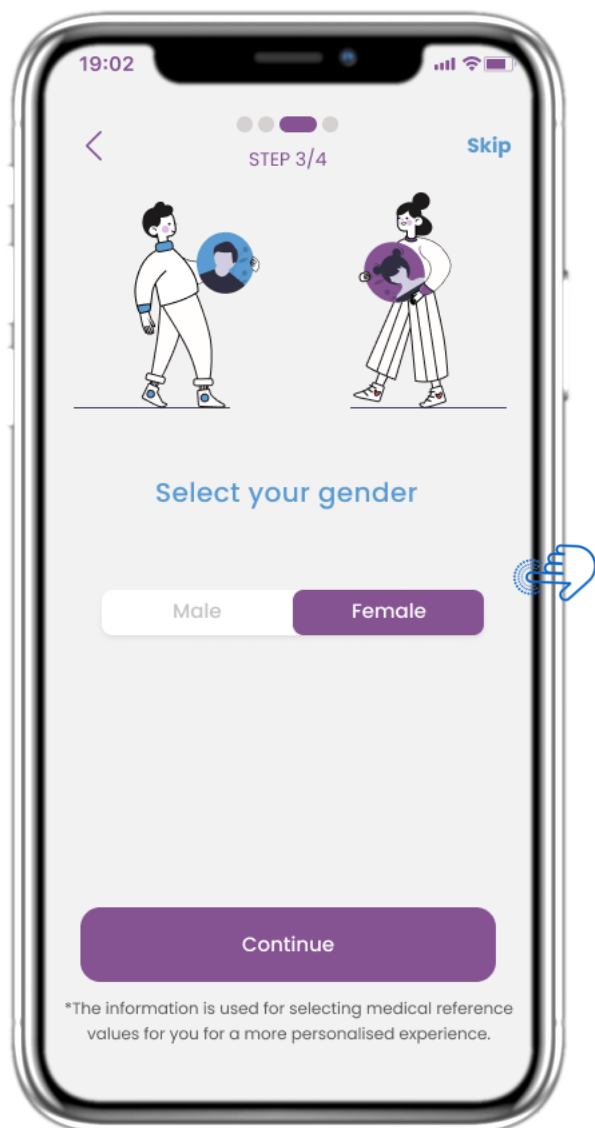

2.5 SELEZIONA GENERE

Scegli il tuo genere per il tuo profilo

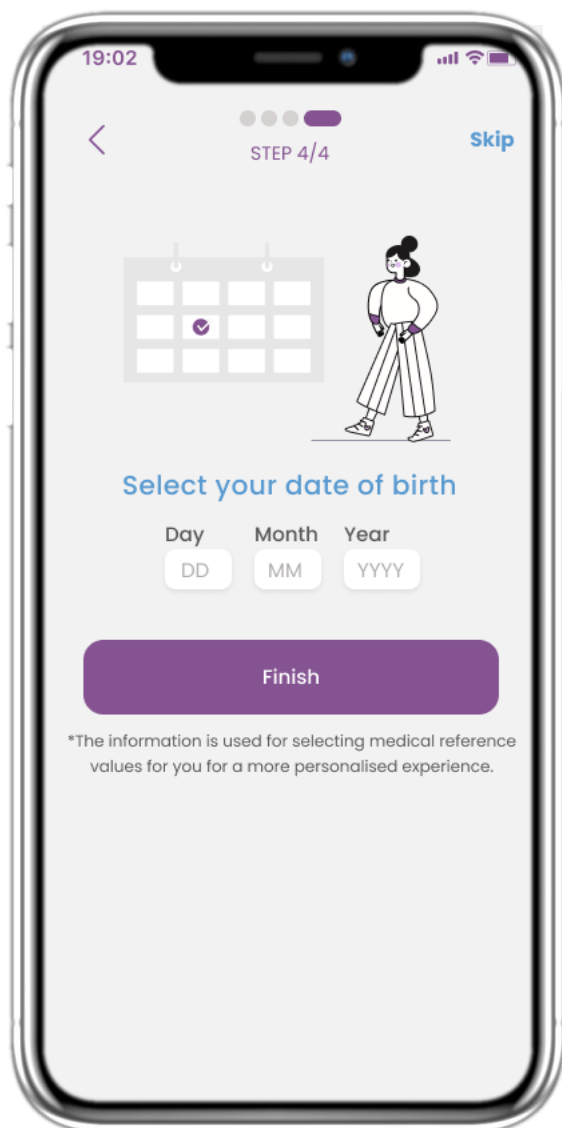


2.6 SELEZIONA DATA DI NASCITA

Seleziona la tua data di nascita per il tuo profilo.




2 CONSENSI / AUTORIZZAZIONI

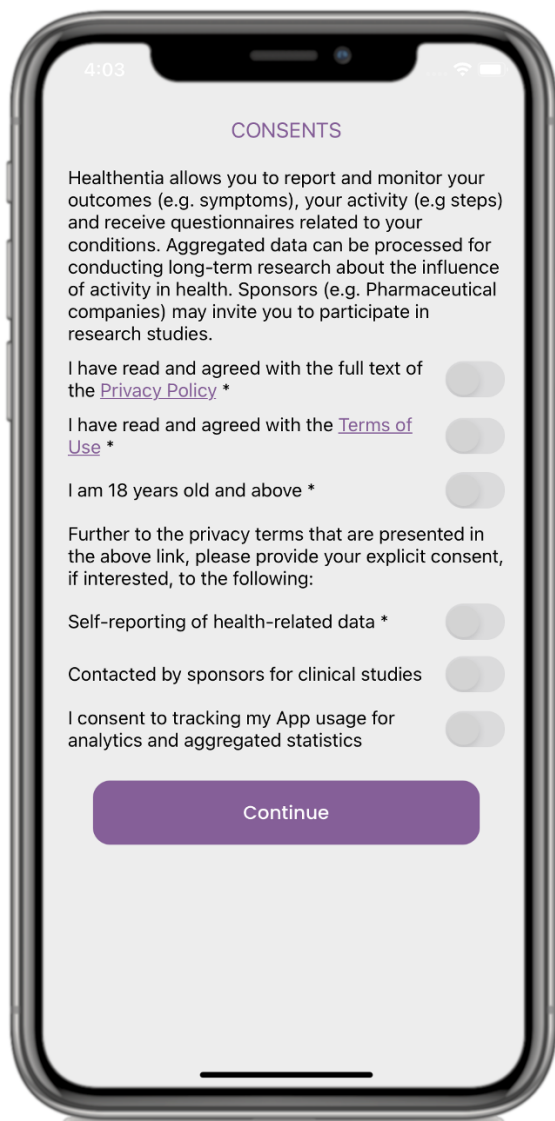

2.7 PAGINA DEI CONSENSI


Seleziona se acconsenti a condividere i tuoi dati in forma anonima per scopi di ricerca. Leggi e accetta i Termini e l'Informativa sulla privacy di Healthentia e indica le tue preferenze in merito ai consensi espliciti.

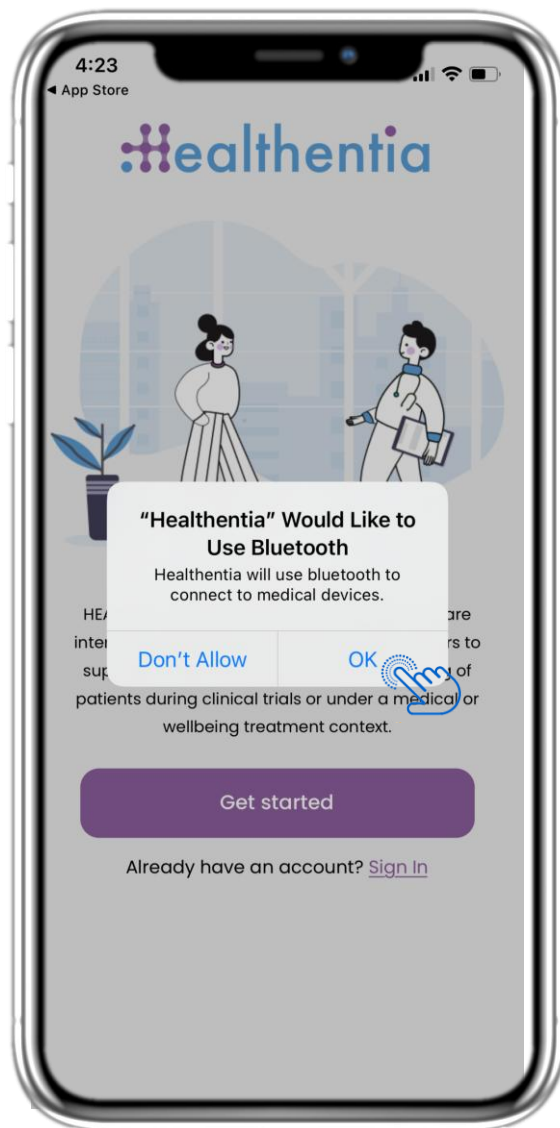

2.8 NOTIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI


Autorizza l'app Healthentia a inviarti notifiche, a utilizzare il Bluetooth e a connettersi ad altri dispositivi.

3 NOTIFICHE HOME E PUSH

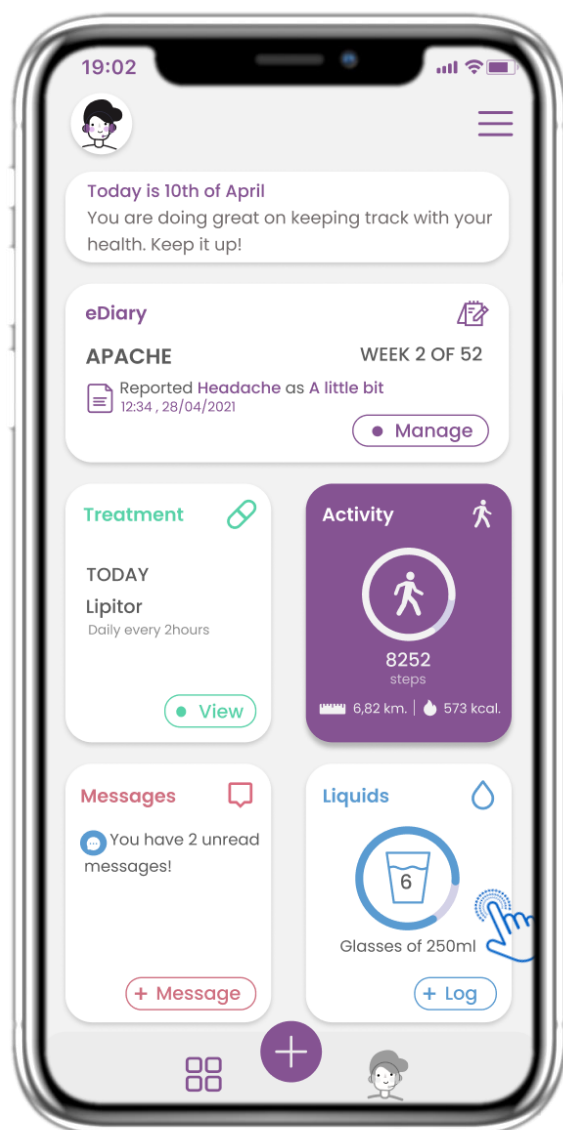

3.1 HOME

Nella pagina HOME, si viene accolti dal chatbot che annuncia i questionari in sospeso. Nella parte inferiore della pagina HOME sono presenti i diversi widget configurati per lo studio specifico.

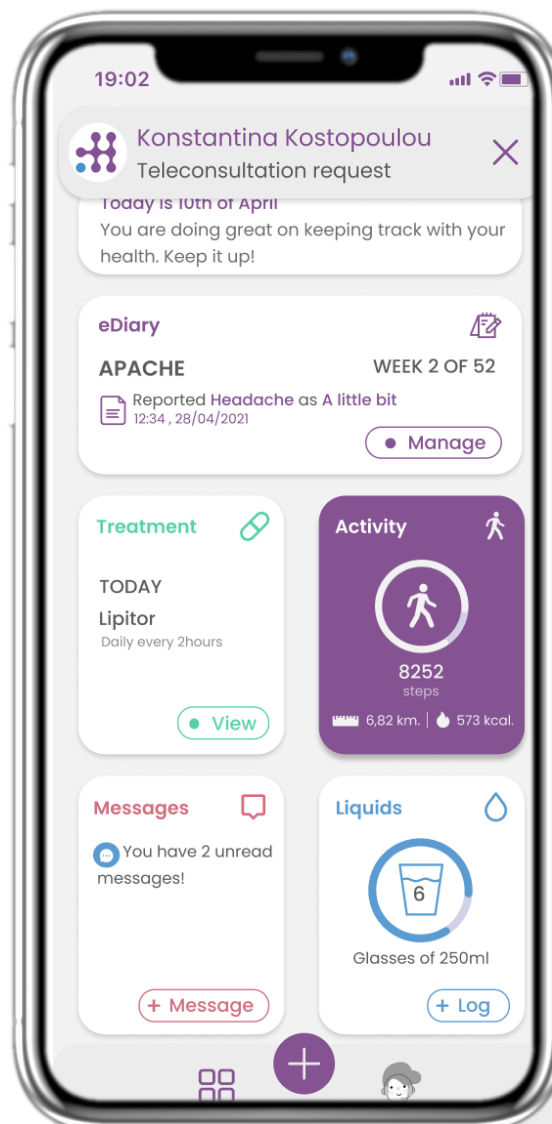


3.2 NOTIFICHE PUSH

Healthentia ti chiede di autorizzare le notifiche dalle tue impostazioni per poter ricevere promemoria sui questionari e sui trattamenti.




3 NOTIFICHE HOME E PUSH

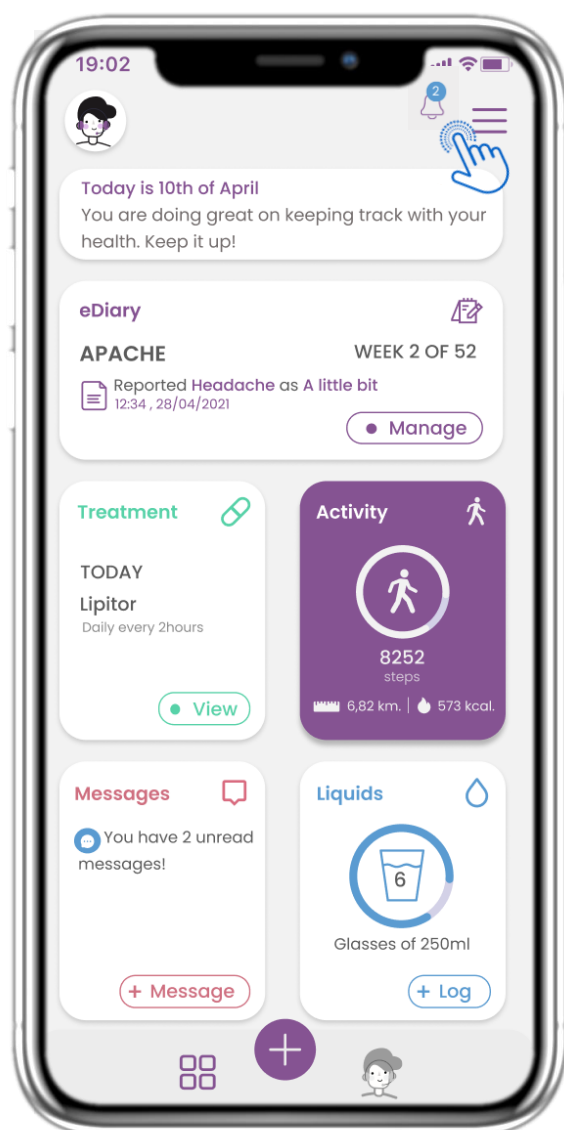

3.3 NOTIFICHE

Nella HOME page puoi vedere i questionari in sospeso sotto forma di notifiche nell'angolo in alto a destra con l'icona della campanella.

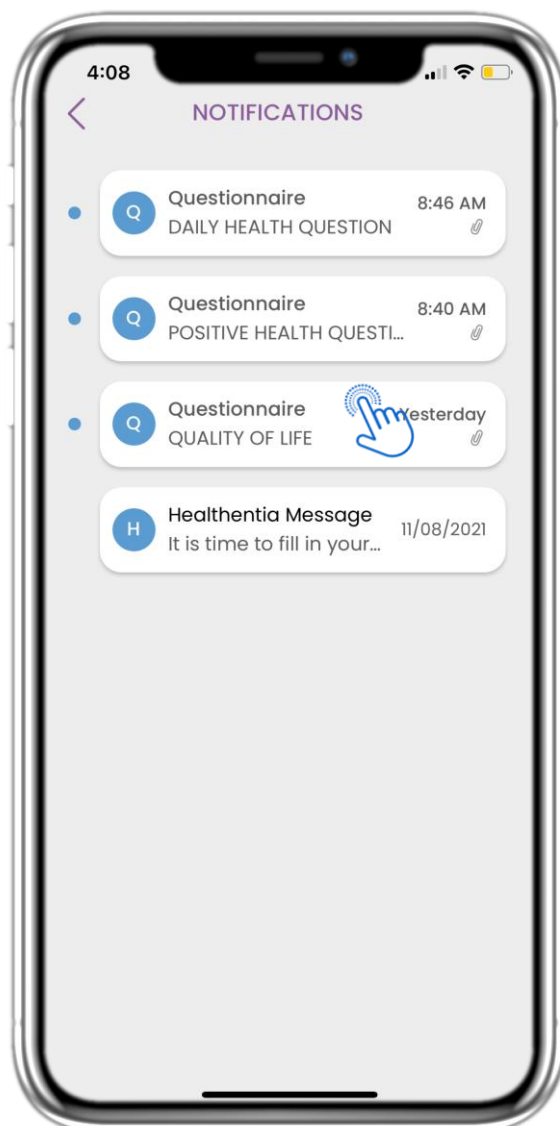

3.4 NOTIFICHE

Nella pagina Notifiche puoi trovare un elenco dei questionari in sospeso a cui devi rispondere.



3 NOTIFICHE HOME E PUSH



3.5 AGGIORNAMENTO FORZATO

Quando è disponibile una nuova versione dell'app che deve essere obbligatoriamente aggiornata, i pazienti vedono le informazioni di cui sopra e non possono utilizzare l'app, a meno che non clicchino per aggiornarla.




Healthentia – Mobile-app

v4




4 WIDGET HOME

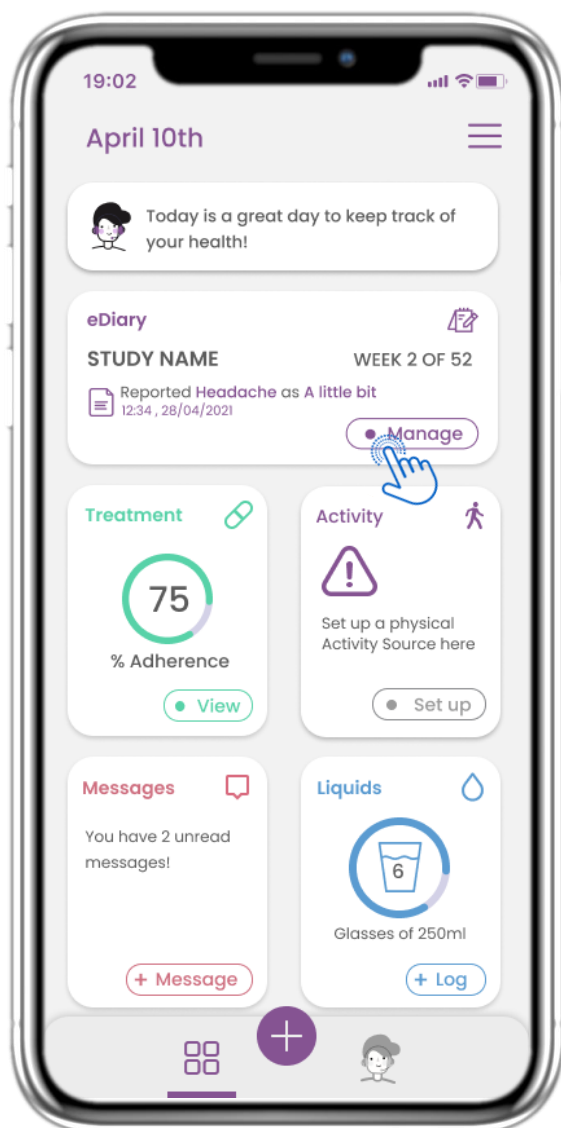

4.1 WIDGET DIARIO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget eDiary che viene utilizzato come diario del tuo studio o del monitoraggio della terapia.


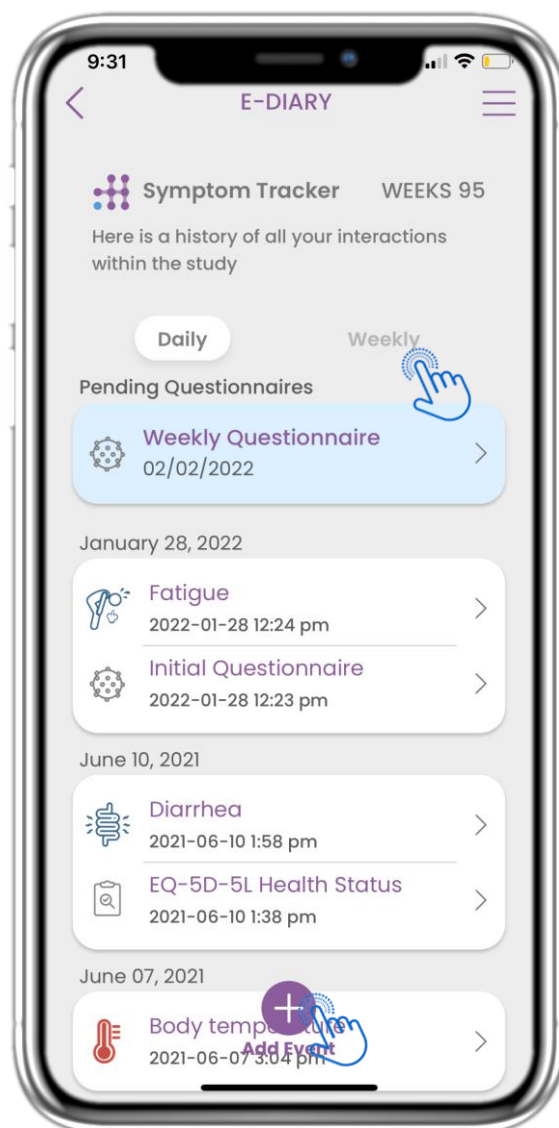


4.2 PAGINA DELL'eDIARIO

Nella pagina eDiary puoi trovare un aggiornamento giornaliero e settimanale dei tuoi report e dei questionari inviati. Puoi anche usare il pulsante (+) per aggiungere un nuovo evento.



4 WIDGET HOME

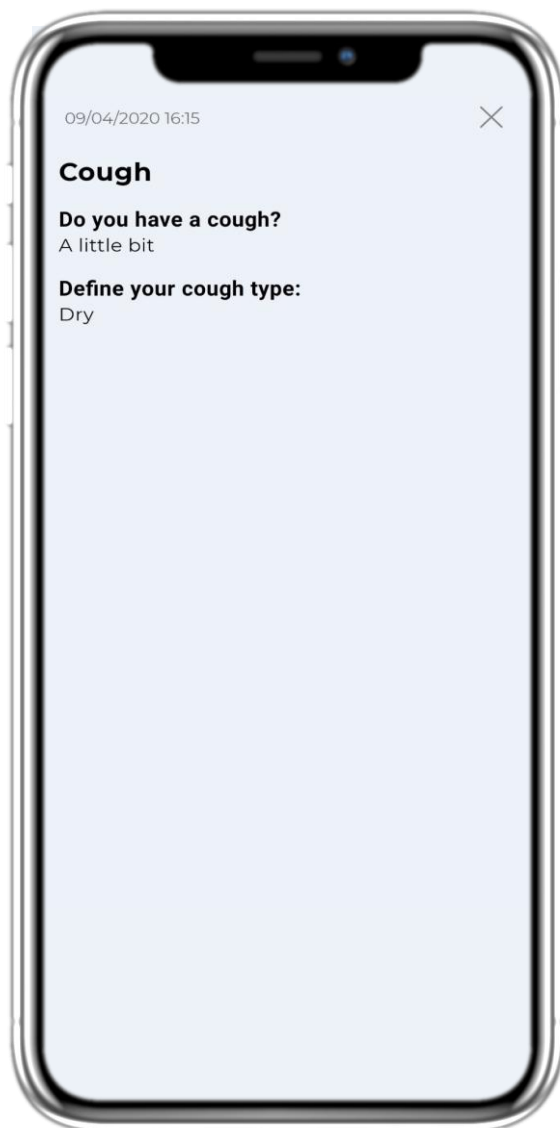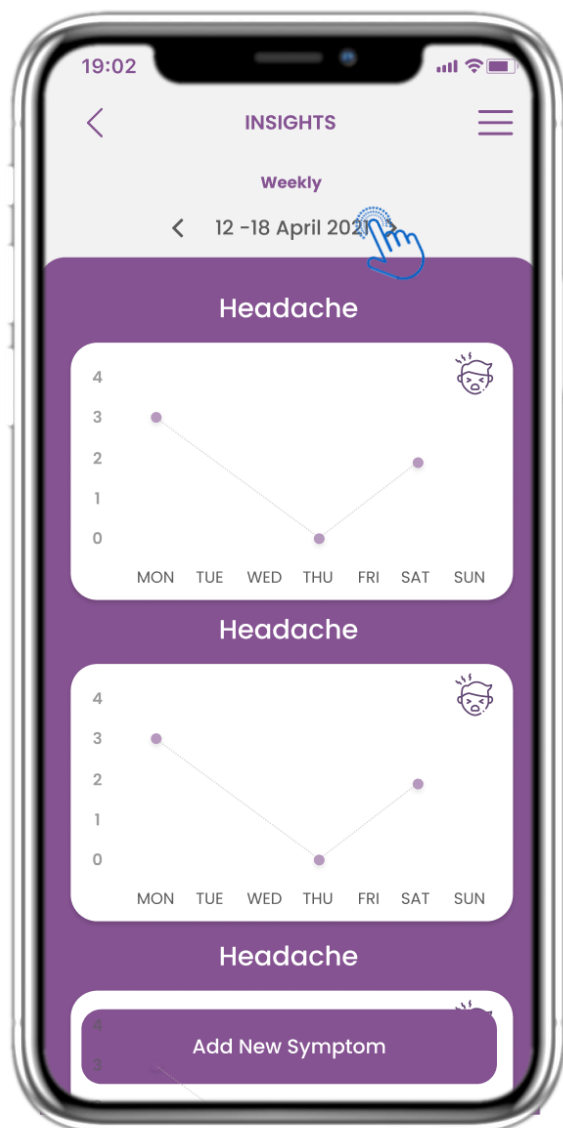

4.3 APPROFONDIMENTI EDIALISTICI


Se lo studio consente di mostrare grafici dei sintomi all'utente, sarà presente un pulsante per aprire questa pagina. Con il calendario è possibile scorrere avanti e indietro le settimane.

4.4 VISUALIZZA LE RISPOSTE SEGNALATE

È possibile visualizzare i questionari inviati con le relative risposte.




4 WIDGET HOME

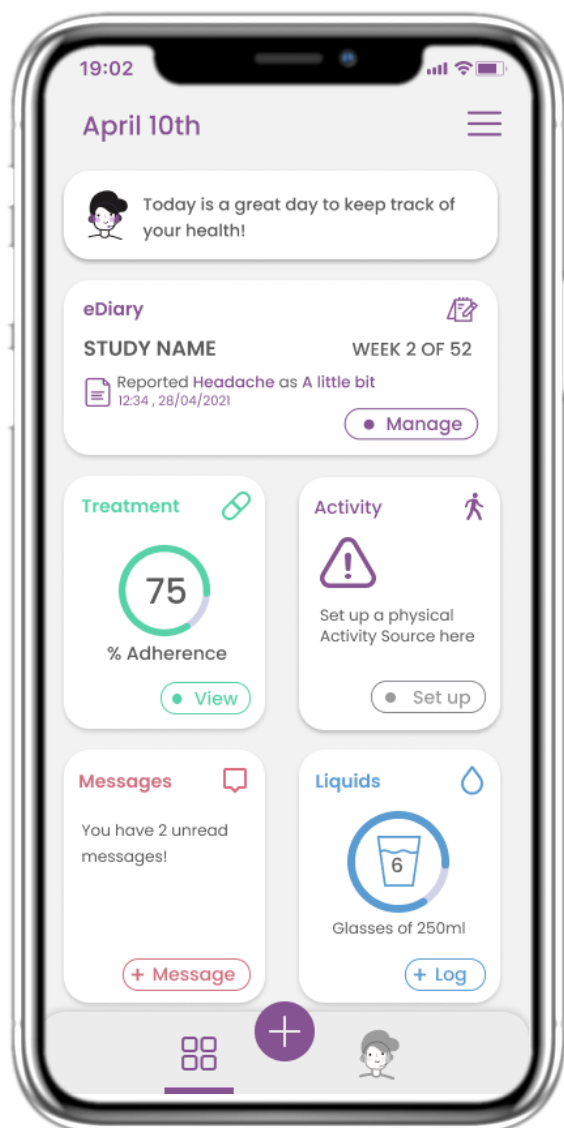

4.5 WIDGET MEDICINALI

Nella pagina HOME puoi trovare il widget dei farmaci che serve per impostare il tuo piano terapeutico.

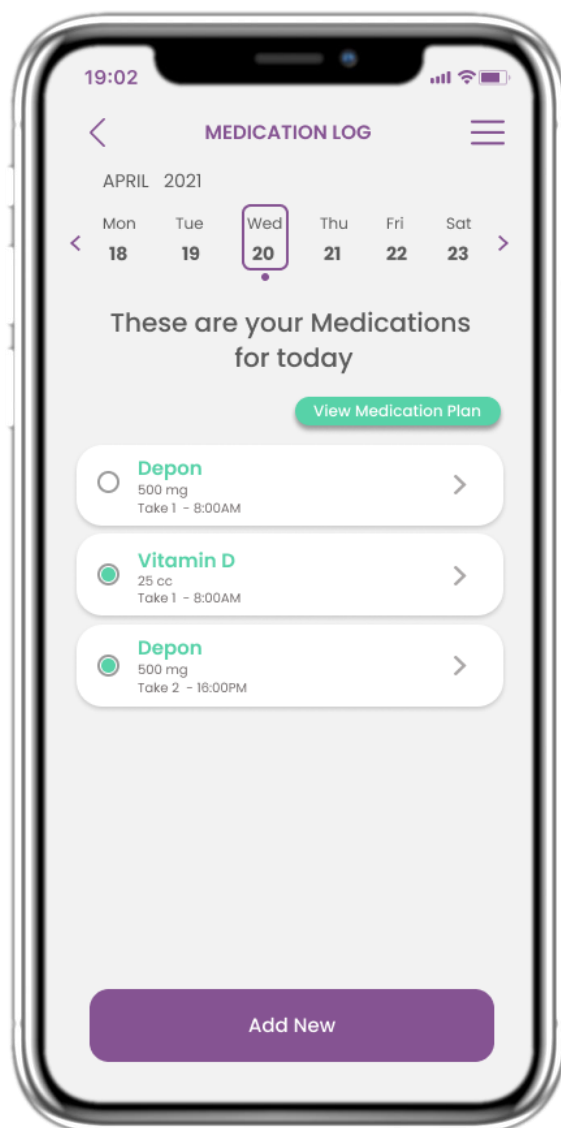


4.6 REGISTRO DEI FARMACI

Nella pagina Registro Farmaci puoi trovare un programma giornaliero dei tuoi farmaci. Puoi accedervi e modificarli, oppure aggiungerne di nuovi.




4 WIDGET HOME

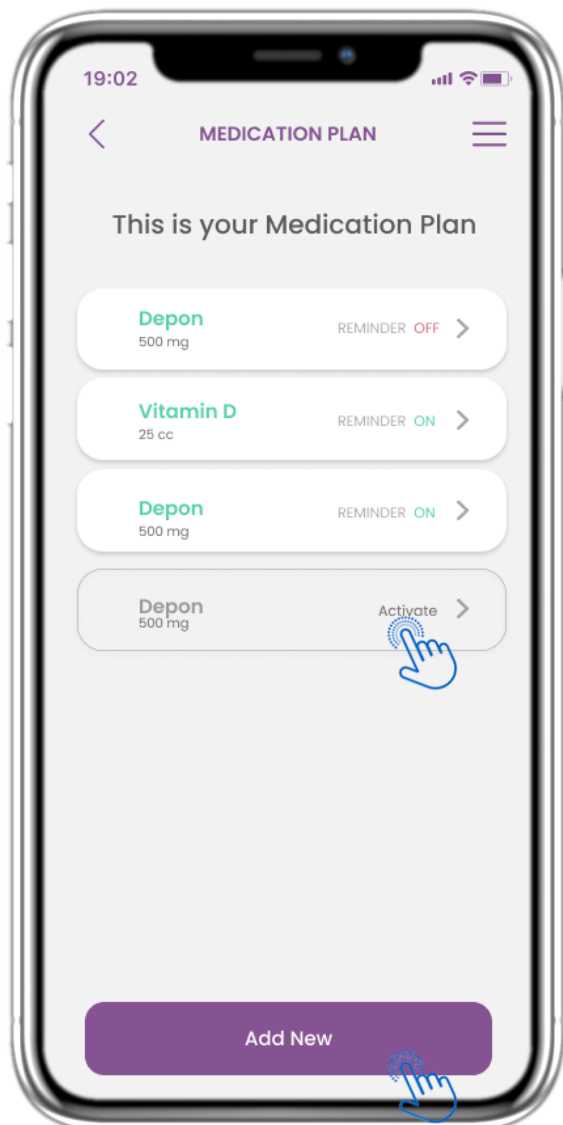

4.7 VEDI TUTTI I MEDICINALI

Nella pagina dei trattamenti puoi accedere e configurare tutti i trattamenti

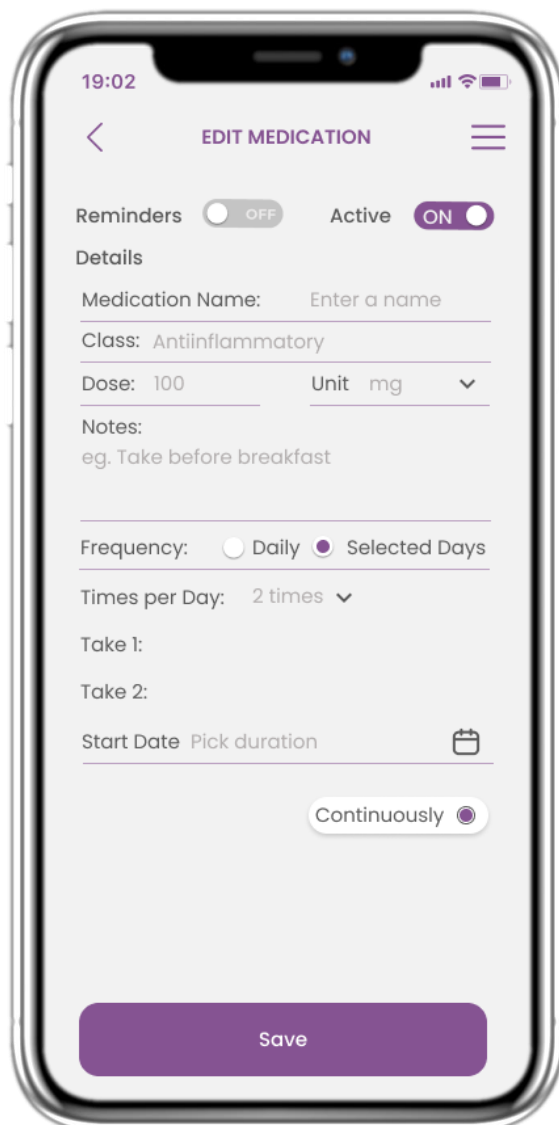


4.8 AGGIUNGI/MODIFICA NUOVO MEDICINALE

Nella pagina Nuovo farmaco puoi configurare un nome, una frequenza, una durata per i tuoi farmaci e aggiungere un promemoria.




4 WIDGET HOME

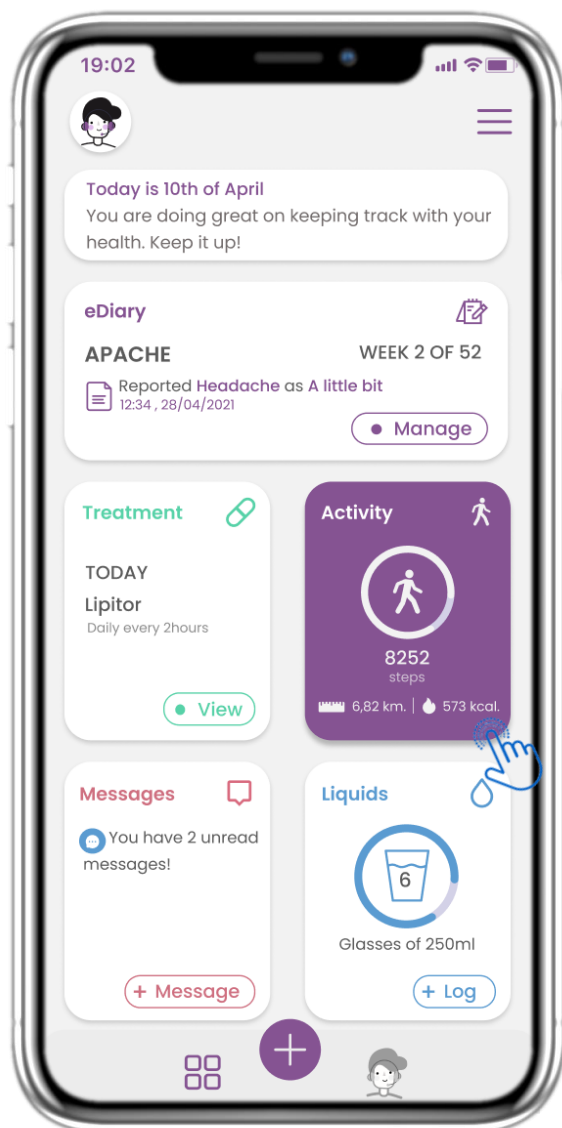

4.9 ATTIVITÀ

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Attività che serve per configurare il tuo tracker.

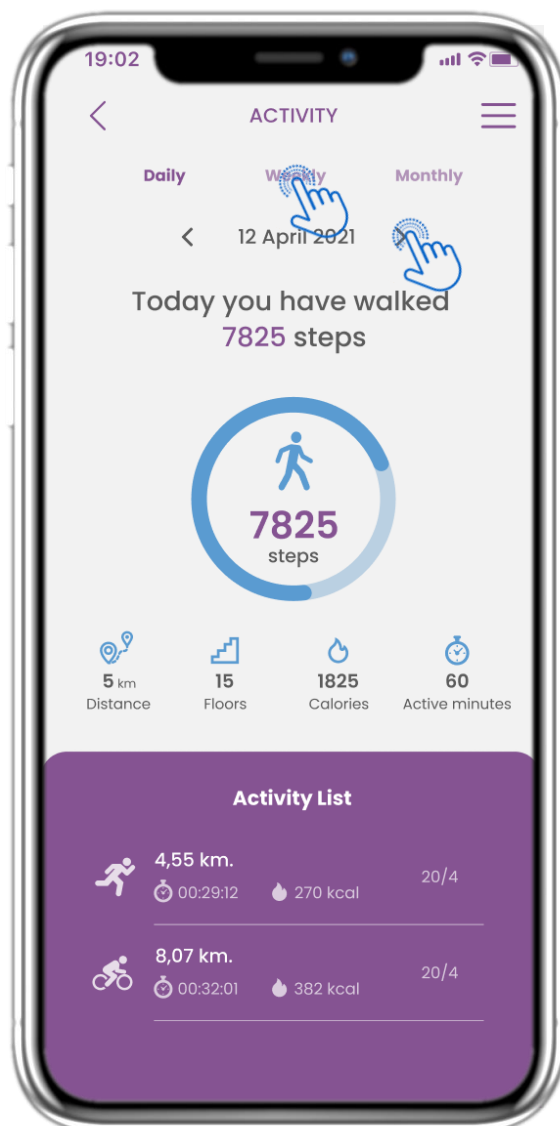


4.10 PAGINA ATTIVITÀ

Nella pagina Attività puoi monitorare i passi giornalieri, la distanza, i piani, le calorie e i minuti attivi. Con il calendario ti sposti tra i giorni e premendo settimanalmente vai ai grafici.




4 WIDGET HOME

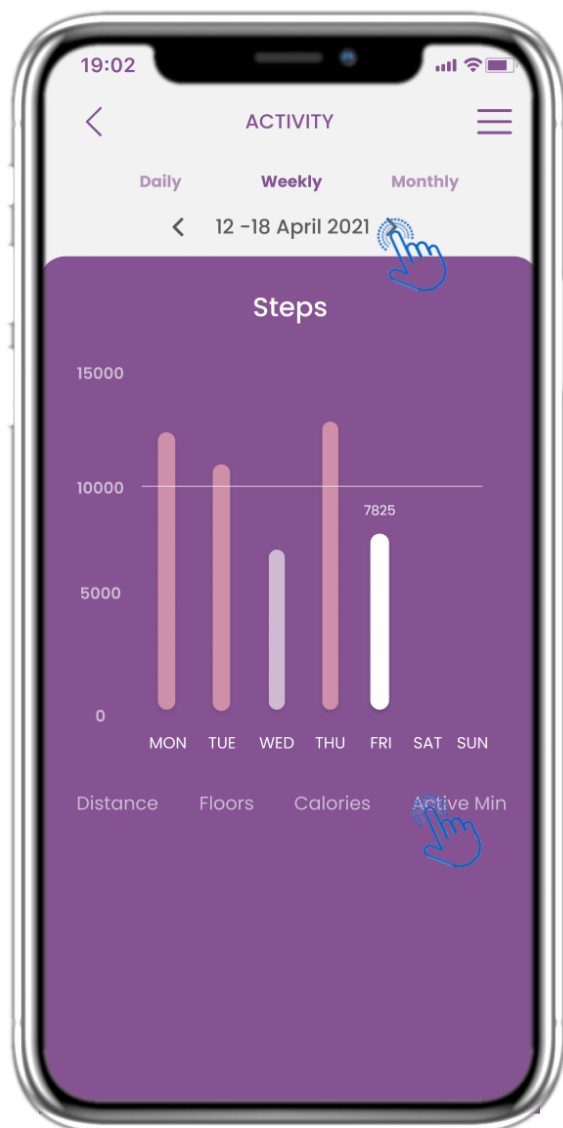

4.11 GRAFICI DI ATTIVITÀ

Nella pagina dei grafici ATTIVITÀ settimanali puoi trovare i passi, la distanza, i piani, le calorie e i minuti attivi settimanali.

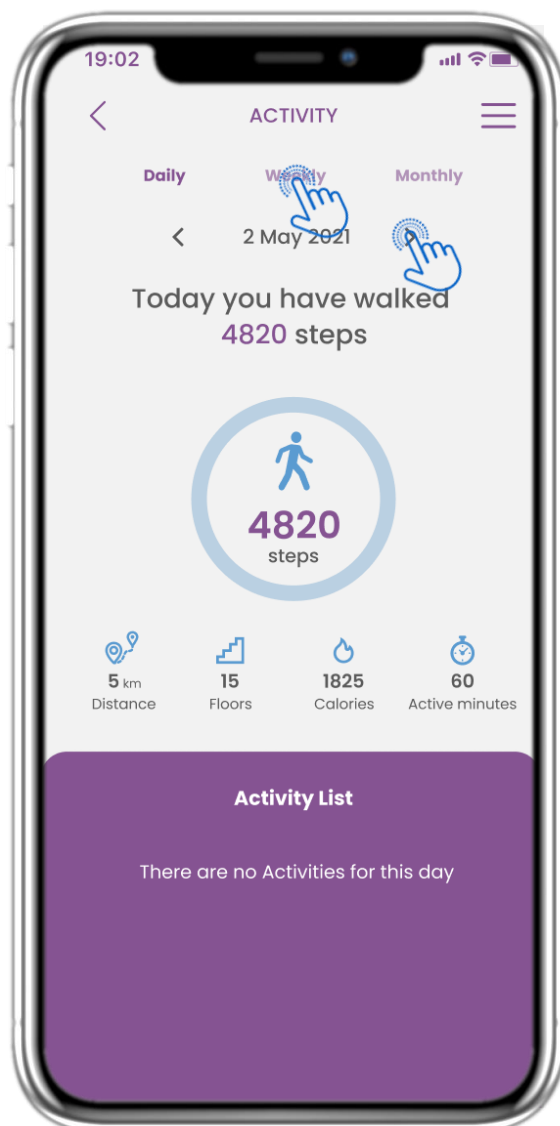


4.12 PAGINA ATTIVITÀ

Nessuna attività sportiva è stata raccolta dal dispositivo indossabile.




4 WIDGET HOME

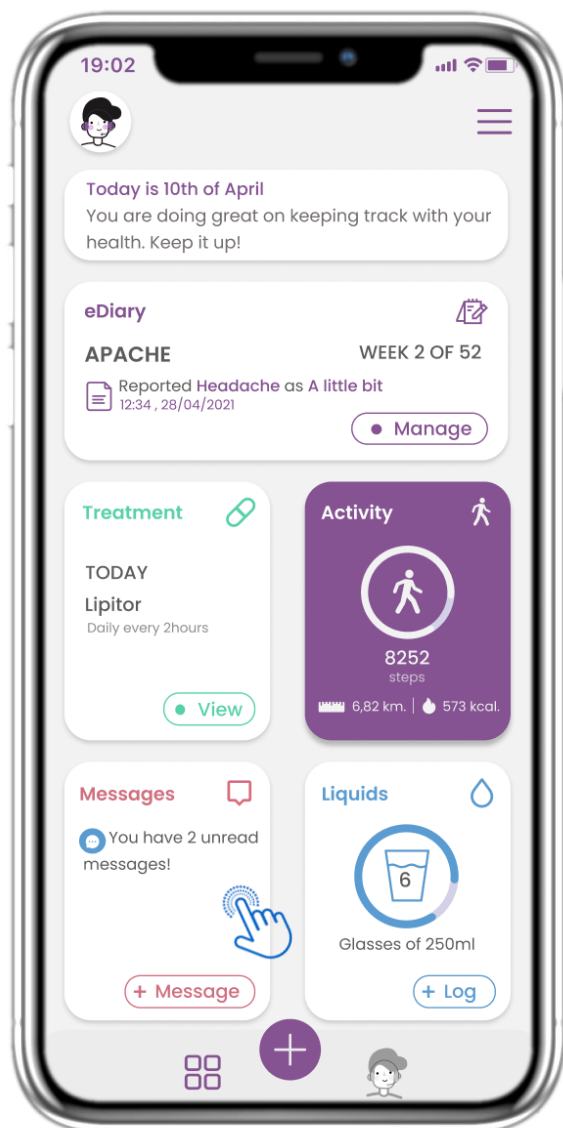

4.13 MESSAGGI

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Messaggi che ti permette di contattare il tuo Medico o l'Ospedale e di effettuare anche una teleconsulenza.

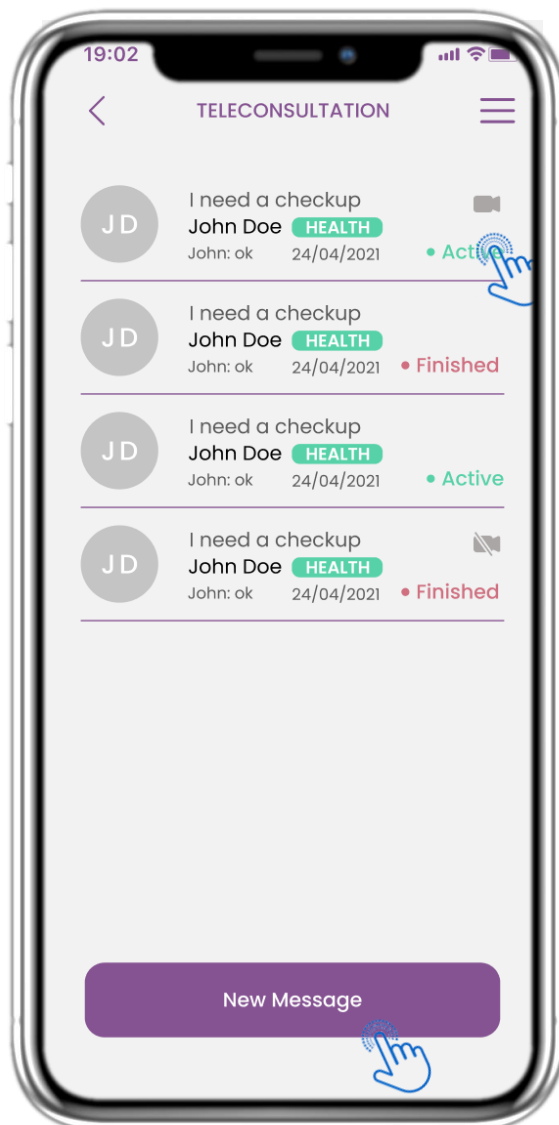


4.14 PAGINA POSTA IN ARRIVO MESSAGGI

Nella pagina Messaggi puoi visualizzare la comunicazione con il professionista sanitario. Crea un nuovo messaggio o accedi alla sala di teleconsulto.




4 WIDGET HOME

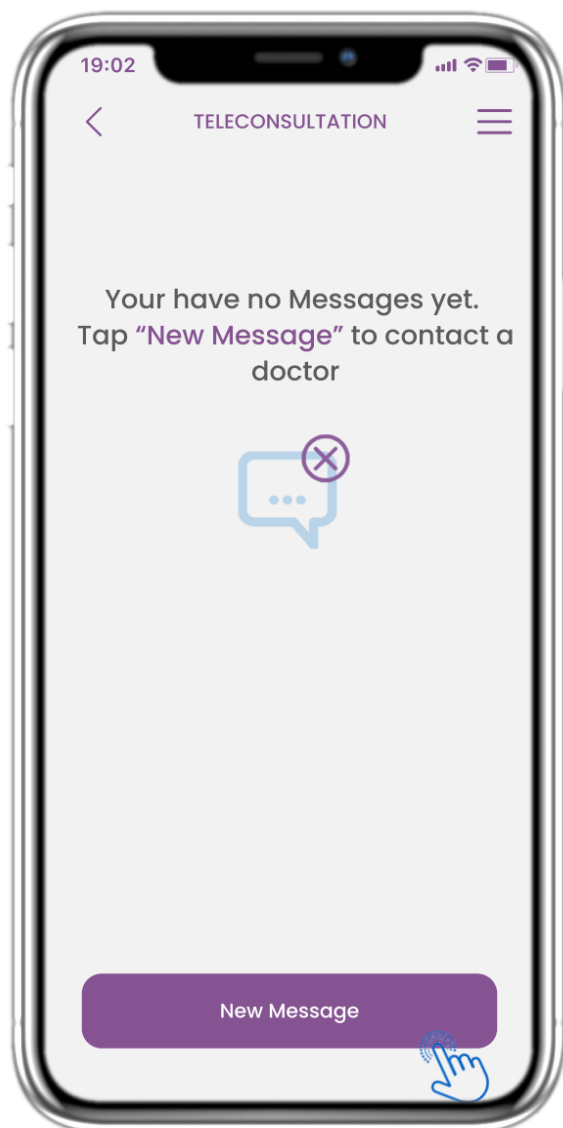

4.15 NESSUN MESSAGGIO

Se non ci sono messaggi la pagina appare così.

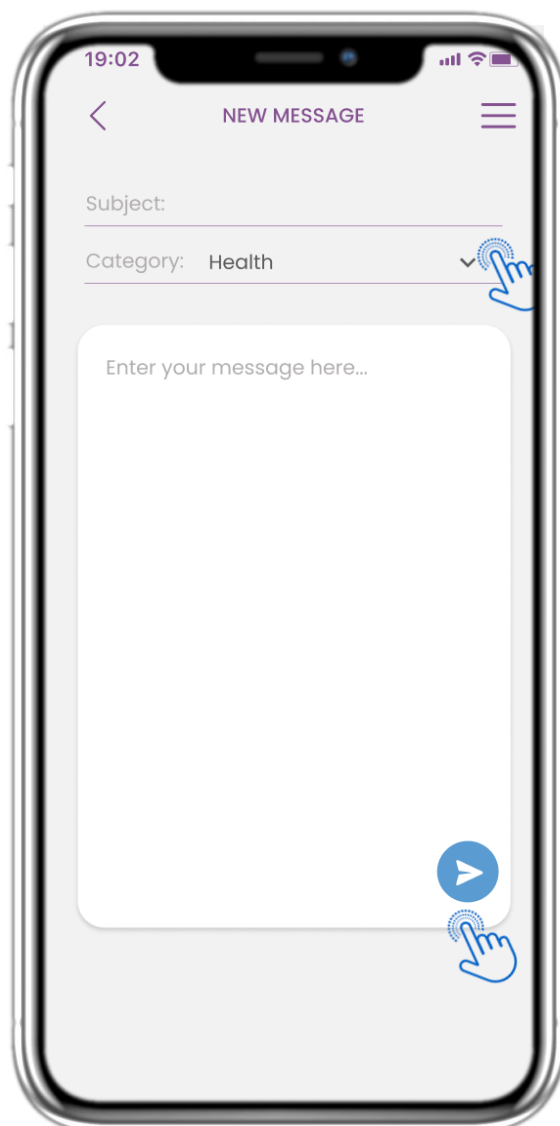


4.16 CREA NUOVO MESSAGGIO

Nella casella Messaggio puoi selezionare un Oggetto e una categoria definiti dall'operatore sanitario e inserire il tuo messaggio.



4 WIDGET HOME

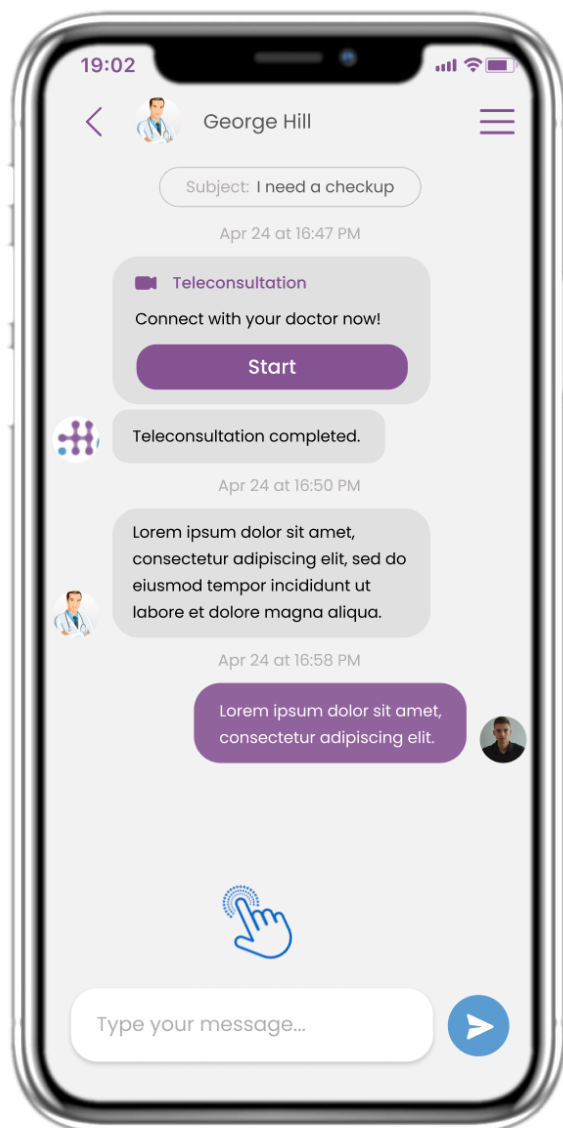

4.17 APRIRE IL MESSAGGIO


Tutte le risposte e le comunicazioni vengono conservate in un'unica conversazione. L'operatore sanitario chiude la conversazione.



4.18 TELECONSULTAZIONE


Nella conversazione Messaggio, il professionista sanitario può avviare una teleconsulenza che consentirà all'utente di entrare in una finestra temporale di 15 minuti.

4 WIDGET HOME

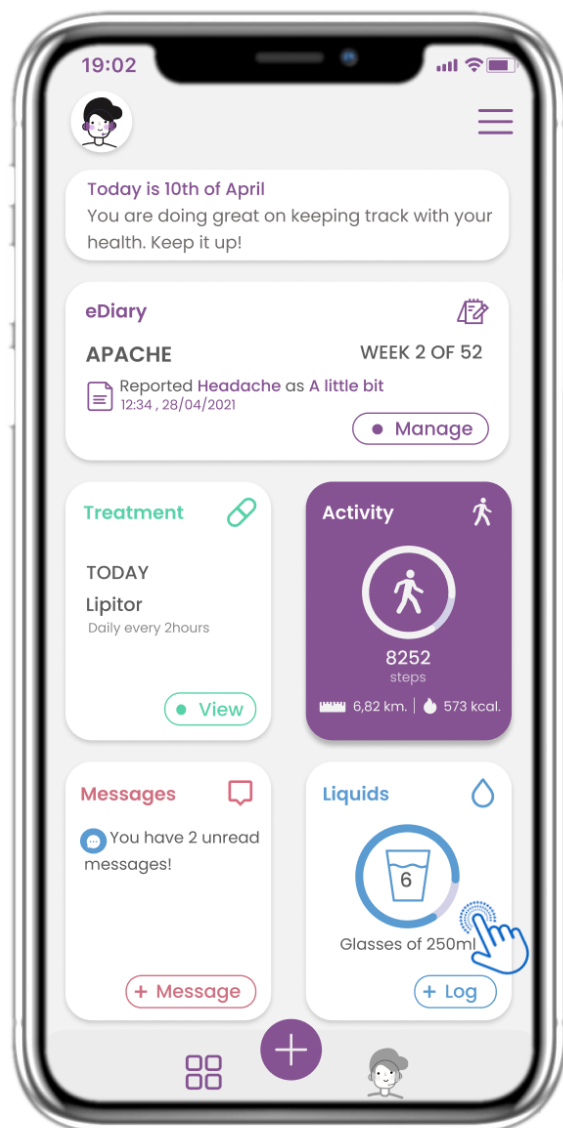

4.19 WIDGET LIQUIDO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Liquid che viene utilizzato per registrare l'assunzione giornaliera di acqua e altri liquidi.

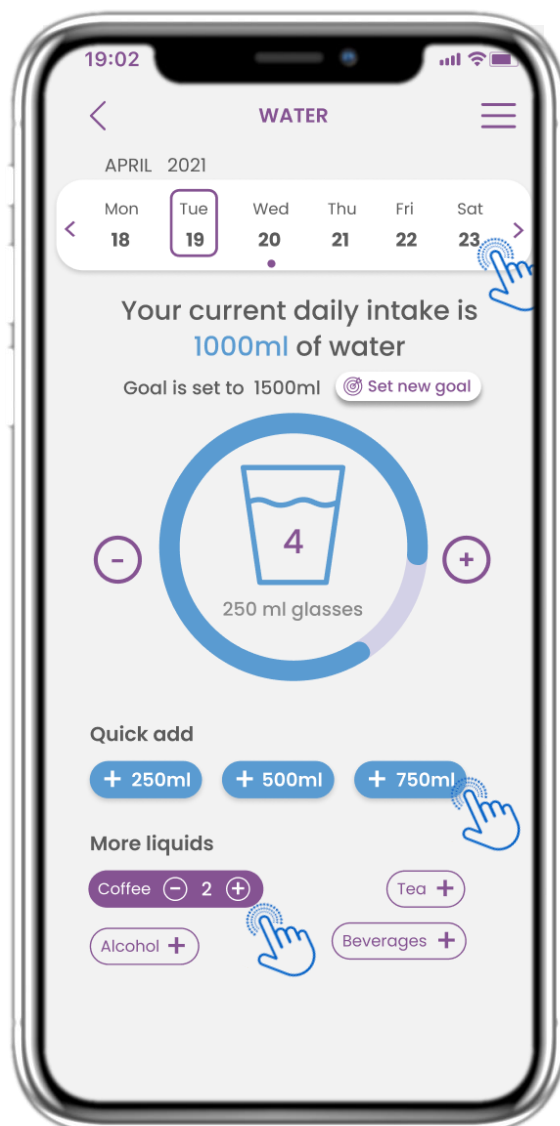


4.20 PAGINA LIQUIDA

Nella pagina Liquidi puoi aggiungere bicchieri d'acqua con i pulsanti rapidi da 250-500-750 ml e aggiungere altri liquidi come caffè o bevande.




4 WIDGET HOME

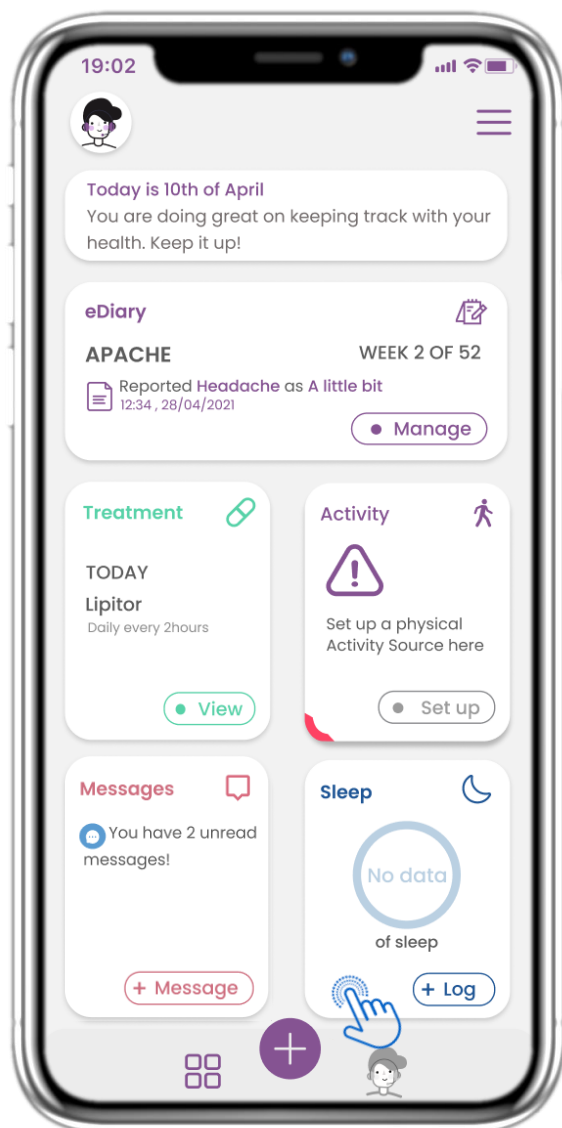

4.21 WIDGET SONNO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Sonno che serve per registrare manualmente i dati del tuo sonno o tramite un dispositivo indossabile.


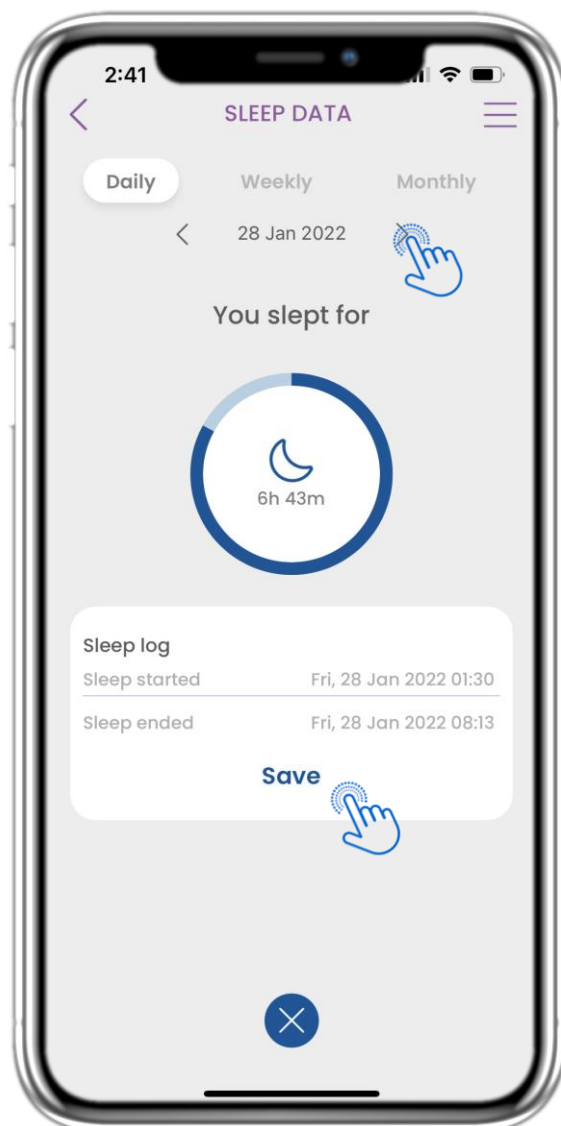


4.22 REGISTRO PAGINA SONNO

Nella pagina Sonno puoi aggiungere manualmente i dati sul sonno e spostarti tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri sul sonno e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.



4 WIDGET HOME

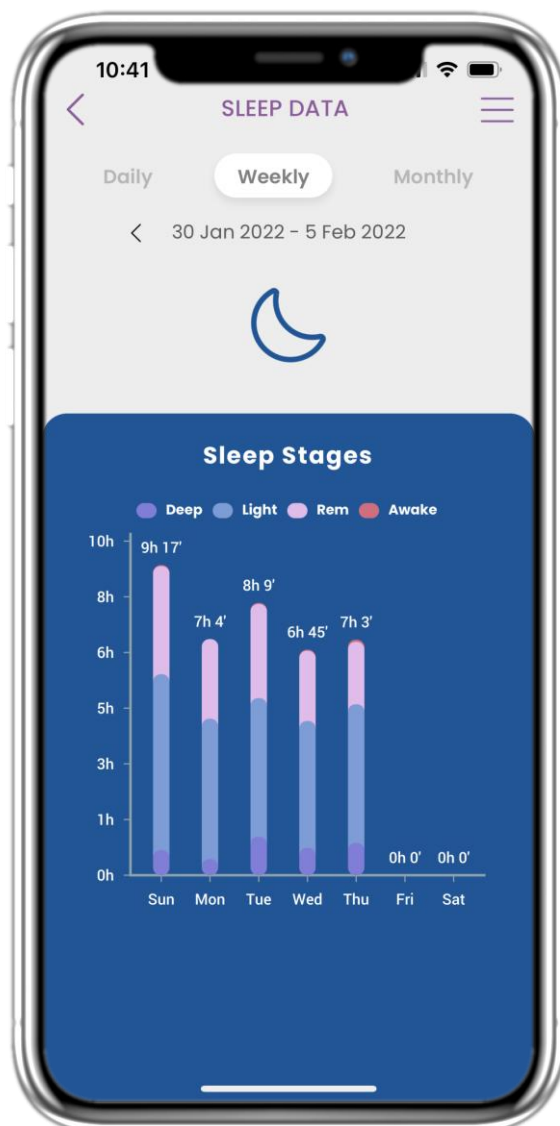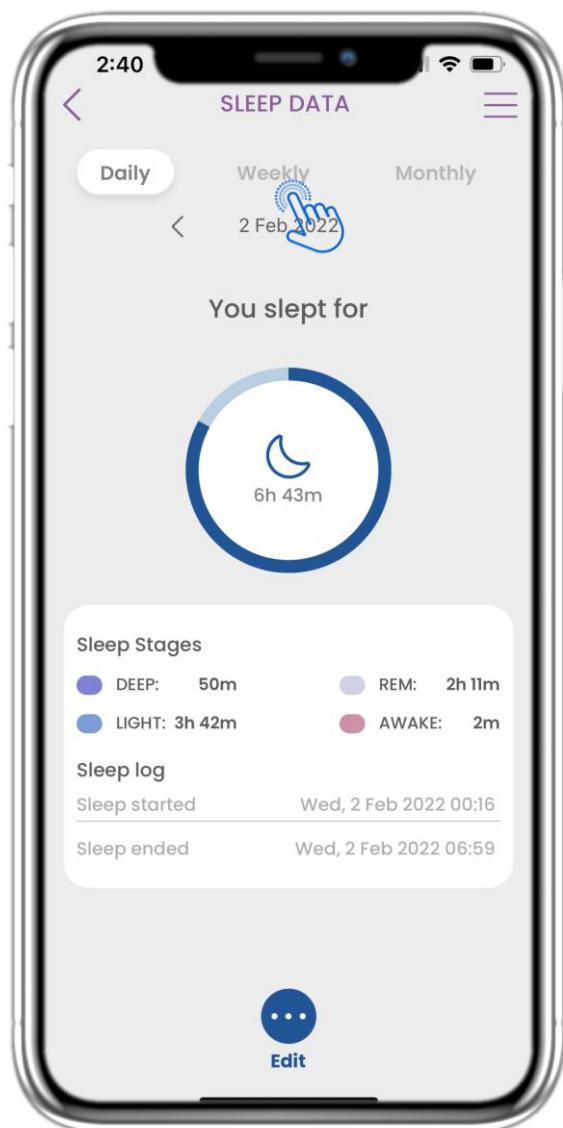

4.23 PAGINA DEL SONNO DA INDOSSABILE



Nella pagina HOME puoi trovare il widget Sonno che serve per registrare manualmente i dati del tuo sonno o tramite un dispositivo indossabile.

4.24 PAGINA DEL SONNO

Nella pagina Sonno puoi aggiungere manualmente i dati sul sonno e spostarti tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri sul sonno e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.



4 WIDGET HOME

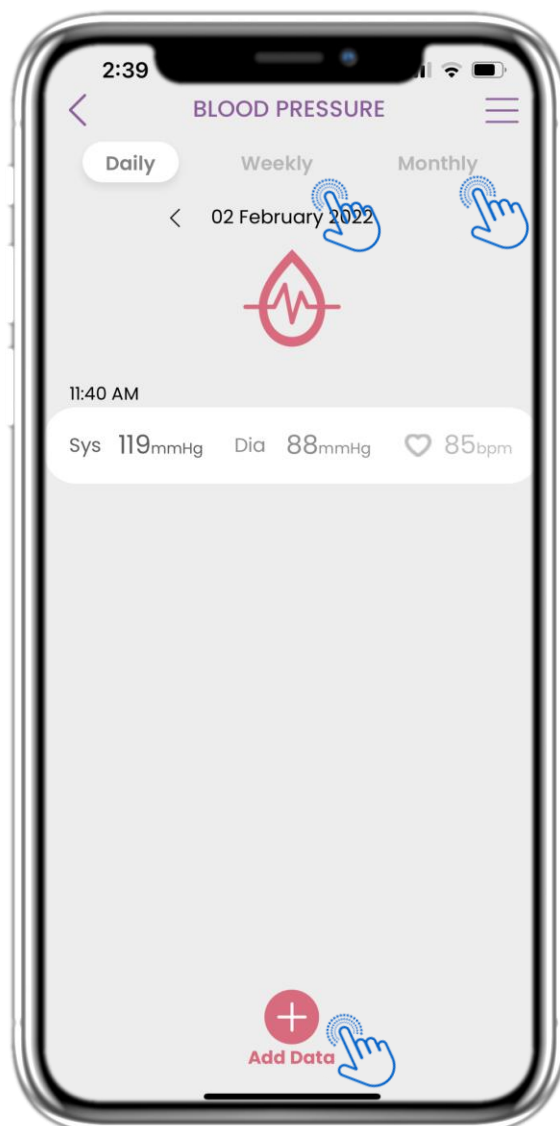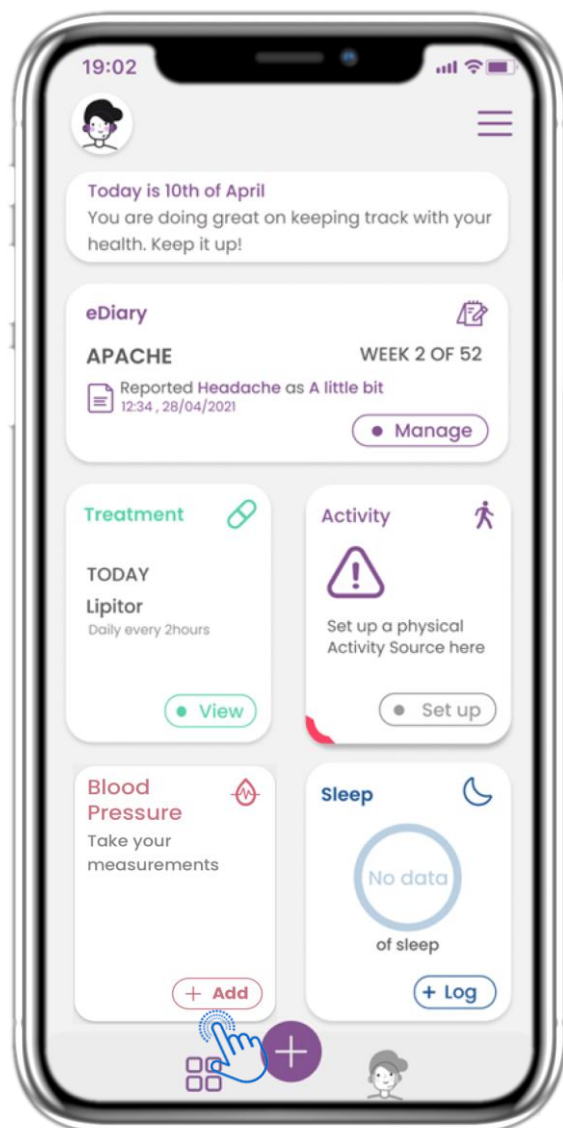

4.25 WIDGET PRESSIONE SANGUIGNA


Nella pagina HOME puoi trovare il widget Pressione sanguigna che viene utilizzato per raccogliere le misurazioni tramite un dispositivo per la pressione sanguigna sincronizzato.

4.26 REGISTRO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Nella pagina Pressione sanguigna puoi aggiungere le tue misurazioni manualmente o sincronizzando un dispositivo e navigare tra i giorni nel calendario o visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche grafici settimanali e mensili.




4 WIDGET HOME

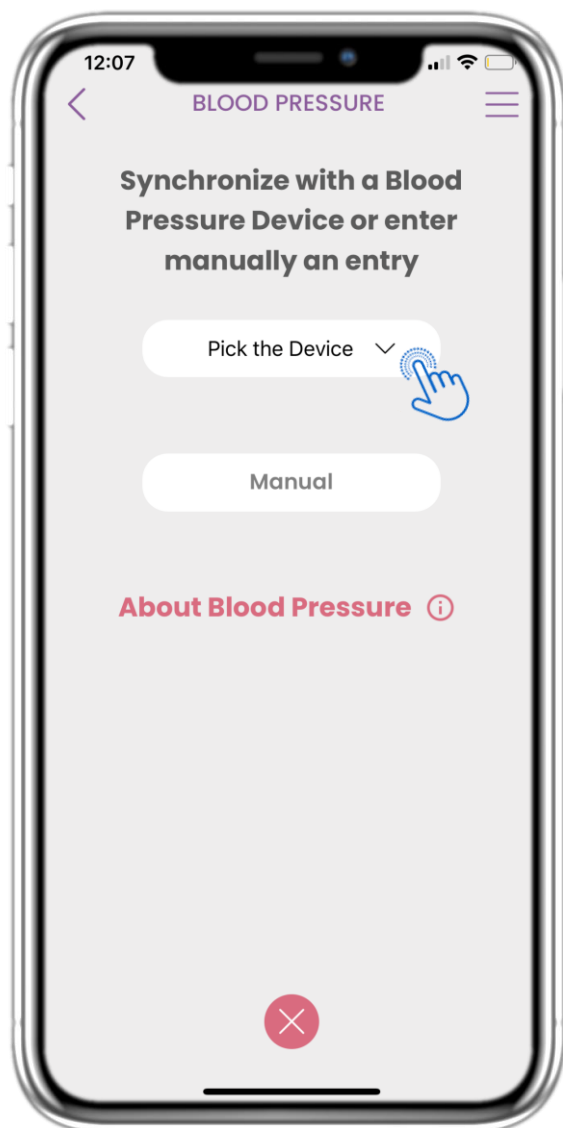

4.27 PAGINA PRESSIONE SANGUIGNA DAL DISPOSITIVO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Pressione sanguigna che viene utilizzato per registrare le misurazioni della pressione sanguigna manualmente o tramite un dispositivo.

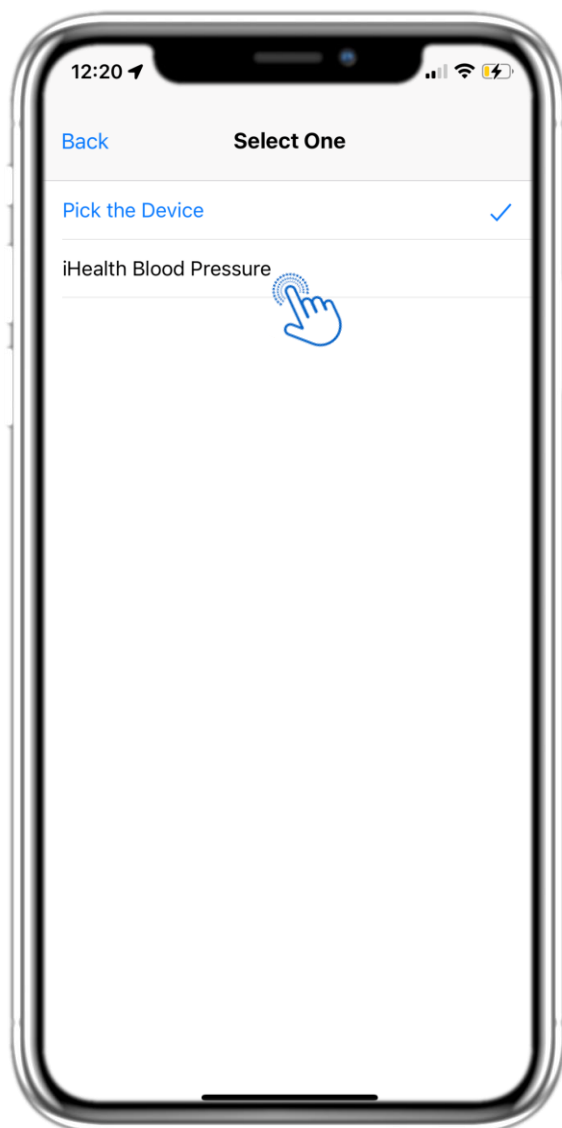

4.28 PAGINA PRESSIONE SANGUIGNA DAL DISPOSITIVO

Nella pagina Pressione sanguigna è possibile sincronizzare un dispositivo per la pressione sanguigna e raccogliere misurazioni automatiche direttamente dal dispositivo.




4 WIDGET HOME



4.29 PAGINA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MANUALMENTE

Il widget della pressione sanguigna che viene utilizzato per registrare le misurazioni della pressione sanguigna manualmente o raccolte da un dispositivo. Nella pagina HOME puoi trovare

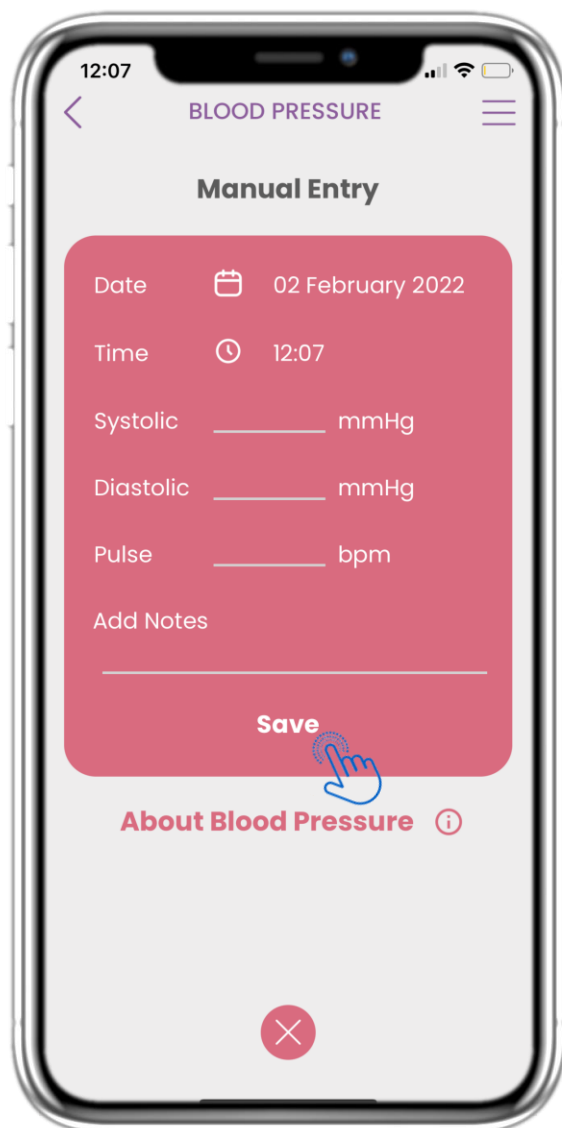


4.30 PAGINA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MANUALMENTE

Nella pagina Pressione sanguigna puoi aggiungere manualmente i tuoi dati e visualizzare un elenco con i risultati.




4 WIDGET HOME

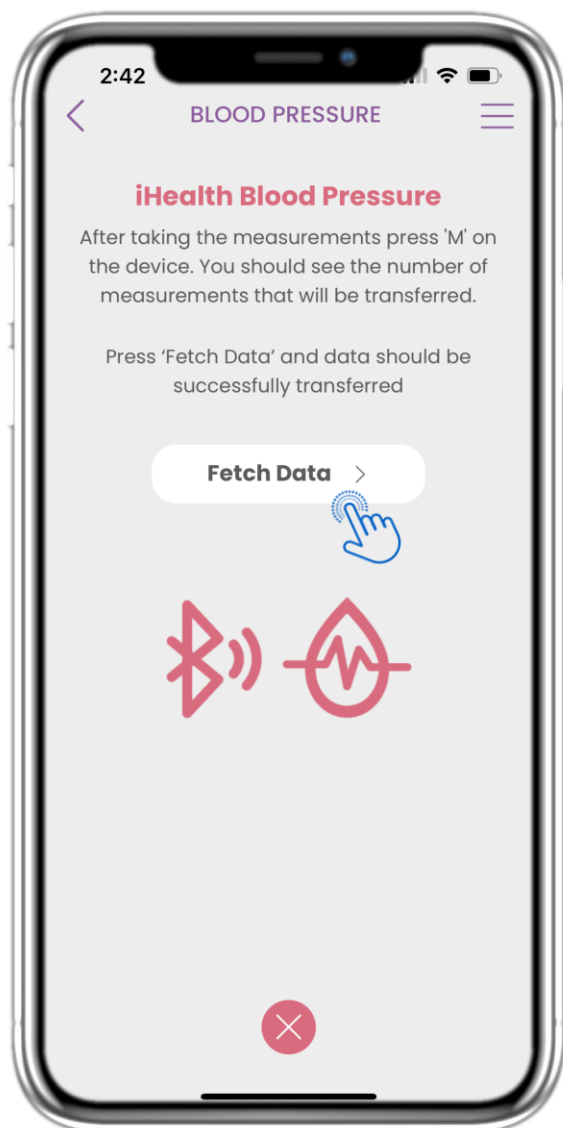

4.31 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PRESSIONE ARTERIOSA

Nella pagina iHealth Blood Pressure puoi trovare il pulsante per sincronizzare e raccogliere le misurazioni dal dispositivo per la pressione sanguigna.

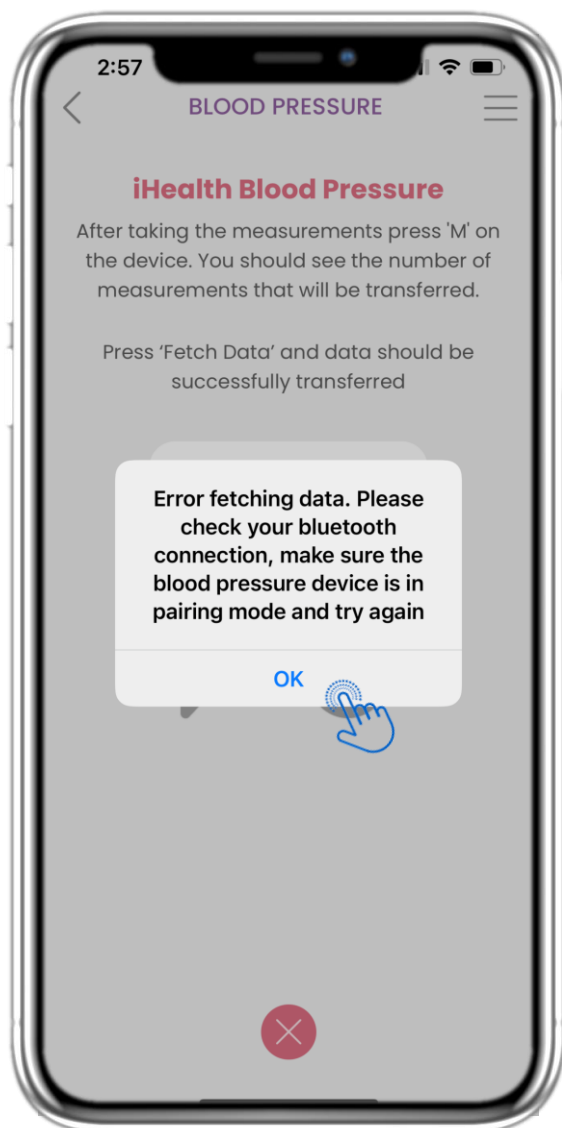


4.32 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PRESSIONE ARTERIOSA

Se ricevi questa notifica, controlla le impostazioni del tuo cellulare per verificare di aver attivato il Bluetooth e assicurati che il dispositivo per la pressione sanguigna sia pronto per l'associazione.




4 WIDGET HOME

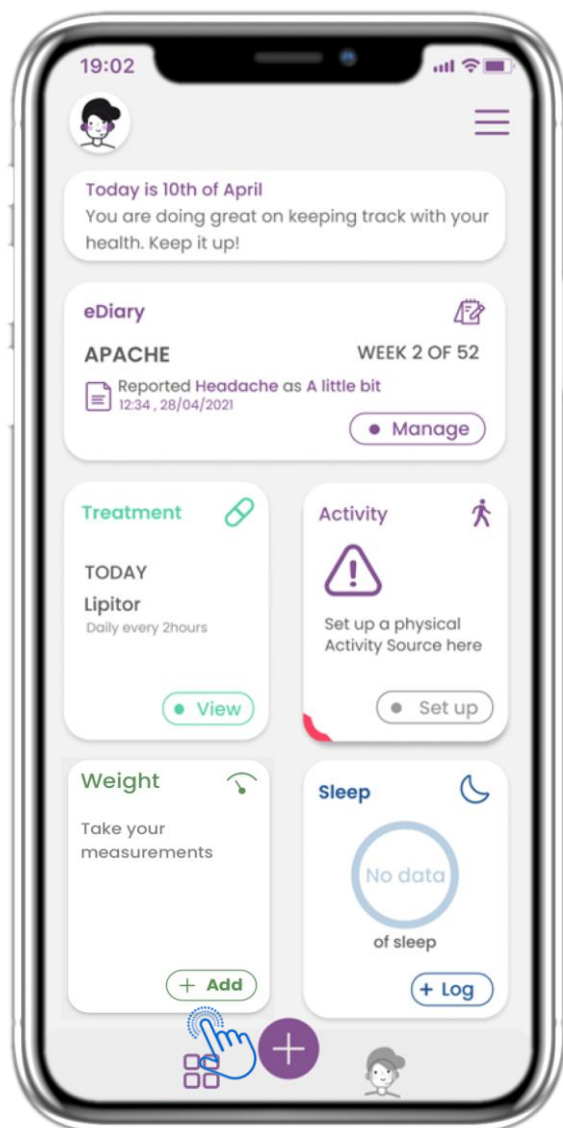

4.33 WIDGET PESO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Peso che viene utilizzato per raccogliere le misurazioni tramite un dispositivo di pesatura sincronizzato.

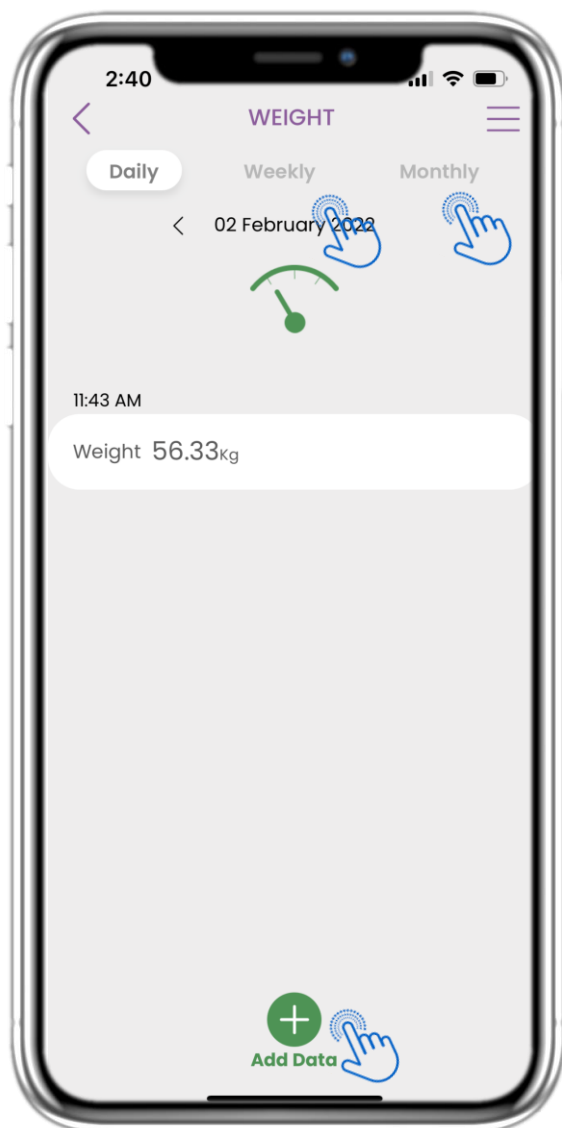


4.34 REGISTRO PESO

Nella pagina Peso puoi aggiungere le tue misurazioni manualmente o sincronizzando un dispositivo e navigare tra i giorni nel calendario o visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche grafici settimanali e mensili.




4 WIDGET HOME

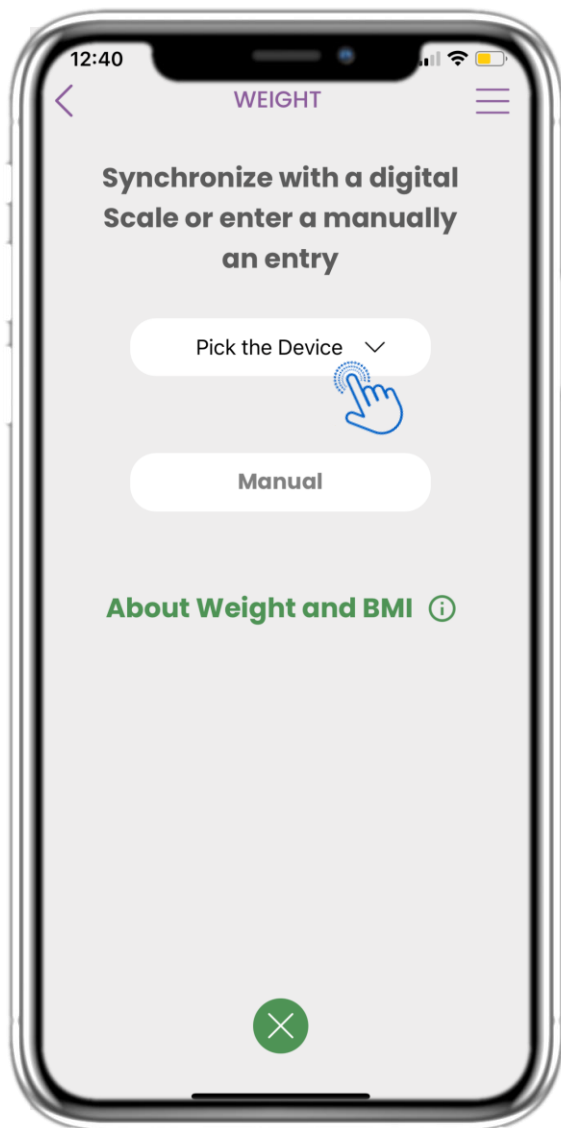

4.35 PAGINA PESO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Peso che serve per registrare le misurazioni del tuo peso manualmente o tramite un dispositivo.

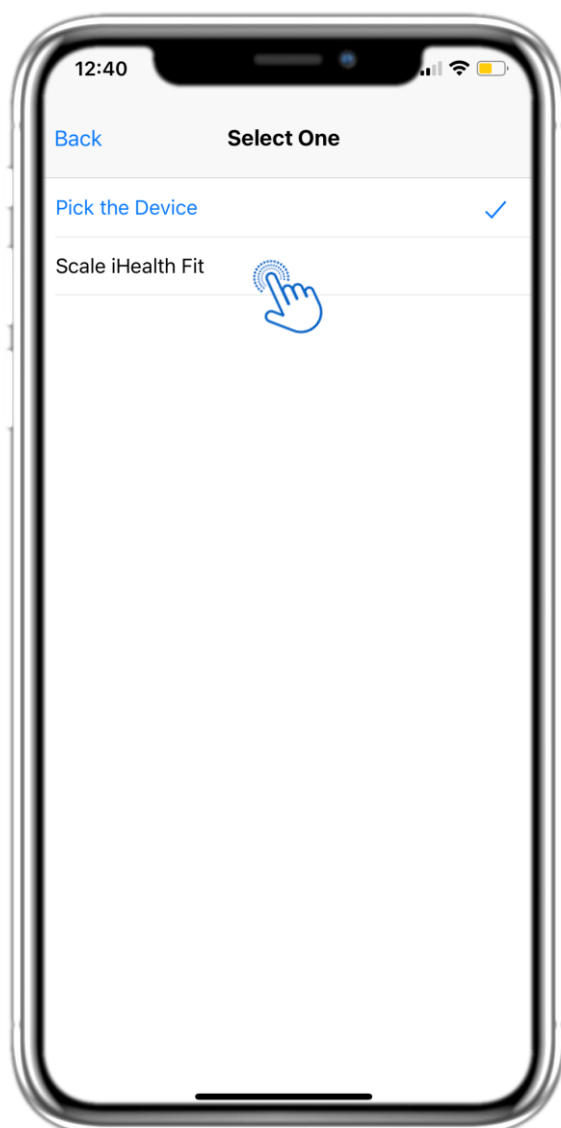


4.36 PAGINA PESO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina Peso è possibile sincronizzare una bilancia e raccogliere misurazioni automatiche direttamente dal dispositivo.




4 WIDGET HOME

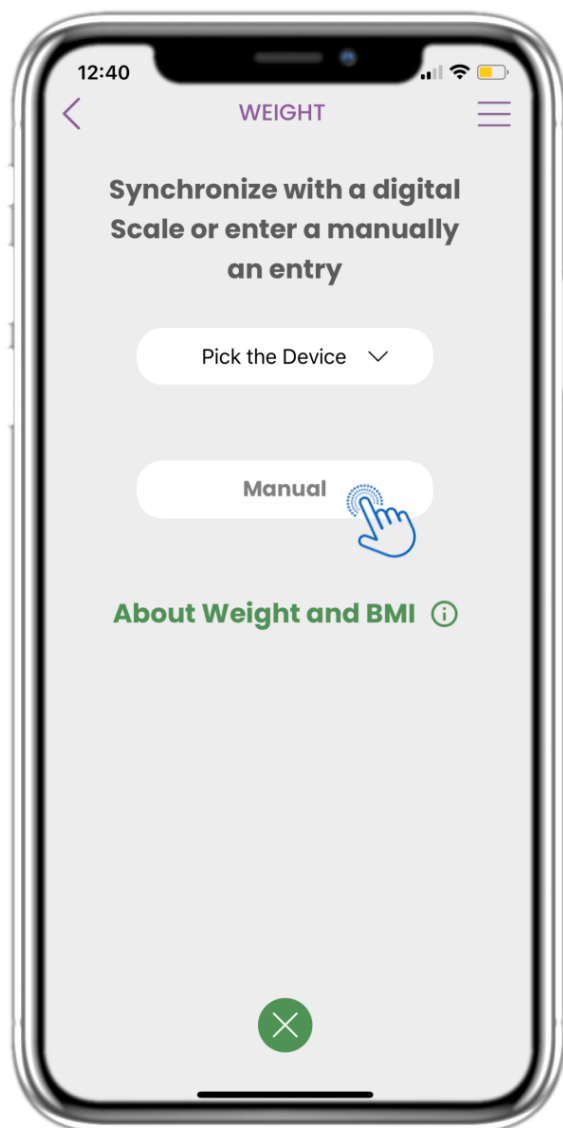

4.37 PAGINA DEL PESO MANUALMENTE

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Peso che serve per registrare le misurazioni del tuo peso manualmente o tramite una bilancia.

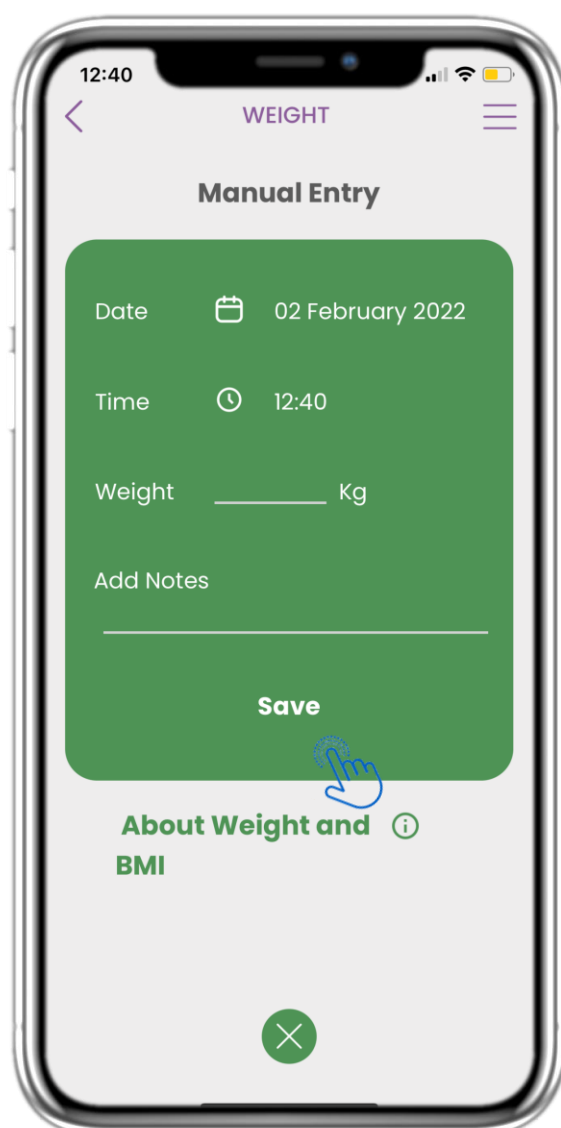


4.38 PAGINA DEL PESO MANUALMENTE

Nella pagina Peso puoi aggiungere manualmente i tuoi dati e visualizzare un elenco con i risultati.




4 WIDGET HOME

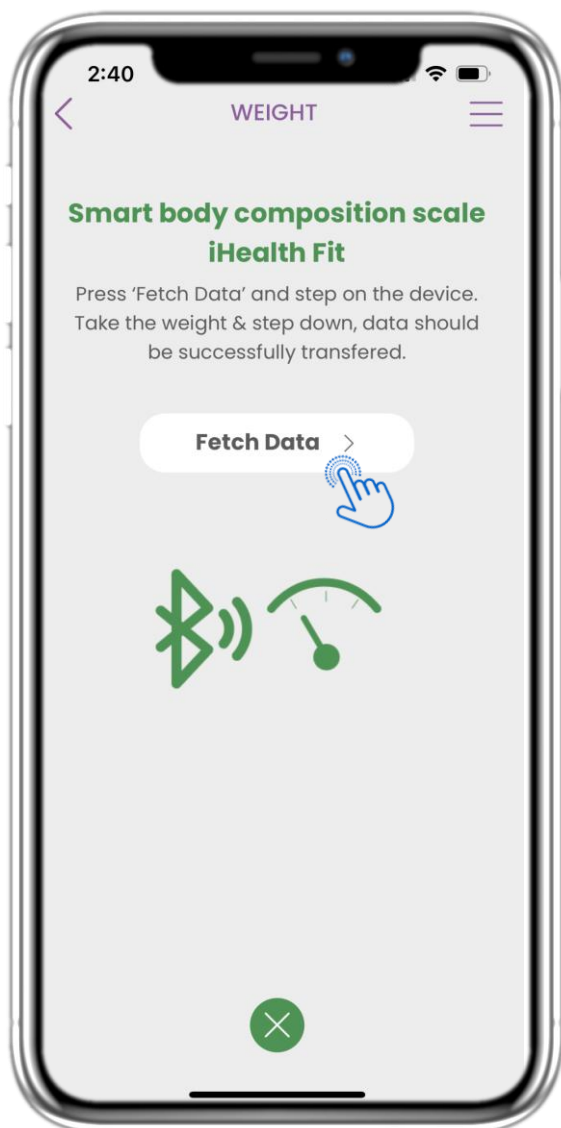

4.39 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Nella pagina iHealth Fit Weight puoi trovare il pulsante per sincronizzare e raccogliere le misurazioni dalla bilancia.

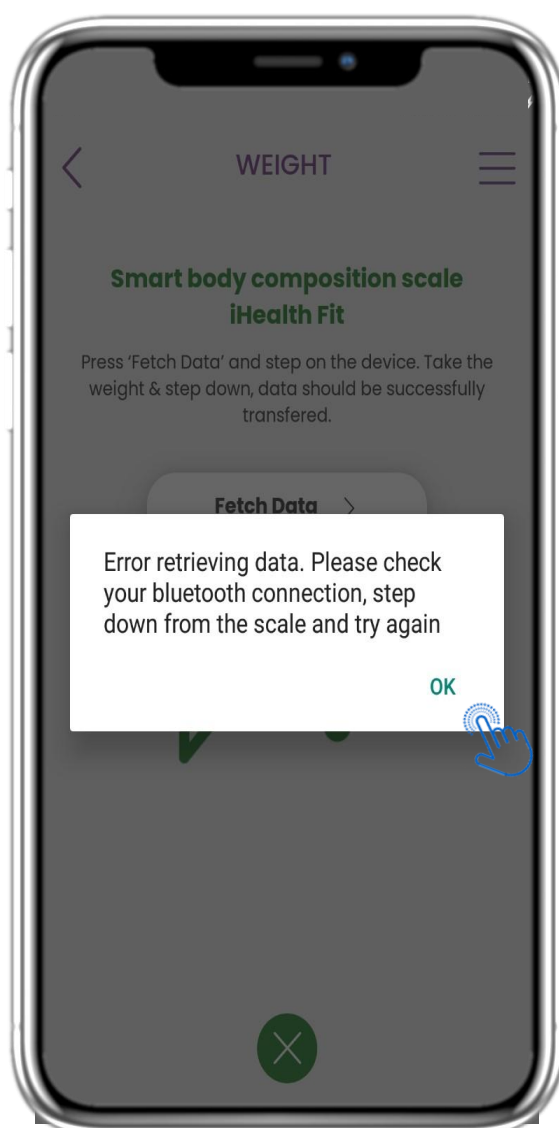


4.40 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Se ricevi questa notifica, controlla le impostazioni del tuo cellulare e verifica di aver attivato il Bluetooth. Ripeti la procedura di pesatura dall'inizio.



4 WIDGET HOME

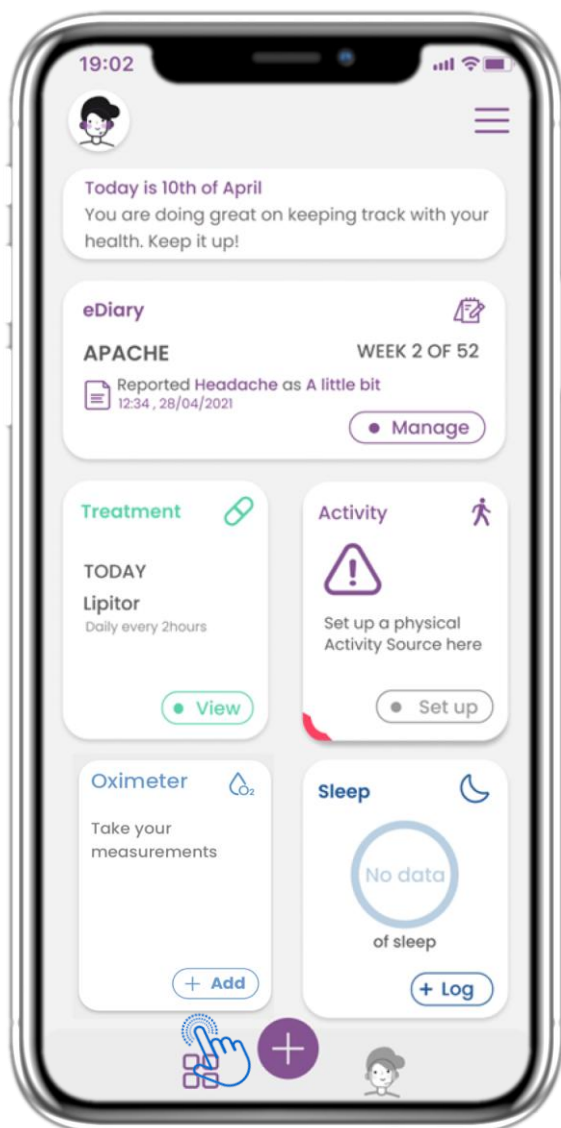

4.41 WIDGET OSSIMETRO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Ossimetro che viene utilizzato per registrare manualmente i dati relativi all'ossigeno o raccolti tramite un dispositivo ossimetro.




4.42 REGISTRO DELL'OSSIMETRO

Nella pagina Ossimetro puoi aggiungere manualmente l'ossigeno e navigare tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.




4 HOME WIDGETS

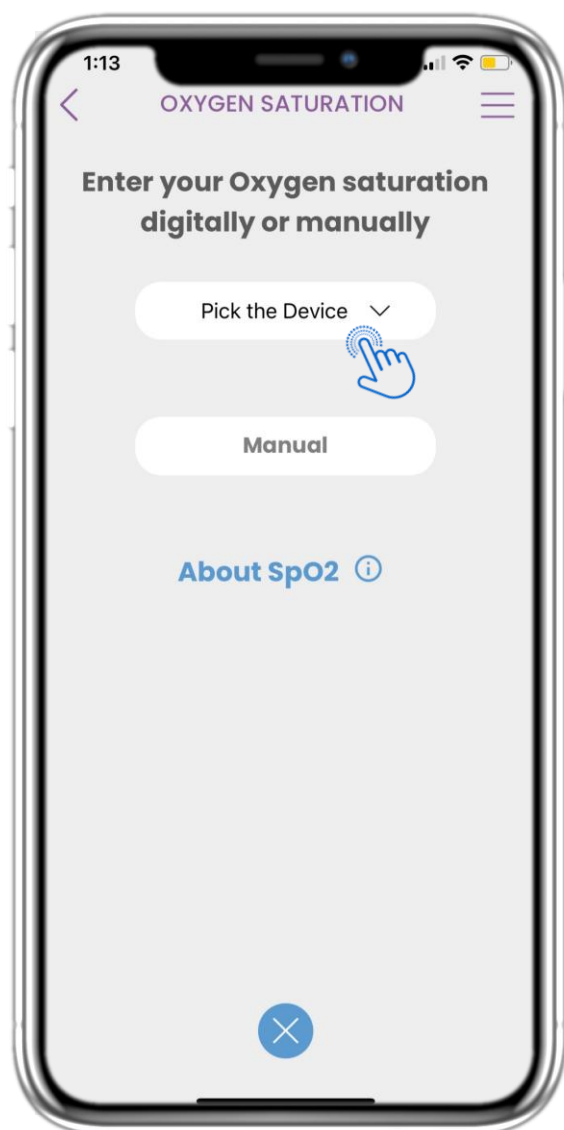

4.43 PAGINA DELL'OSSIMETRO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Ossimetro che serve per registrare le misurazioni dell'ossigeno manualmente o tramite un dispositivo ossimetro.

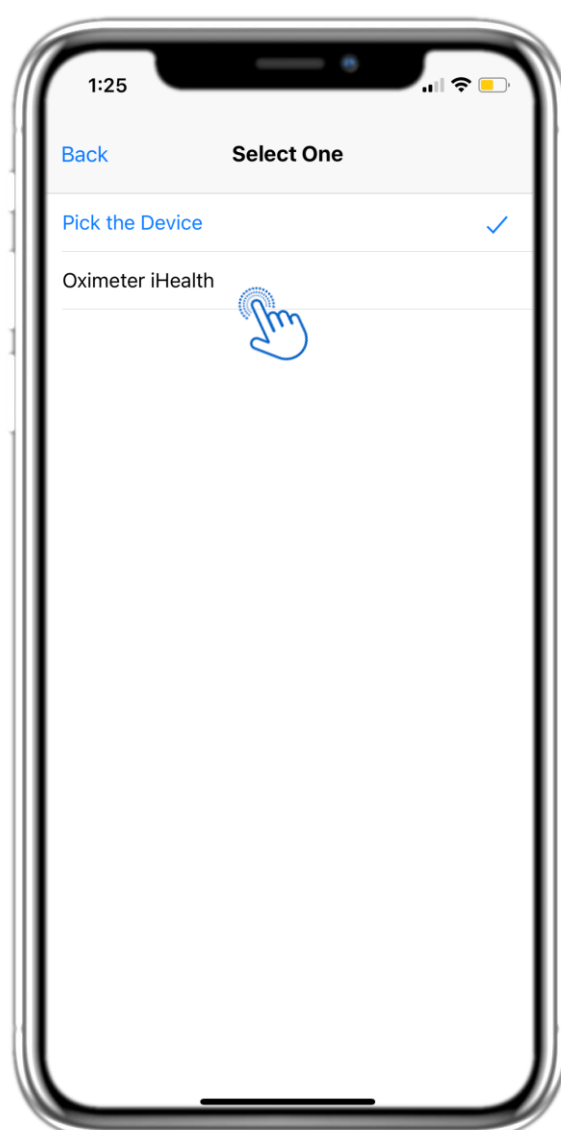


4.44 PAGINA DELL'OSSIMETRO DAL DISPOSITIVO

Nella pagina Ossimetro puoi aggiungere manualmente l'ossigeno e navigare tra i giorni del calendario oppure visualizzare i dati giornalieri e scegliere di visualizzare anche i grafici settimanali.




4 HOME WIDGETS

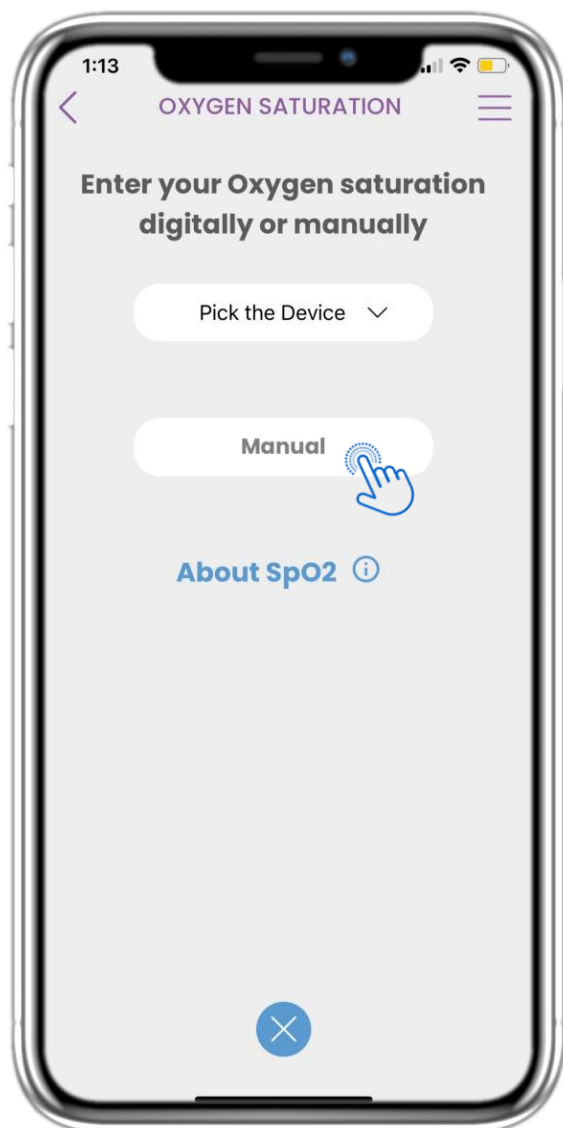

4.45 PAGINA DELL'OSSIMETRO MANUALMENTE

Nella pagina HOME puoi trovare il widget Ossimetro che serve per registrare le misurazioni dell'ossigeno manualmente o tramite un dispositivo ossimetro.

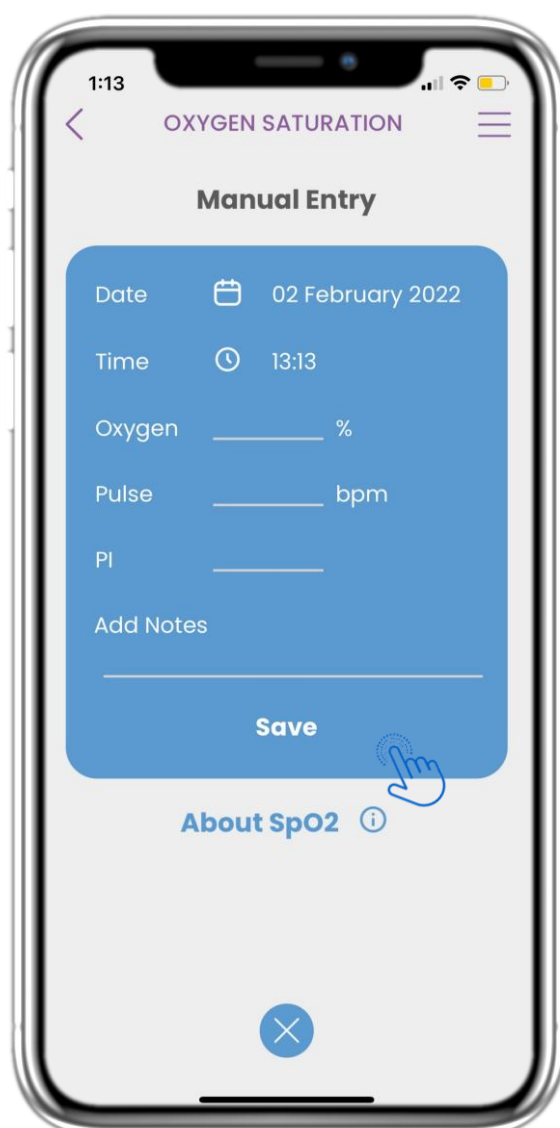


4.46 PAGINA DELL'OSSIMETRO MANUALMENTE

Nella pagina Ossimetro puoi aggiungere manualmente i tuoi dati e visualizzare un elenco con i risultati.




4 HOME WIDGETS

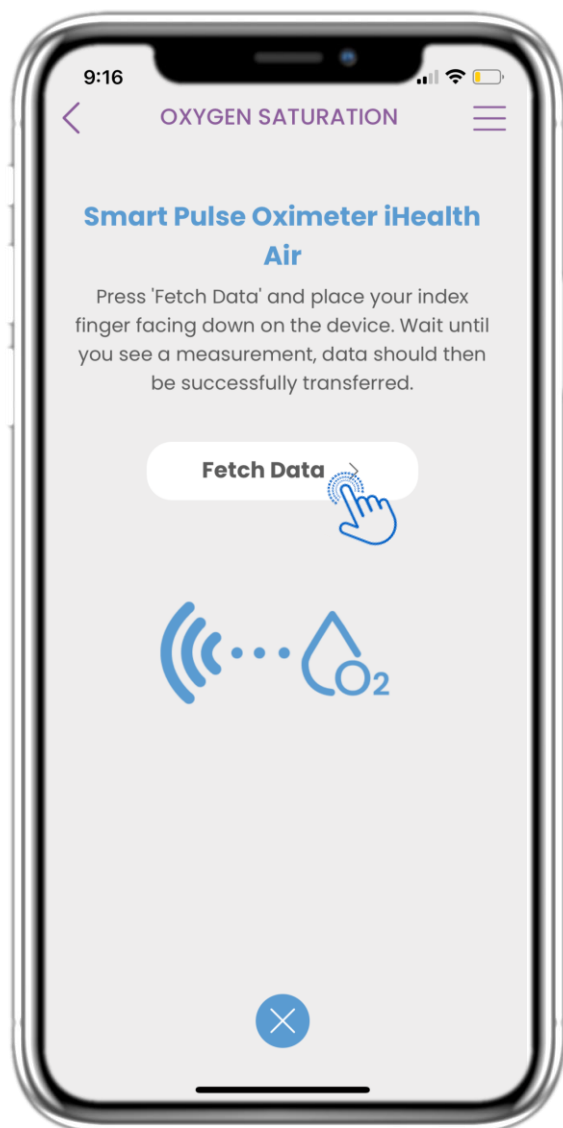

4.47 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Nella pagina relativa alla saturazione dell'ossigeno puoi trovare il pulsante per sincronizzare e raccogliere i dati dal dispositivo pulsossimetro intelligente.


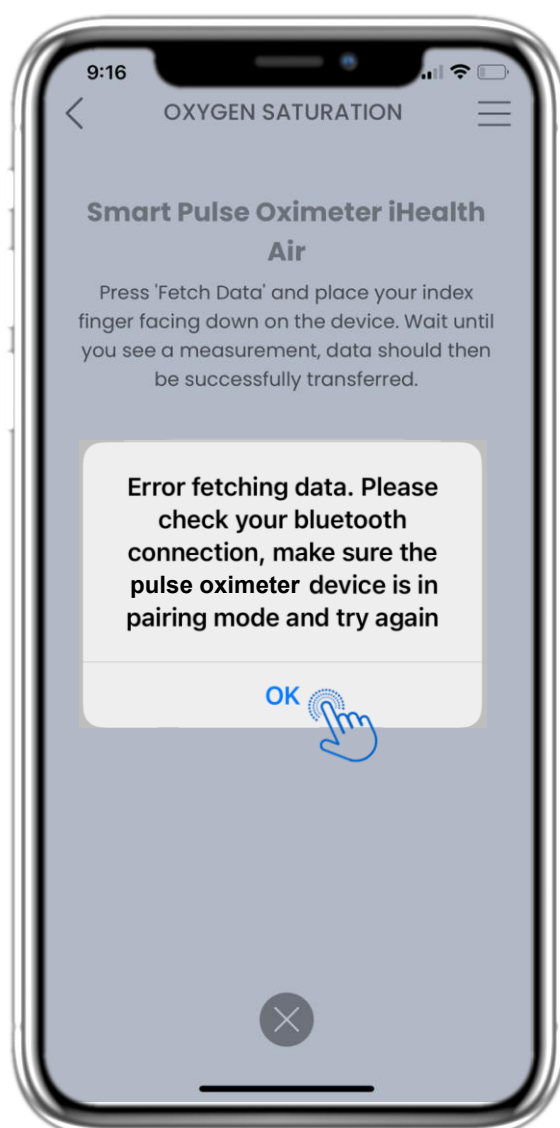


4.48 SINCRONIZZAZIONE DISPOSITIVO PESO

Se ricevi questa notifica, controlla le impostazioni del tuo cellulare per verificare di aver attivato il Bluetooth e assicurati che il dispositivo pulsossimetro intelligente sia pronto per l'associazione.



5 AGGIUNGI REPORT/RISPONDI AI QUESTIONARI

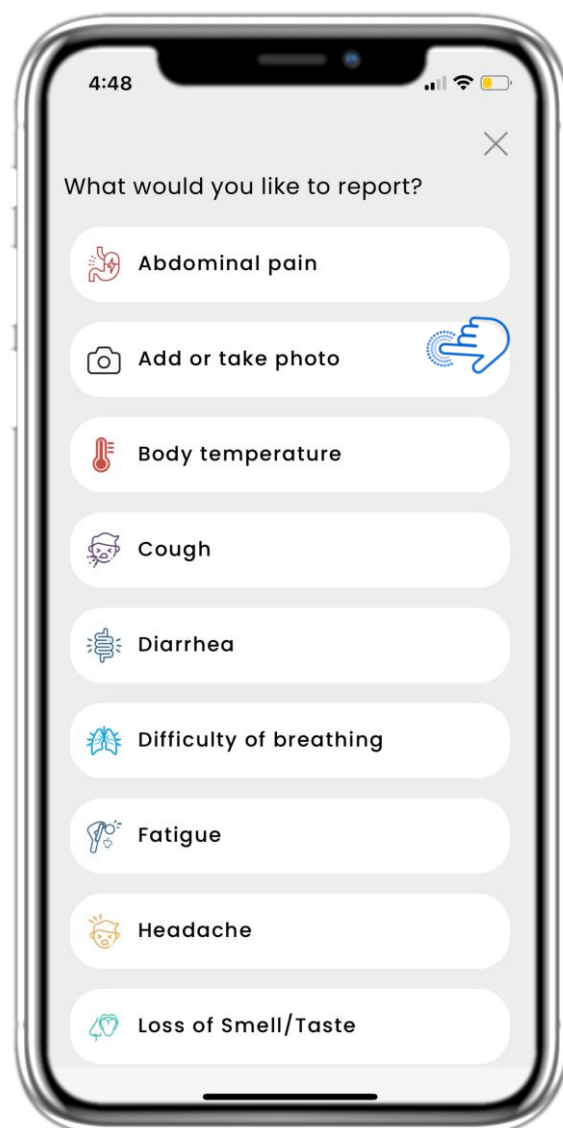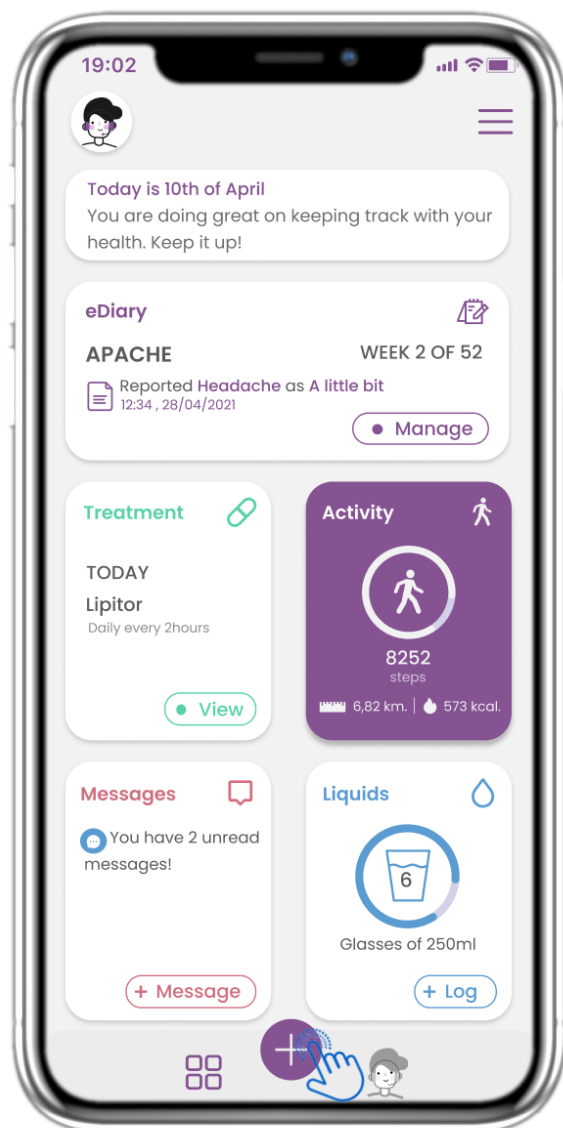

5.1 AGGIUNGI SEGNALAZIONI / SINTOMI


Dalla barra inferiore puoi selezionare di aggiungere report.

5.2 AGGIUNGI SEGNALAZIONI / SINTOMI

Apri un elenco di questionari disponibili per AGGIUNGERE un report o un sintomo dal menu centrale (+).



5. REPORT DI RISPOSTE E QUESTIONARI

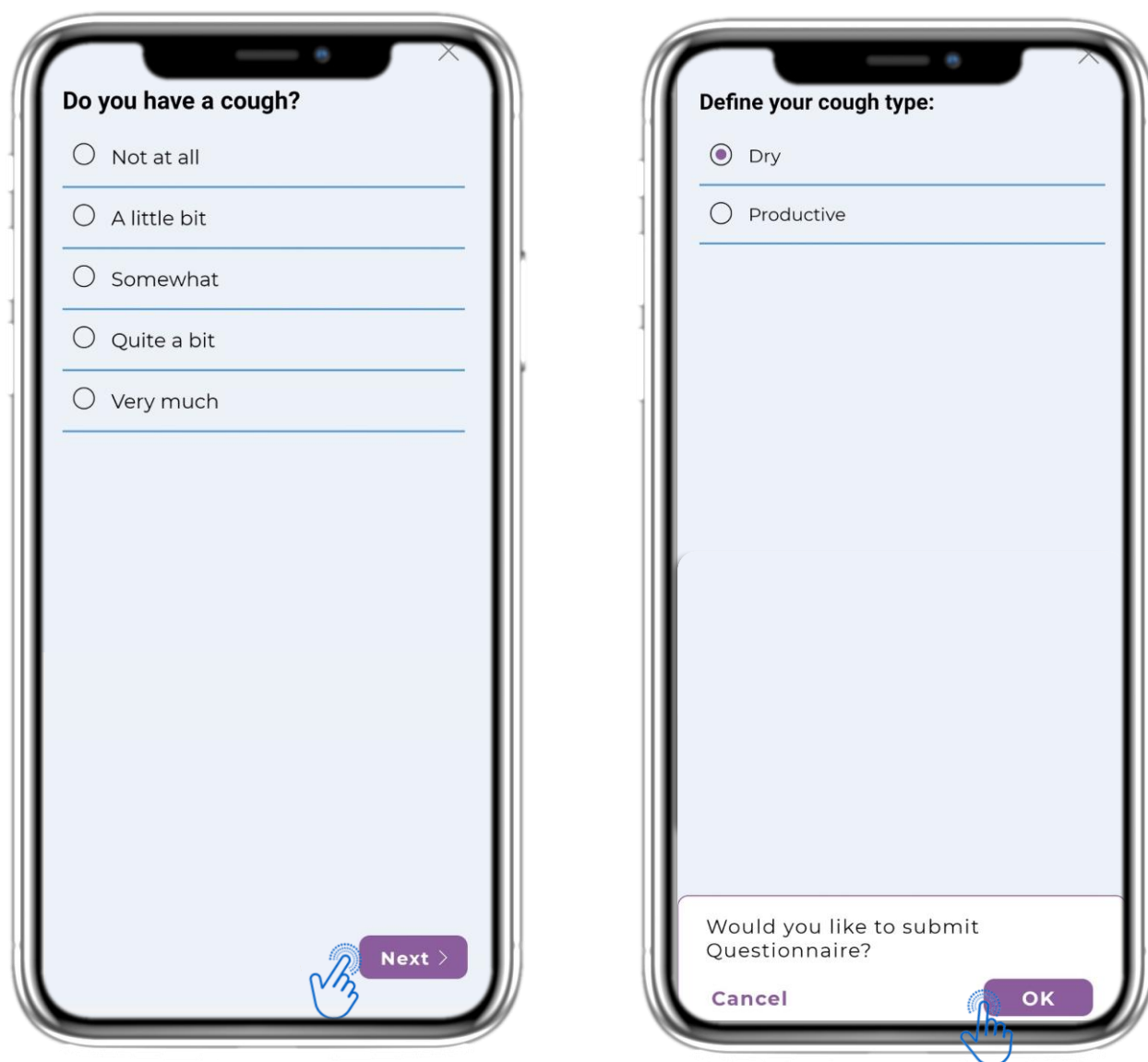


5.3 REPORT DI RISPOSTE E QUESTIONARI

Rispondi al questionario relativo al sintomo selezionato. Fai clic su AVANTI per continuare il questionario. Fai clic su OK per inviare o su ANNULLA per uscire.




6 CHATBOT

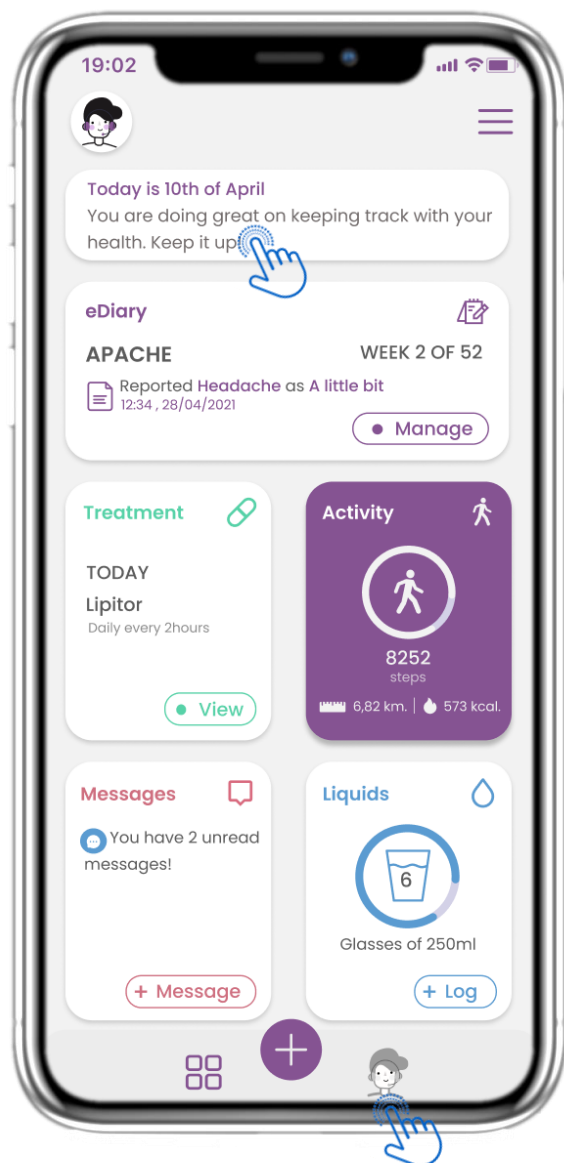

6.1 CHATBOT

Dalla barra in basso puoi scegliere se passare al chatbot o al messaggio in alto.

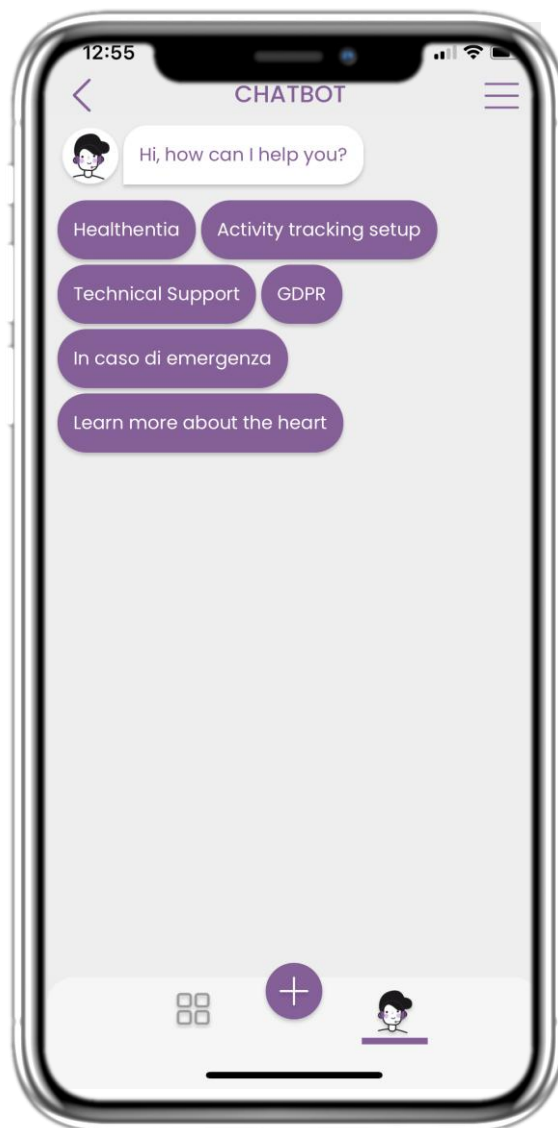


6.2 CONVERSAZIONE CHATBOT

Il chatbot ti accoglie e ti mostra i questionari in sospeso. Il chatbot ti offre diverse opzioni di domande e risposte.



7 BARRA LATERALE DEL MENU


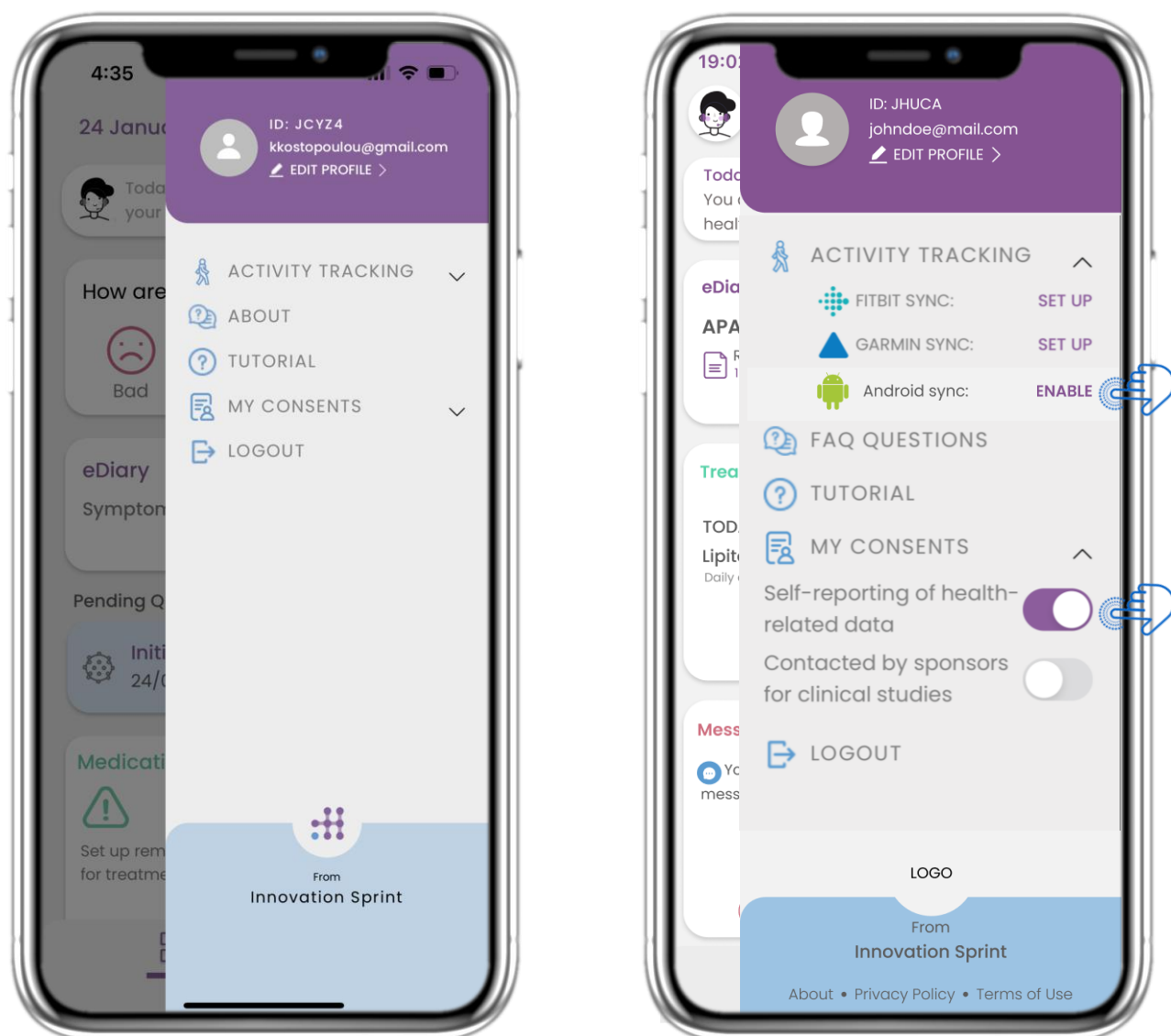


7.1 OPZIONI DELLA BARRA LATERALE

Dalla barra dei menu puoi modificare il tuo profilo, impostare il tuo activity tracker e abilitare o disabilitare il consenso esplicito fornito in fase di registrazione. Puoi anche accedere ad alcune pagine di contenuti, come le FAQ.



7 MENU – IL MIO PROFILO

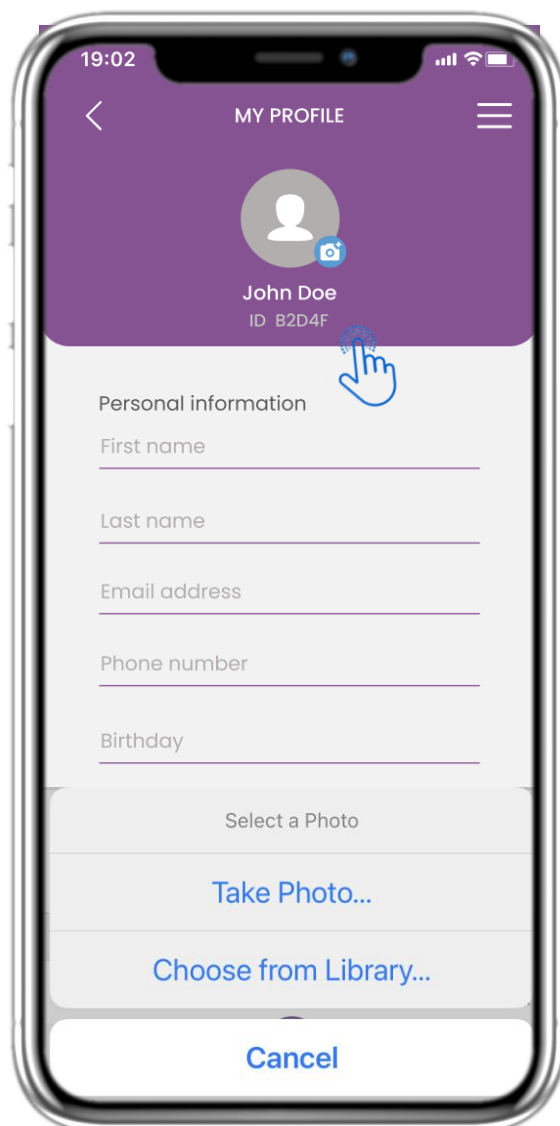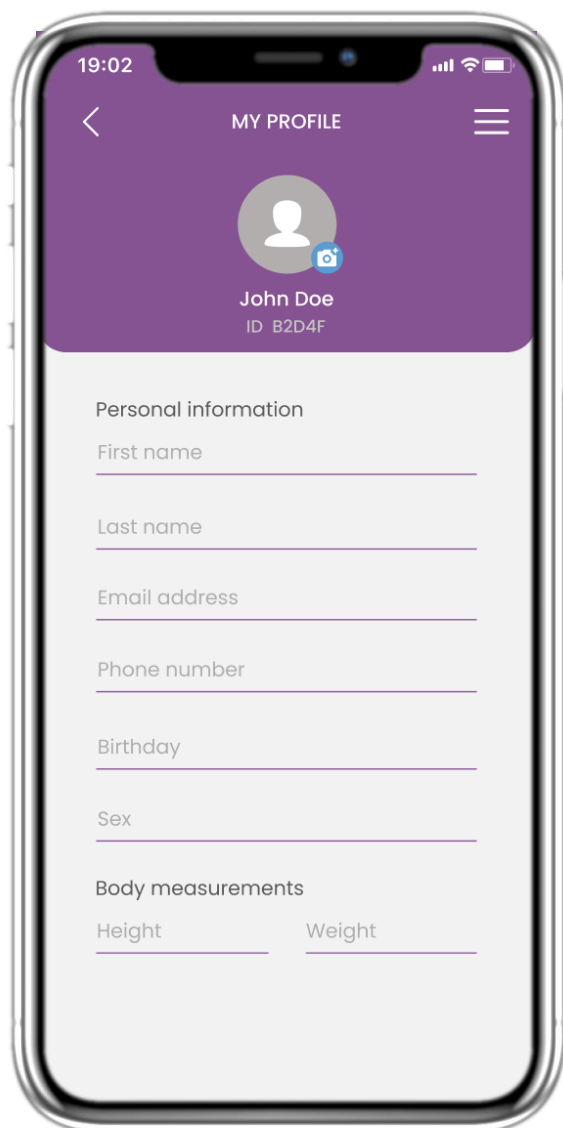


7.2 MODIFICA PROFILO

Puoi modificare il tuo profilo e scegliere anche una foto. Il tuo ID è il numero identificativo che verrà utilizzato per comunicare con il medico.




7 MENU – CAMBIO LINGUA

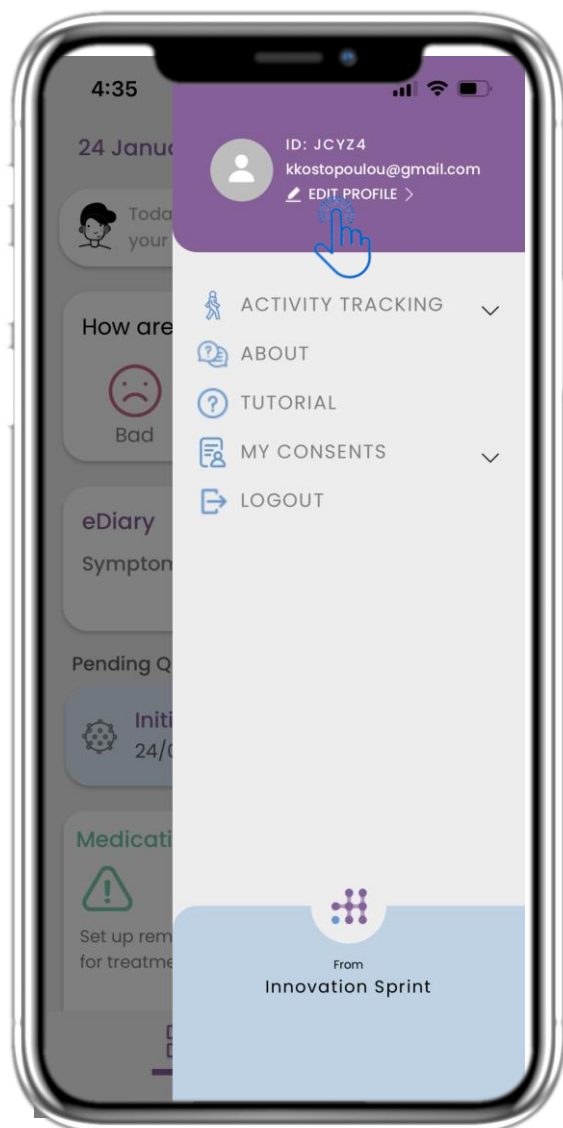

7.3 GESTISCI PROFILO

Dal menu Impostazioni vai a Gestisci il tuo Profilo dove puoi modificare i tuoi dettagli

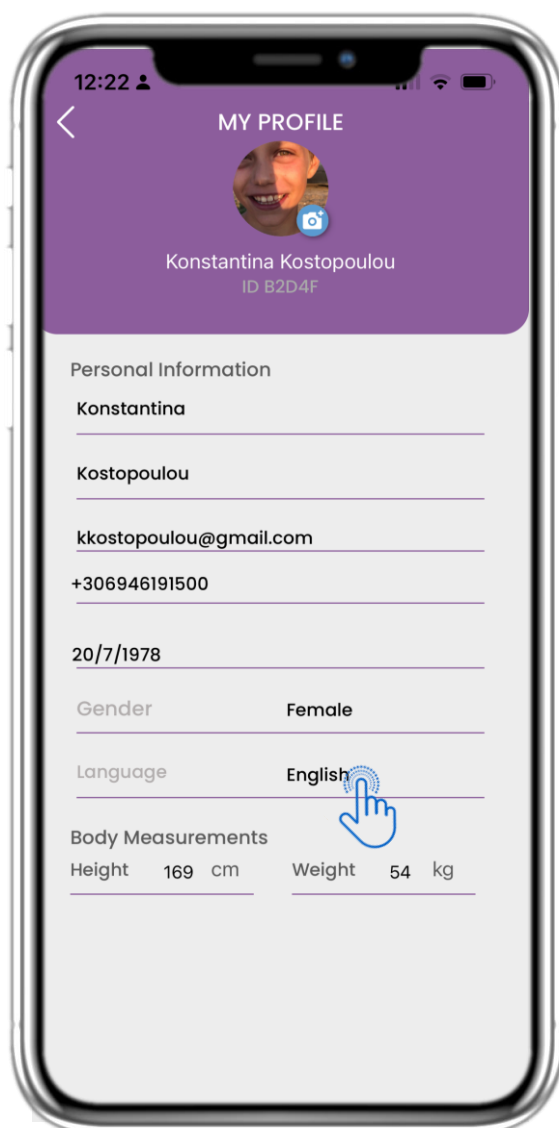


7.4 CAMBIO LINGUA

Nella pagina Profilo puoi cambiare la lingua.




7 MENU – CAMBIO LINGUA (ESEMPIO)

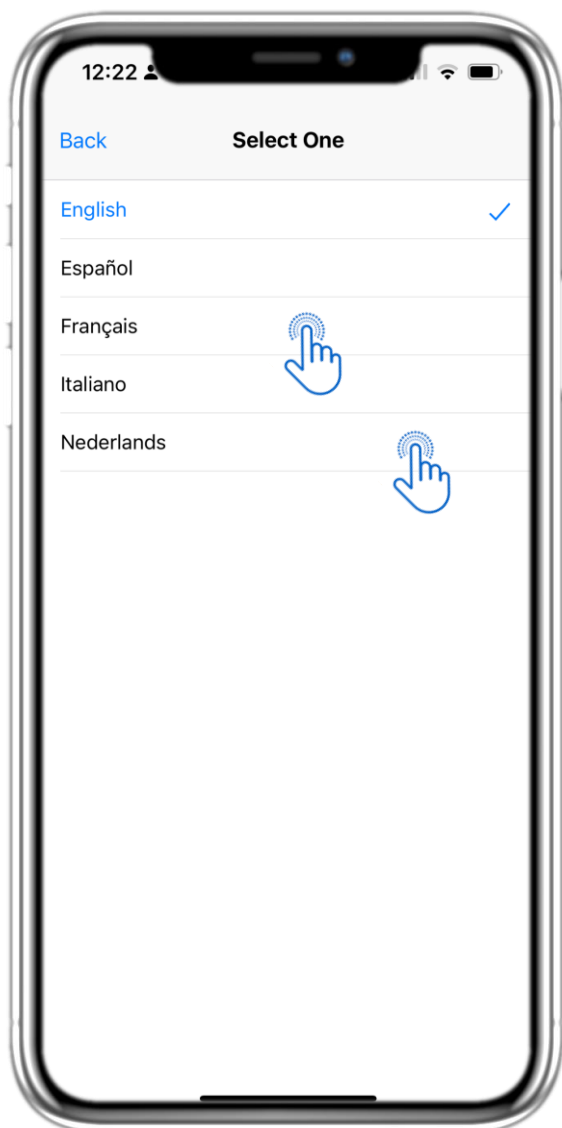

7.5 SCEGLI LA LINGUA

Dal menu Impostazioni vai a Gestisci il tuo Profilo dove puoi modificare i tuoi dettagli


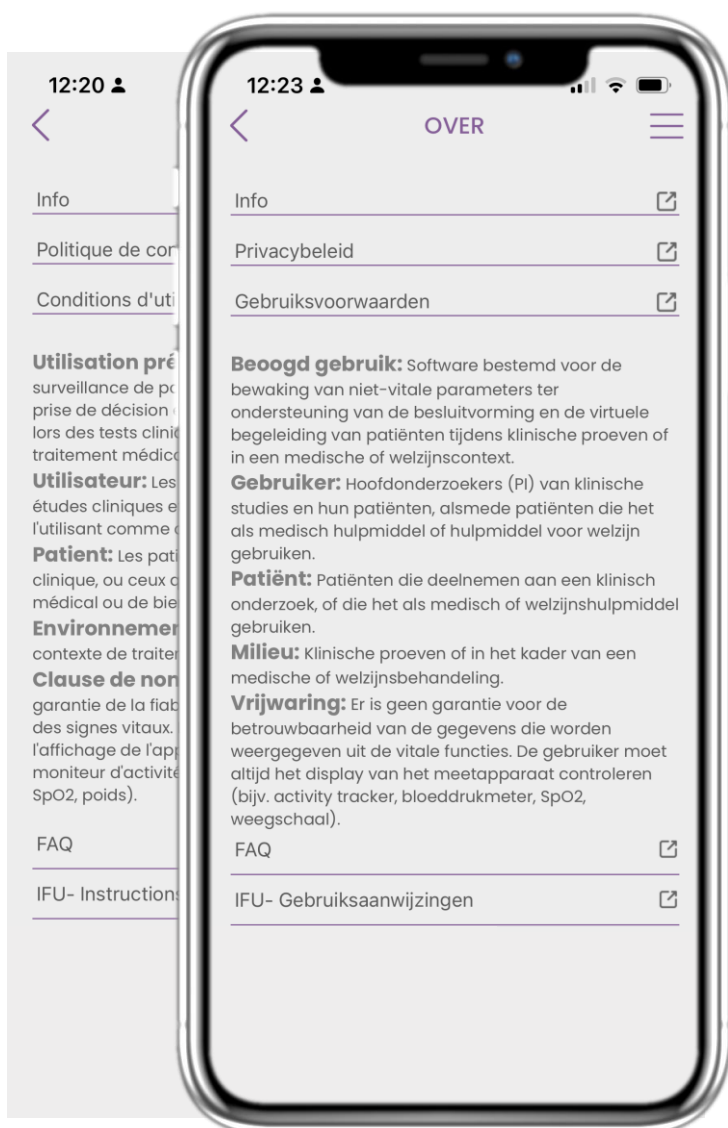


7.6 INFORMAZIONI SULLA PAGINA IN FR E NL

Testo tradotto della pagina Informazioni



7 MENU – ESCI

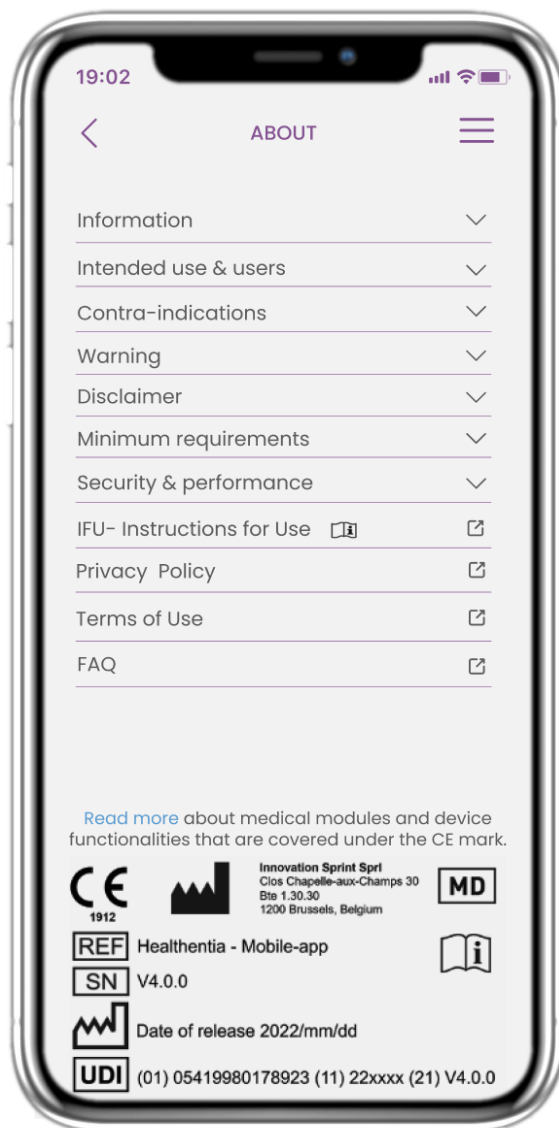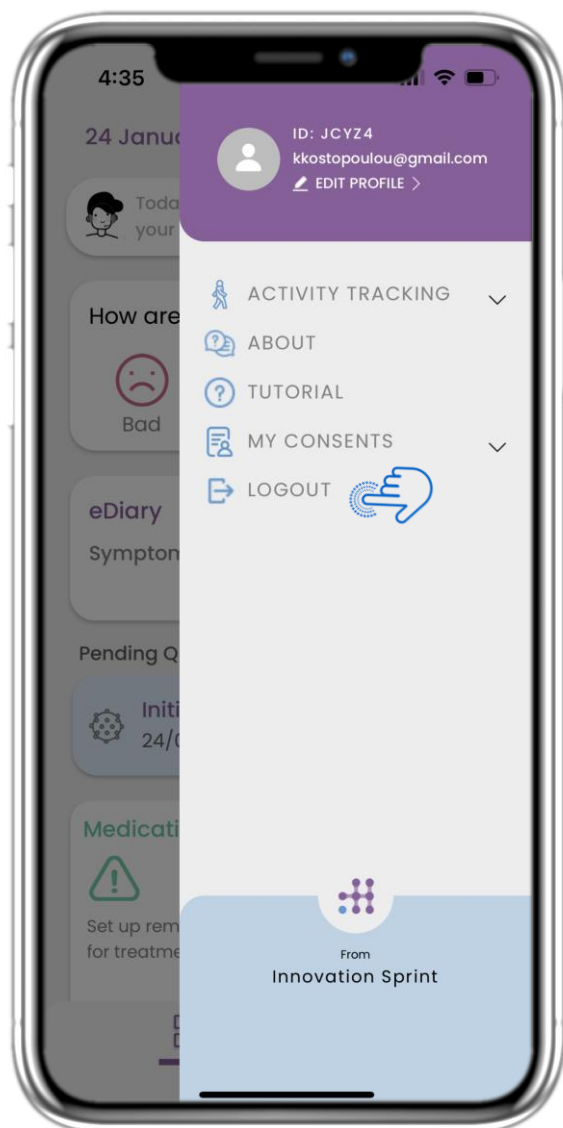

7.7 DISCONNETTERSI

Seleziona per DISCONNETTERTI.
Ricorda che Healthentia non
può tracciare i dati quando sei
disconnesso.

7.8 INFORMAZIONI – IFU

Nella pagina INFORMAZIONI
puoi trovare tutte le
informazioni relative all'utilizzo
dell'app Healthentia.

