



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PACIENȚI



IFU Version v3

INNOVATION SPRINT SRL
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 1.30.30
1200 Brussels, Belgium

REF

Healthentia – Mobile-app

SN

V4.0





Document History

Document Version	Nature of change	Date
1	Launch in Romania - Translated in Romanian	01.06.2025
2	Updated part integration with other devices (Withings is added)	22.04.2026
3	Updated part integration with other devices (Fitbit API is replaced by Google Health API)	28.09.2026





INFORMAȚII

Aplicația **Healthentia** constă într-o colecție de module. Mai multe dintre aceste module sunt software medicale acoperite de marcajul CE conform Regulamentului European 2017/745:

- **Coaching virtual:** Permite utilizatorului (subiect/pacient) să interacționeze cu un antrenor conversațional întruchipat, în scopuri informative și motivaționale.
- **Jurnal electronic (eDiary):** Permite prezentarea rezultatelor raportate de pacient, sub formă de listă, grupate pe zi sau pe tip de rezultat (simptom). Astfel, pacienții pot accesa oricând jurnalul lor electronic și pot vedea evoluția stării lor.
- **Vital:** Semnele vitale sunt colectate și vizualizate de utilizatorii aplicației mobile prin intermediul unor widgeturi.
- **Chestionare:** Permit comunicarea rezultatelor și scorurilor într-un mod structurat.
- **Consumul de lichide:** Widgetul pentru lichide oferă o imagine de ansamblu asupra cantității de apă consumată.
- **Nutriție:** Widgetul pentru nutriție oferă posibilitatea de a vizualiza și edita consumul diferitelor categorii de alimente de interes.
- **Greutate:** Widgetul pentru greutate permite adăugarea manuală și măsurarea/vizualizarea greutății printr-un cântar digital.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: <https://healthentia.com>

Pentru întrebări sau cereri legate de confidențialitate: dpo@healthentia.com

Pentru întrebări generale: info@healthentia.com

Raportarea unui incident grav

Orice incident grav legat de aplicația dispozitivului medical Healthentia poate fi raportat producătorului (**Innovation Sprint Srl**) la: support@healthentia.com și autorității competente din zona dumneavoastră.

Asistență tehnică

Serviciul de suport Healthentia este oferit la nivel de efort maxim.

Pentru întrebări tehnice, contactați: support@healthentia.com

Echipa noastră de suport vă va răspunde în termen de 1 zi lucrătoare.

Versiune tipărită a IFU

Dacă doriți o versiune tipărită a instrucțiunilor de utilizare, vă rugăm să contactați producătorul la următoarea adresă de e-mail: info@healthentia.com. Aceasta va fi livrată în termen de 7 zile calendaristice de la primirea cererii.



Healthentia – Mobile-app

V4.0





SCOP PRECONIZAT

Aplicația Healthentia face parte din soluția Healthentia, un software destinat:

a) colectării și transmiterii datelor fiziologice, inclusiv ritmul cardiac, tensiunea arterială, saturația oxigenului și greutatea, direct către furnizorii de servicii medicale prin mijloace electronice automate în combinație cu dispozitive IoT validate; b) vizualizării (panouri de bord bazate pe subiecți) și prelucrării matematice a datelor (analiza tendințelor, alerte) legate de parametrii fiziologici ai pacienților cu boli cronice monitorizate; c) transmiterii rezultatelor pacientului și scorurilor aferente privind starea de sănătate, factorii care afectează sănătatea, calitatea vieții legată de sănătate, cunoștințele despre boală și aderența la tratament, prin intermediul unor chestionare validate; d) interacțiunii utilizatorului (subiect/pacient) cu un antrenor virtual conversațional, în scopuri informative și motivaționale, pentru a sprijini telemonitorizarea, luarea deciziilor și consilierea virtuală.

Beneficii clinice

Utilizarea Healthentia permite:

- Furnizarea de date obiective pentru profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a sprijini diagnosticul.
- Evidențierea evoluției parametrilor fiziologici prin analiza tendințelor datelor introduse de pacient.
- Oferirea aceleiași calități a îngrijirii și siguranței ca și standardul de îngrijire.

Indicații clinice

Telemonitorizarea bolilor cronice (cum ar fi insuficiența cardiacă, cancerul, BPOC etc.)

CONTRAINDICAȚII

- Healthentia nu este destinată monitorizării pacienților în situații critice (sală de operație, urgențe, terapie intensivă).
- Orice afecțiune fizică sau cognitivă care, în opinia clinică, ar împiedica pacientul să utilizeze Healthentia, de exemplu demența.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.
- Aplicația Healthentia nu a fost testată pe populația pediatrică. Prin urmare, aplicația Healthentia este destinată exclusiv utilizării de către adulți (>18 ani) și nu acoperă utilizarea de către copii fără supraveghere.

Grup-țintă de pacienți

Pacienți cu boli cronice care participă la o investigație clinică sau urmează un tratament medical.

Utilizatori vizați

Pacienți telemonitorizați și profesioniștii lor din domeniul sănătății.

MEDIU ȘI DURATĂ DE UTILIZARE

Aplicația Healthentia poate fi utilizată ca soluție de Monitorizare la Distanță a Pacientului pentru pacienți externi din spital care trebuie să urmeze un anumit tratament. Durata utilizării depinde de studiul clinic, intervenția medicală sau dorința pacientului.

ATENȚIONĂRI

Healthentia nu este monitorizată în timp real de personal medical; este destinată exclusiv comunicării în situații non-urgente. În caz de urgență, contactați unitatea medicală sau numărul de urgență telefonic.

În unele cazuri speciale, sfaturile și instrucțiunile pentru autoîngrijire furnizate de Healthentia pot să nu fie aplicabile situației dumneavoastră.

REF

Healthentia – Mobile-app

SN

V4.0





- Dacă aveți întrebări legate de îngrijirea, simptomele sau gestionarea stării dumneavoastră de sănătate, contactați echipa medicală.
- Dispozitivul nu este destinat să înlocuiască îngrijirea oferită de un profesionist din domeniul sănătății, inclusiv prescripții, diagnostic sau tratament.
- Telemonitorizarea nu înlocuiește controalele medicale regulate. Consultați medicul în caz de simptome severe sau persistente.
- În combinație cu Healthentia, folosiți doar dispozitive de măsurare pentru care performanțele tehnice (precizia, acuratețea) au fost verificate de furnizorul dumneavoastră de servicii medicale, deoarece acestea pot influența rezultatul monitorizării.
- Verificați consistența datelor dumneavoastră clinice și buna lor transmitere către furnizorul de servicii medicale, deoarece calitatea diagnosticului și tratamentului se bazează parțial pe aceste informații.

DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE

Furnizorul dumneavoastră de servicii medicale este responsabil pentru evaluarea finală a diagnosticului și tratamentului.

Healthentia furnizează informații pentru a sprijini luarea deciziilor de diagnostic și tratament, însă contextul clinic general trebuie luat în considerare înainte de luarea oricărei decizii.

Cerințe privind acuratețea

Cerințele de acuratețe pentru dispozitivele IoT conectate la Healthentia sunt enumerate mai jos.

măsurare	Min. precizie
Tensiune arterială	<10mmHg (probabilitate de cel puțin 85%)
SpO2	$A_{rms} \pm 2-3\%$ a valorilor gazelor sanguine arteriale
Inimă (FRE, max., ...)	$\pm 10\%$ din rata de intrare sau ± 5 respirații pe minut
Greutate	$\pm 0.5-1.0$ kg
Activitate fizică (pași, ...)	n/a
Somn	n/a

Integrarea cu alte dispozitive

Aplicația Healthentia este compatibilă cu alte dispozitive pentru colectarea informațiilor privind stilul de viață și a semnelor vitale. **Dispozitivele suportate**, destinate utilizării împreună cu Healthentia, sunt:

- **Trackere și ceasuri Garmin** prin API-ul Garmin (Android & iOS)**: Fenix 5 Pro, Fenix 6 Pro, Forerunner 945, Vivoactive 4, Vivosmart 4, Venu 2S
- **Trackere și ceasuri Fitbit** prin API-ul Google Health (Android & iOS)**: Versa, Inspire 2
- **Dispozitive iHealth prin Bluetooth (Android & iOS)**: Tensiometru conectat iHealth Track (KN-550BT)*, Cântar inteligent pentru compoziția corporală iHealth Fit (HS2S)***, Pulsoximetru inteligent – iHealth Air (POM3)*
- **Centură Polar** prin API-ul Polar (Android & iOS): H9**
- **Dispozitive Withings prin conectivitate celulară (Android și iOS)**: Tensiometru inteligent - Withings BPM PRO 2*, BPM PRO*, Cântar inteligent pentru compoziția corporală - Withings Body Pro*

*Dispozitivul are o acuratețe acceptabilă pentru scopul preconizat al Healthentia

** Dispozitivul nu are o acuratețe acceptabilă pentru scopul preconizat al Healthentia și poate fi utilizat doar pentru măsurători care nu necesită acuratețe (de exemplu: contor de pași, somn)



Healthentia – Mobile-app



V4.0





În combinație cu Healthentia, utilizați doar dispozitive de măsurare prescrise de furnizorul dumneavoastră de servicii medicale, deoarece acest lucru poate influența rezultatele monitorizării dumneavoastră.

Aceste dispozitive constituie o combinație sigură, iar în prezent nu există informații specifice privind restricții cunoscute legate de combinații.

Healthentia afișează valorile în unități internaționale (m, kg, s), indiferent de preferințele utilizatorului în dispozitivul său IoT.

CERINȚE MINIME

Hardware suportat

Orice smartphone care rulează un sistem de operare compatibil (vezi mai jos) este considerat un dispozitiv hardware suportat.

Sisteme de operare mobile suportate

Aplicația Healthentia este compatibilă cu următoarele sisteme de operare Android și iOS:

Android: versiunea 7.0 și ulterioare

iOS: versiunea 15.1 și ulterioare

Instruire

Nu este necesară nicio instruire pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.





SECURITATE ȘI PERFORMANȚĂ

Securitate

Innovation Sprint este dedicată protejării securității informațiilor persoanelor vizate și ia măsuri rezonabile pentru a le proteja, inclusiv împotriva accesului neautorizat, necesar pentru funcționarea corectă a aplicației. În acest sens, Innovation Sprint evaluează și revizuieste în mod regulat tehnologiile, infrastructura, procedurile și potențialele riscuri pentru a menține securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorilor, acordând o atenție specială accesului bazat pe roluri și înregistrării accesărilor datelor de sănătate. Mai mult, orice modificare potențială a aplicațiilor software, a serviciilor furnizate și/sau a sistemelor hardware este justificată, evaluată și înregistrată în conformitate cu bunele practici și standardele internaționale.

Recomandări de utilizare sigură:


- Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice pentru conectarea la Healthentia atunci când introduceți sau gestionați date de sănătate și/sau detalii ale profilului.
- Nu utilizați dispozitive deblocate (jailbroken).
- Parolele trebuie să aibă cel puțin **opt (8)** caractere și să conțină caractere din **trei** din următoarele **patru** categorii: litere mici, litere mari, cifre (0-9), caractere speciale.
- Nu stocați niciodată parolele pe dispozitivele dumneavoastră.
- Schimbați parolele cel puțin o dată la **șase luni**.
- Instalați un program anti-malware pe dispozitive și actualizați-l regulat.
- Asigurați-vă că fiecare adresă de e-mail înregistrată în Healthentia vă aparține.
- Ignorați și ștergeți mesajele de origine îndoielnică și nu accesați linkurile pe care le conțin.
- Nu dezvăluiți informații confidențiale (ex: nume de utilizator, parolă) prin telefon, e-mail, formulare online sau rețele sociale.
- Utilizați întotdeauna cele mai recente versiuni ale sistemului de operare și ale aplicației Healthentia.
- Se recomandă ca setarea Bluetooth să fie pe modul „nedetectabil” (transmisie dezactivată) și să fie activată doar atunci când este necesară.
- Evitați stocarea de informații critice (ex: date de autentificare) pe dispozitive cu Bluetooth activ.
- Dacă urmează să vă conectați prin Bluetooth, faceți acest lucru **doar într-un loc sigur**.

Performanță

- Oferă date obiective pentru profesioniștii din domeniul sănătății pentru a sprijini diagnosticul și gestionarea pacientului;
- Evidențiază evoluția parametrilor fiziologici prin analiza tendințelor în datele furnizate de pacient;
- Crește aderența pacientului la tratament.




1 DESCARCĂ APLICAȚIA

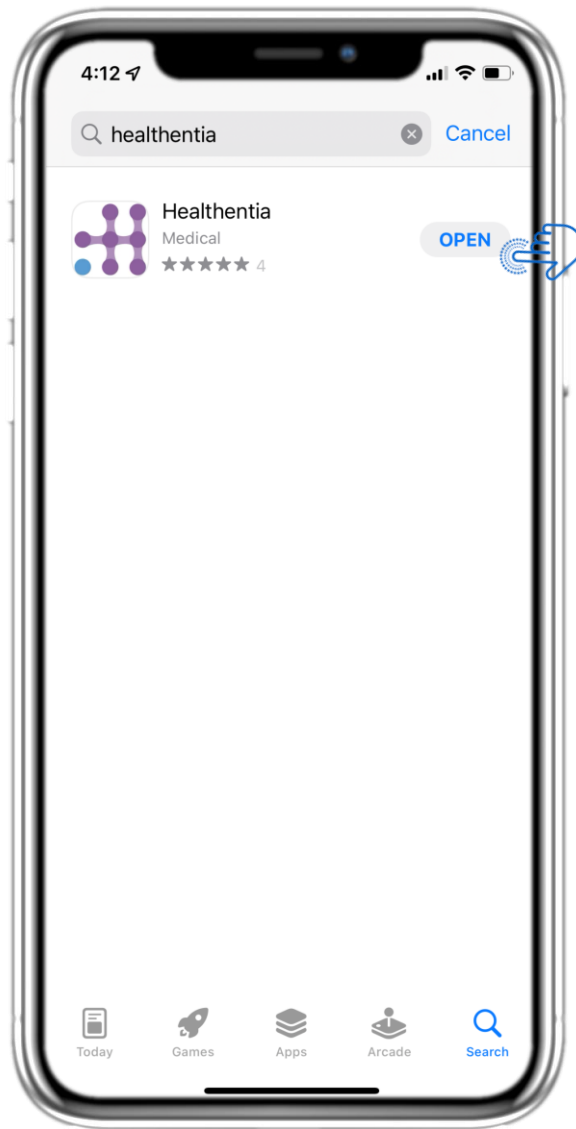

Descarcă aplicația Healthentia din iOS App Store sau Google Play Store.




2 BUN VENIT / ÎNREGISTRARE

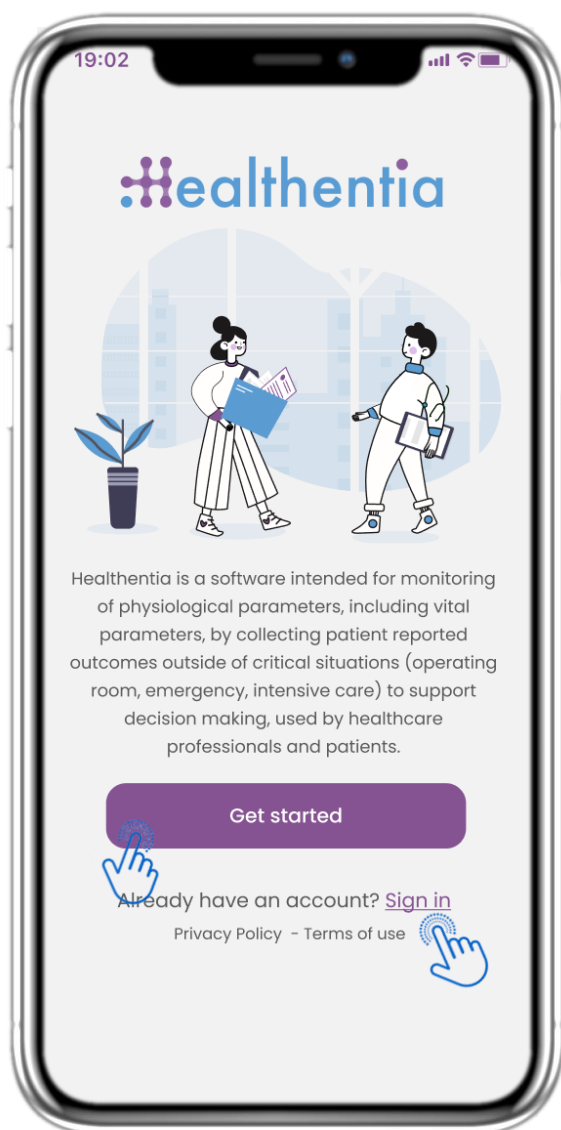

2.1 PAGINA DE BUN VENIT

Pagina de bun venit a aplicației Healthentia, care menționează scopul de utilizare ca dispozitiv medical. Ai opțiunea de a te înregistra apăsând „Începe” sau să te autentifici apăsând „Conectare”.

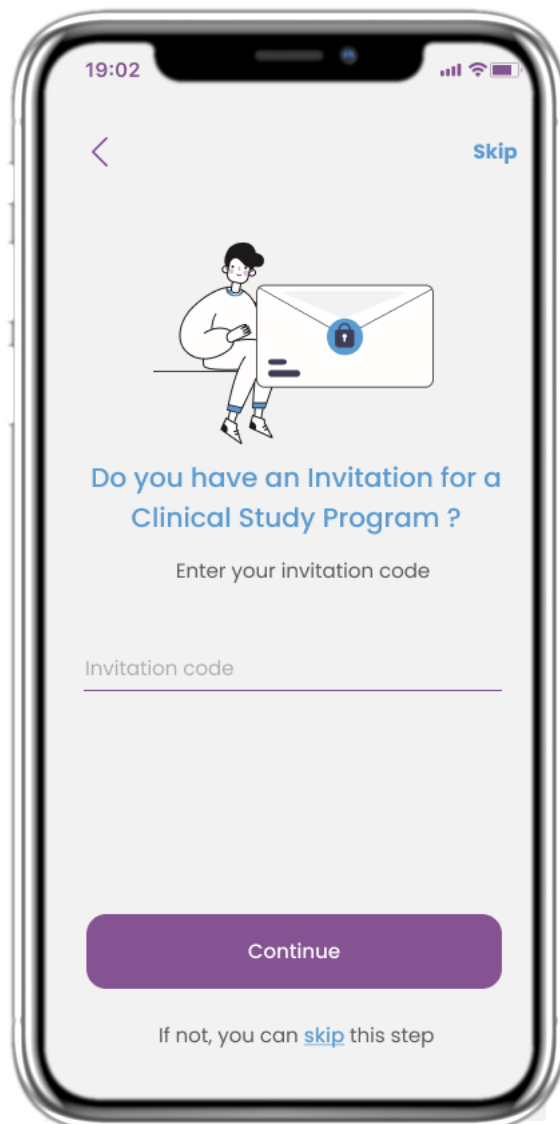

2.2 COD DE INVITAȚIE

Dacă ai primit un cod de invitație, îl poți introduce aici, altfel poți sări peste acest pas.



2 CHESTIONAR DE ÎNROLARE

19:02

STEP 1/4

Create a new account

E-mail Address

Password

Confirm password

Continue

2.3 ÎNREGISTRARE

Creează un cont nou folosind o adresă de e-mail și o parolă puternică.

19:02

STEP 2/4

skip

Enter your weight and height

Weight 63.5 KG

Height 1.75 CM

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.


1 2 3
ABC DEF
4 5 6
GHI JKL MNO
7 8 9
PQRS TUV WXYZ
• 0

2.4 INTRODUCI GREUTATEA ȘI ÎNĂLȚIMEA

Introdu greutatea și înălțimea ta pentru a completa profilul.



2 CHESTIONAR DE ÎNROLARE

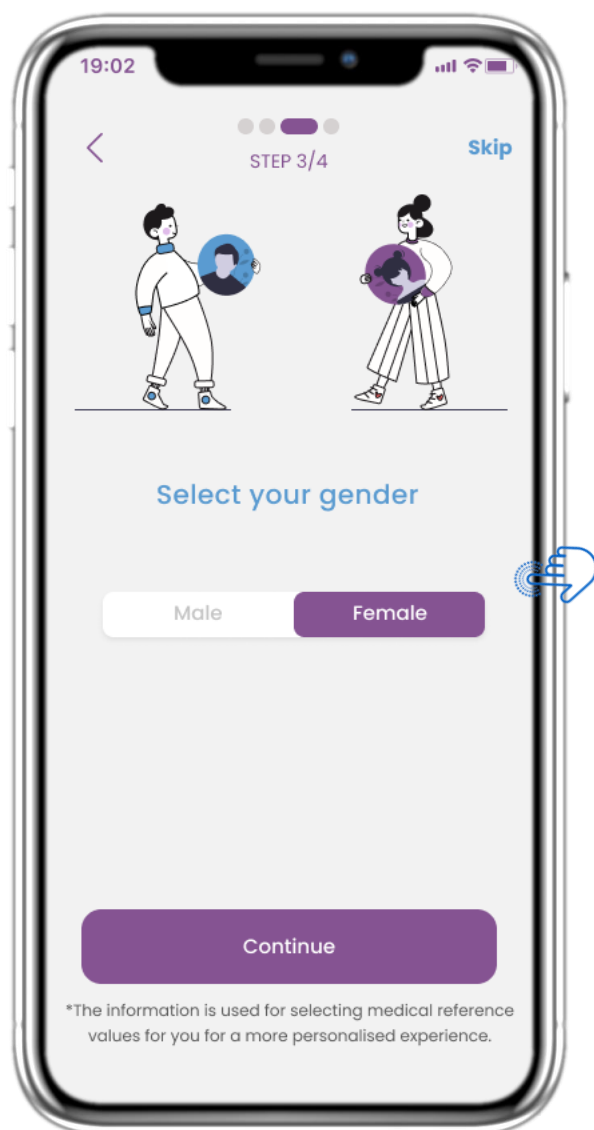

19:02

STEP 3/4

skip

Select your gender


Male Female

Continue

*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

2.5 SELECTEAZĂ GENUL

Alege genul tău pentru profilul tău.

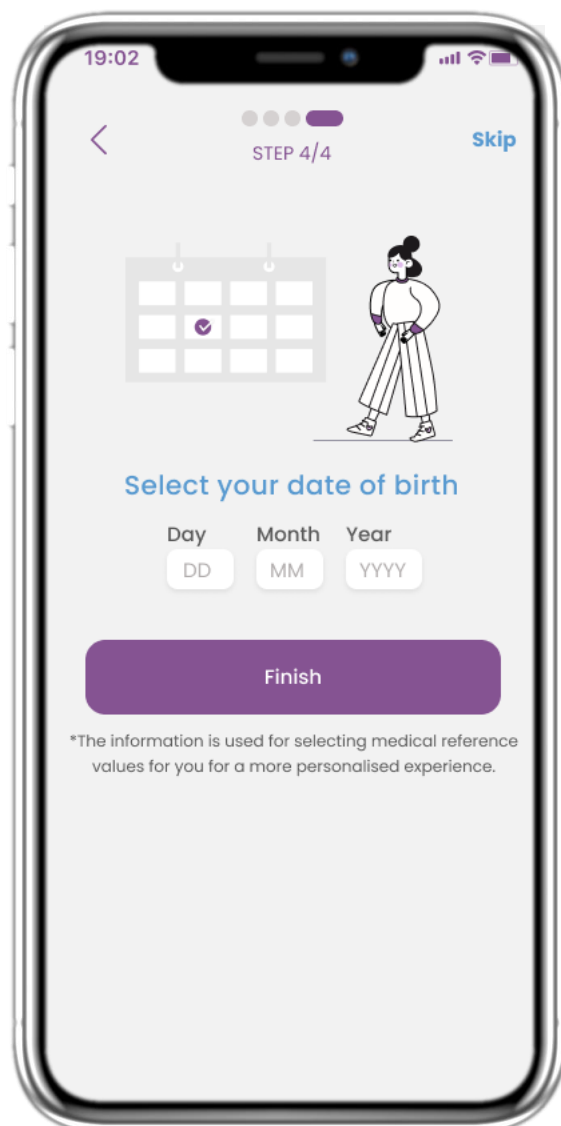

19:02

STEP 4/4

skip

Select your date of birth

Day Month Year

DD MM YYYY

Finish


*The information is used for selecting medical reference values for you for a more personalised experience.

2.6 SELECTEAZĂ DATA NAȘTERII

Alege data nașterii pentru profilul tău.




2 CONSENTURI / PERMISIUNI

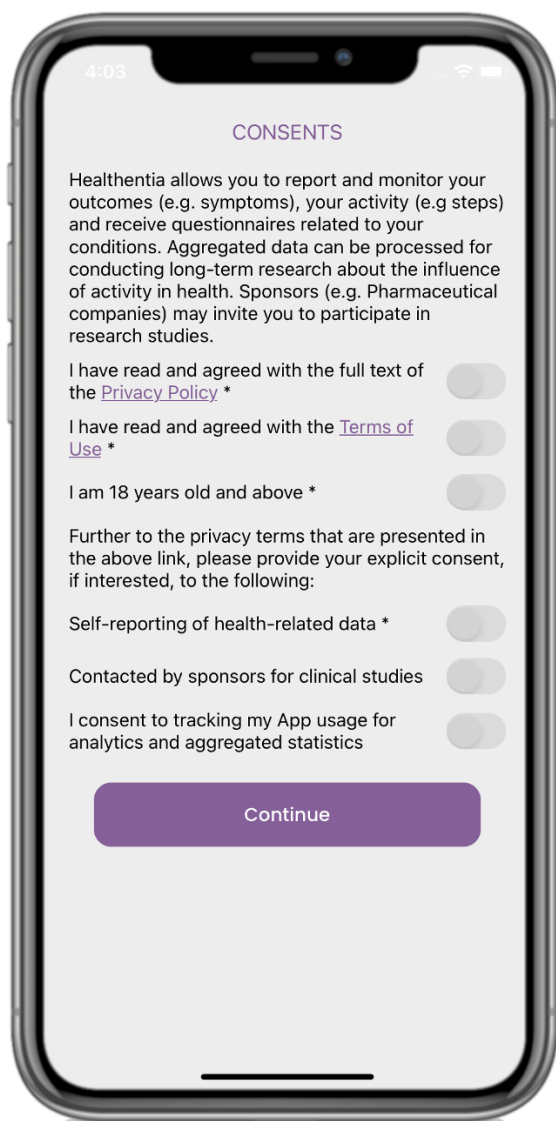

2.7 PAGINA DE CONSIMȚĂMÂNT

Selectează dacă ești de acord să îți partajezi anonim datele în scopuri de cercetare. Citește și acceptă Termenii și Politica de Confidențialitate a aplicației Healthentia și indică-ți preferințele referitoare la consimțămintele explicite.

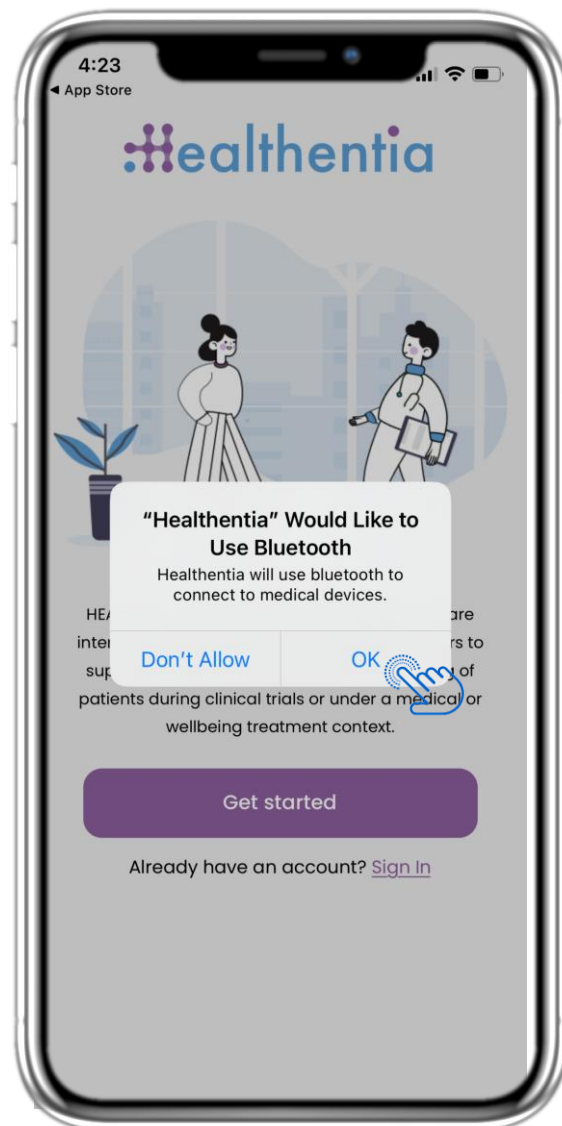


2.8 NOTIFICARE PENTRU PERMISIUNI

Acordă permisiuni aplicației Healthentia pentru a-ți trimite notificări, pentru a folosi Bluetooth-ul și pentru a se conecta la alte dispozitive.




3 PAGINA PRINCIPALĂ & NOTIFICĂRI PUSH

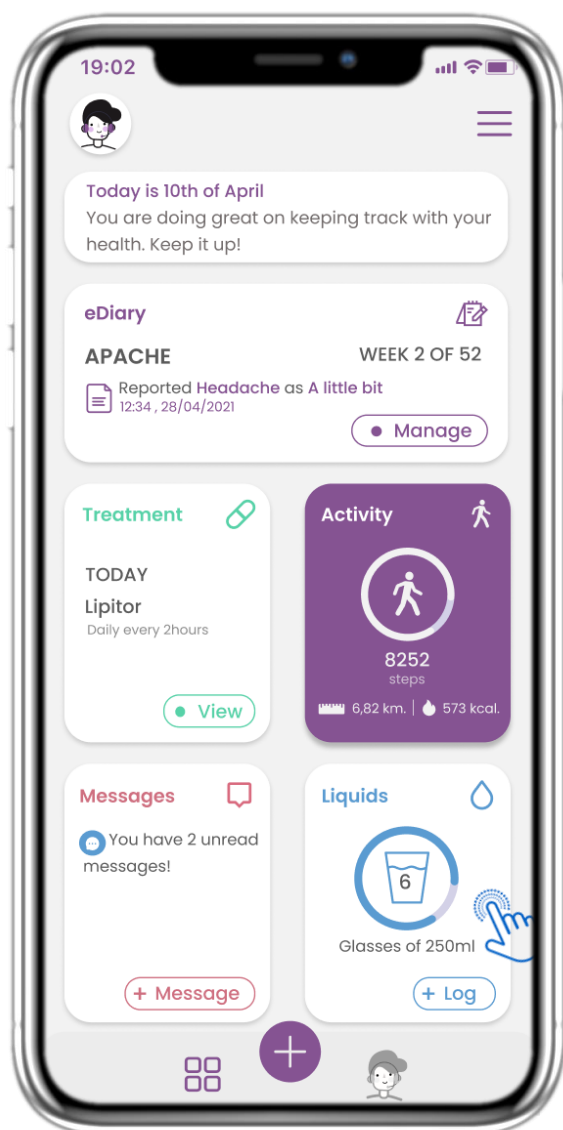

3.1 PAGINA PRINCIPALĂ (HOME)

În pagina Principală, ești întâmpinat de asistentul virtual (chatbot), care îți anunță chestionarele în așteptare.

Mai jos, pagina principală este compusă din diferite widgeturi, configurate în funcție de studiul specific.

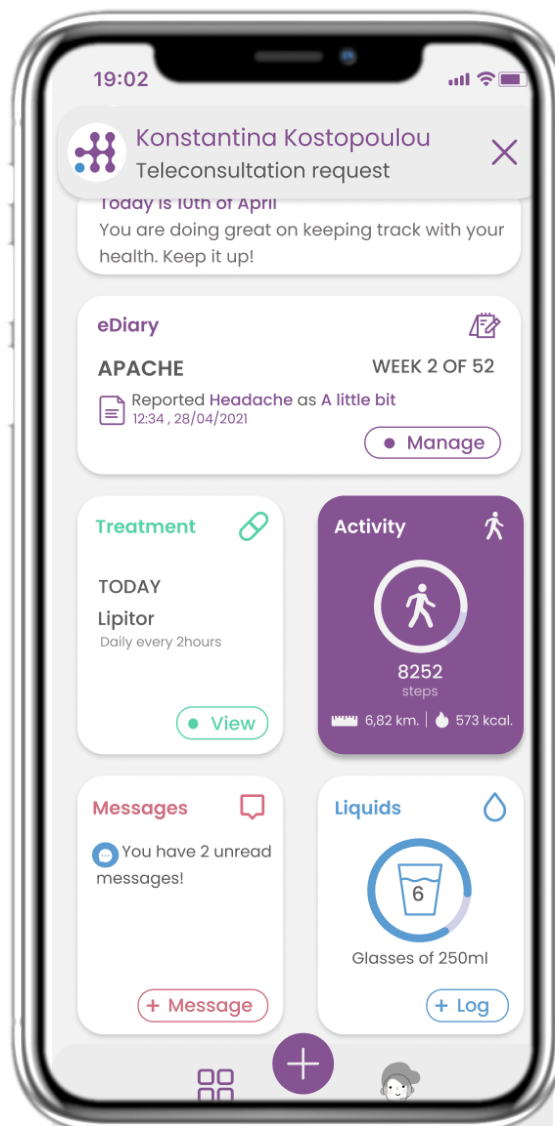


3.2 NOTIFICĂRI PUSH

Healthentia îți solicită să permițezi notificările din setările telefonului, astfel încât să poți primi mementouri pentru chestionare și tratamente.




3 PAGINA PRINCIPALĂ & NOTIFICĂRI PUSH

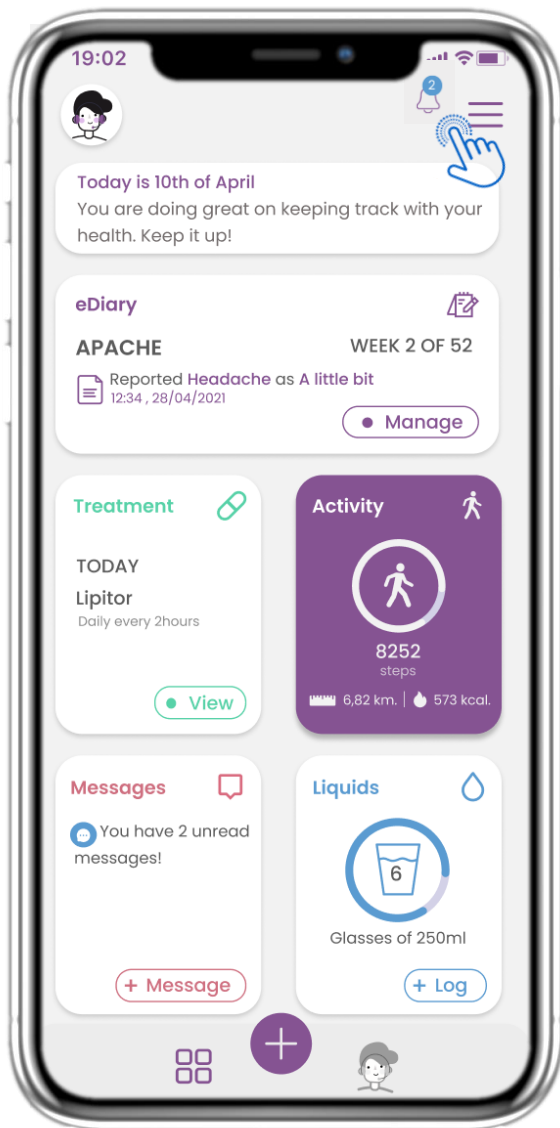

3.3 NOTIFICĂRI

În pagina Principală (HOME), poți vedea chestionarele în așteptare sub formă de notificări, în colțul din dreapta sus, marcate cu pictograma clopoțelului.

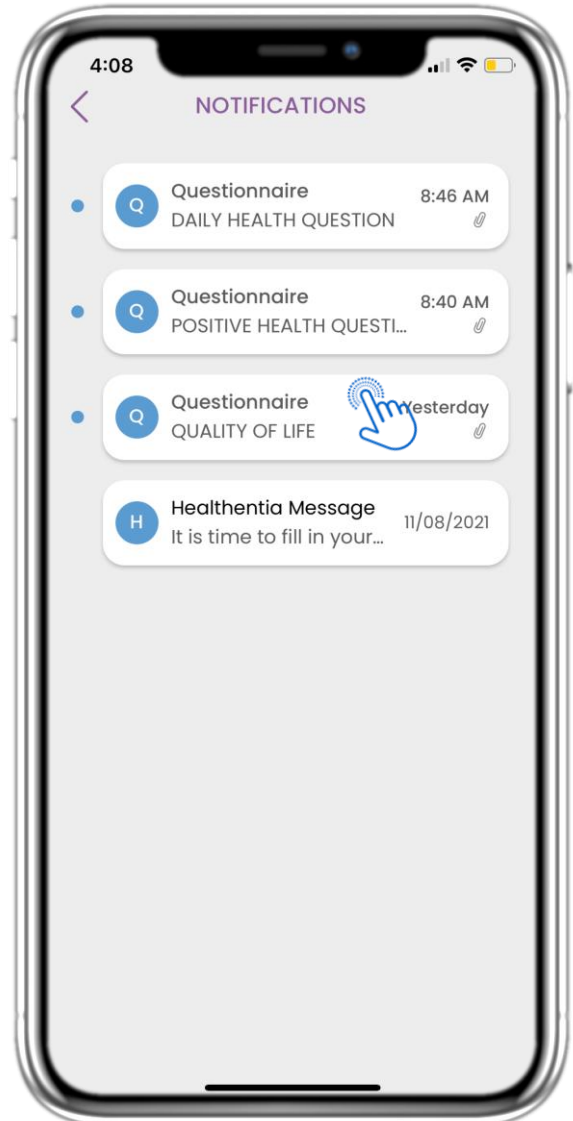

3.4 NOTIFICĂRI

În pagina Notificări, vei găsi o listă cu chestionarele în așteptare la care trebuie să răspunzi.



3 PAGINA PRINCIPALĂ & NOTIFICĂRI PUSH




3.5 ACTUALIZARE OBLIGATORIE

Atunci când este disponibilă o nouă versiune a aplicației care necesită actualizare obligatorie, pacienții vor vedea informațiile de mai sus și nu vor putea utiliza aplicația, decât dacă apasă pe butonul pentru actualizare.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

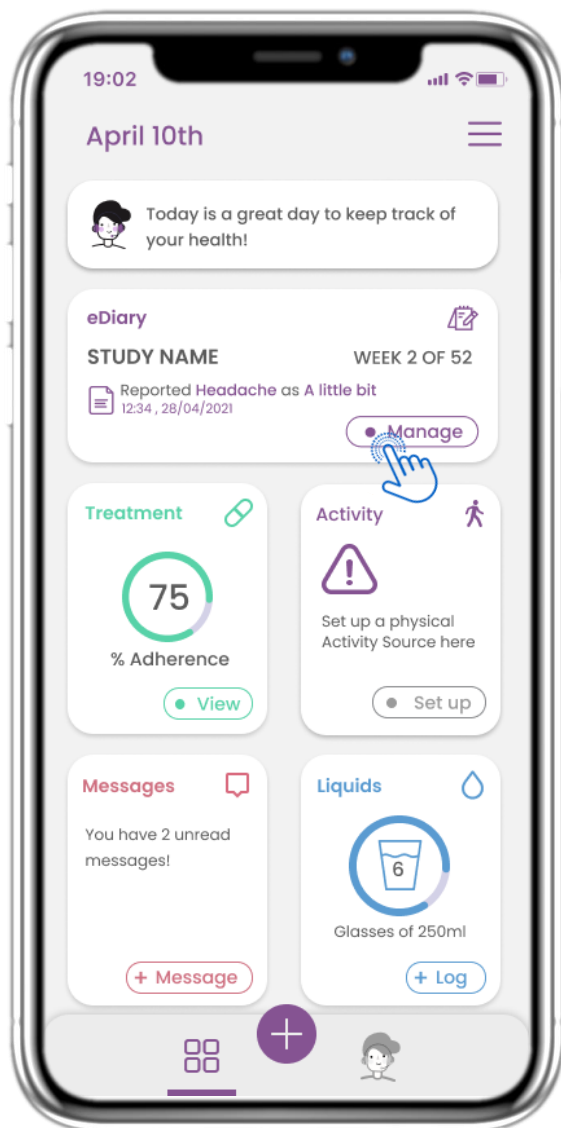

4.1 WIDGET eDIARY

În pagina Principală (HOME), poți găsi widgetul eDiary, care este folosit ca jurnal al studiului sau al monitorizării terapiei tale.

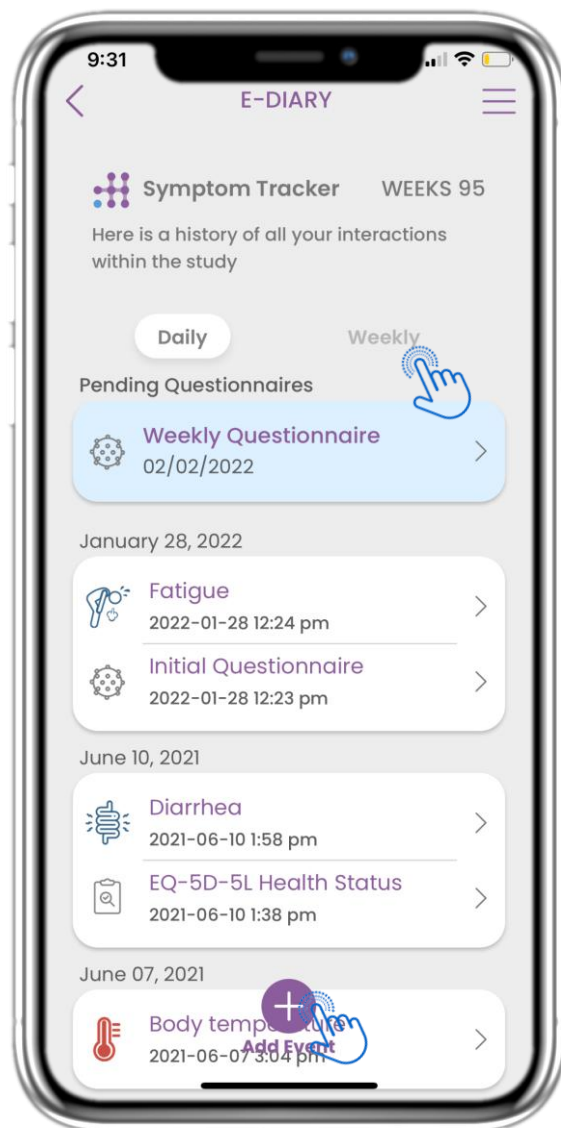


4.2 PAGINA eDIARY

În pagina eDiary, poți vedea un rezumat zilnic și săptămânal al rapoartelor și chestionarelor completate. De asemenea, poți folosi butonul (+) pentru a adăuga un nou eveniment.



4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

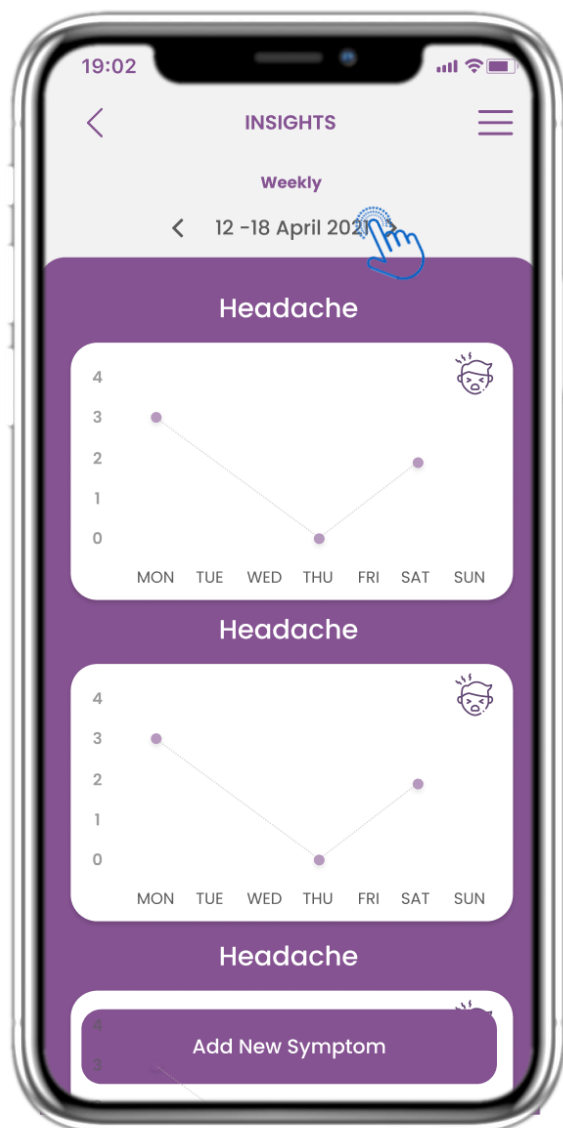

09/04/2020 16:15

Cough

Do you have a cough?
A little bit

Define your cough type:
Dry

4.3 INFORMAȚII DIN eDIARY

Dacă studiul permite afișarea graficelor simptomelor către utilizator, va exista un buton pentru a deschide această pagină.


Cu ajutorul calendarului, poți naviga înainte și înapoi între săptămâni.

4.4 VIZUALIZARE RĂSPUNSURI RAPORTATE

Chestionarele completate, împreună cu răspunsurile transmise, pot fi vizualizate.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

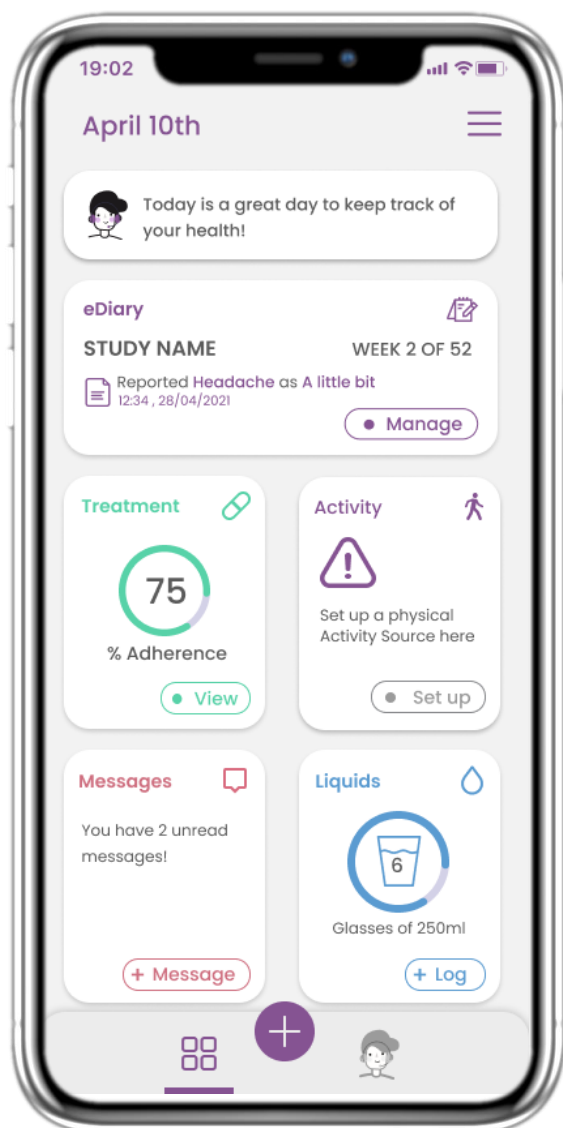

4.5 WIDGET MEDICAȚIE

În pagina Principală (HOME), poți găsi widgetul Medicație, care este folosit pentru a configura planul tău terapeutic.


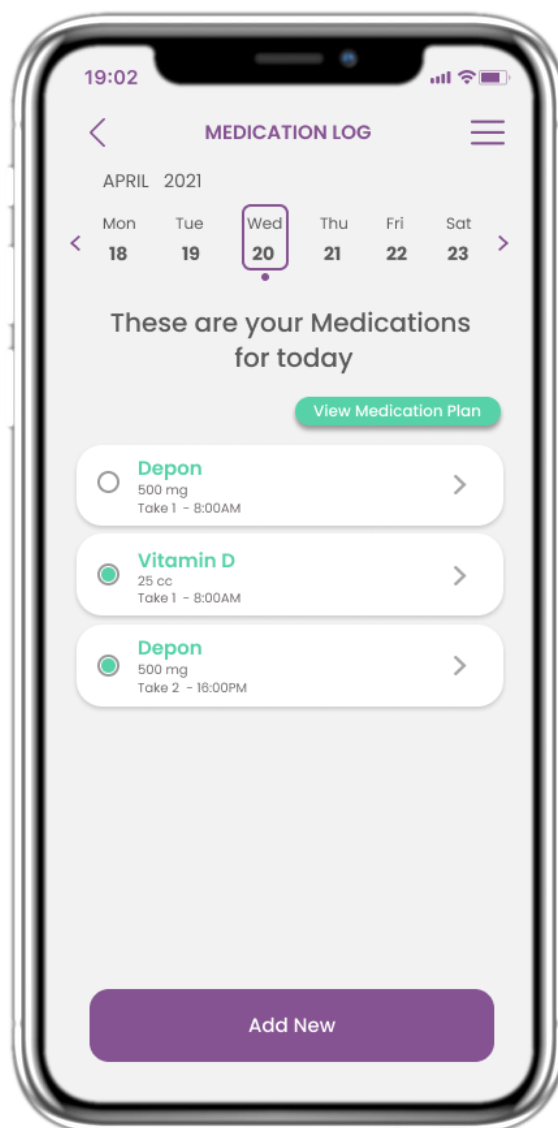


4.6 JURNAL DE MEDICAȚIE

În pagina Jurnal de Medicație, vei găsi un program zilnic al administrării medicației tale. Poți accesa, edita intrările existente sau adauga o nouă.



4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

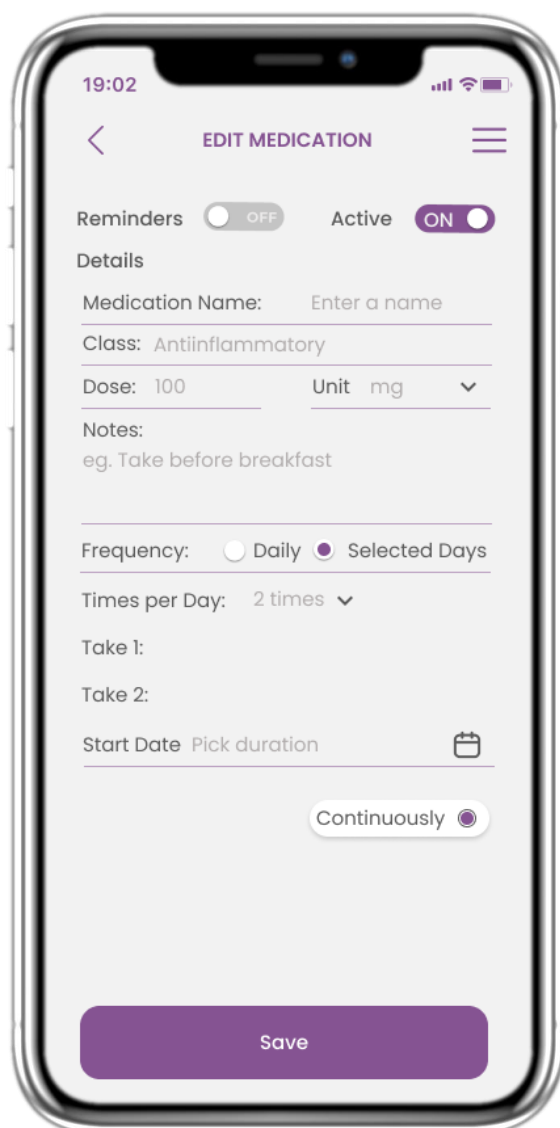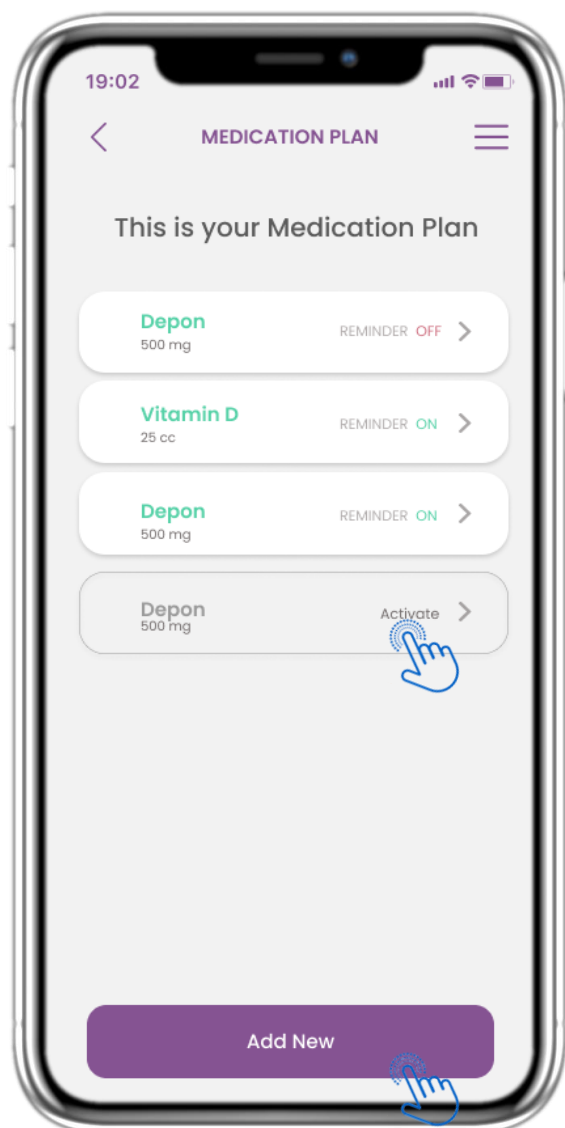

4.7 VIZUALIZARE TOATE MEDICAȚIILE


În pagina Tratament, poți accesa și configura toate tratamentele.

4.8 ADĂUGARE / EDITARE MEDICAȚIE NOUĂ

În pagina medicație Nouă, poți configura numele, frecvența, durata tratamentului și poți adăuga un memento.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

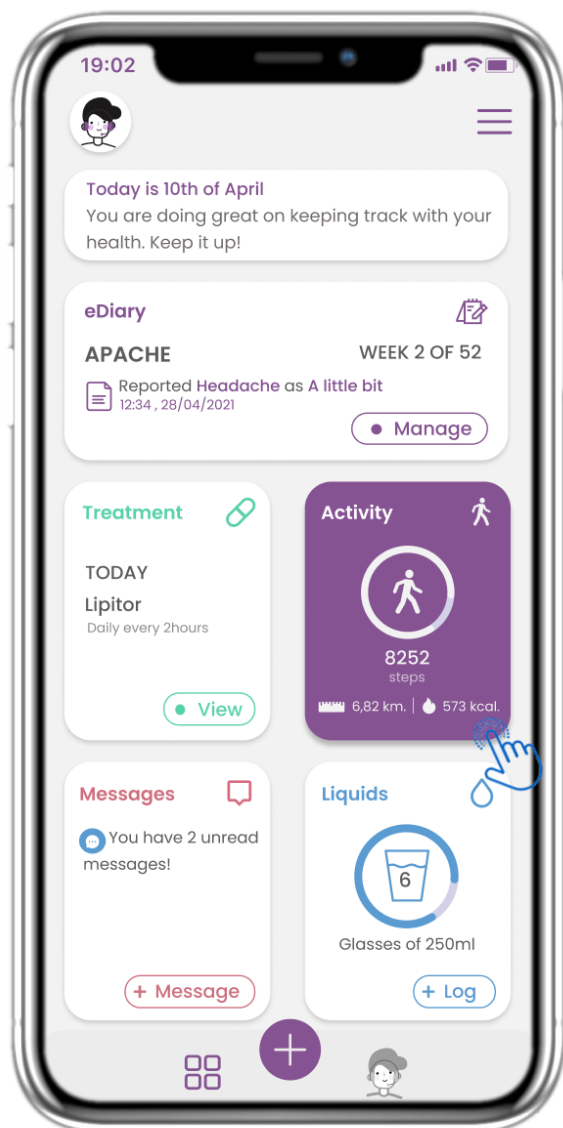

4.9 ACTIVITATE

În pagina Principală (HOME), poți găsi widgetul Activitate, care este folosit pentru a configura dispozitivul tău de urmărire (tracker).

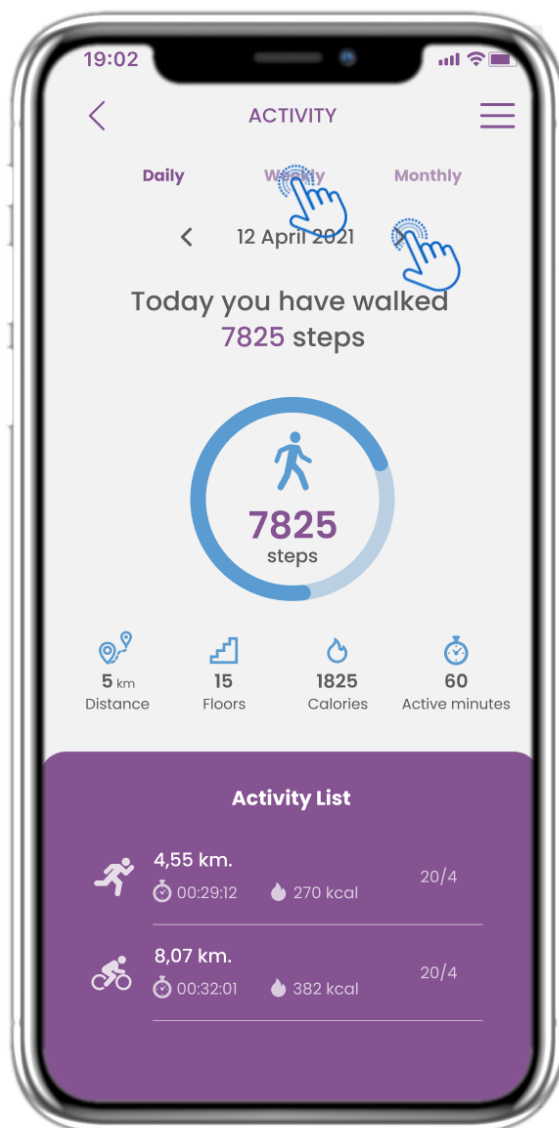


4.10 PAGINA ACTIVITATE

În pagina Activitate, poți monitoriza: Pașii zilnici, Distanța parcursă, Etajele urcate, Caloriile arse, Minutele active. Cu ajutorul calendarului, poți naviga între zile, iar apăsând pe "Săptămânal", poți vizualiza graficele corespunzătoare.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

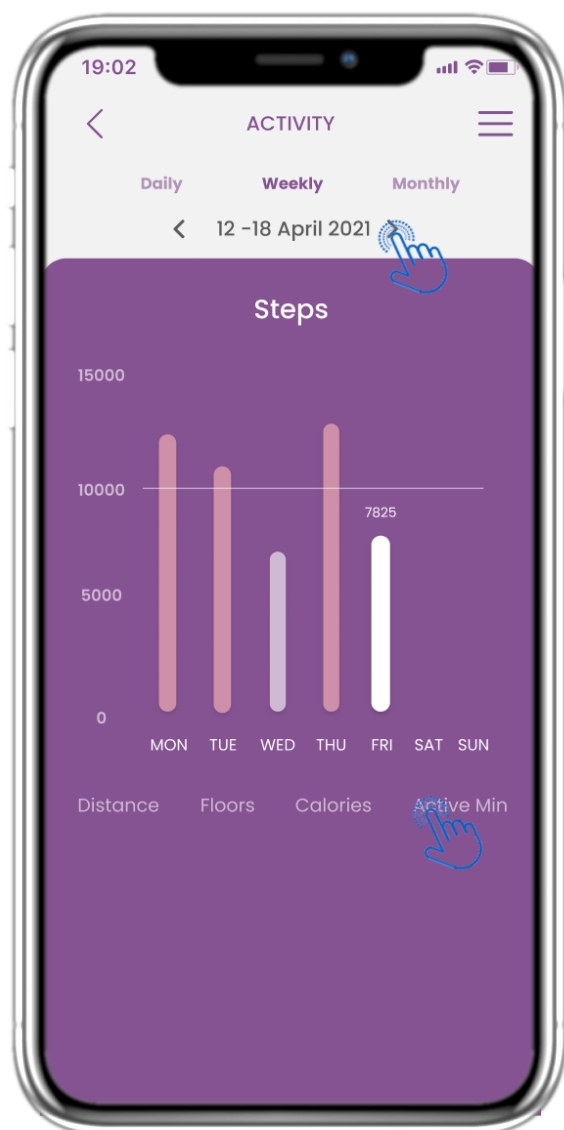

4.11 GRAFICE DE ACTIVITATE

În pagina săptămânală **GRAFICE DE ACTIVITATE** poți găsi numărul săptămânal de Pași, Distanță, Etaje, Calorii și minute active.

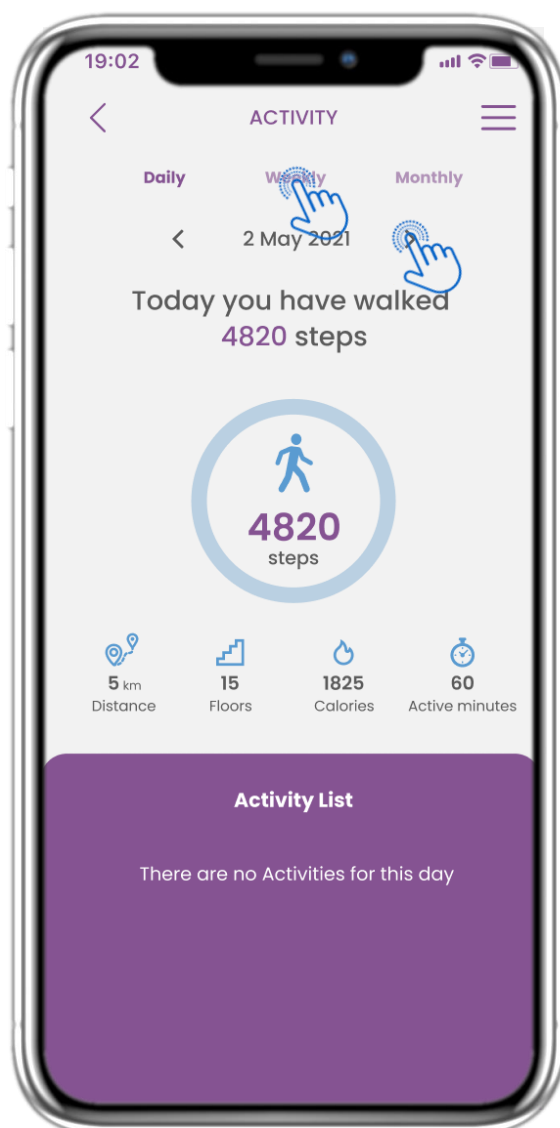


4.12 PAGINA DE ACTIVITATE

Nu au fost înregistrate activități sportive de pe dispozitivul portabil.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

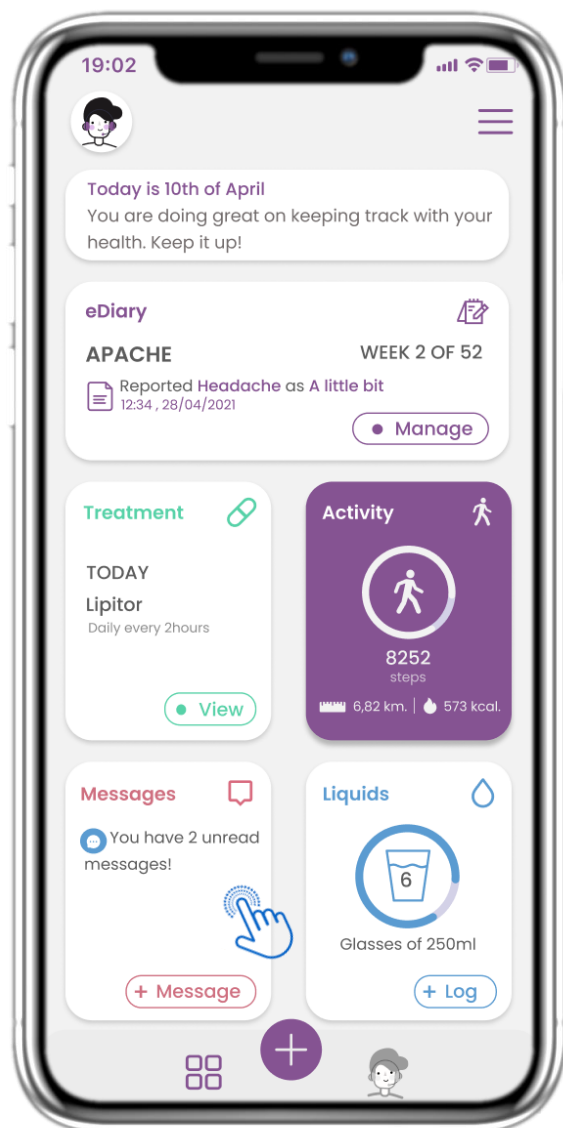

4.13 MESAJ

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Mesaje, care este folosit pentru a contacta medicul sau spitalul și pentru a avea o teleconsultație.

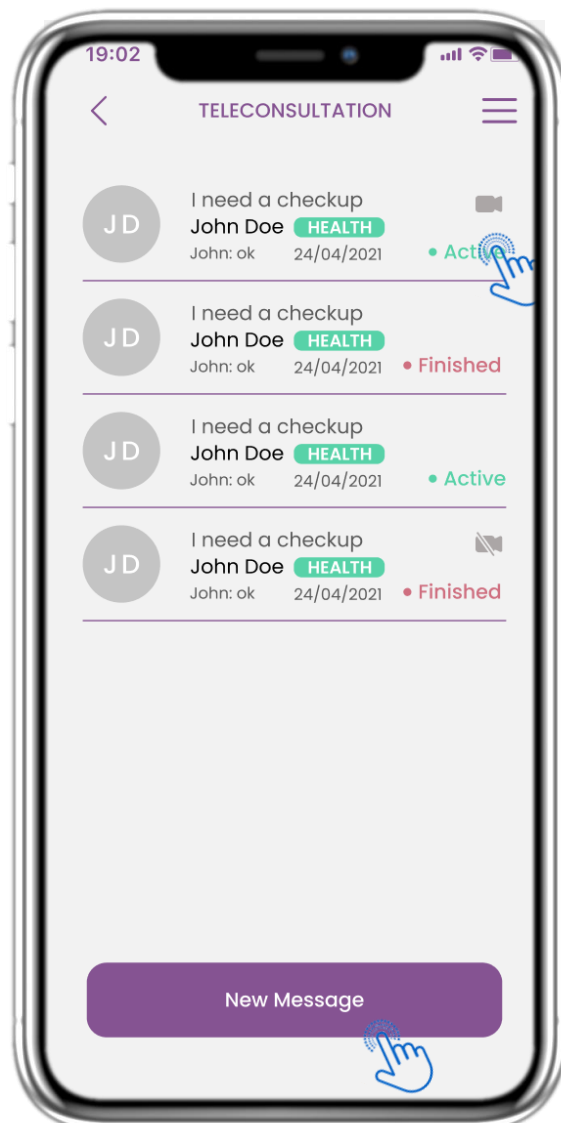


4.14 PAGINA INBOX MESAJ

În pagina Mesaje poți vedea comunicarea cu profesionistul din domeniul sănătății. Creează un mesaj nou sau accesează camera de teleconsultație.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

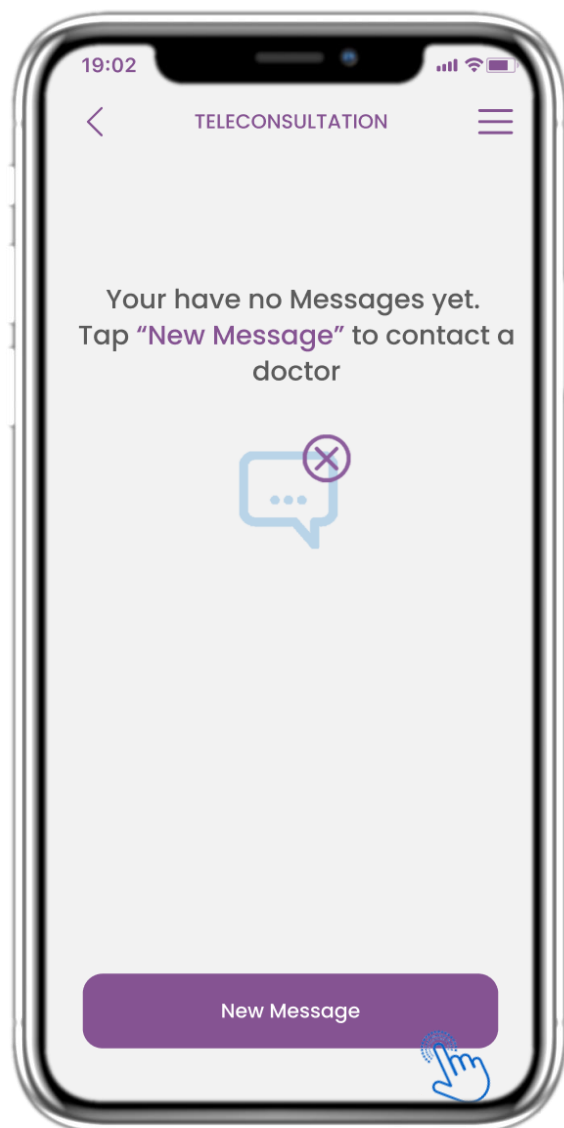

4.15 FĂRĂ MESAJE

Dacă nu există mesaje, așa va arăta pagina.

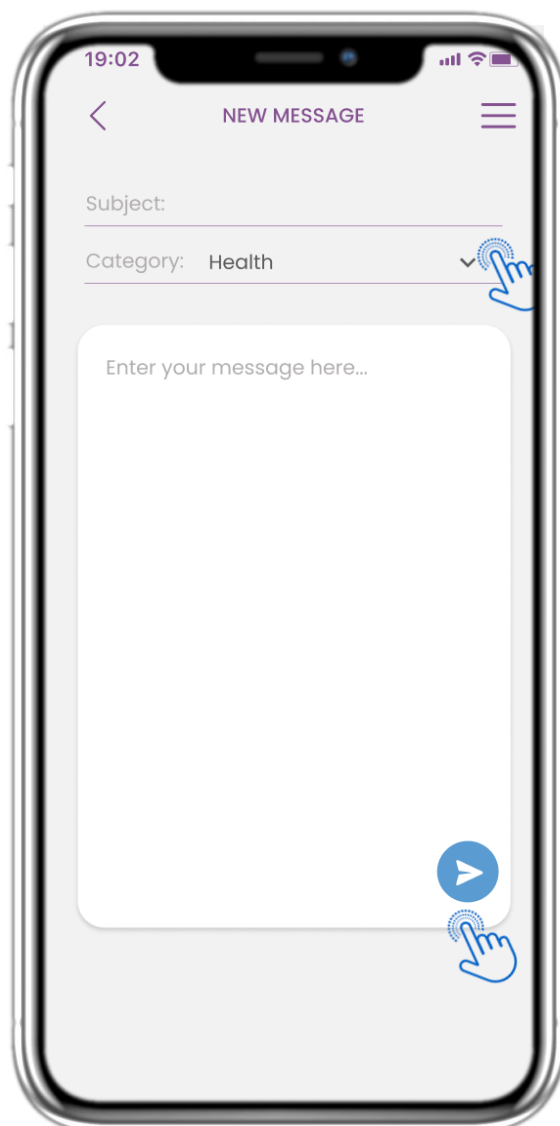


4.16 CREARE MESAJ NOU

În caseta de Mesaj poți selecta un Subiect și o categorie definită de profesionistul din domeniul sănătății și poți introduce mesajul tău.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

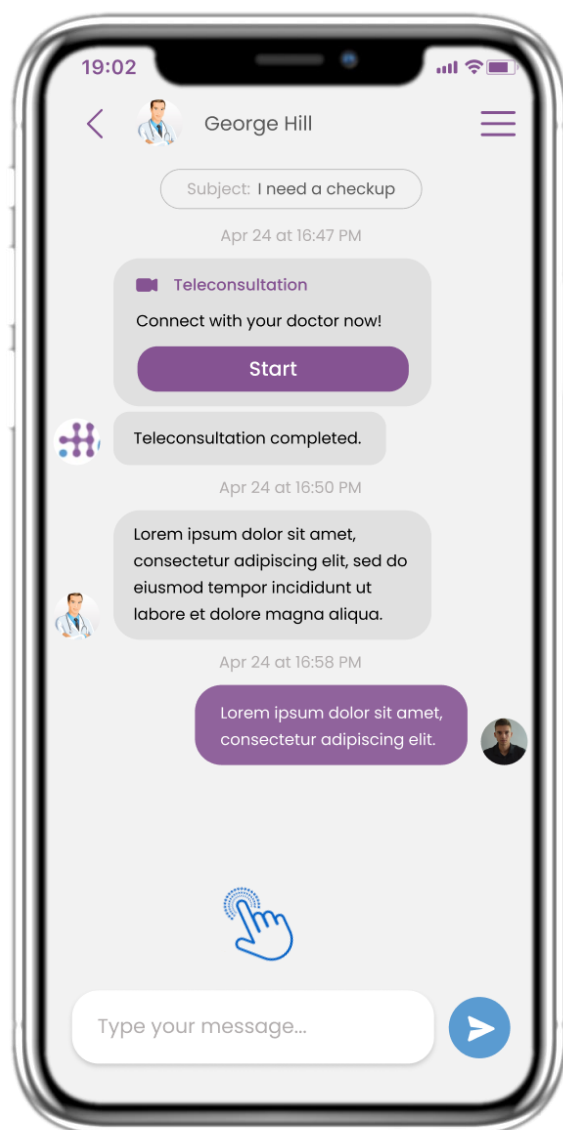

4.17 DESCHIDERE MESAJ

Toate răspunsurile și comunicarea sunt păstrate într-o singură conversație. Profesionistul din domeniul sănătății închide conversația.

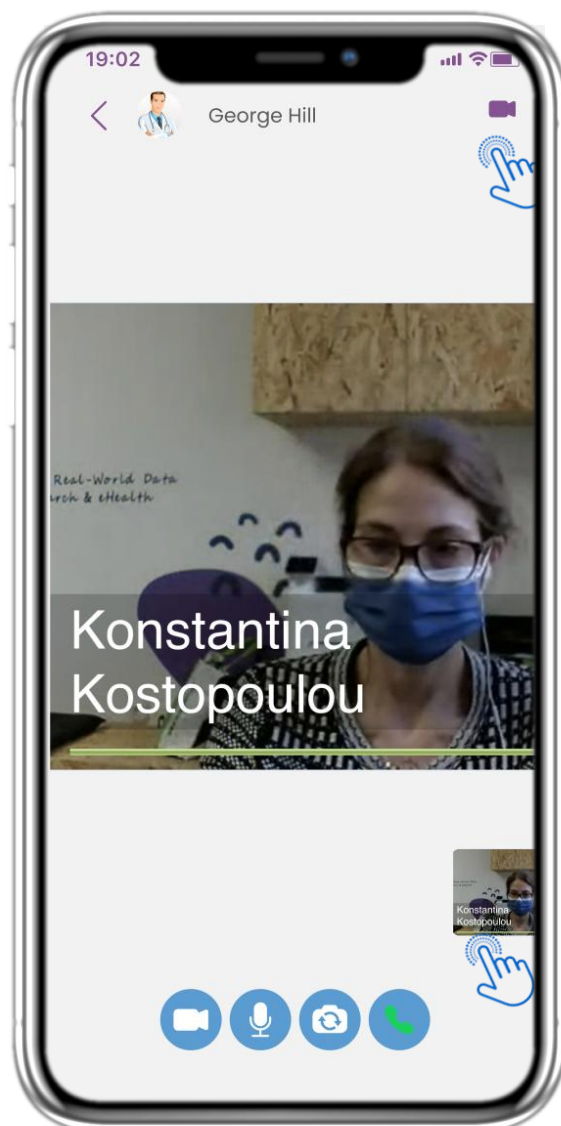


4.18 TELECONSULTAȚIE

În conversația din Mesaje, profesionistul din domeniul sănătății poate iniția o teleconsultație, care va permite utilizatorului să intre într-un interval de 15 minute.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

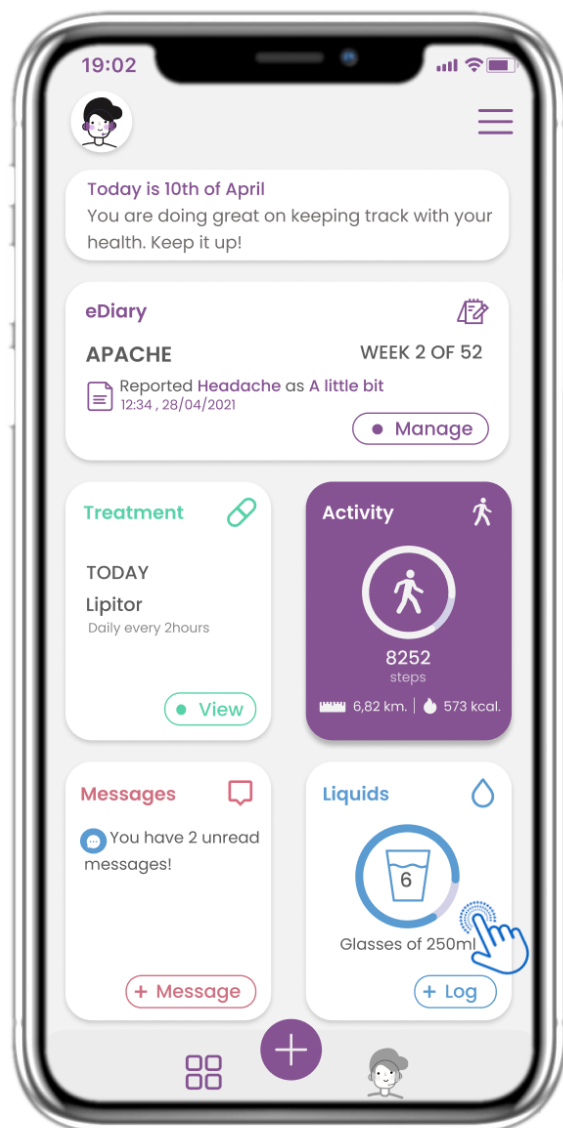

4.19 WIDGET LICHIDE

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Lichide, care este folosit pentru a înregistra zilnic consumul de apă și alte lichide.

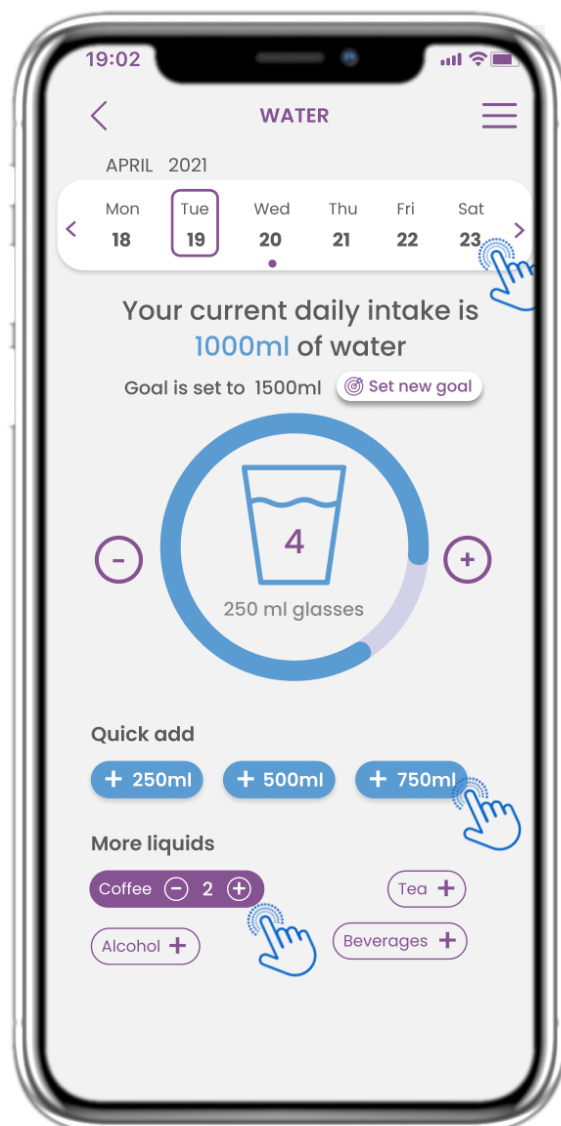


4.20 PAGINA LICHIDE

În pagina Lichide poți adăuga pahare de apă folosind butoanele rapide de 250-500-750 ml și poți adăuga alte lichide, cum ar fi cafeaua sau băuturile.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

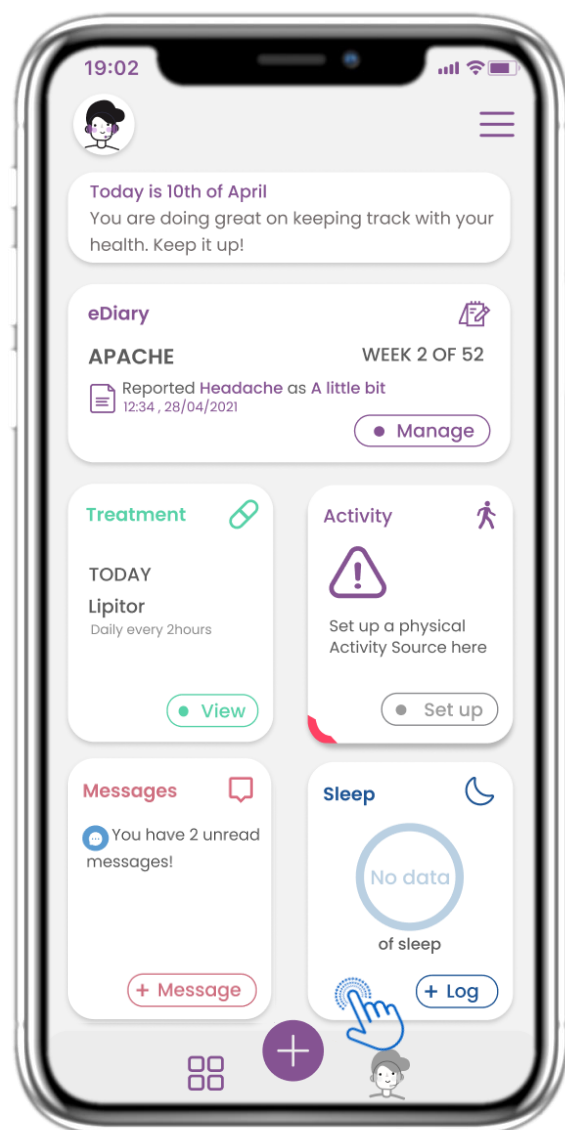

4.21 WIDGET SOMN

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Somn, care este folosit pentru a înregistra somnul fie manual, fie colectat de un dispozitiv portabil.

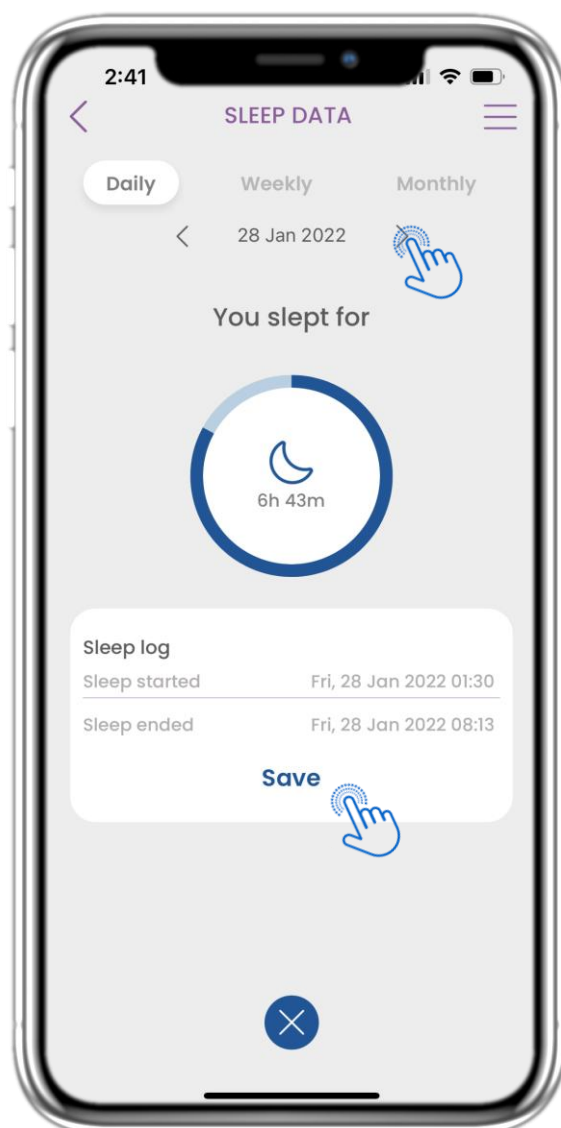


4.22 PAGINA SOMN – ÎNREGISTRARE

În pagina Somn poți adăuga manual orele de somn și poți naviga între zile în calendar sau vizualiza datele zilnice despre somn, precum și selecta opțiunea de a vedea grafice săptămânale.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

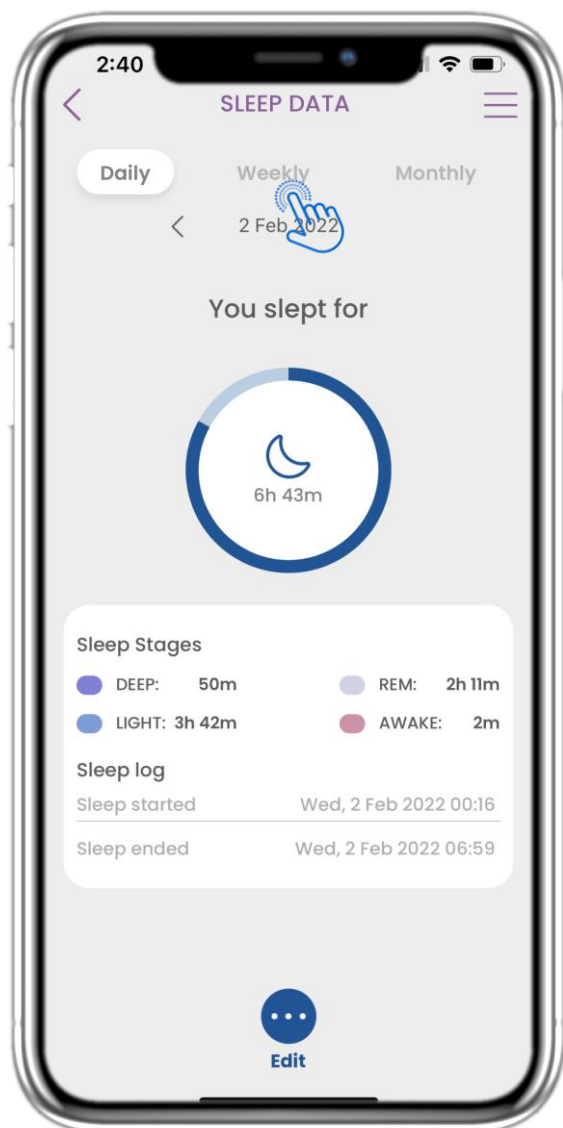

4.23 PAGINA SOMN DIN DISPOZITIV PURTABIL

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Somn, care este folosit pentru a înregistra somnul fie manual, fie colectat de un dispozitiv portabil.


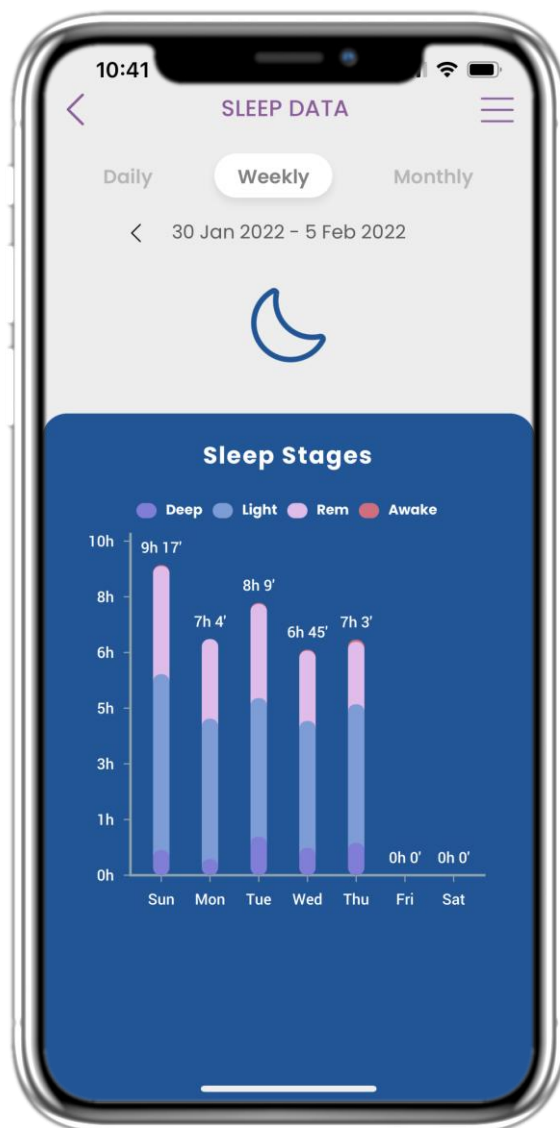


4.24 PAGINA SOMN

În pagina Somn poți adăuga manual orele de somn și poți naviga între zile în calendar sau vizualiza datele zilnice despre somn, precum și selecta opțiunea de a vedea grafice săptămânale.



4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

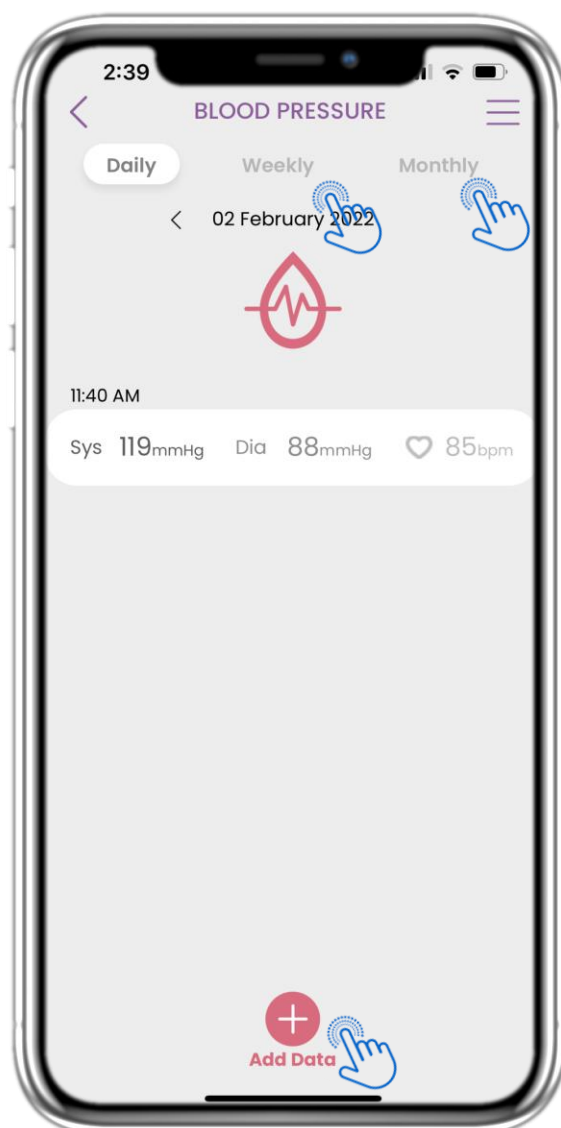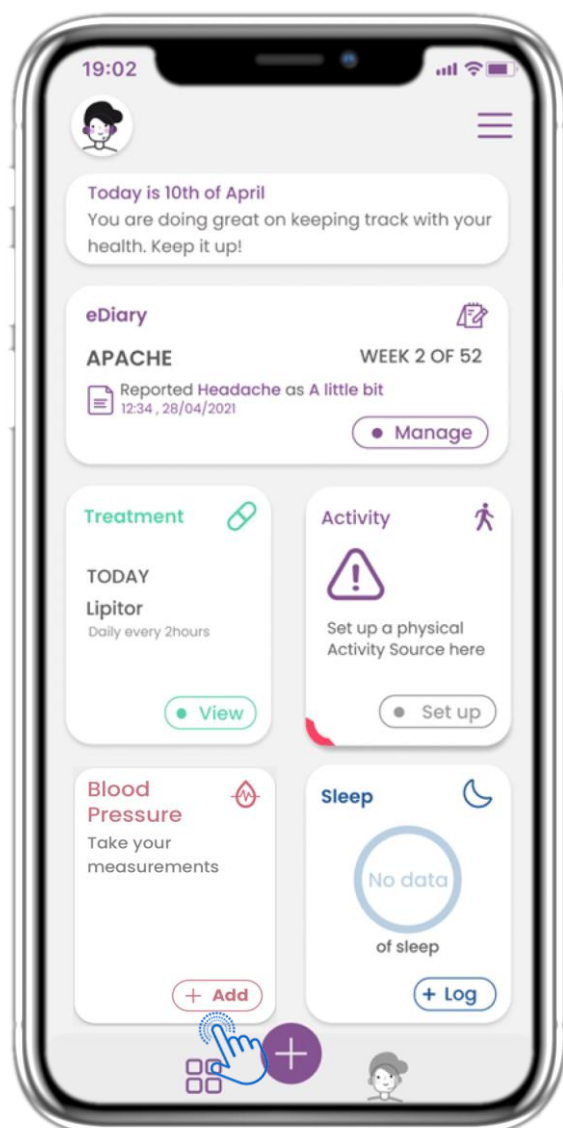

4.25 WIDGET TENSIUNE ARTERIALĂ

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Tensiune Arterială, care este folosit pentru a colecta măsurători printr-un dispozitiv de tensiune sincronizat.

4.26 ÎNREGISTRARE TENSIUNE ARTERIALĂ

În pagina Tensiune Arterială poți adăuga măsurători manual sau prin sincronizarea unui dispozitiv și poți naviga între zile în calendar sau vizualiza datele zilnice, precum și selecta opțiunea de a vedea grafice săptămânale și lunare.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ



4.27 PAGINA TENSIUNE ARTERIALĂ DIN DISPOZITIV

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Tensiune Arterială, care este folosit pentru a înregistra măsurătorile tensiunii arteriale fie manual, fie colectate printr-un dispozitiv.

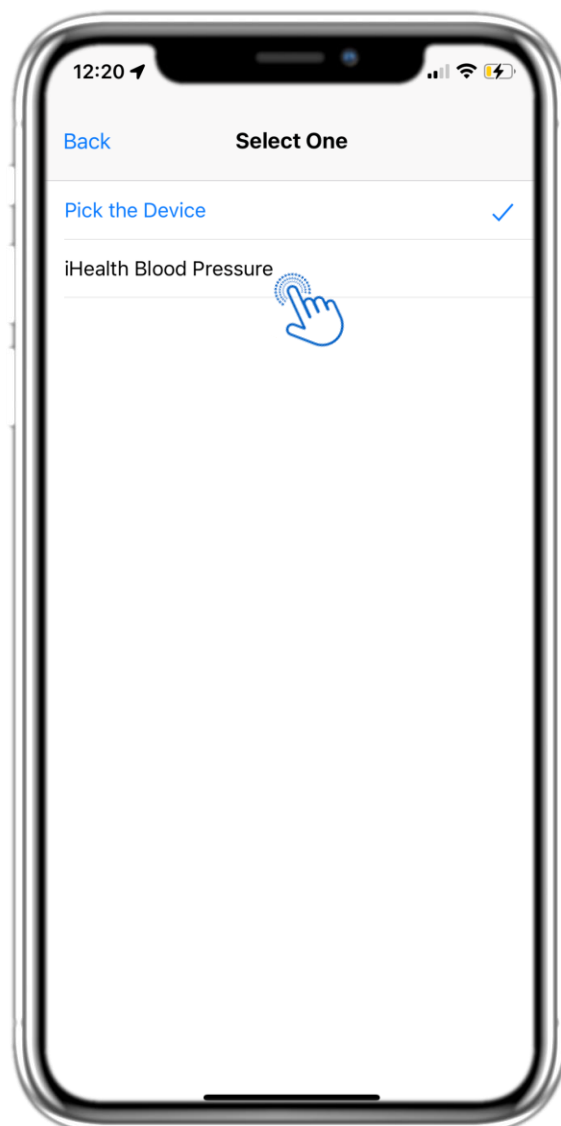


4.28 PAGINA TENSIUNE ARTERIALĂ DIN DISPOZITIV

În pagina Tensiune Arterială poți sincroniza un dispozitiv de tensiune și colecta automat măsurătorile direct de la acesta.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

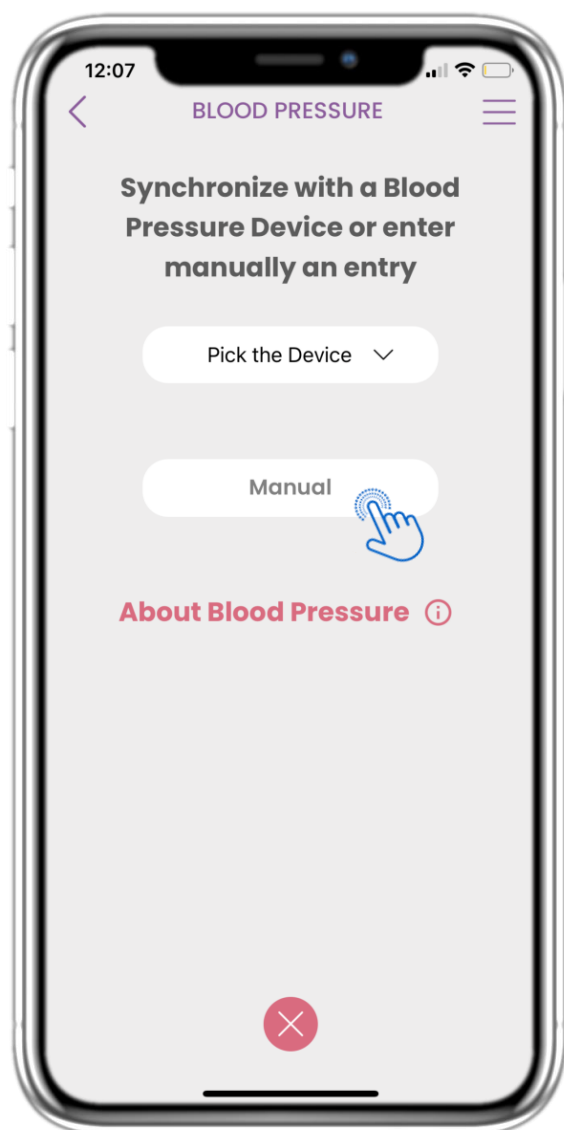

4.29 PAGINA TENSIUNE ARTERIALĂ MANUALĂ

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Tensiune Arterială, care este folosit pentru a înregistra măsurătorile tensiunii arteriale fie manual, fie colectate printr-un dispozitiv.

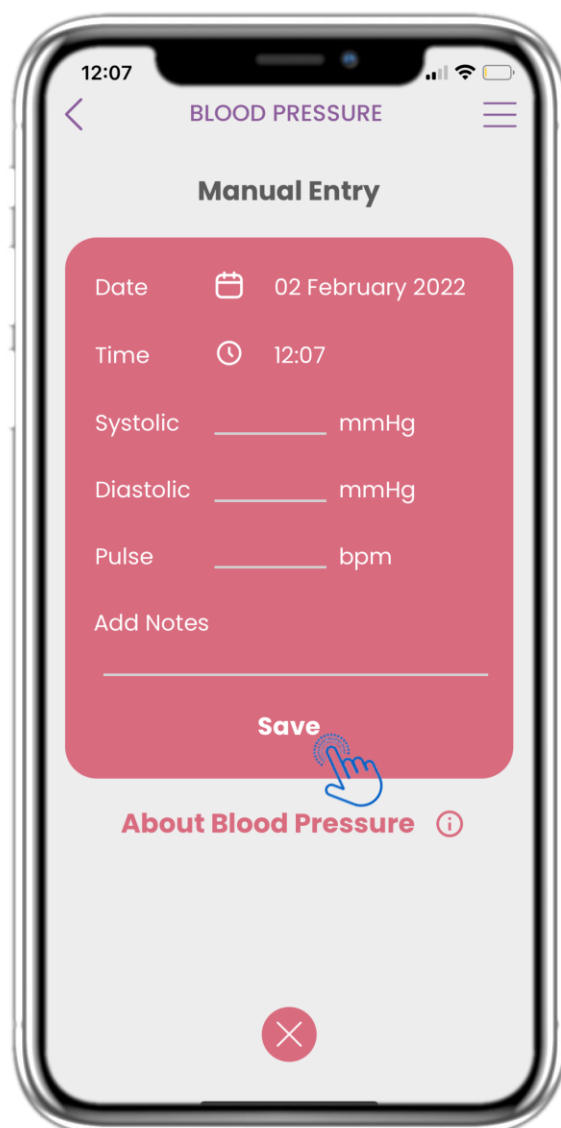


4.30 PAGINA TENSIUNE ARTERIALĂ MANUALĂ

În pagina Tensiune Arterială poți introduce manual datele și poți vizualiza o listă cu rezultate.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

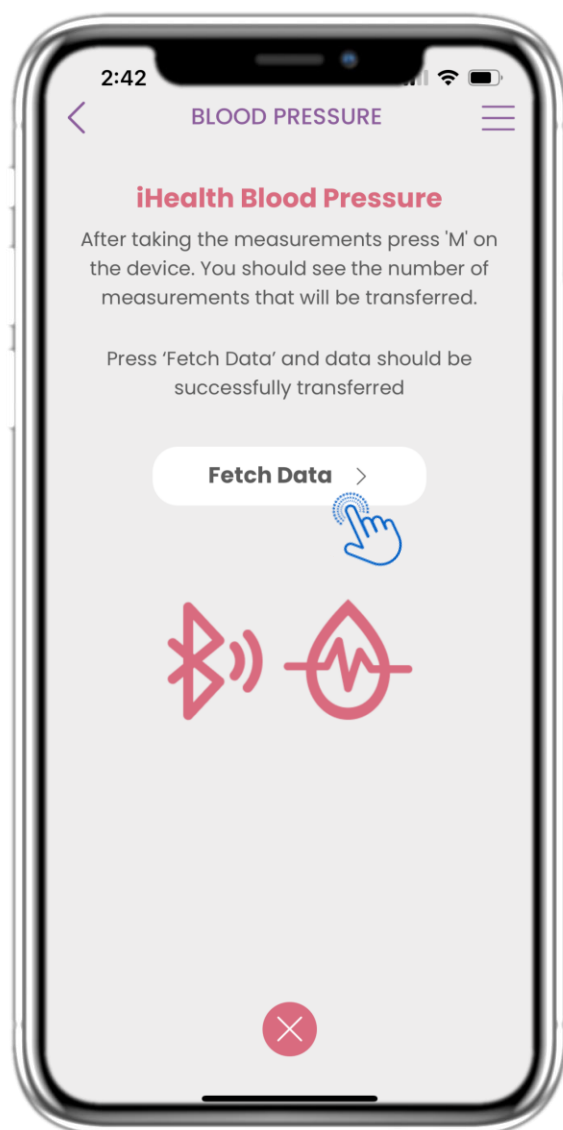

4.31 SINCRONIZARE DISPOZITIV TENSIUNE ARTERIALĂ

În pagina iHealth Tensiune Arterială poți găsi butonul pentru sincronizarea și colectarea măsurătorilor de la dispozitivul de tensiune arterială.

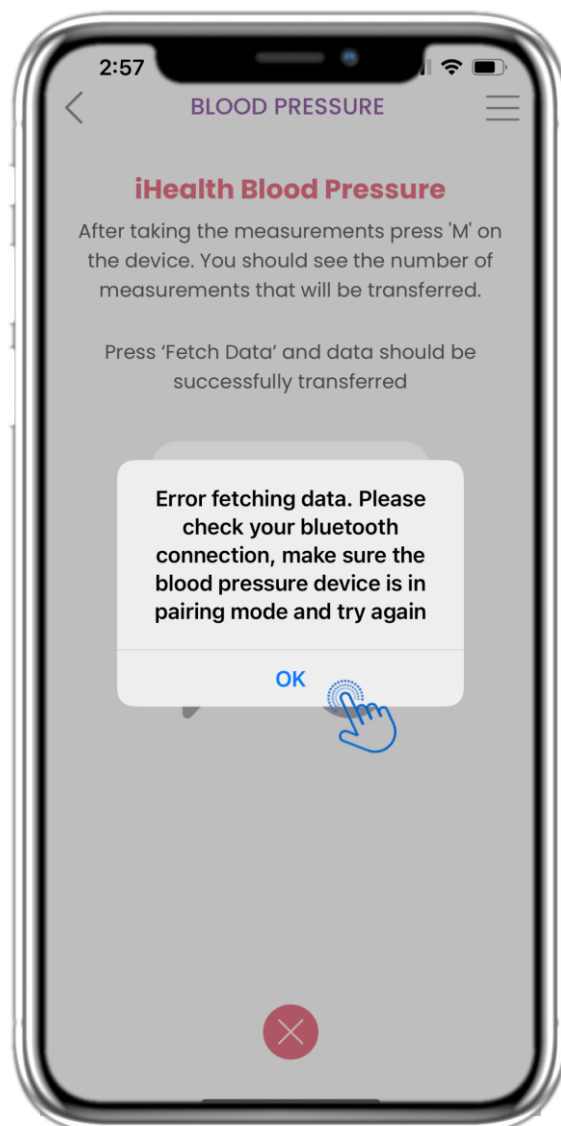


4.32 SINCRONIZARE DISPOZITIV TENSIUNE ARTERIALĂ

Dacă primești această notificare, te rugăm să verifici setările mobile, să te asiguri că Bluetooth-ul este activat și că dispozitivul de tensiune arterială este pregătit pentru împerechere.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

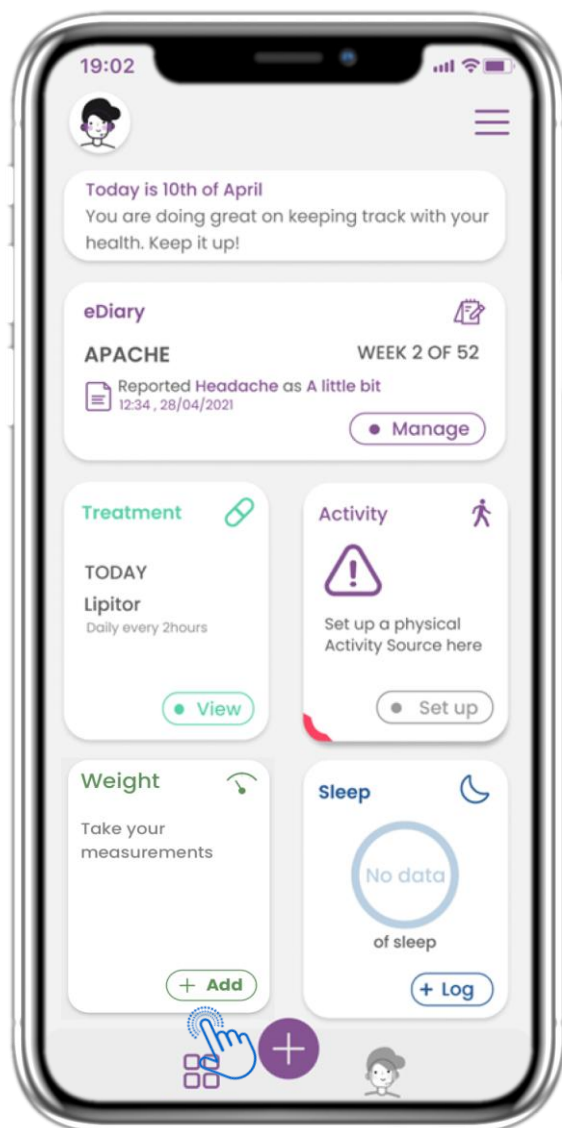

4.33 WIDGET GREUTATE

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Greutate, care este folosit pentru a colecta măsurători printr-un dispozitiv de greutate sincronizat.

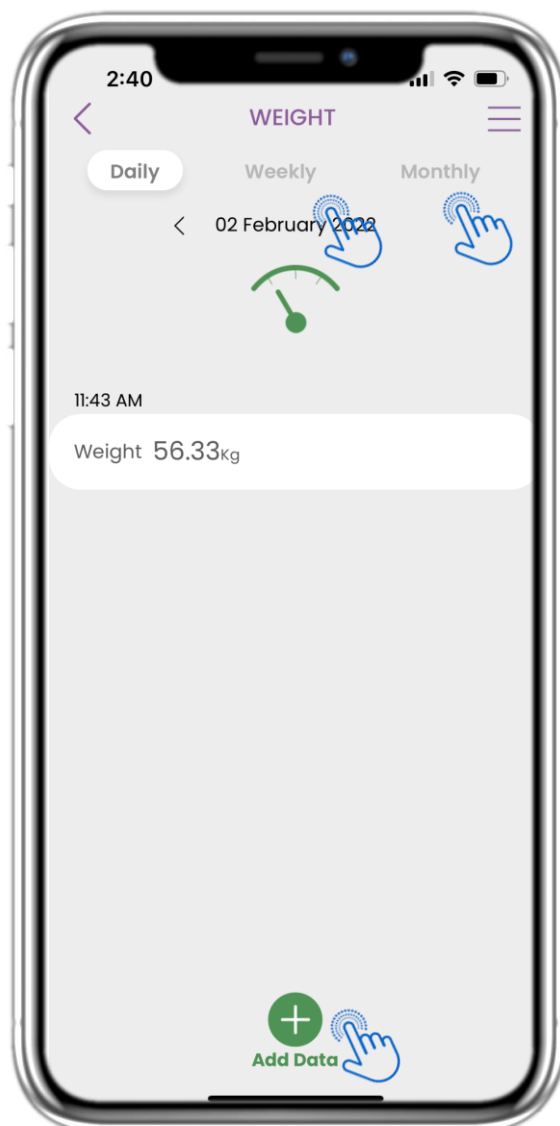


4.34 ÎNREGISTRARE GREUTATE

În pagina Greutate poți adăuga măsurători manual sau prin sincronizarea unui dispozitiv și poți naviga între zile în calendar sau vizualiza datele zilnice, precum și selecta opțiunea de a vedea grafice săptămânale și lunare.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

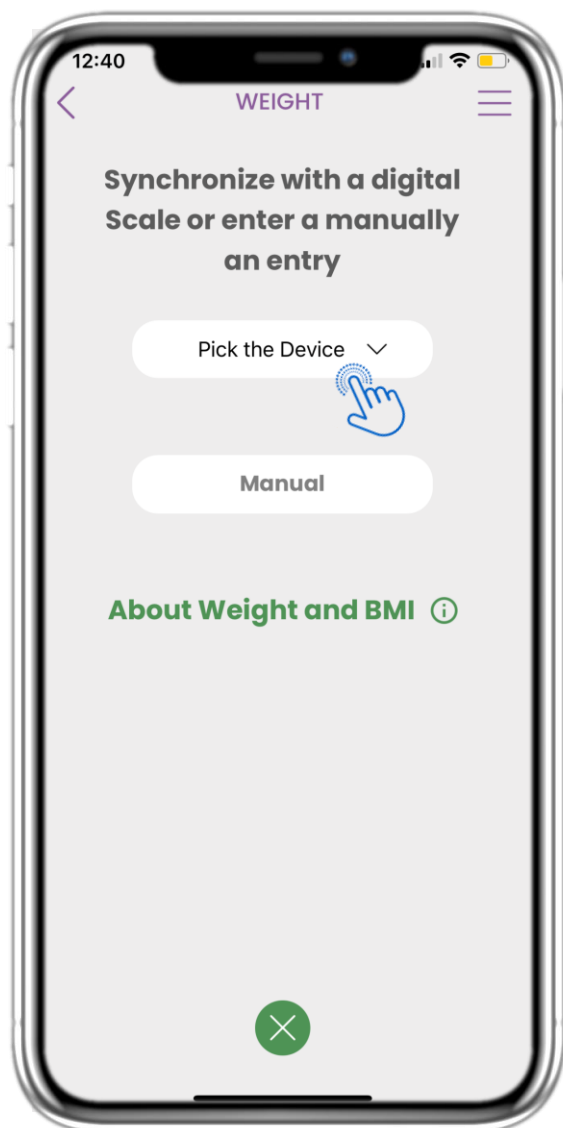

4.35 PAGINA GREUTATE DIN DISPOZITIV

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Greutate, care este folosit pentru a înregistra măsurătorile greutății fie manual, fie colectate printr-un dispozitiv.

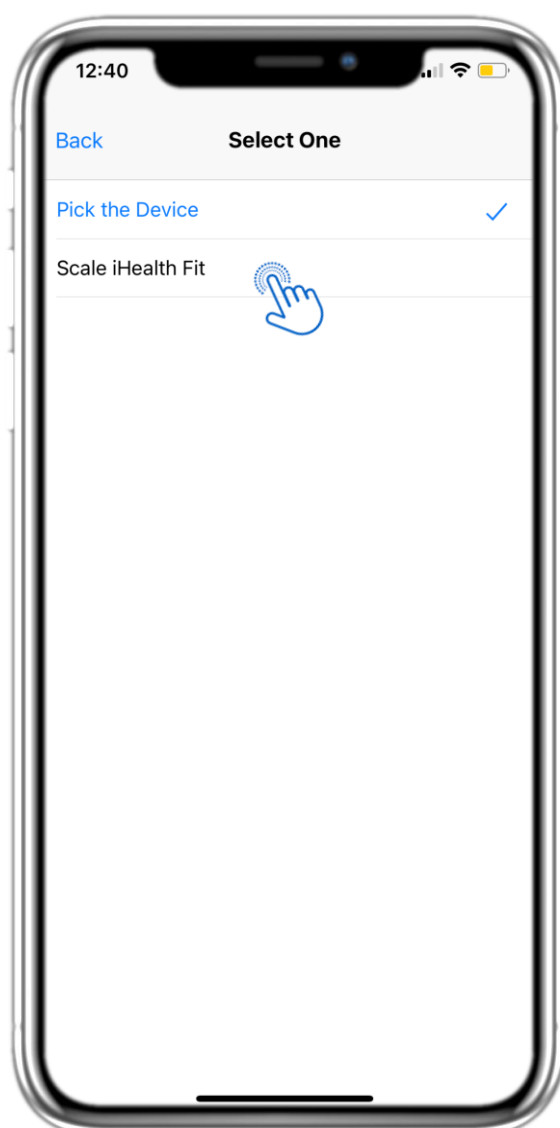


4.36 PAGINA GREUTATE DIN DISPOZITIV

În pagina Greutate poți sincroniza un cântar și colecta automat măsurătorile direct de la dispozitiv.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

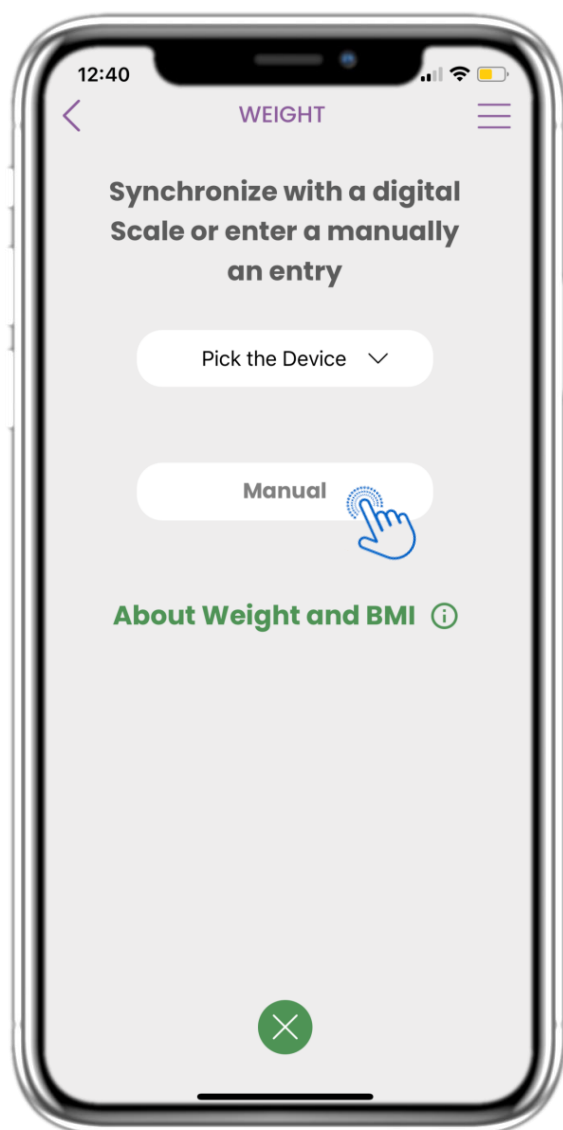

4.37 PAGINA GREUTATE MANUALĂ

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Greutate, care este folosit pentru a înregistra măsurătorile greutății fie manual, fie colectate printr-un cântar.

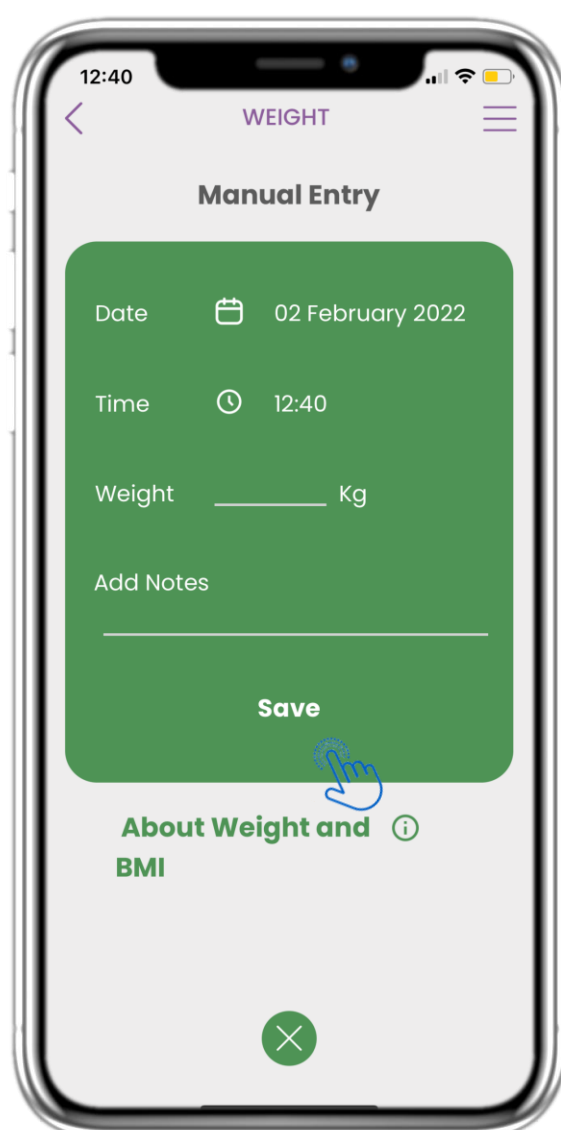


4.38 PAGINA GREUTATE MANUALĂ

În pagina Greutate poți introduce manual datele și poți vizualiza o listă cu rezultate.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

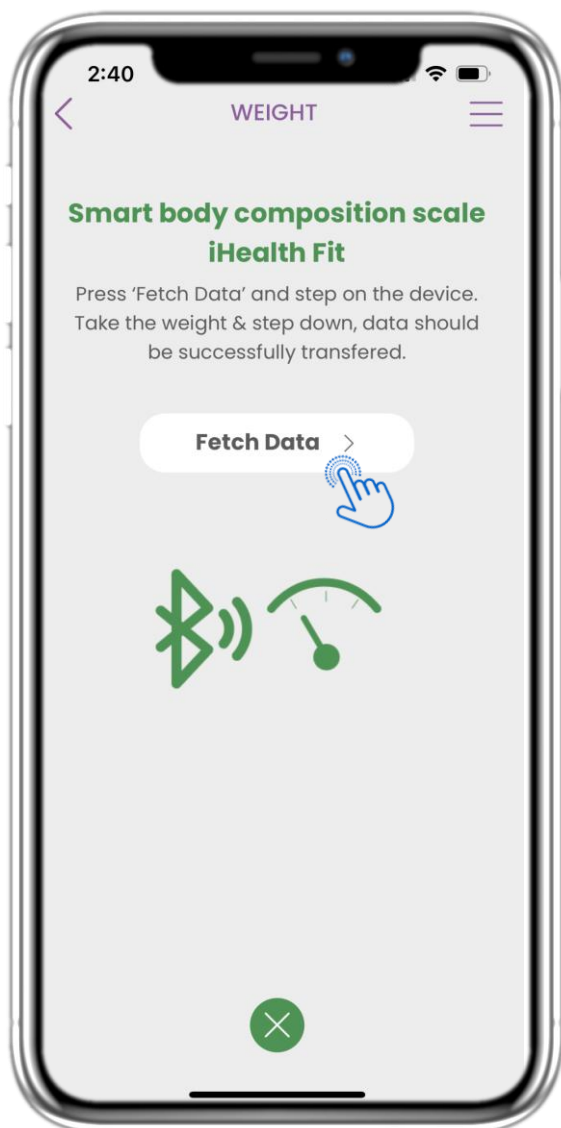

4.39 SINCRONIZARE DISPOZITIV GREUTATE

În pagina iHealth Fit Greutate poți găsi butonul pentru sincronizarea și colectarea măsurătorilor de la cântarul inteligent.

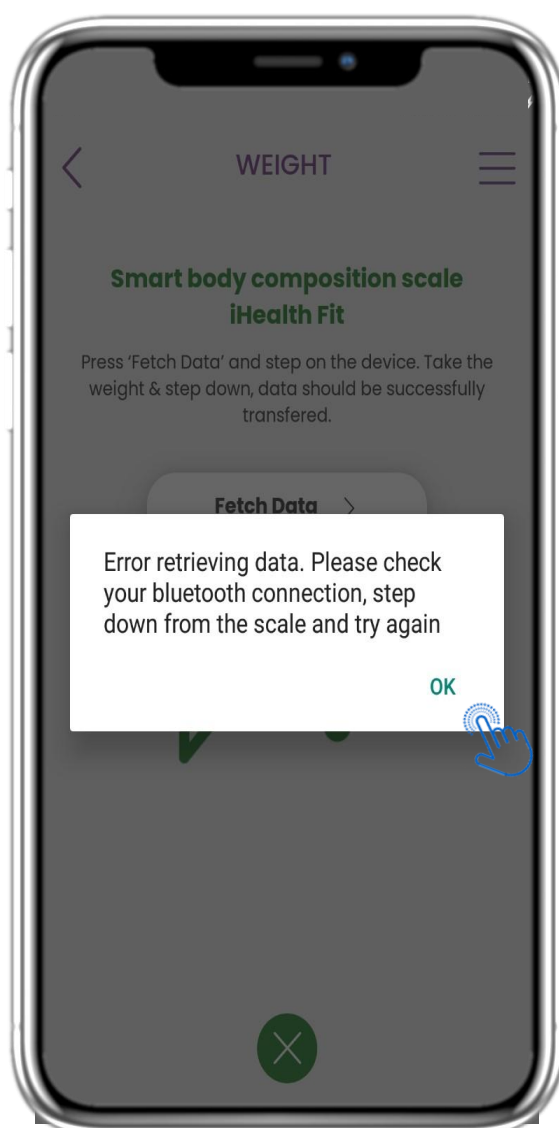


4.40 SINCRONIZARE DISPOZITIV GREUTATE

Dacă primești această notificare, te rugăm să verifici setările telefonului mobil pentru a te asigura că Bluetooth-ul este activat. Te rugăm să reiei procesul de cântărire de la început.



4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

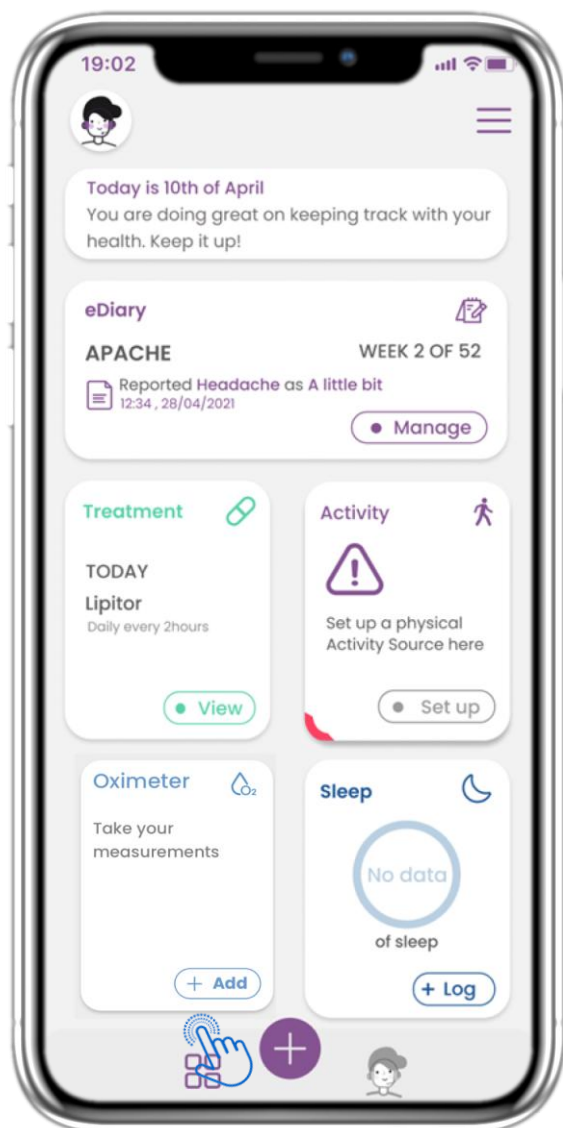

4.41 WIDGET PULSOXIMETRU

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Pulsoximetru, care este folosit pentru a înregistra nivelul de oxigen fie manual, fie colectat printr-un dispozitiv pulsoximetru.




4.42 ÎNREGISTRARE PULSOXIMETRU

În pagina Pulsoximetru poți adăuga manual datele privind oxigenul și poți naviga între zile în calendar sau vizualiza datele zilnice, precum și selecta opțiunea de a vedea grafice săptămânale.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

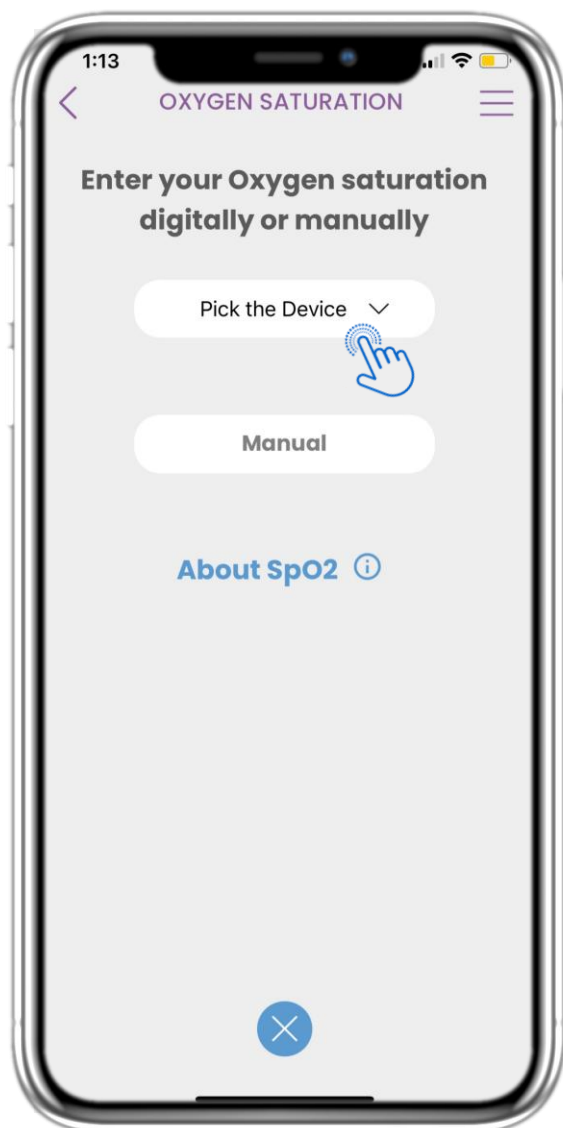

4.43 PAGINA PULSOXIMETRU DIN DISPOZITIV

În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Pulsoximetru, care este folosit pentru a înregistra măsurătorile oxigenului fie manual, fie colectate printr-un dispozitiv pulsoximetru.

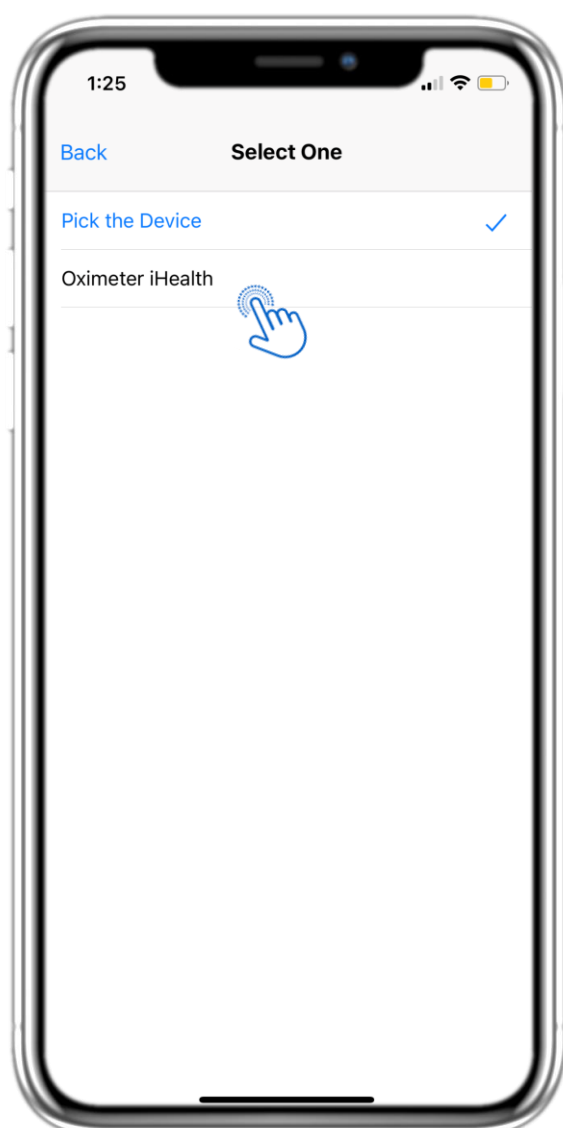

4.44 PAGINA PULSOXIMETRU DIN DISPOZITIV

În pagina Pulsoximetru poți sincroniza un dispozitiv pulsoximetru pentru a colecta automat măsurătorile sau poți introduce manual datele, naviga între zile în calendar, vizualiza datele zilnice și selecta opțiunea de a vedea grafice săptămânale.





Healthentia – Mobile-app

V4.0



4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

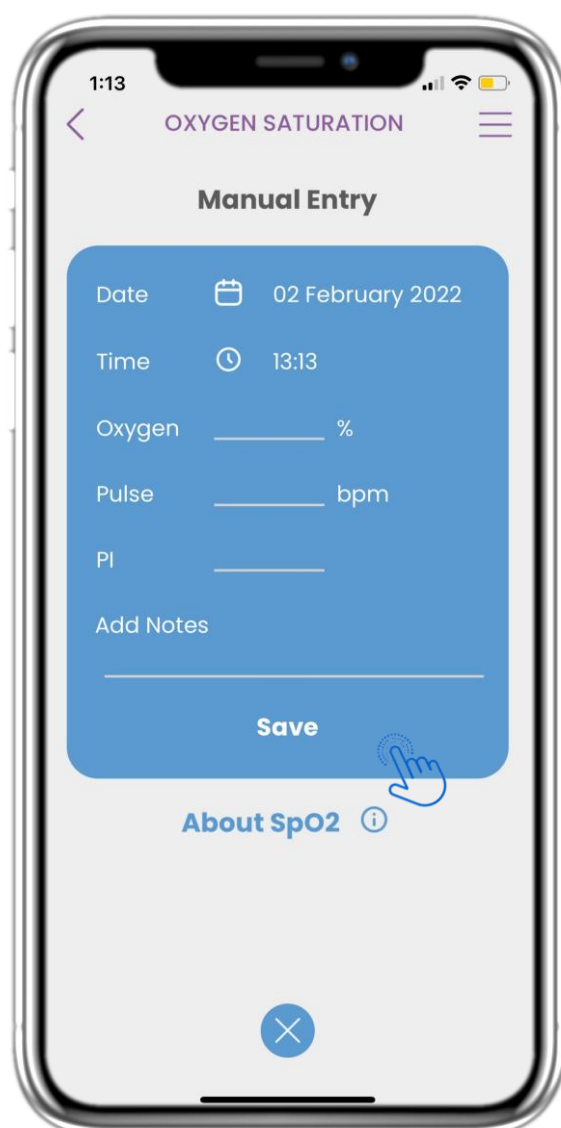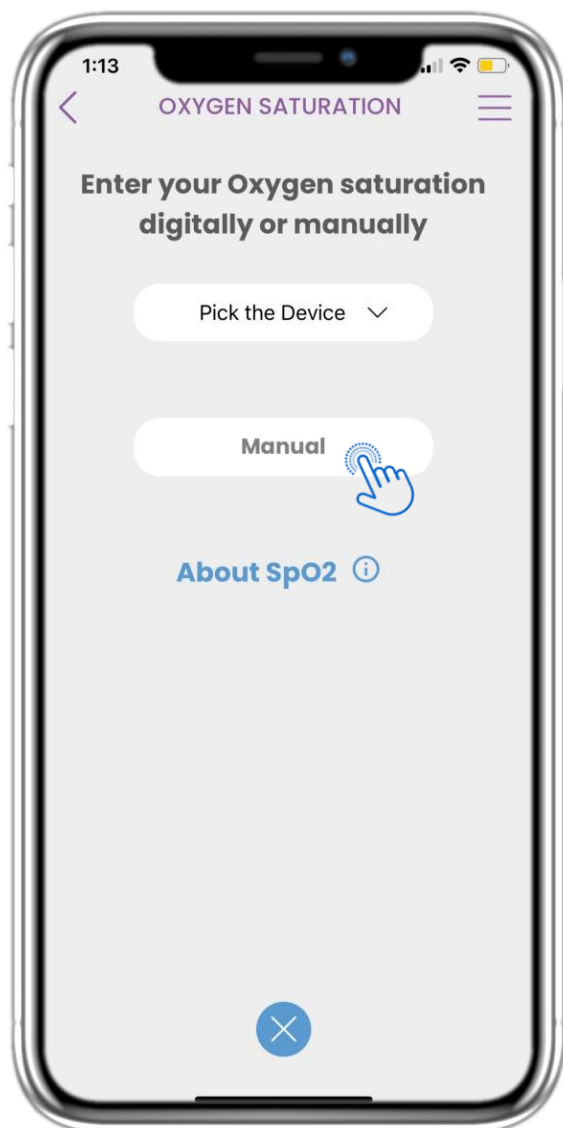

4.45 PAGINA PULSOXIMETRU MANUALĂ


În pagina PRINCIPALĂ poți găsi widgetul Pulsoximetru, care este folosit pentru a înregistra măsurătorile oxigenului fie manual, fie colectate printr-un dispozitiv pulsoximetru.

4.46 PAGINA PULSOXIMETRU MANUALĂ

În pagina Pulsoximetru poți introduce manual datele tale și poți vizualiza o listă cu rezultate.




4 WIDGETURI DIN PAGINA PRINCIPALĂ

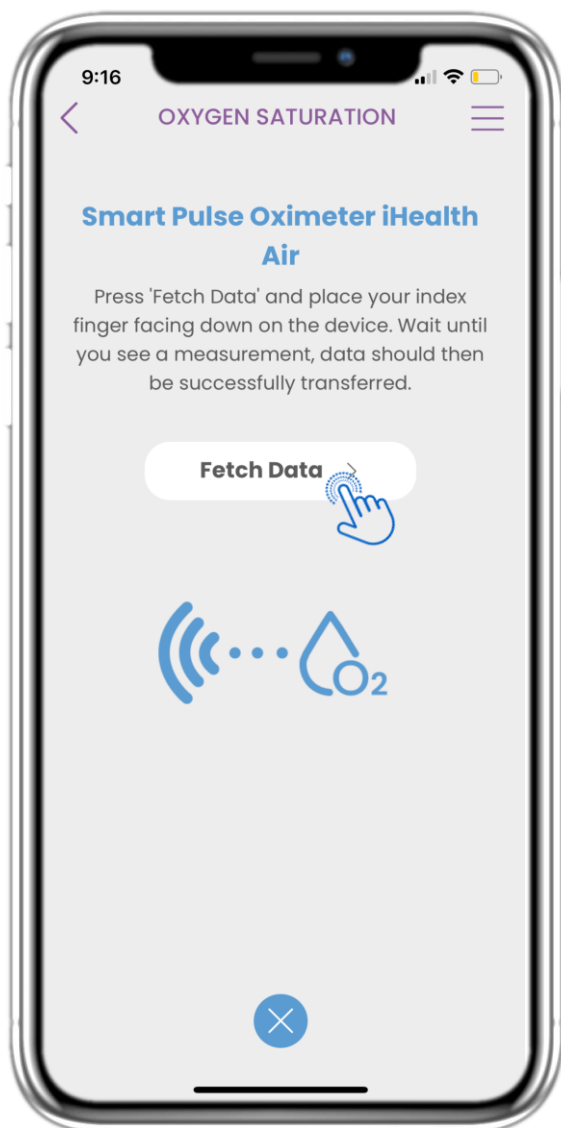

4.47 SINCRONIZARE DISPOZITIV GREUTATE

În pagina Saturație Oxigen poți găsi butonul pentru sincronizarea și colectarea datelor de la dispozitivul inteligent pulsoximetru.


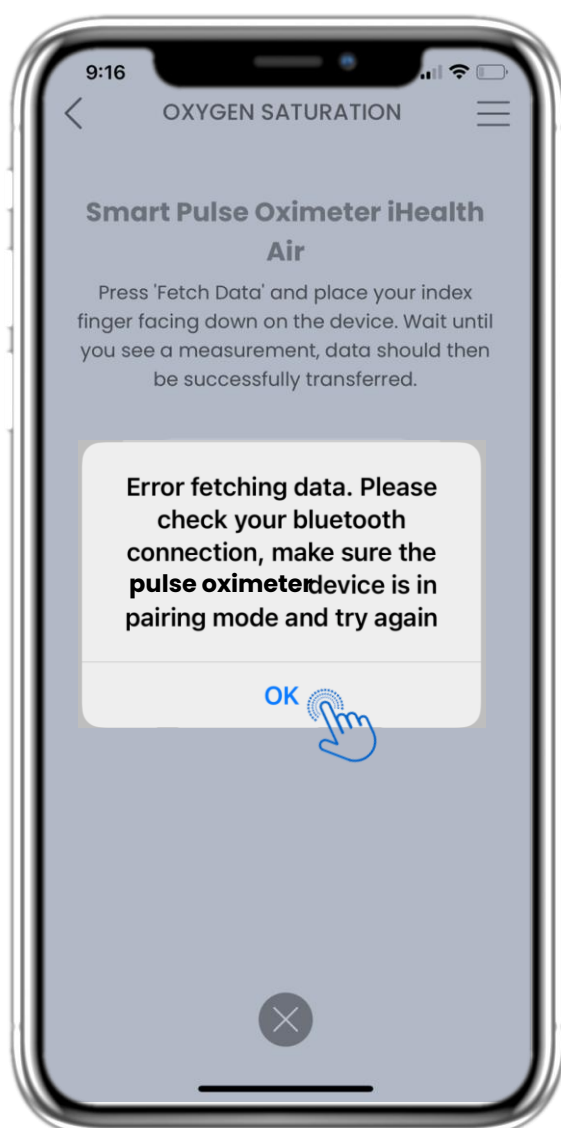


4.48 SINCRONIZARE DISPOZITIV GREUTATE

Dacă primești această notificare, te rugăm să verifici setările telefonului mobil pentru a te asigura că Bluetooth-ul este activat și că dispozitivul inteligent pulsoximetru este pregătit pentru împerechere.



5 ADAUGĂ RAPOARTE / COMPLETEAZĂ CHESTIONARE

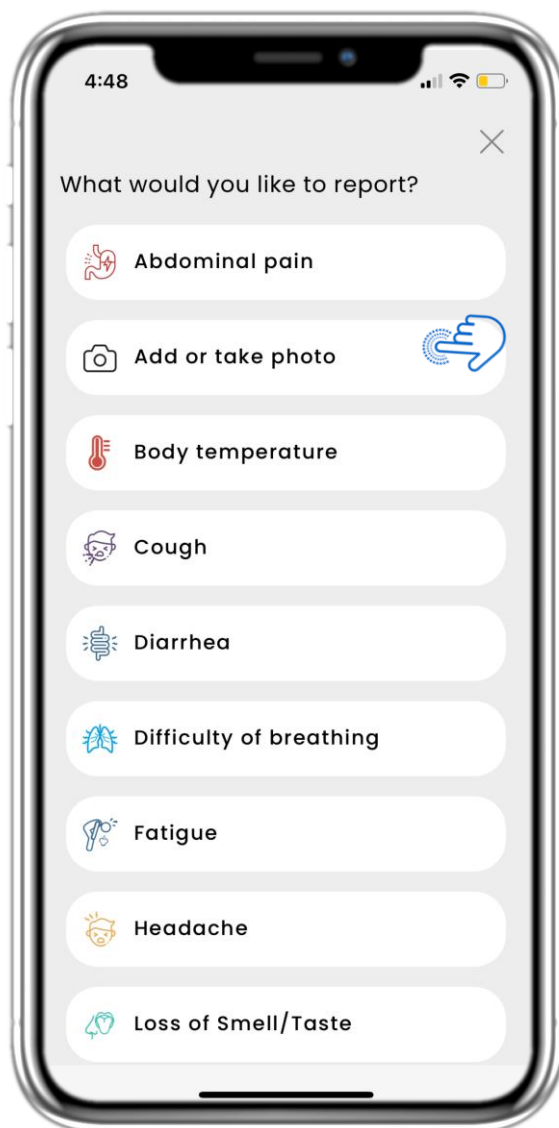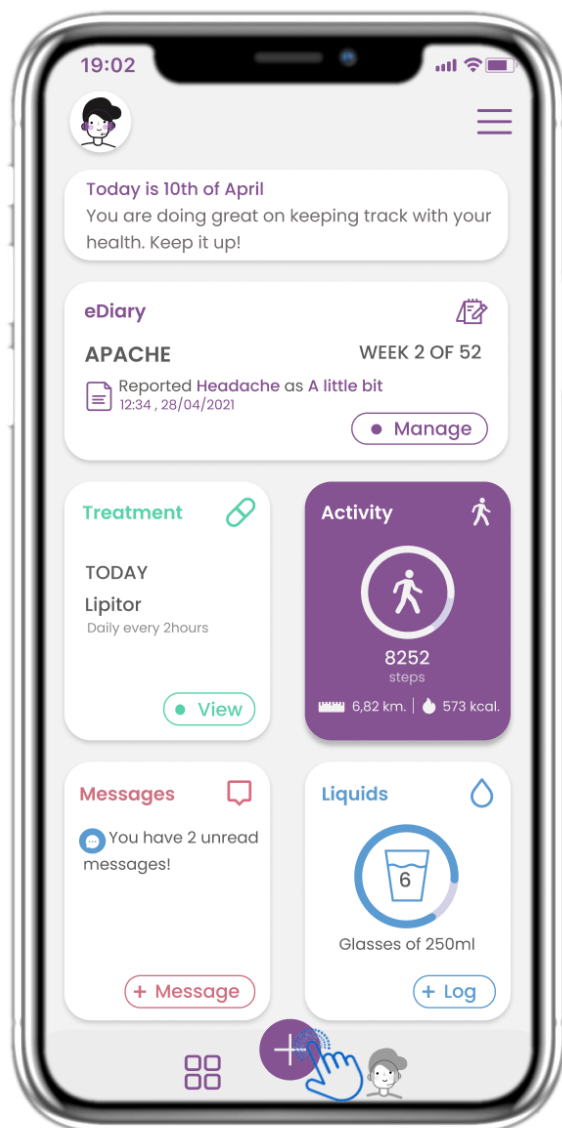

5.1 ADAUGĂ RAPOARTE / SIMPTOME


Din bara de jos poți selecta opțiunea de a adăuga rapoarte.

5.2 ADAUGĂ RAPOARTE / SIMPTOME

Se deschide o listă cu chestionarele disponibile pentru a adăuga un raport sau un simptom din butonul central (+).



5. RĂSPUNDE LA RAPOARTE ȘI CHESTIONARE

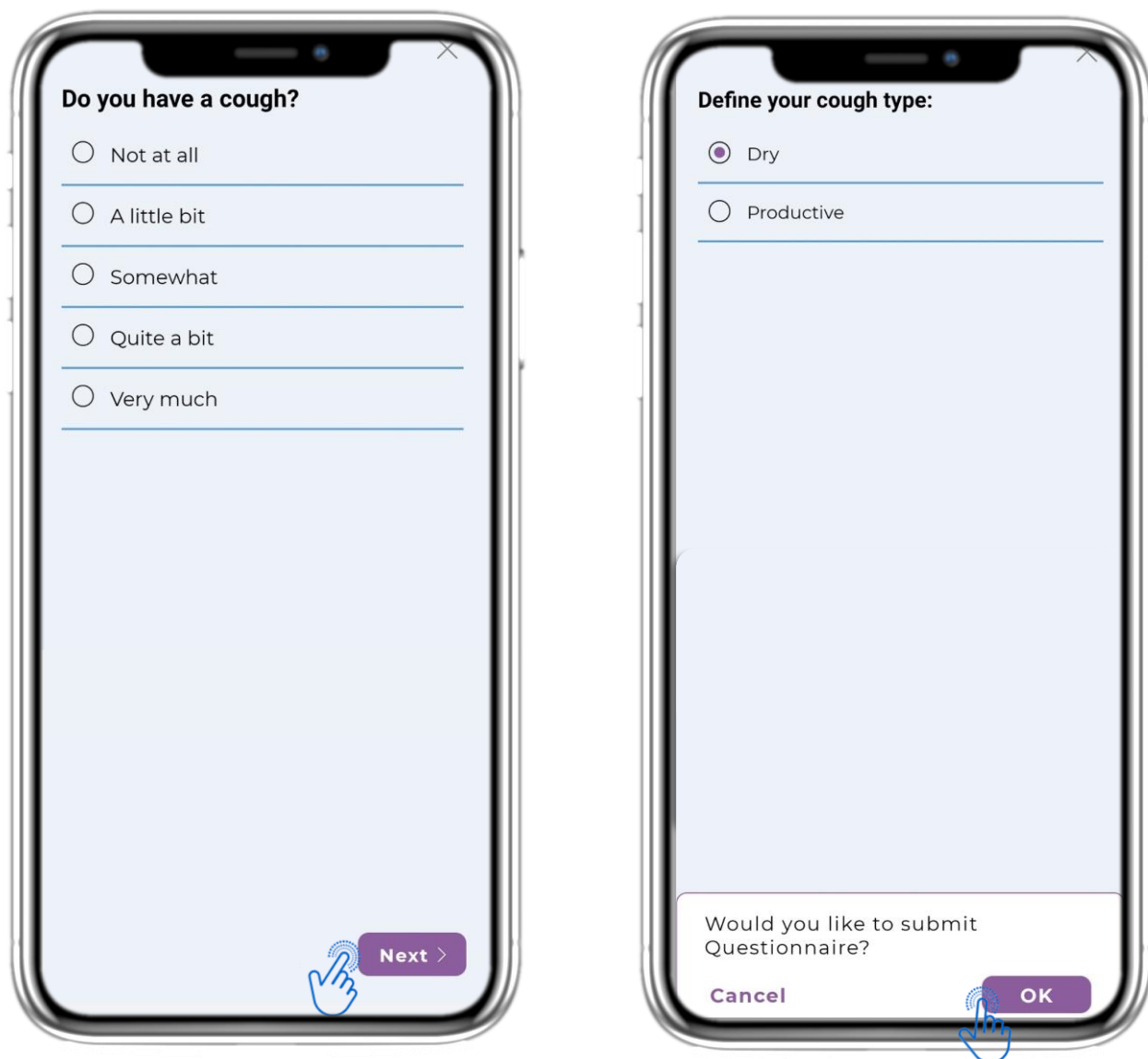


5.3 RĂSPUNDE LA RAPOARTE ȘI CHESTIONARE

Răspunde la chestionarul aferent simptomului selectat. Apasă URMĂTORUL pentru a continua chestionarul. Apasă OK pentru a trimite sau RENUNȚĂ pentru a ieși.




6 CHATBOT

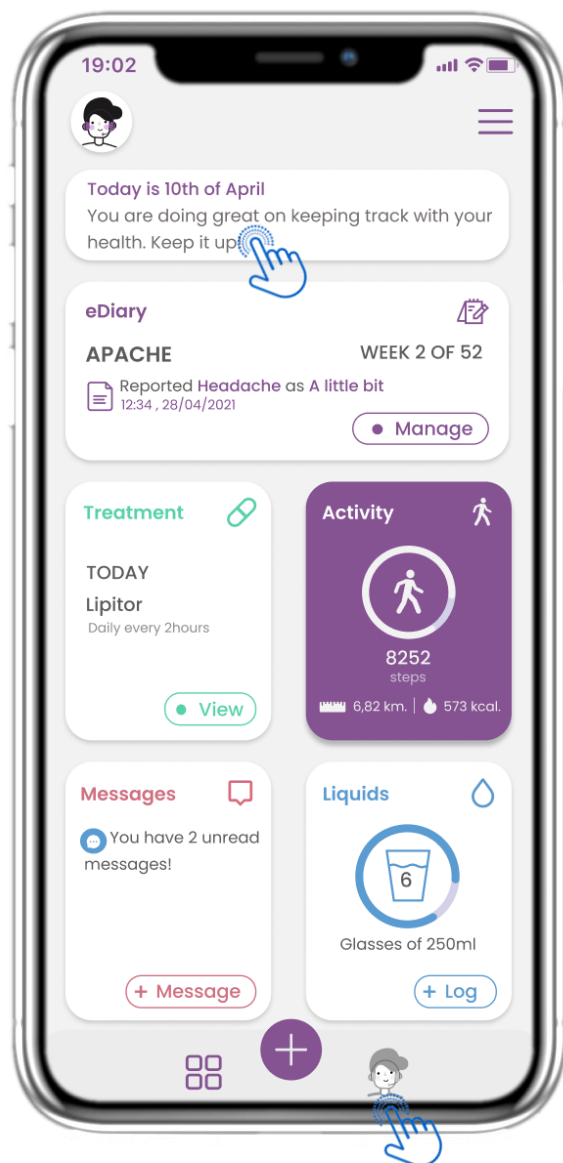

6.1 CHATBOT

Din bara de jos poți selecta să accesezi chatbotul sau din mesajul afișat în partea de sus.


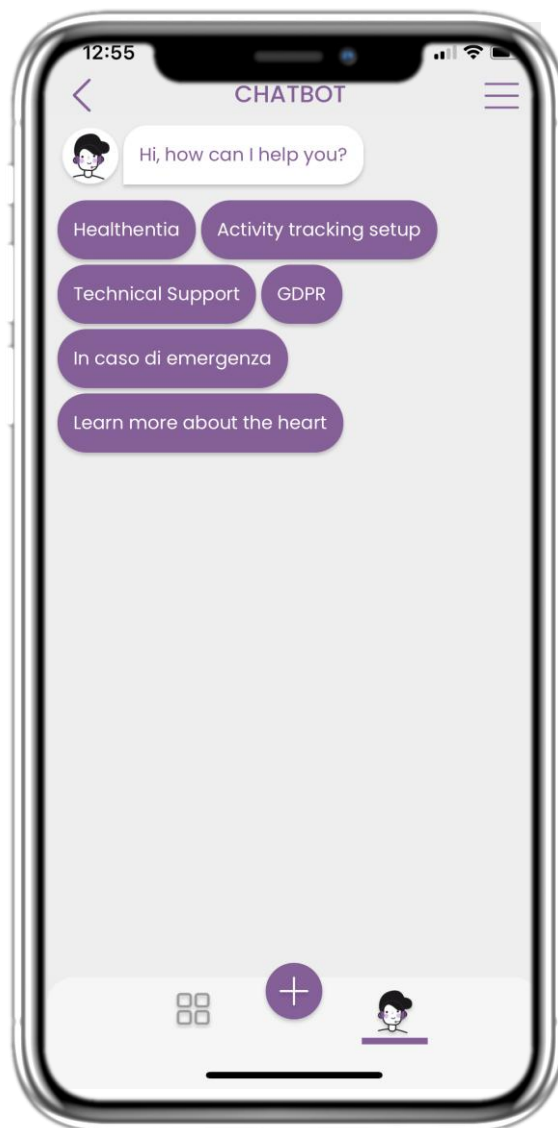


6.2 CONVERSAȚIE CU CHATBOTUL

În chatbot ești întâmpinat și îți sunt afișate eventualele chestionare în așteptare. Chatbotul îți oferă opțiuni disponibile de întrebări și răspunsuri.



7 BARE DE MENIU LATERALĂ

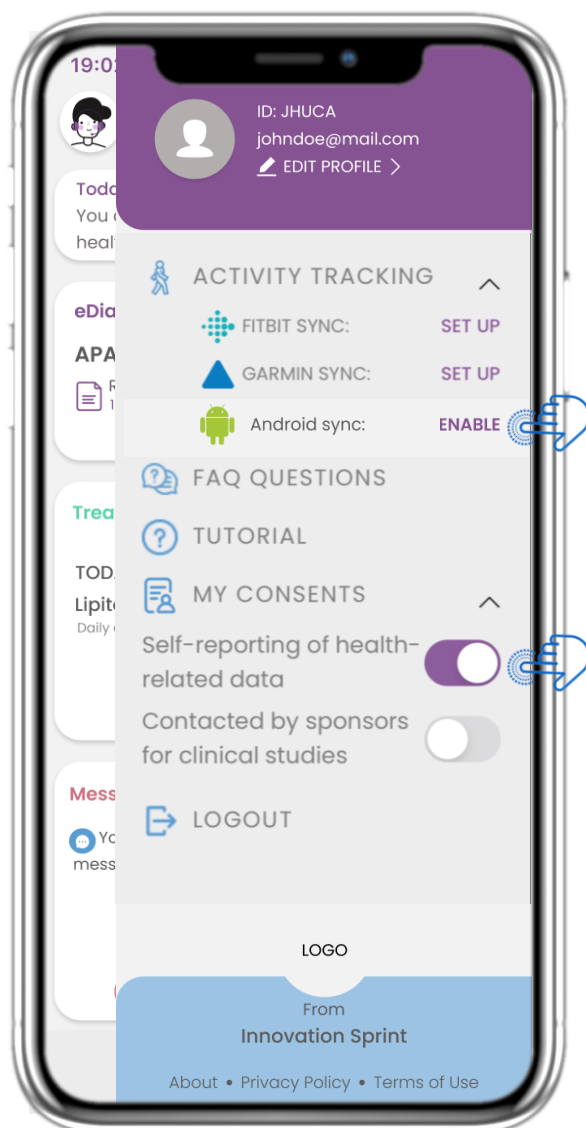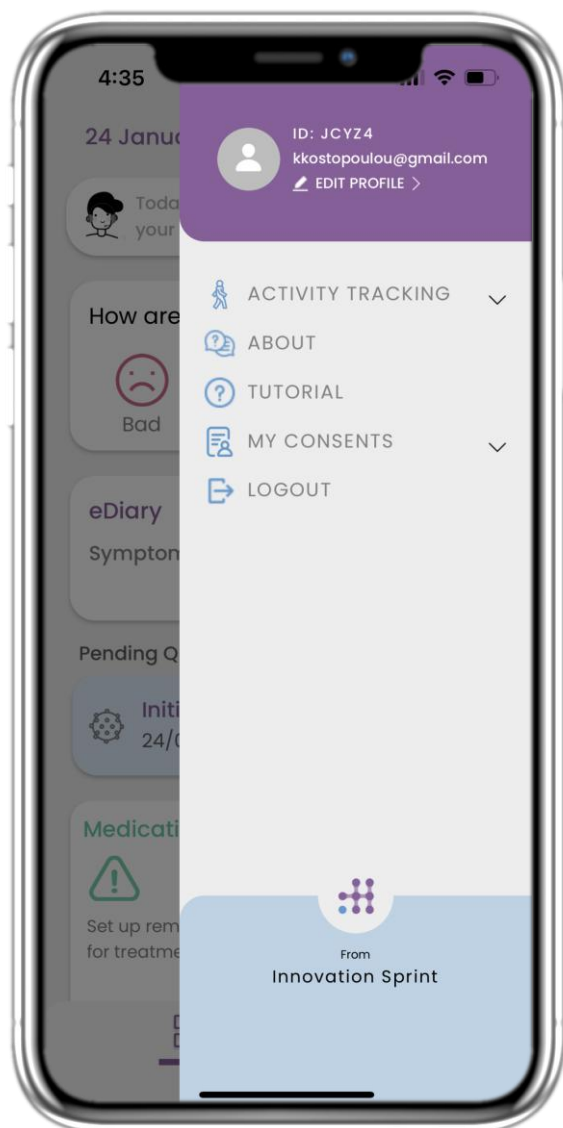



7.1 OPȚIUNI MENU LATERAL

Din bara de meniu poți edita profilul tău, configura dispozitivul de monitorizare a activității și activa sau dezactiva consimțământul explicit oferit în timpul înregistrării.

De asemenea, poți accesa anumite pagini de conținut, cum ar fi Întrebări Frecvente (FAQ).



7 MENU – PROFILUL MEU

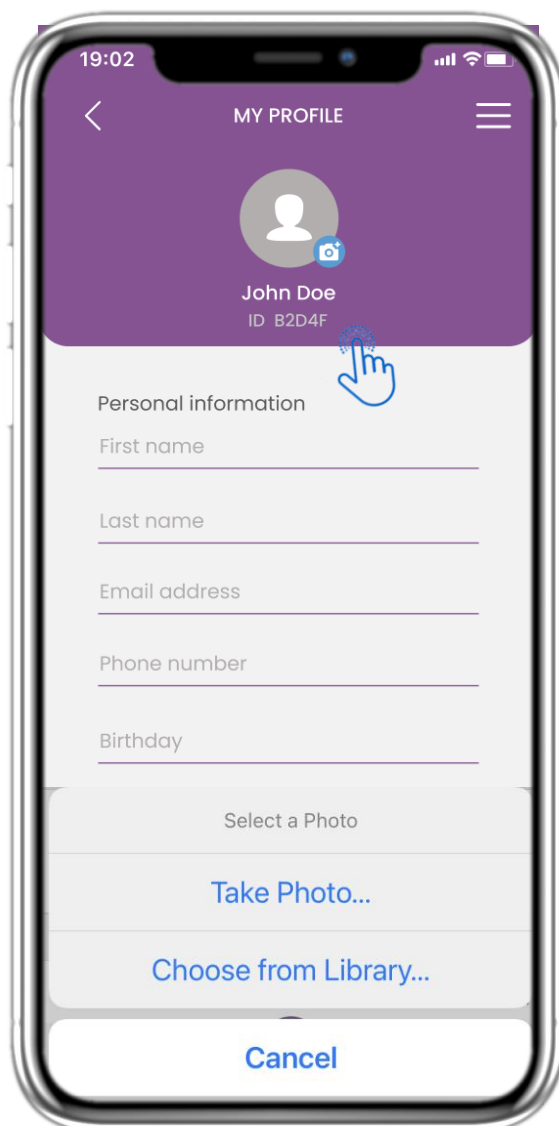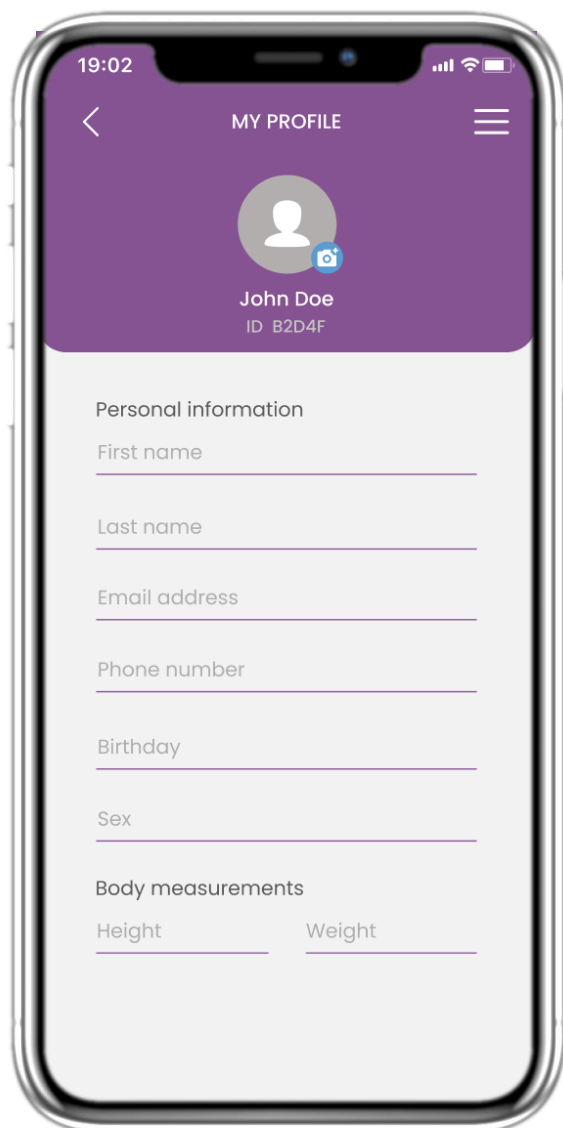


7.2 EDITARE PROFIL

Poți edita profilul tău și poți alege o fotografie. ID-ul este numărul de identificare care va fi folosit pentru comunicarea cu medicul.




7 MENU – SCHIMBAREA LIMBILOR

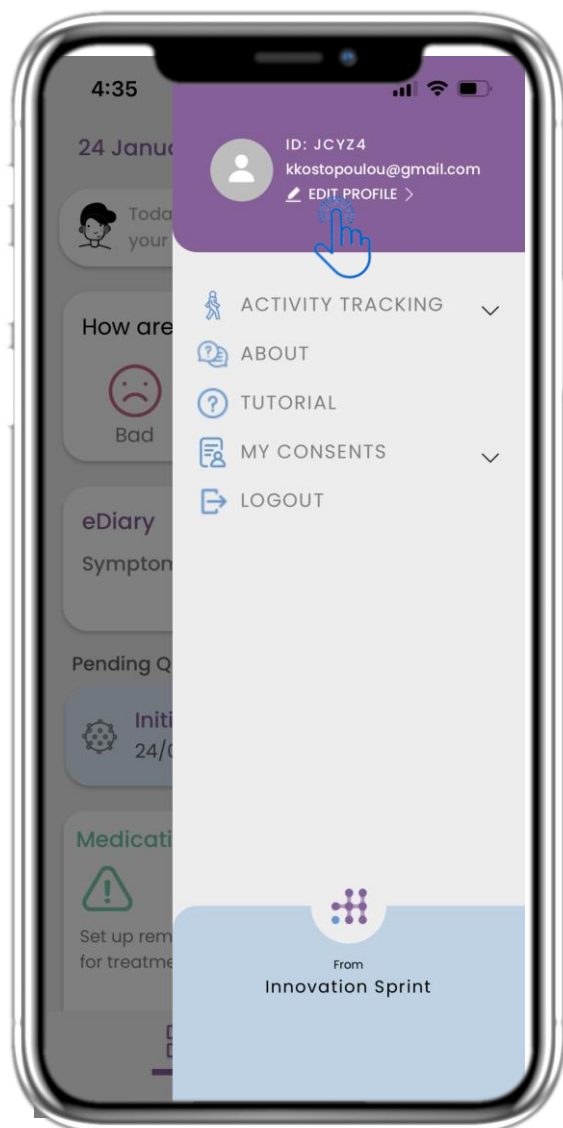

7.3 GESTIONEAZĂ PROFILUL

Din meniul Setări accesează gestionarea Profilului, unde poți edita datele tale.

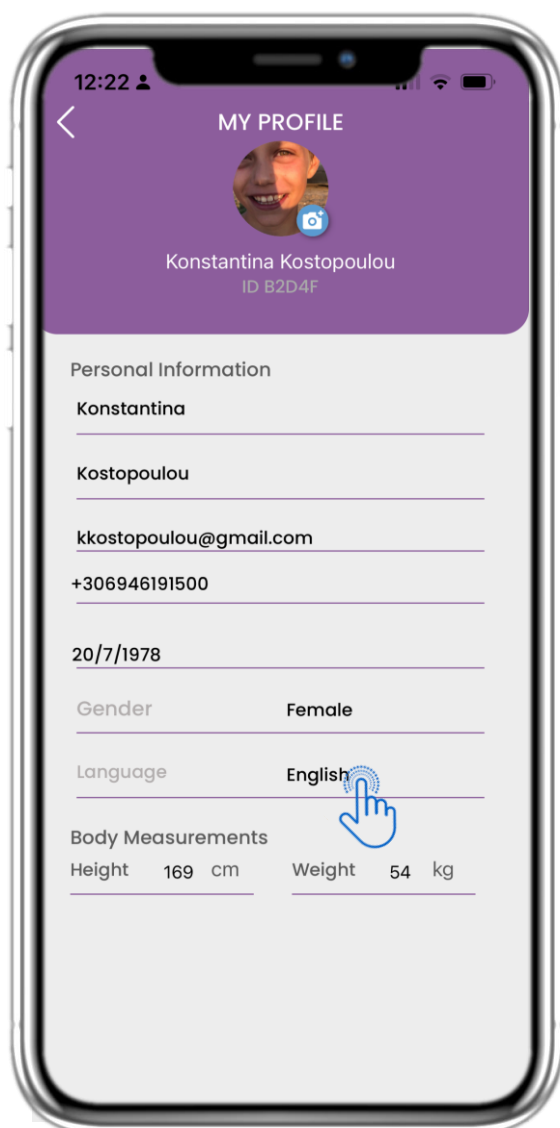


7.4 SCHIMBAREA LIMBII

În pagina Profil poți schimba limba.




7 MENU – SCHIMBAREA LIMBILOR (EXEMPLU)

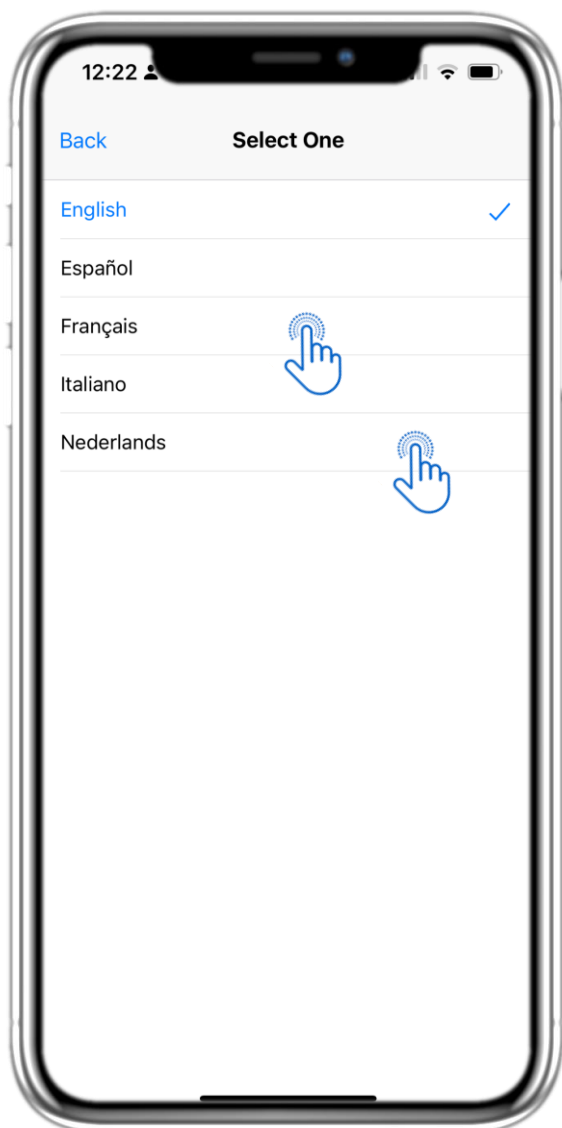

7.5 ALEGE LIMBA

Din meniul Setări accesează gestionarea Profilului, unde poți edita datele tale.


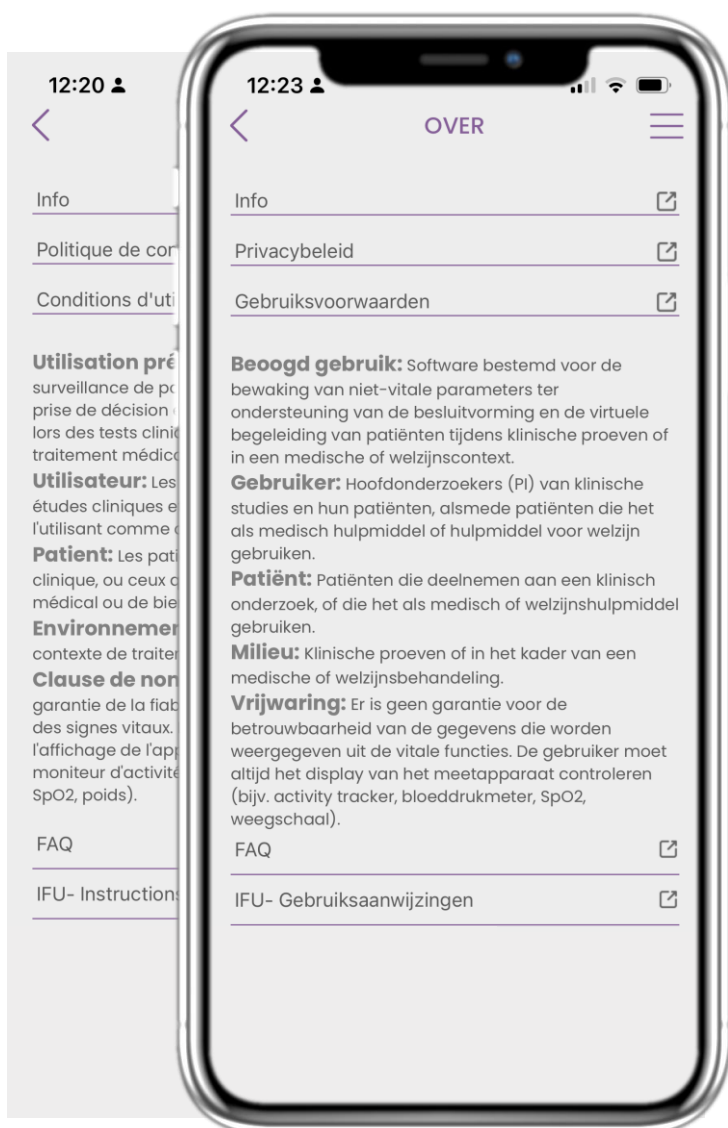


7.6 PAGINA DESPRE ÎN FR & NL

Textul paginii Despre tradus.



7 MENU – DECONECTARE

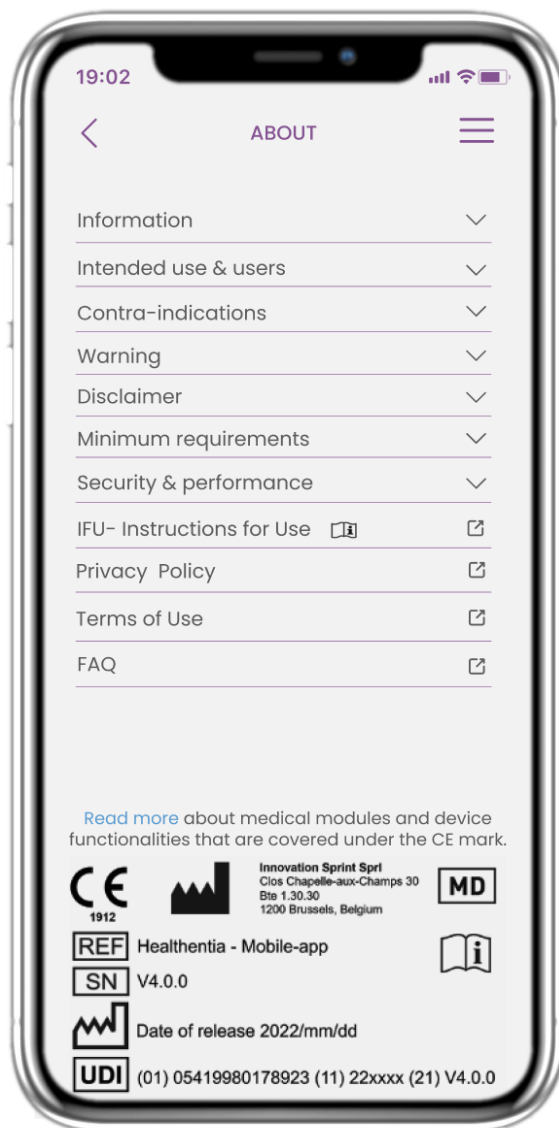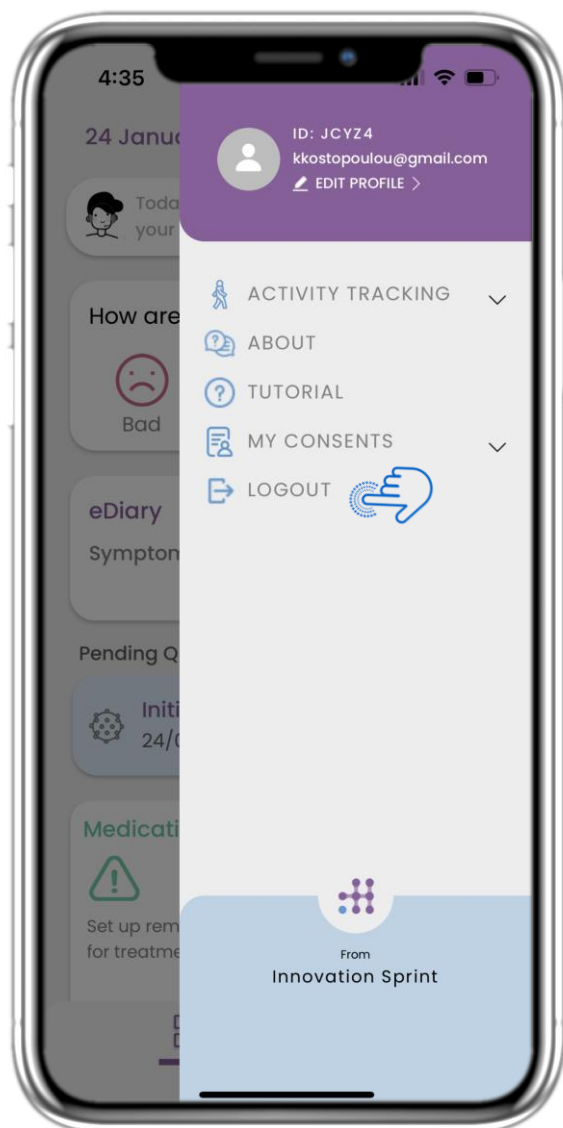

7.7 DECONECTARE

Selectează pentru a te DECONECTA. Reține că Healthentia nu poate urmări datele când ești deconectat.

7.8 DESPRE – IFU

În pagina DESPRE poți găsi toate informațiile legate de utilizarea aplicației Healthentia.

